




ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Моля, предоставете инструкцията за употреба
на крайния потребител след инсталирането.


Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на това ръководство.

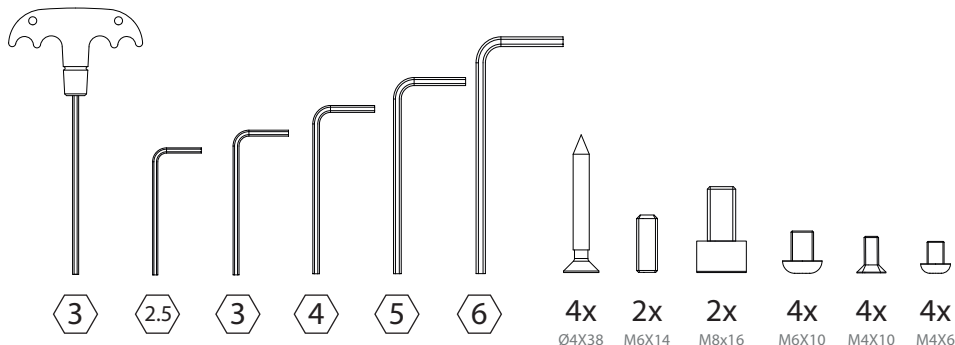



ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

- !** Ако има аксесоари, преди да сглобите количката, вижте
- съответните инструкции.

1

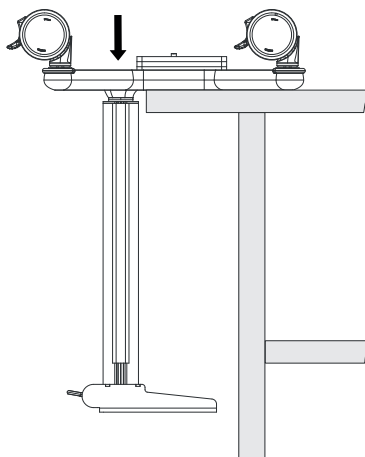


2

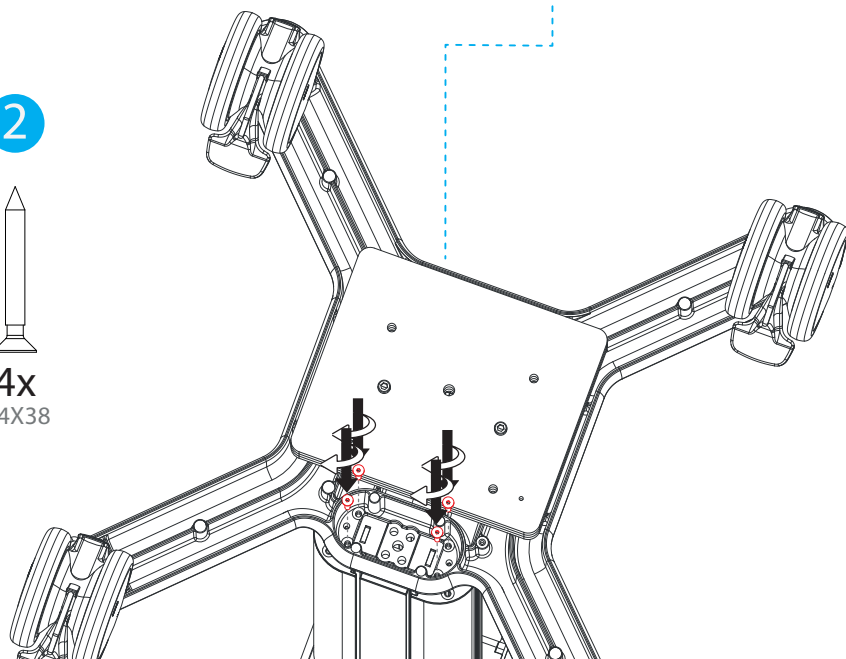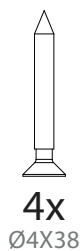


3

2x M6X14
2x M8x16

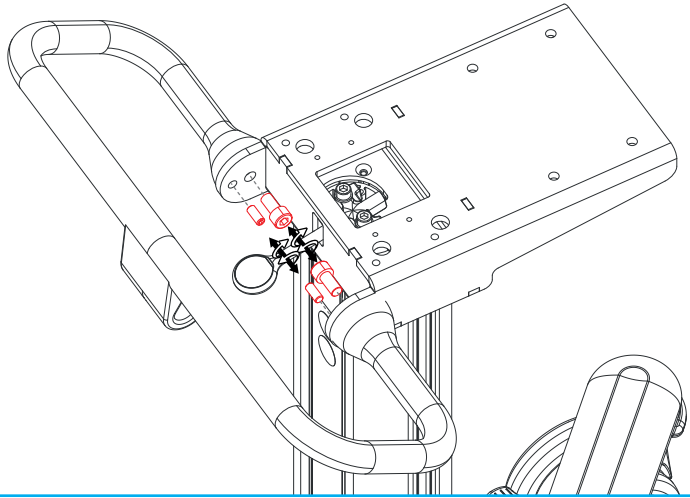

4

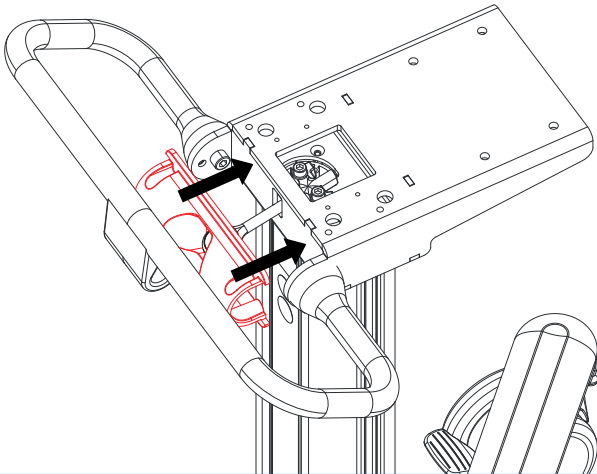


5




4x

M4X10

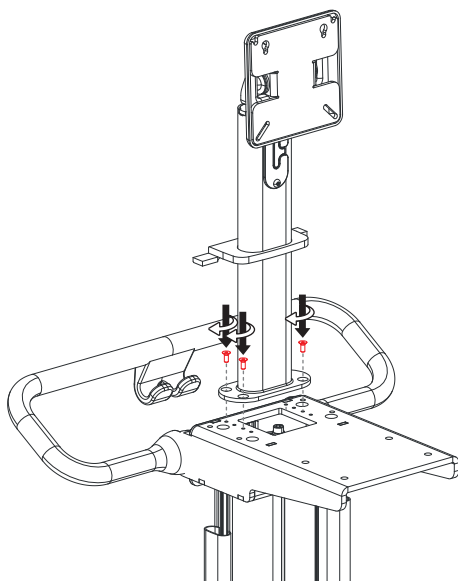


6

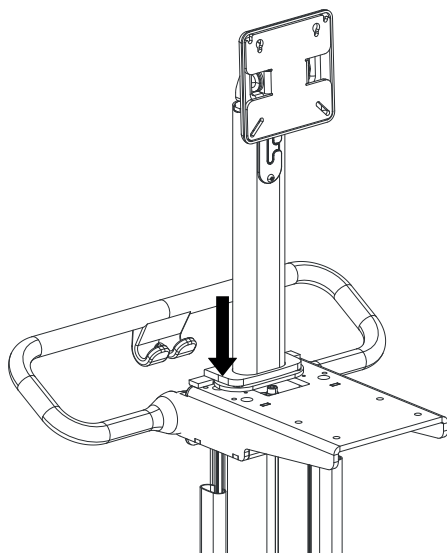

7




4x
M6X10




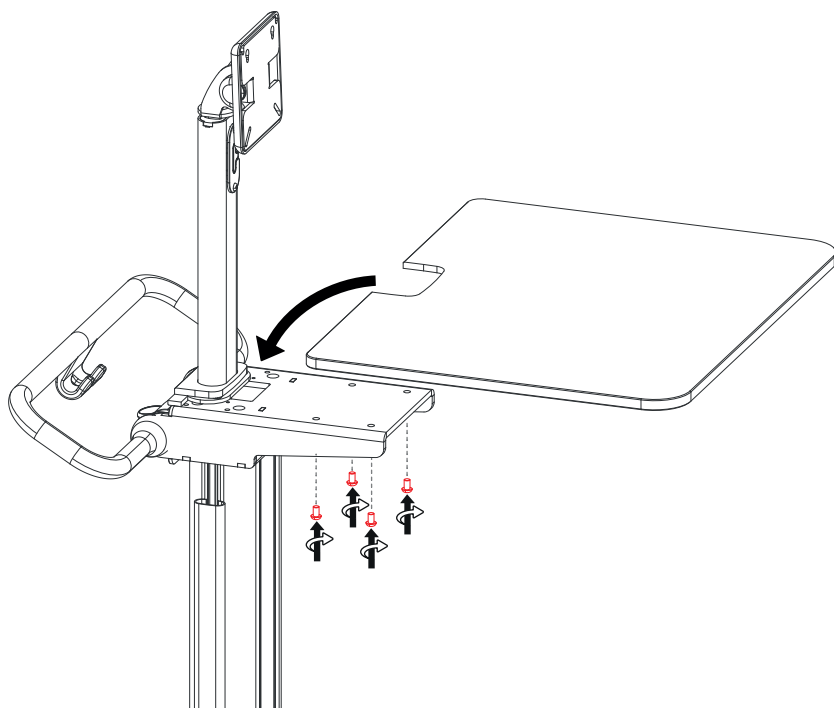


8




2x
M4X6

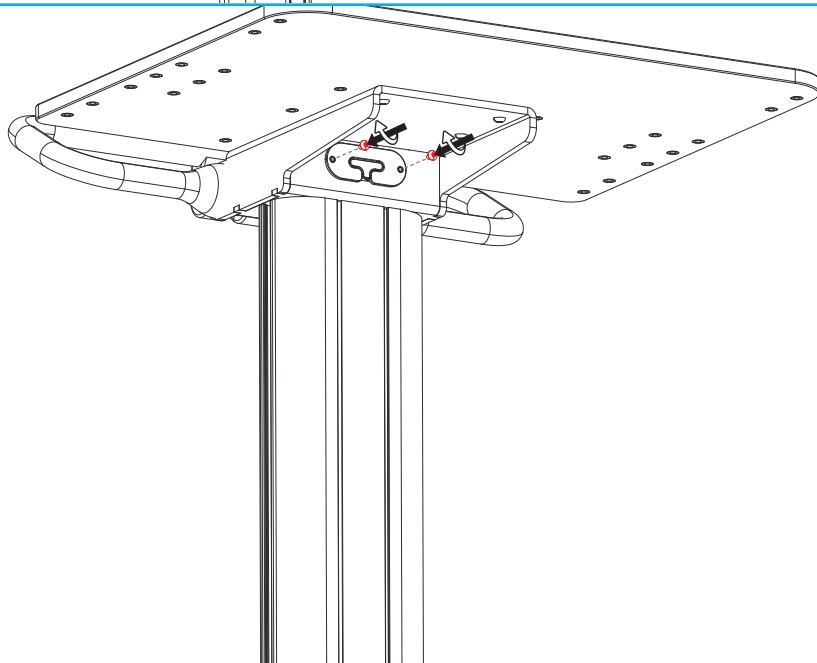


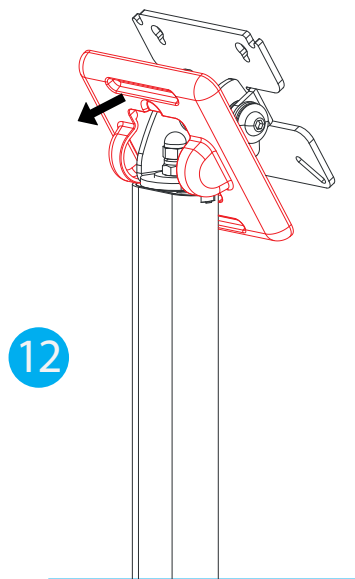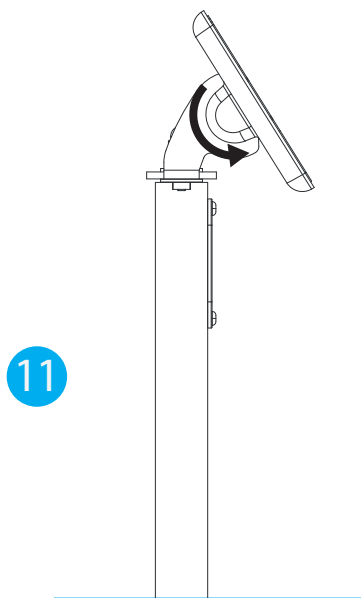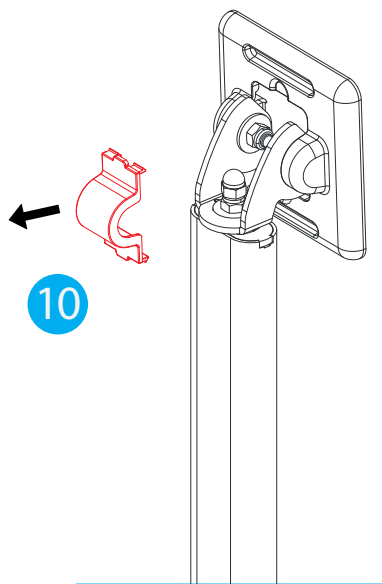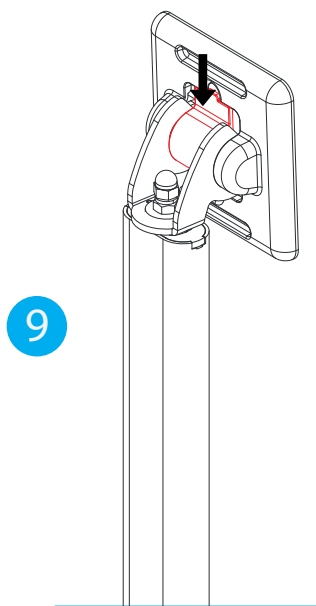

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 032MLTACC - SHELF

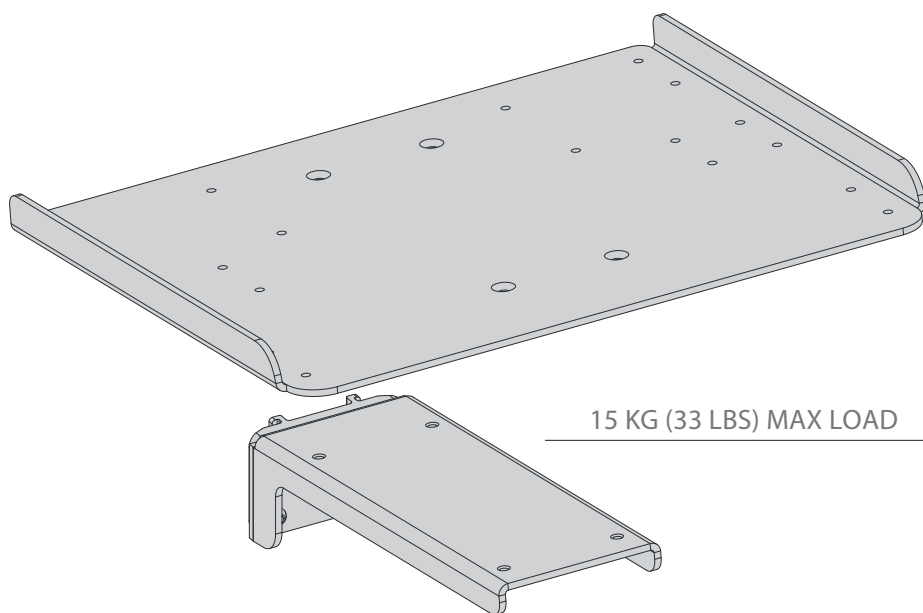


4x
M6X8

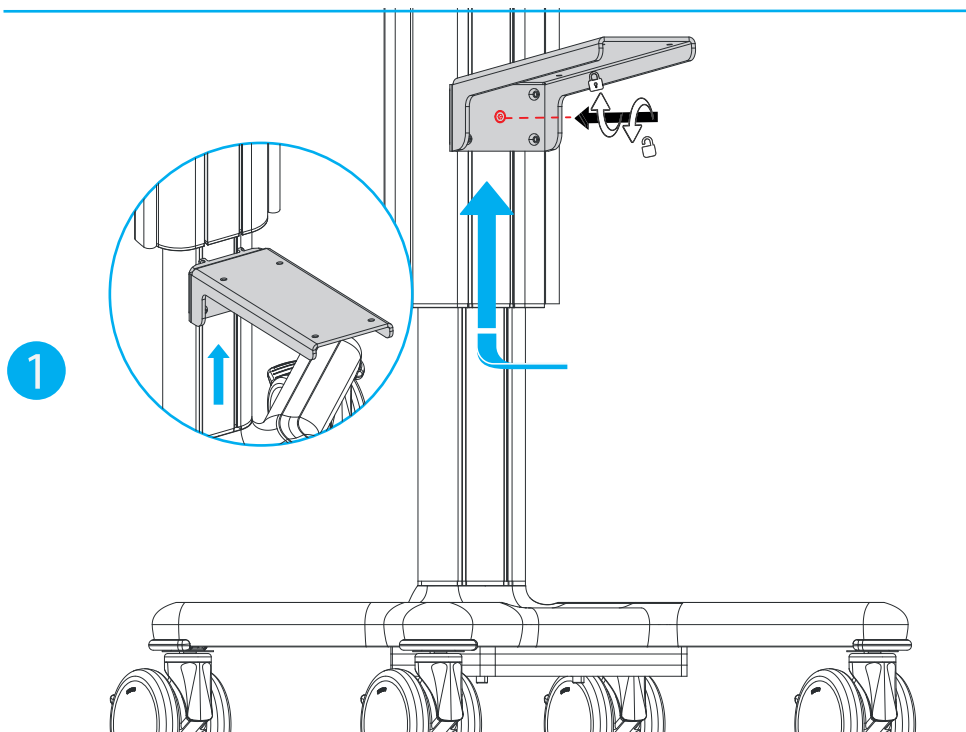


2



4x
M6X8

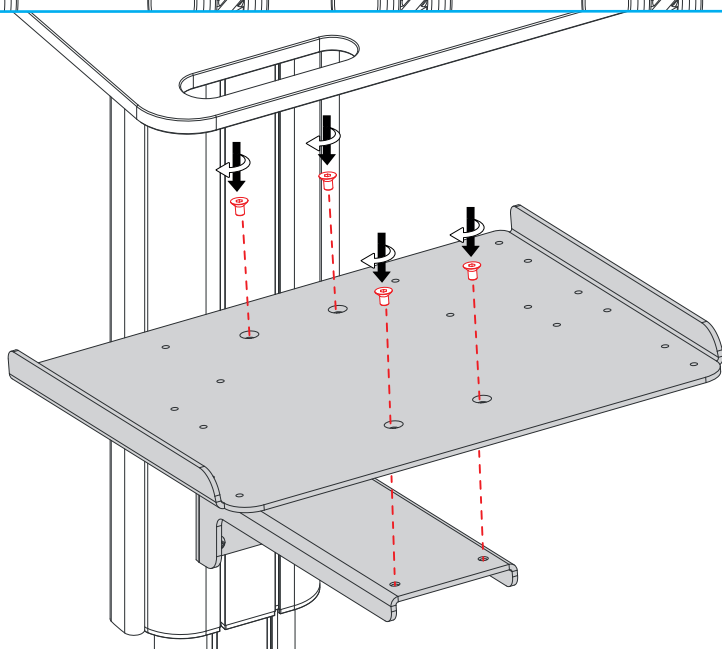

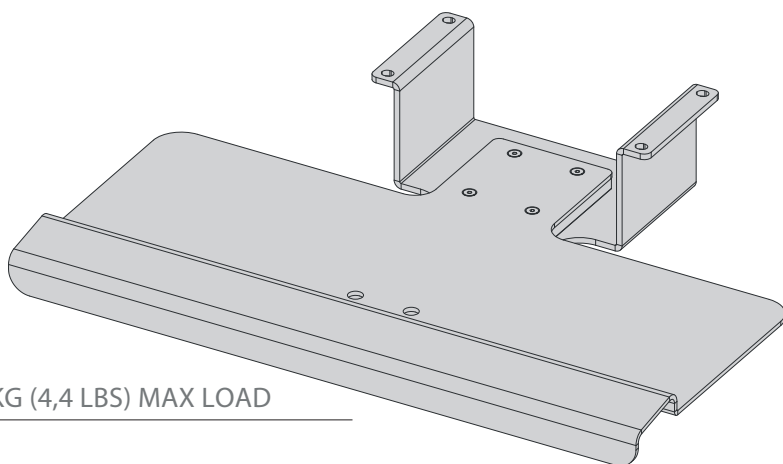


4x


M6X8

1



4x
M6X8

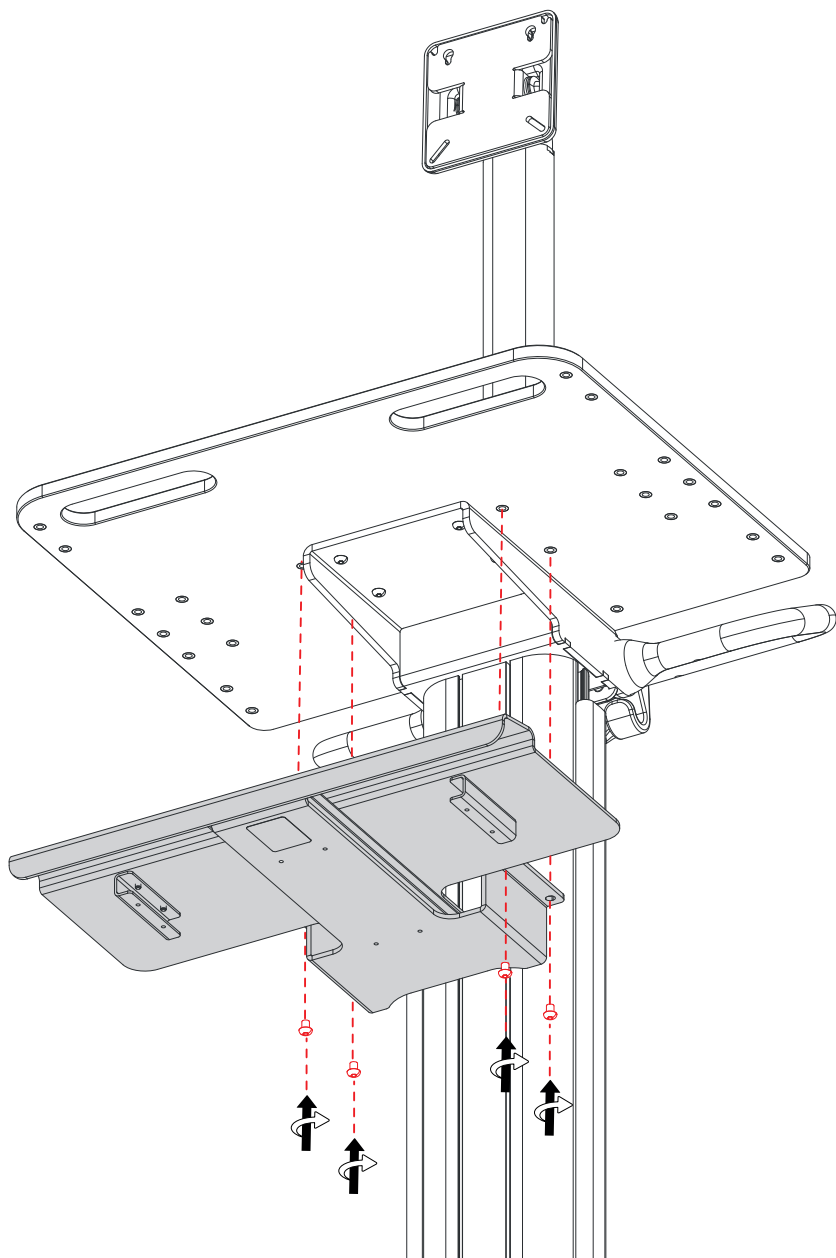

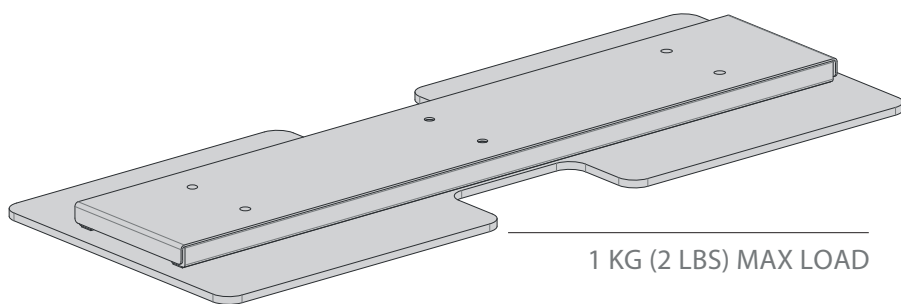


4x
M4X8

1




2x
M4X8

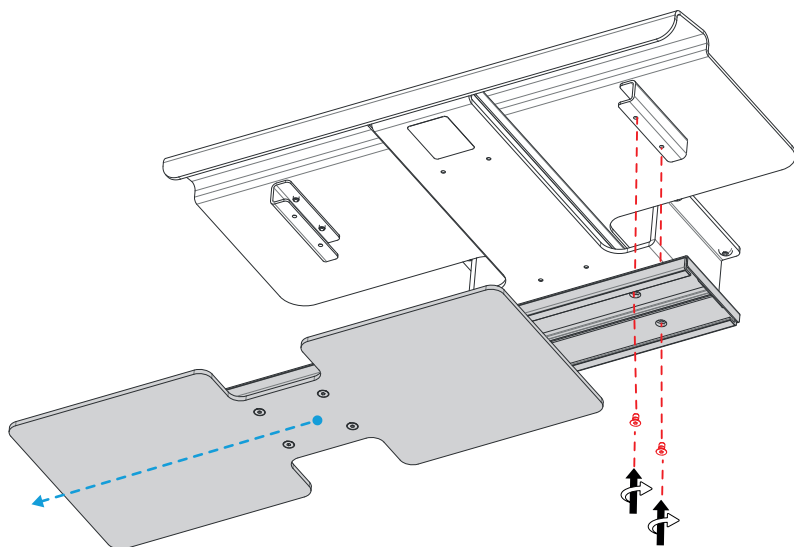

2



2x
M4X8

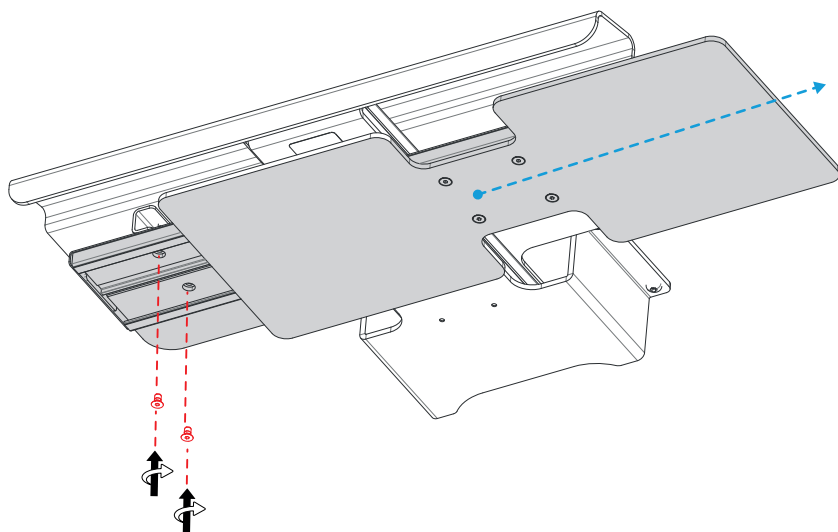



Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на товаръководство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОЛЗА

Количката X1 TALL дава възможност за транспортиране на апарата и неговите аксесоари между точките на терапия в болничната среда и в заведенията за ограничени грижи.

GENERAL SAFETY OBLIGATIONS

- Преди употреба трябва да се прочетат инструкциите на количката.
- Запазете инструкциите за бъдещи справки.
- Продуктът е създаден изключително за методите, посочени в ръководството за употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна.
- Нарушенията или повредите, причинени от неправилна употреба на количката, водят до незабавно отнемане на гаранцията
- **Multix Solutions не носи отговорност за повреди на хора и/или вещи, причинени от неправилна употреба.**
- Когато устройството е монтирано на количката, отговорността за това е на инсталатора на системата, който трябва да гарантира, че системата отговаря на действащите стандарти, EN 60601-1, актуална версия.



ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Безопасността на количката е гарантирана, ако внимателно спазвате предупрежденията по-долу:

- Уверете се, че количката съответства на илюстрацията в ръководството.
- Проверете дали не е счупен или повреден по време на транспортирането.
- Проверете дали движещите се и блокиращи се части, като например колелата, спирачките и (ако има такива) газовата пружина, функционират.
- Всичките четири колела на количката трябва да бъдат блокирани, когато системата и нейните принадлежности са сглобени.
- Когато количката не се задвижва, се уверете, че колелата на количката са заключени и че системата не е паркирана върху неравни повърхности.
- Всички колела на количката трябва да бъдат отключени, преди тя да бъде бутната.
- За да се предотврати преобръщането на количката, дръжката трябва да се държи, ако количката се движи по препятствия (например захранващи кабели).
- Избягвайте прекомерна сила при бутане на количката.
- Не се допускат никакви промени в това устройство.




ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- **ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ СЕДИ НА КОЛИЧКАТА**
- **ЗАБРАНЕНО Е БУТАНЕТО, КОГАТО КОЛЕЛАТА СА БЛОКИРАНИ**
- Спазвайте максималните натоварвания, както е посочено в раздел “Транспортно положение и посока”.
- **Уверете се, че общото тегло на монтираната конфигурация (заедно с аксесоарите) не надвишава общото тегло, посочено на етикета, поставен върху количката, и на следващата страница.**

ПОЗИЦИЯ И ПОСОКА НА ТРАНСПОРТИРАНЕ

По време на транспортирането количката трябва да се спусне до края на газовата пружина, като се държи дръжката е насочена напред, както е показано на снимката по-долу::

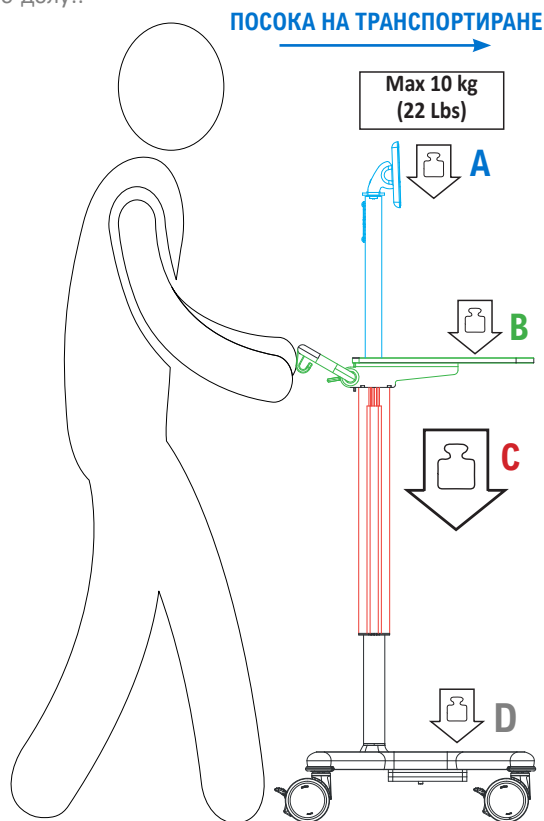

Макс. натоварване

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



МАКСИМАЛНО ОБЩО ТЕГЛО НА
МОНТИРАНАТА КОНФИГУРАЦИЯ
(= количка + аксесоари +
безопасно работно натоварване)

Общо тегло = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + тегло на количката
Тегло на количката = 29kg (63.9 Lbs)

Максимално натоварване (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Максимално натоварване D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - тегло на количката (29kg) - (A+B+C)*

*Ако натоварванията, прилагани към подвижната част (A + B + C) на количката, не достигат посоченото максимално натоварване, възможно е към неподвижната част на количката (D) да се прилагат по-големи натоварвания от посочените, без да се превишава максималното общо тегло.

Приложение



Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на товаръководство.

ПОДДРЪЖАНЕ

Проверявайте всички точки на закрепване и механизми на всеки 6 месеца.

Продуктът е подходящ за използване само в закрити помещения.

ПОЧИСТВАНЕ

Уверете се, че продуктът е почистен и дезинфекциран в съответствие с изискванията за приложение, преди да бъде използван.

Редовно почиствайте металните и/или пластмасовите повърхности с некорозионни препарати с неутрално рН и кърпа/гъба/четка с мек косъм.

Не изпивайте директно върху повърхностите течни, хлорни или амонячни почистващи препарати, мазни и маслени вещества.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За резервни части се обърнете към дистрибутора на устройството (вж. раздел “Контакти”).

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Срокът на експлоатация на продукта е 10 години.

Количката и опаковката се изхвърлят в съответствие с местните или националните разпоредби.

картонена кутия и вътрешни укрепвания  КАРТОН	вътрешна опаковка  ПОЛИЕТИЛЕН С НИСКА ПЛЪТНОСТ
--	---

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ

Върху количката или в инструкцията са посочени следните символи:



Предпазливост



Инструкция за експлоатация



Медическо устройство



Ограничаване на влажността



Пазете сухо



Забранено е да седнеш на количката



общо тегло



СЕ-маркировка



Производител



Ватч код



Ориентация



Да се пазят от слънчева светлина



Бутане забранено



Уникален идентификатор на изделието



Каталожен номер



Номер на продукта



Дата на производство



Крежка, дръжка с внимание



Температурна граница



Разпространява се по

Разпространява се от: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Произведено от: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

