




GEBRUIKSAANWIJZING X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Geef de gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker
na de installatie.


Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

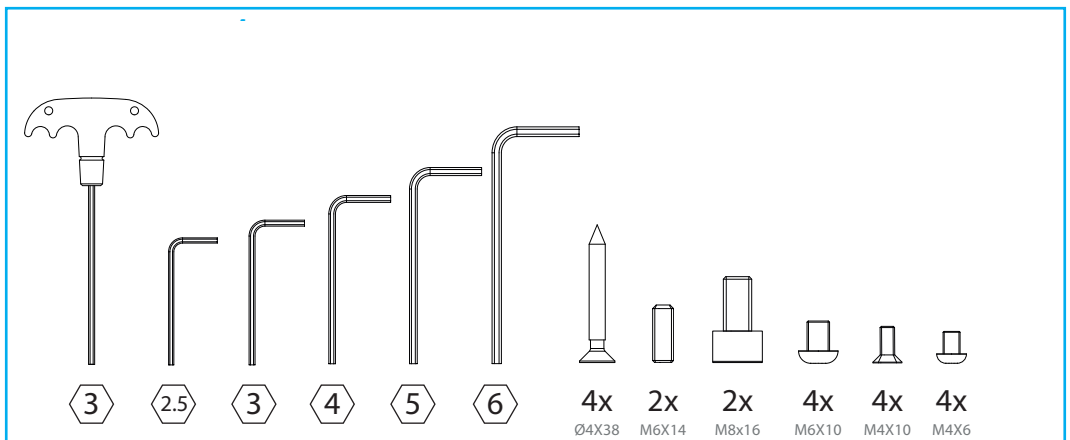

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIE

- ! Als er accessoires aanwezig zijn, raadpleeg dan de bijbehorende instructies
- voordat u de trolley in elkaar zet.


1

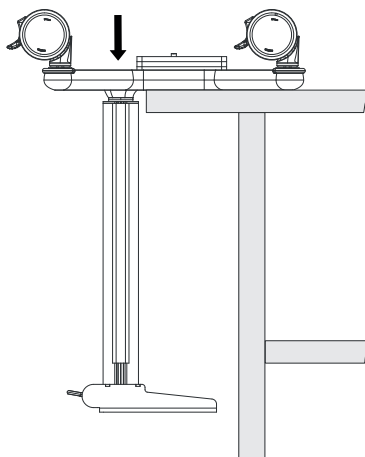

2




4x
Ø4X38

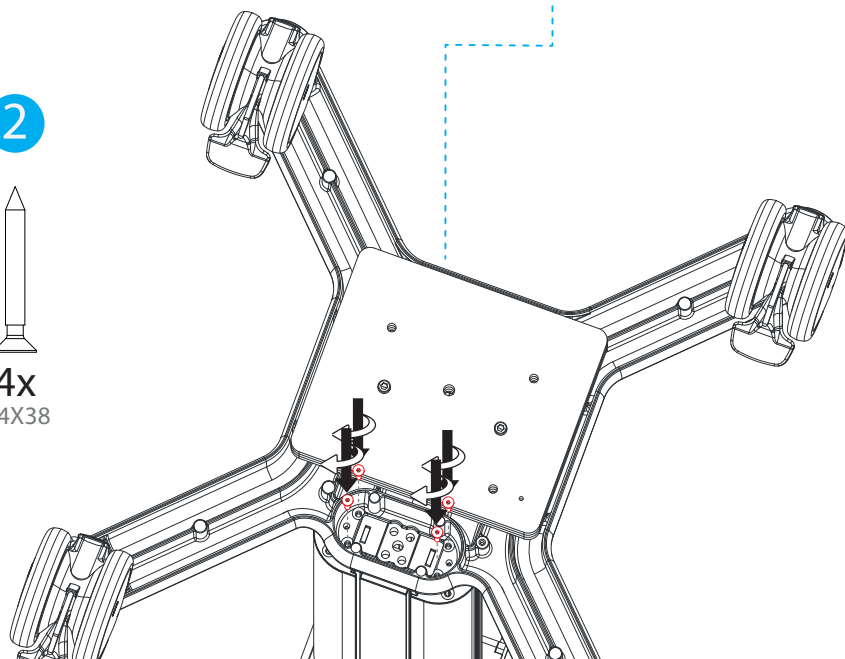


3

2x M6X14
2x M8x16

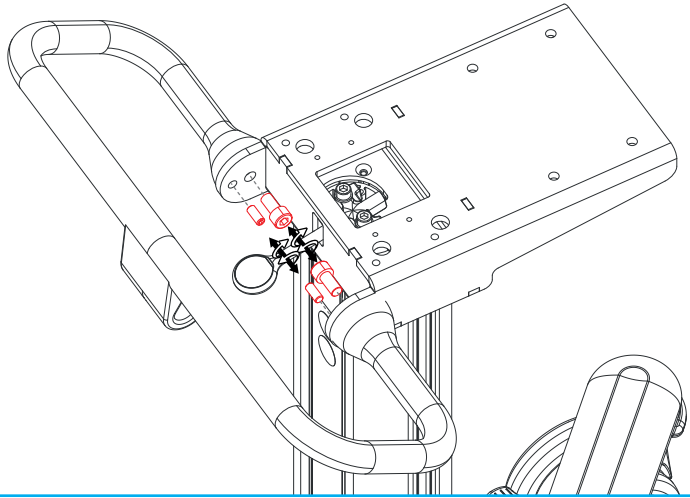


4

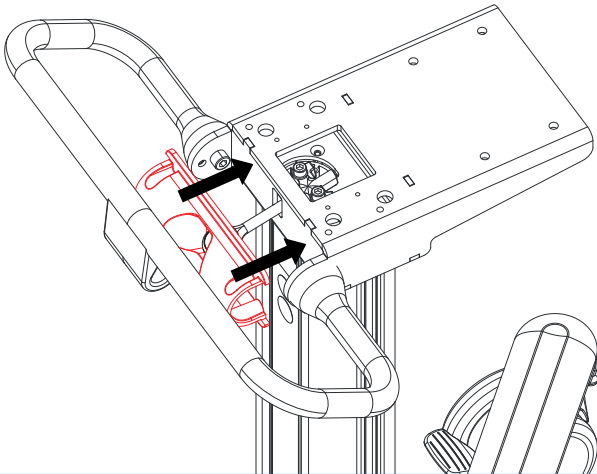


5



4x
M4X10

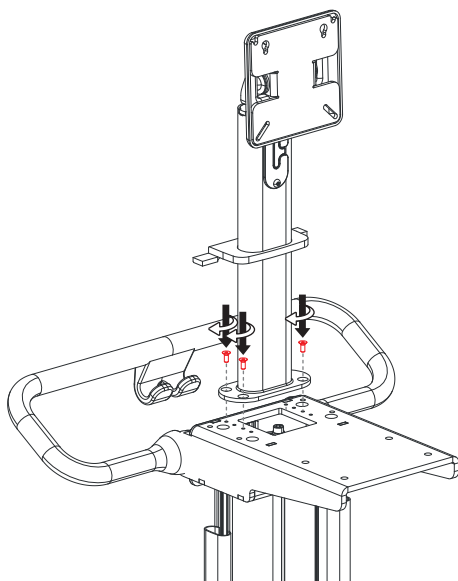


6

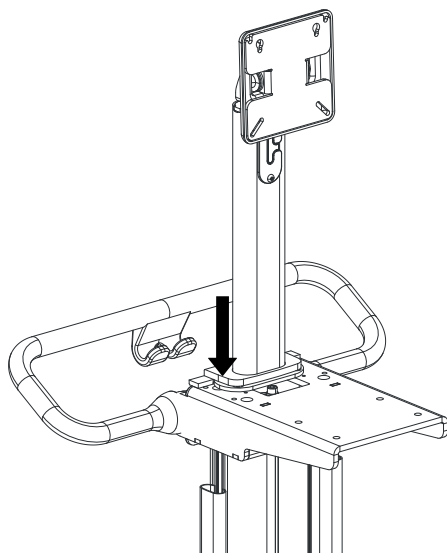

7




4x
M6X10




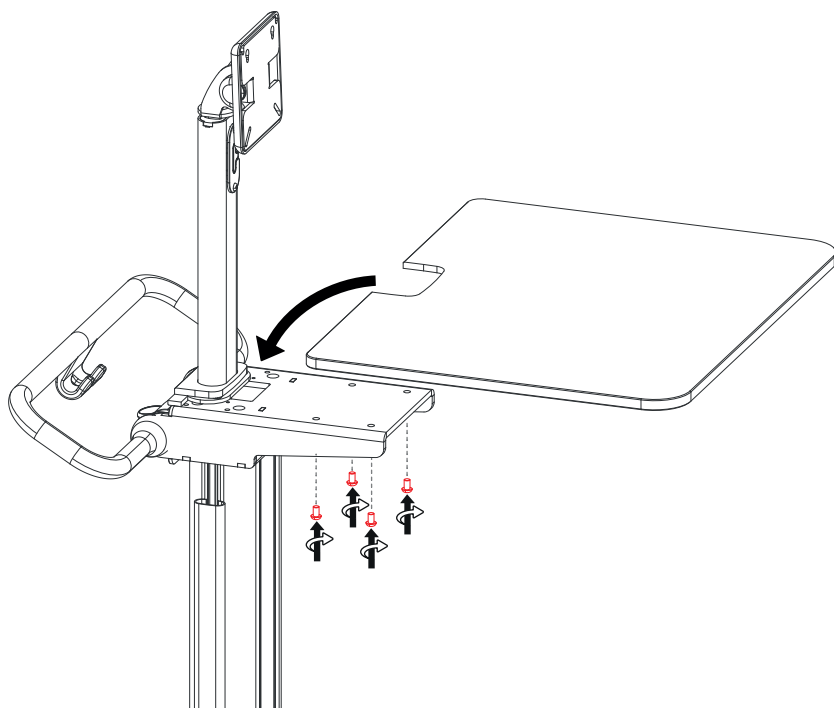


8




2x
M4X6

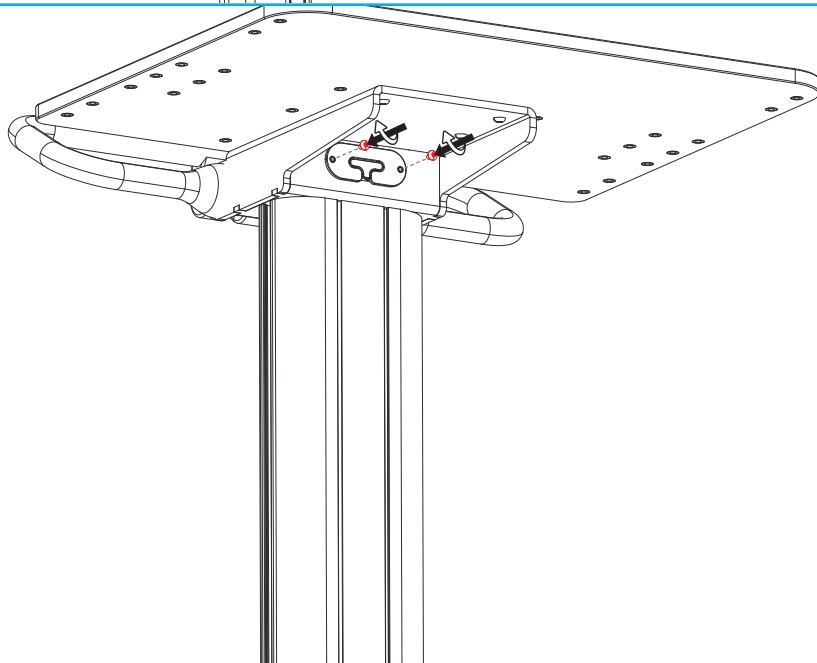


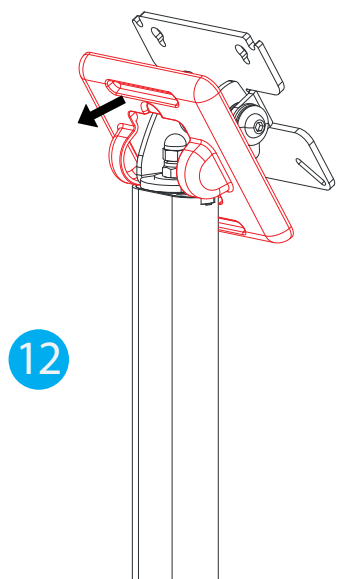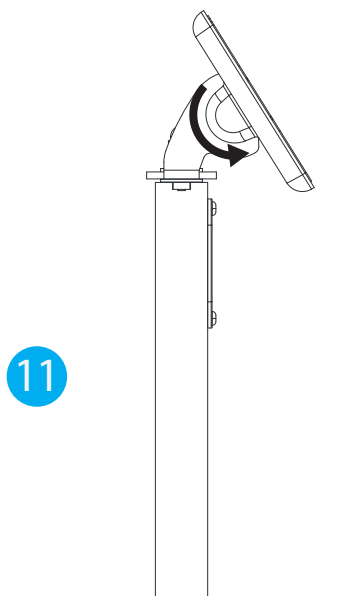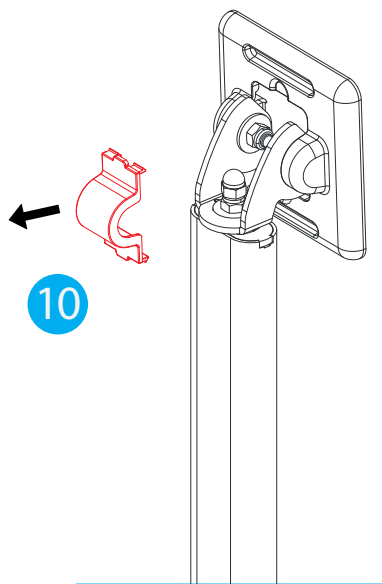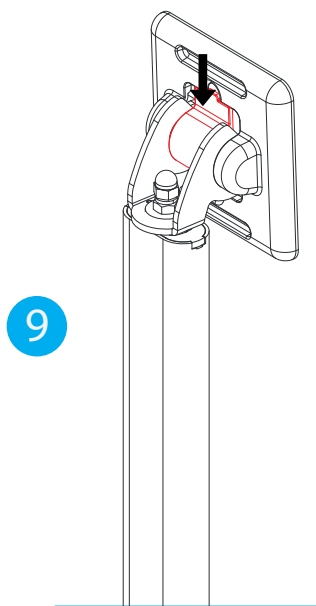

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIE 032MLTACC - SHELF

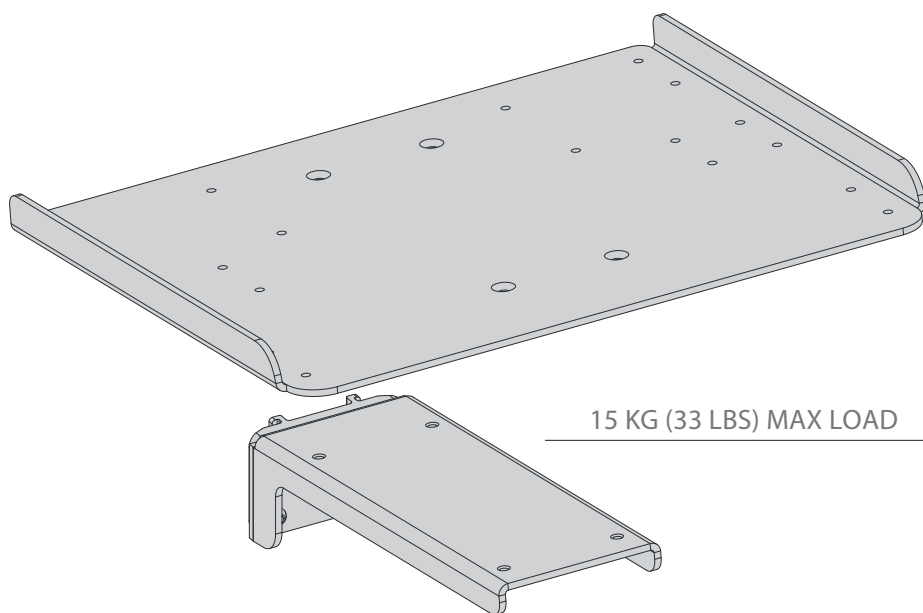


4x
M6X8

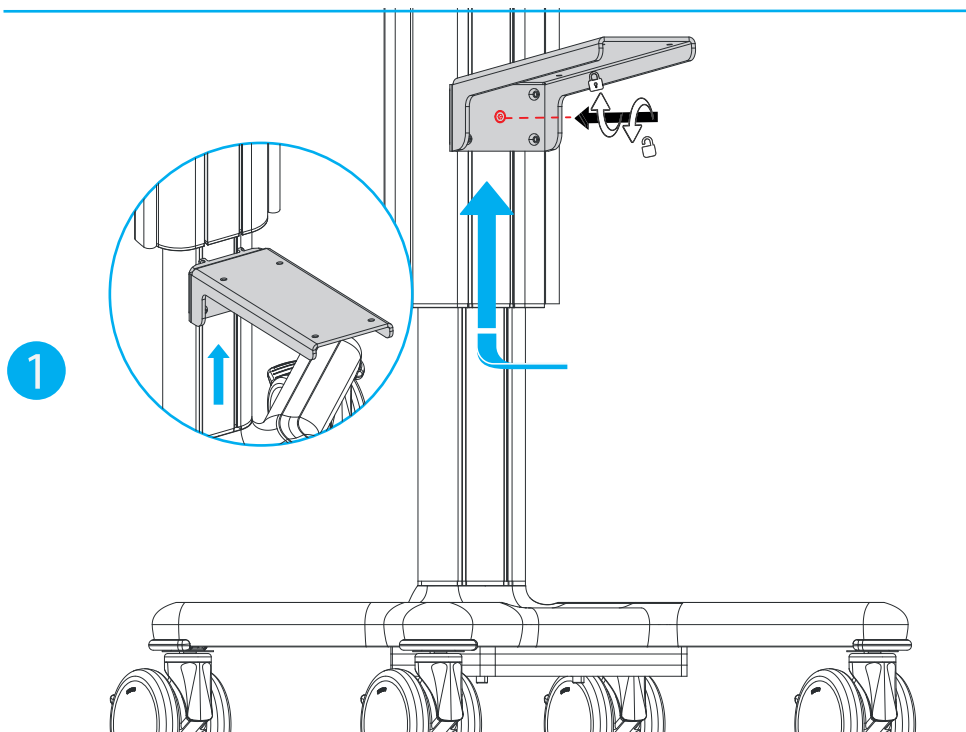


2



4x
M6X8

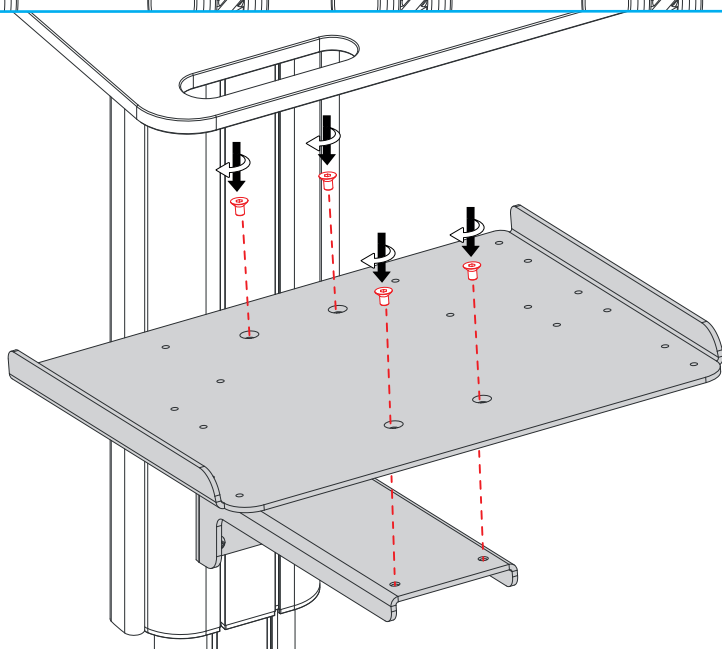

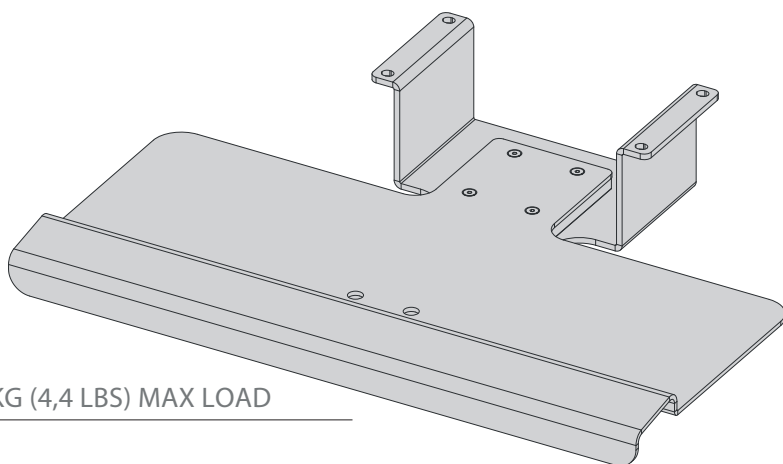


4x


M6X8

1



4x
M6X8

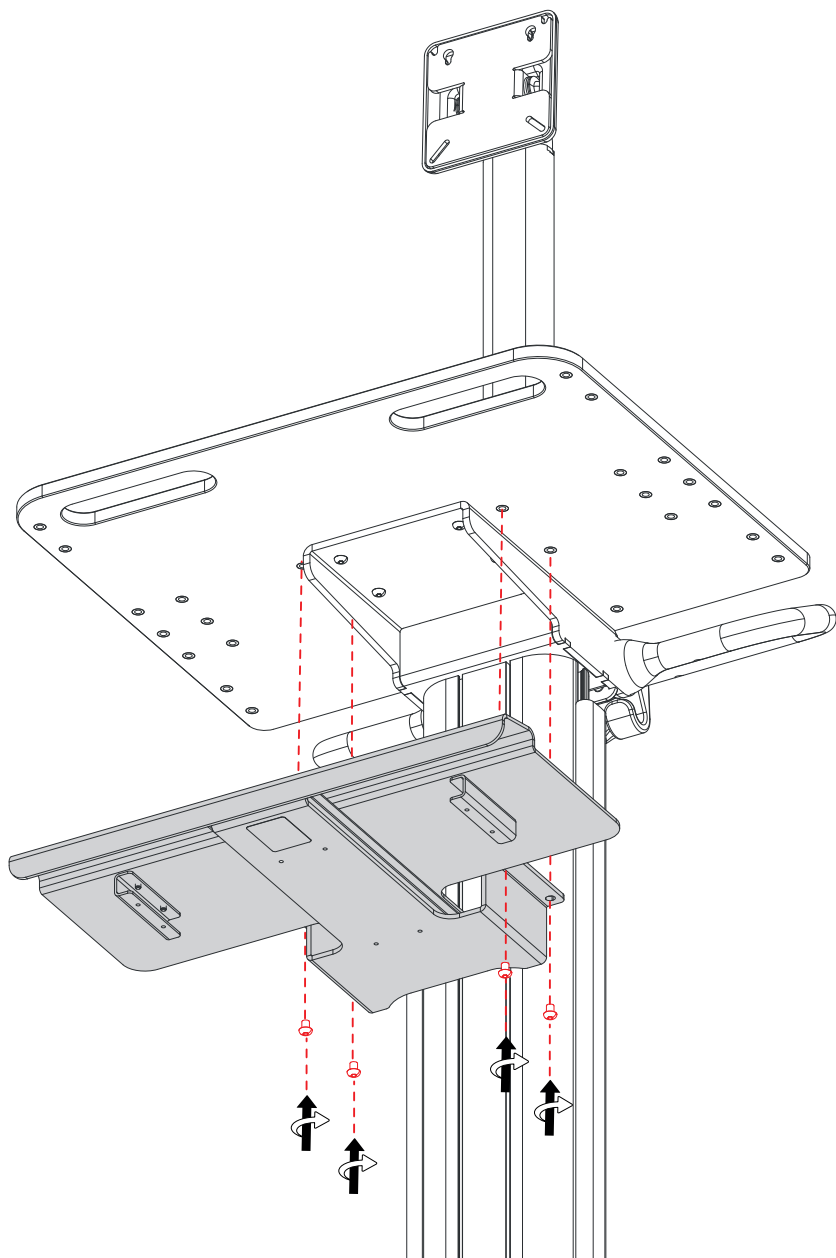

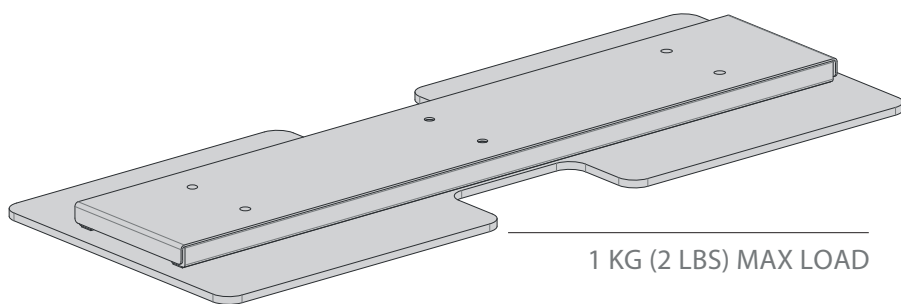


4x
M4X8

1




2x
M4X8

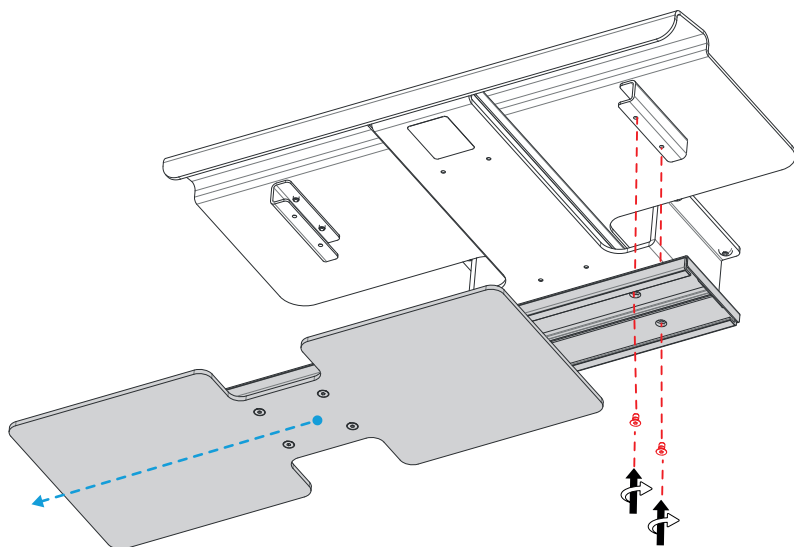

2



2x
M4X8

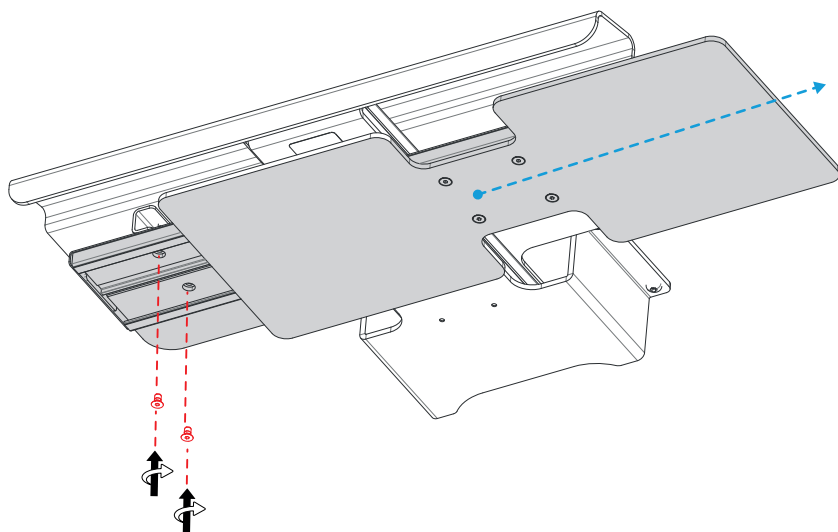

Belangrijke opmerkingen



Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

BEOOGD GEBRUIK

De **Trolley X1TALL** maakt het mogelijk om **een apparaat en de bijbehorende accessoires** te vervoeren tussen therapiepunten in ziekenhuizen en instellingen voor beperkte zorg.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVERP LICHTINGEN

- Lees voor gebruik de instructies van de trolley.
- Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Het product is uitsluitend gemaakt voor de methoden die in de handleiding worden genoemd. Elk ander gebruik moet als onjuist worden beschouwd.
- Knoeien of schade door verkeerd gebruik van de kar leidt tot onmiddellijke verbeuring van de garantie.
- Multix Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken door oneigenlijk gebruik.
- Wanneer **een apparaat** op de trolley wordt gemonteerd, is het de verantwoordelijkheid **van de installateur** van het systeem om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de huidige toepasselijke normen, EN 60601-1 huidige versie.



ALGEMENE WAARSCHUWING EN VOORZICHTIGHEID

De veiligheid van de kar wordt gegarandeerd door de onderstaande waarschuwingen zorgvuldig op te volgen:

- Zorg ervoor dat het wagentje overeenkomt met de illustratie in de handleiding.
- Controleer of het niet gebroken of beschadigd is tijdens transport.
- Controleer of de bewegende en vergrendelende onderdelen zoals wielen, remmen en (indien aanwezig) de gasveer goed werken.
- Alle vier de wielen van de wagen moeten worden geblokkeerd wanneer het systeem en de accessoires worden gemonteerd.
- Als er niet met de kar wordt gereden, zorg er dan voor dat de wielen van de kar geblokkeerd zijn en dat het systeem niet op oneffen oppervlakken wordt geparkeerd.
- Alle wielen van de kar moeten ontgrendeld zijn voordat de kar wordt geduwd.
- Om te voorkomen dat de kar omvalt, moet de handgreep worden vastgehouden als de kar over obstakels (bijvoorbeeld elektriciteits snoeren) wordt gereden.
- Vermijd overmatige kracht bij het duwen van de kar.
- Wijzigingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.




LAADINSTRUCTIES

- **HET IS VERBODEN OM OP DE KAR TE ZITTEN**
- **DUWEN VERBODEN WANNEER DE WIELEN GEBLOKKEERD ZIJN**
- Volg de maximale belasting zoals aangegeven in het hoofdstuk “transportpositie en-richting”.
- Zorg ervoor dat het totale gewicht van de gemonteerde configuratie (inclusief de accessoires) niet hoger is dan het totale gewicht dat vermeld staat op het label dat op de kar en op de volgende pagina is aangebracht.

Belangrijke opmerkingen

TRANSPORTPOSITIE EN -RICHTING

Tijdens het transport moet de trolley tot het einde van de gasveer worden neergelaten met de handgreep naar voren gericht, zoals op de onderstaande afbeelding:

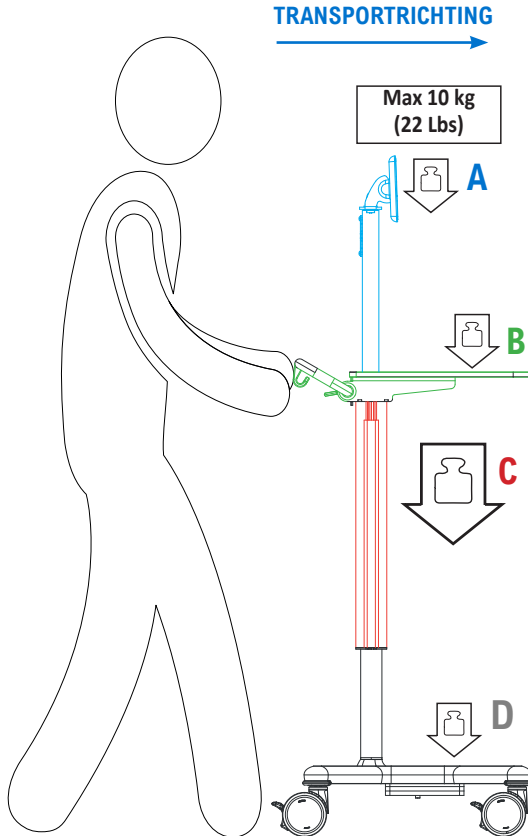

Max Belasting

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



MAX. TOTAAL GEWICHT VAN DE
GEMONTEERDE CONFIGURATIE
(= trolley + accessoires + veilige
werkbelasting)

Totaalgewicht = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + Gewicht karretje

Gewicht karretje = 29kg (63.9 Lbs)

Max Belasting (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Max Belasting D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - Gewicht karretje (29kg) - (A+B+C)*

*Als de belasting op het bewegende deel (A + B + C) van de trolley niet de aangegeven maximale belasting bereikt, is het mogelijk om een hogere belasting dan aangegeven toe te passen op het vaste deel van de trolley (D), zonder het maximale totaalgewicht te overschrijden.

Bijlage



Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

ODRŽAVANJE

Controleer alle bevestigingspunten en mechanismen om de 6 maanden.

Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat het product gereinigd en gedesinfecteerd is volgens de toepassingsvereisten voordat het gebruikt wordt.

Reinig de metalen en/of kunststof oppervlakken regelmatig met niet-corrosieve neutrale pH reinigingsmiddelen en een doek/spons/borstel met zachte haren.

Giet geen vloeibare, chloor- of ammoniakhoudende detergents, vette en olieachtige stoffen rechtstreeks op oppervlakken..

RESERVEONDERDELEN

Neem voor reserveonderdelen contact op met de distributeur van het apparaat (zie hoofdstuk Contact).

RADNI VIJEK I ODLAGANJE

De levensduur van het product is 10 jaar.

De kar en de verpakking moeten worden weggegooid volgens de plaatselijke of landelijke voorschriften.

kartonnen doos en interne versterkingen	interne verpakking
	
KARTON	POLYETHYLEEN MET LAGE DICHTHEID

VERKLARENDE WOORDENLIJST VAN SYMBOLEN

De volgende symbolen worden vermeld op de wagen of in de instructie:

	Voorzichtigheid		CE-markering		Catalogusnummer
	Bedieningsinstructie		Fabrikant		Productnummer
	Medical apparaat		Code Batch		Datum van vervaardiging
	Vochtigheidsbeperking		Oriëntatie		Breekbaar, voorzichtig hanteren
	Droog bewaren		Uit de buurt van zonlicht houden		Температурна граница
	Het is verboden om op de kar te zitten		Duwen verboden		Gedistribueerd door
	lotaal gewicht		Unieke identificatiecode van het hulpmiddel		Max Belasting

Gedistribueerd door: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Gefabriceerd door: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

