




HASZNÁLATI UTASÍTÁS X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Kérjük, a telepítés után adja át a használati útmutatót a végfelhasználónak.


A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a “Szerelés” és “Karbantartás” című külön fejezetet).

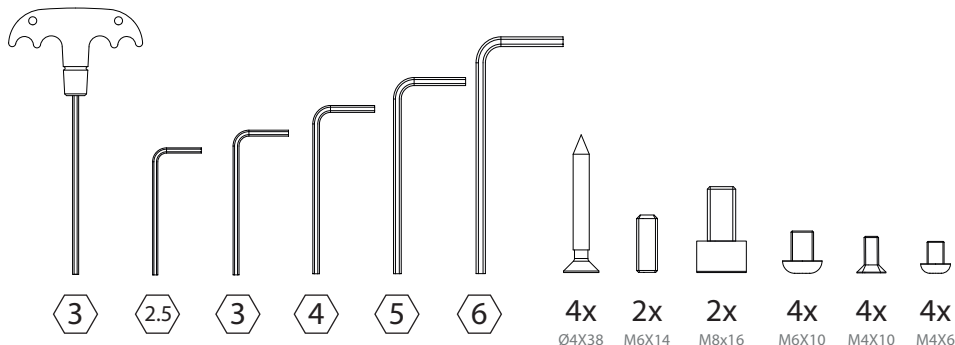

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

- ! Ha bármilyen tartozék jelen van, kérjük, a kocsi összeszerelése előtt olvassa el a vonatkozó utasítást.

1

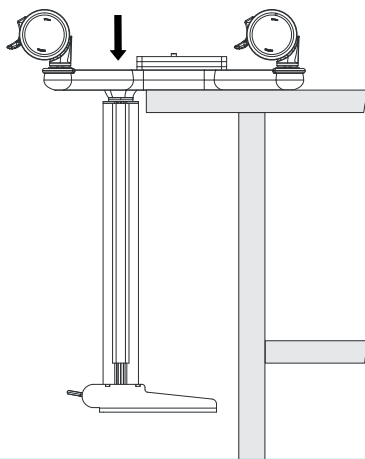


2




4x
Ø4X38

3

2x M6X14
2x M8x16

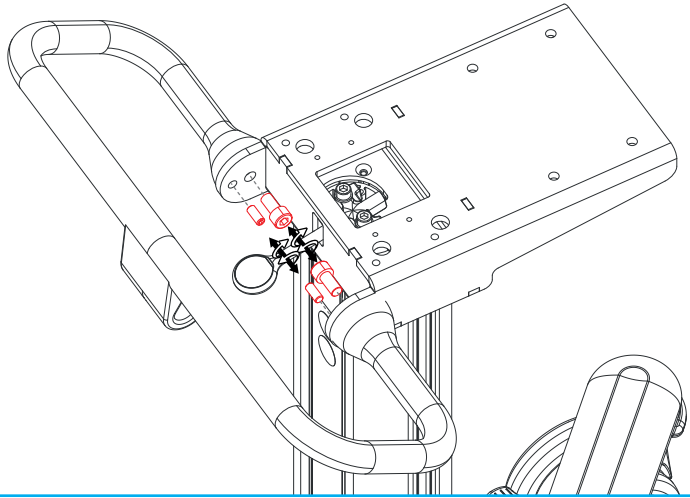


4

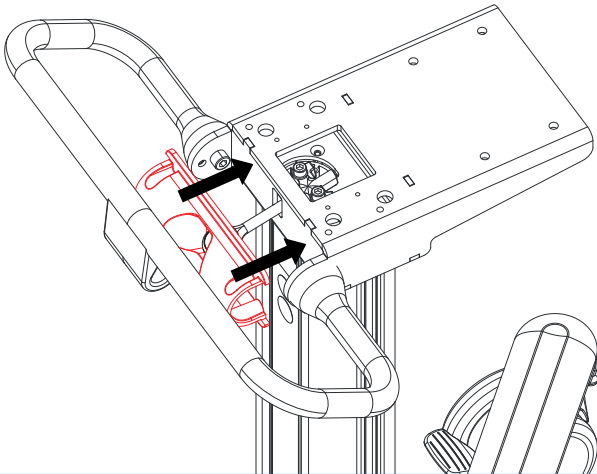


5


4x
M4X10

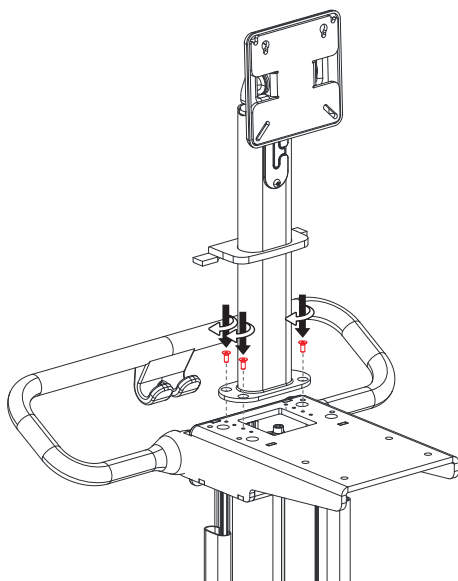


6

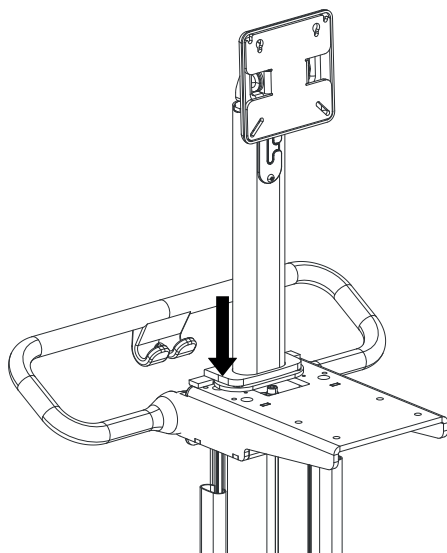

7




4x
M6X10




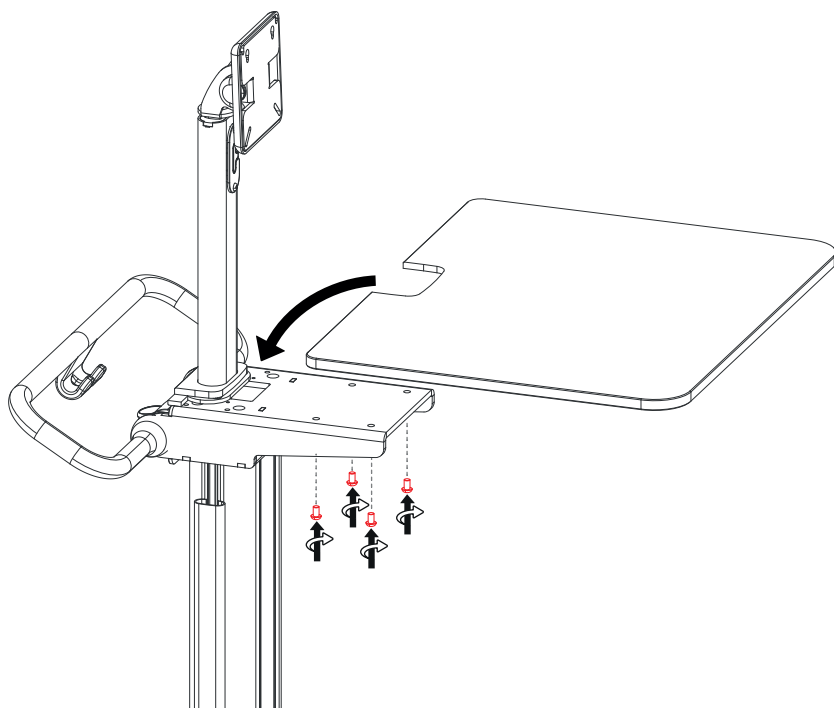


8




2x
M4X6

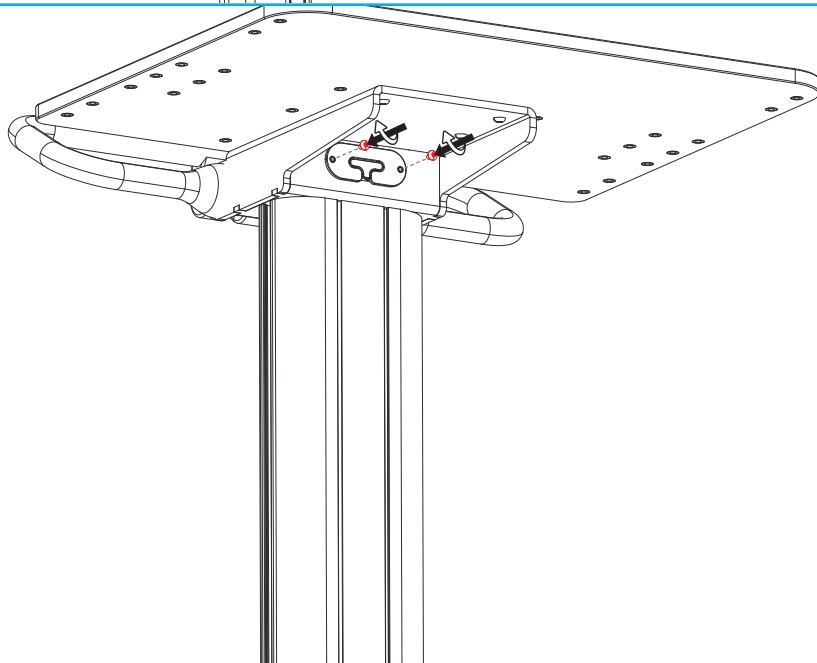


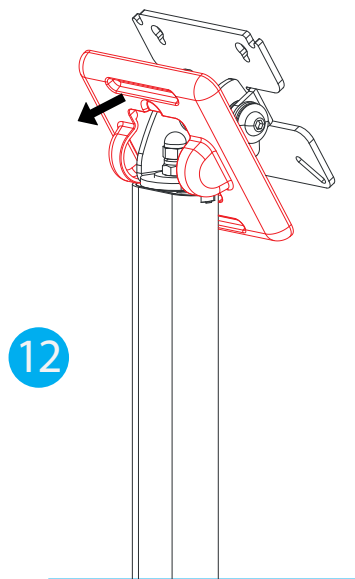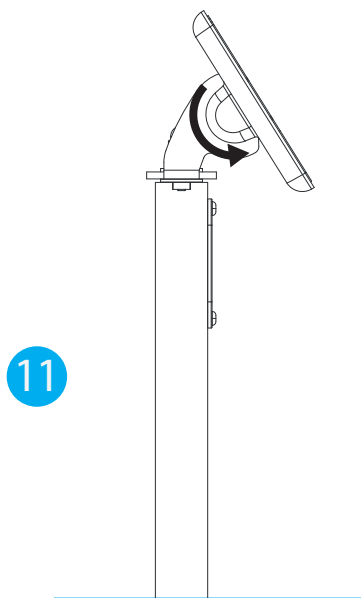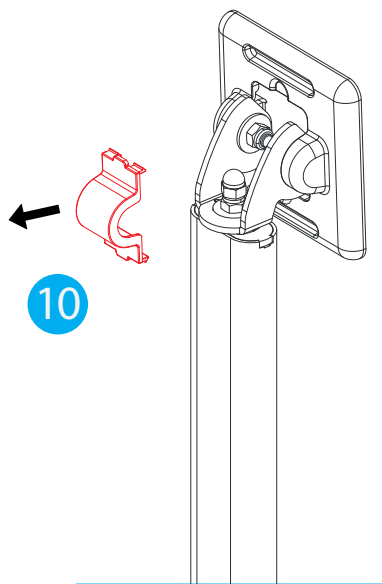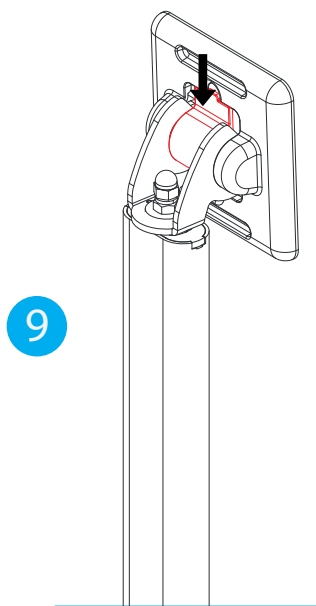

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS 032MLTACC - SHELF

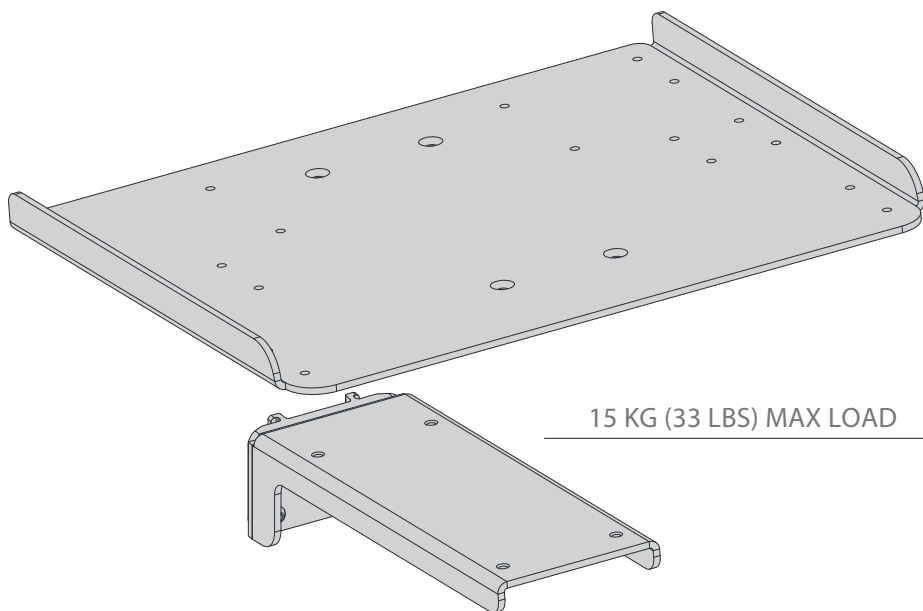

4x
M6X8

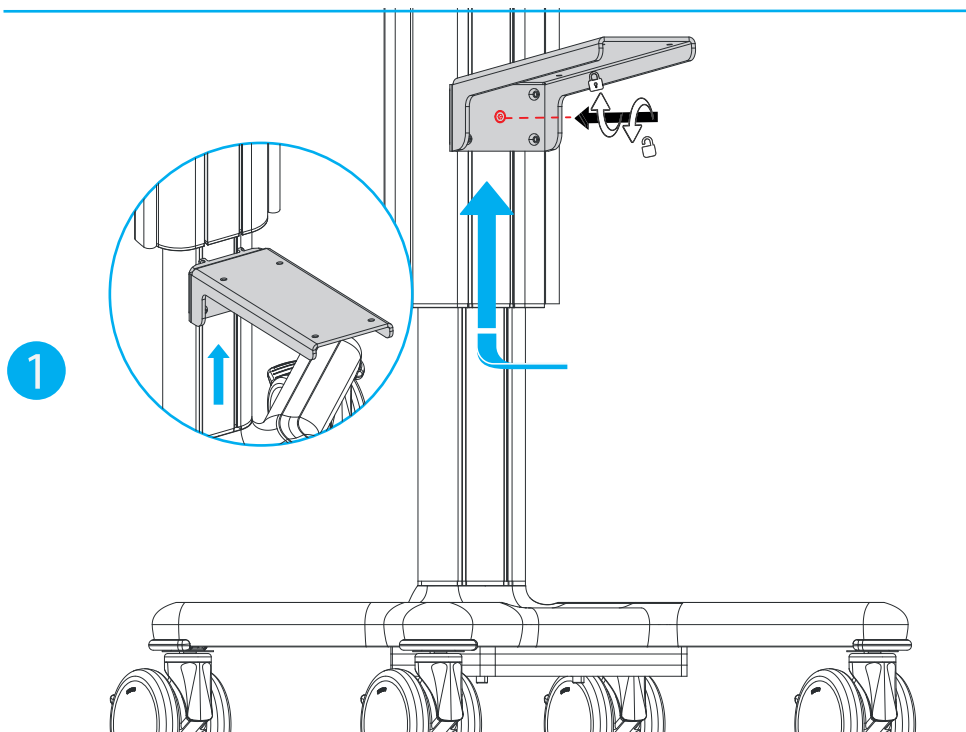



2



4x

M6X8

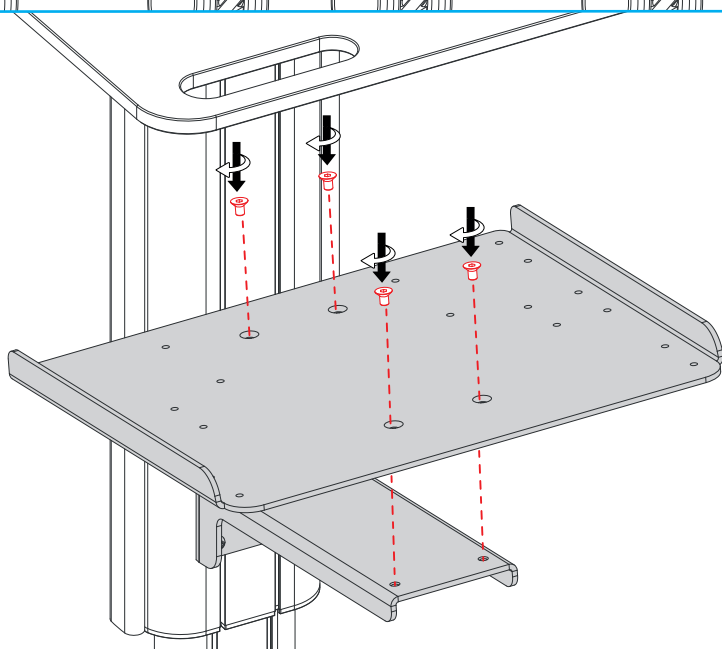

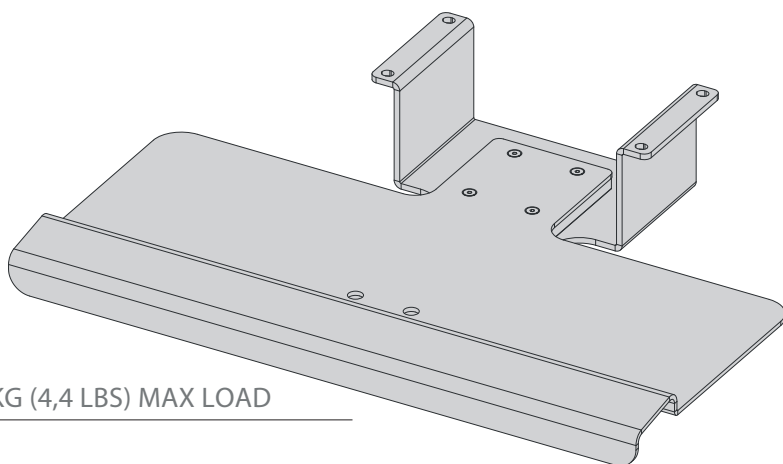



4x
M6X8

1



4x
M6X8

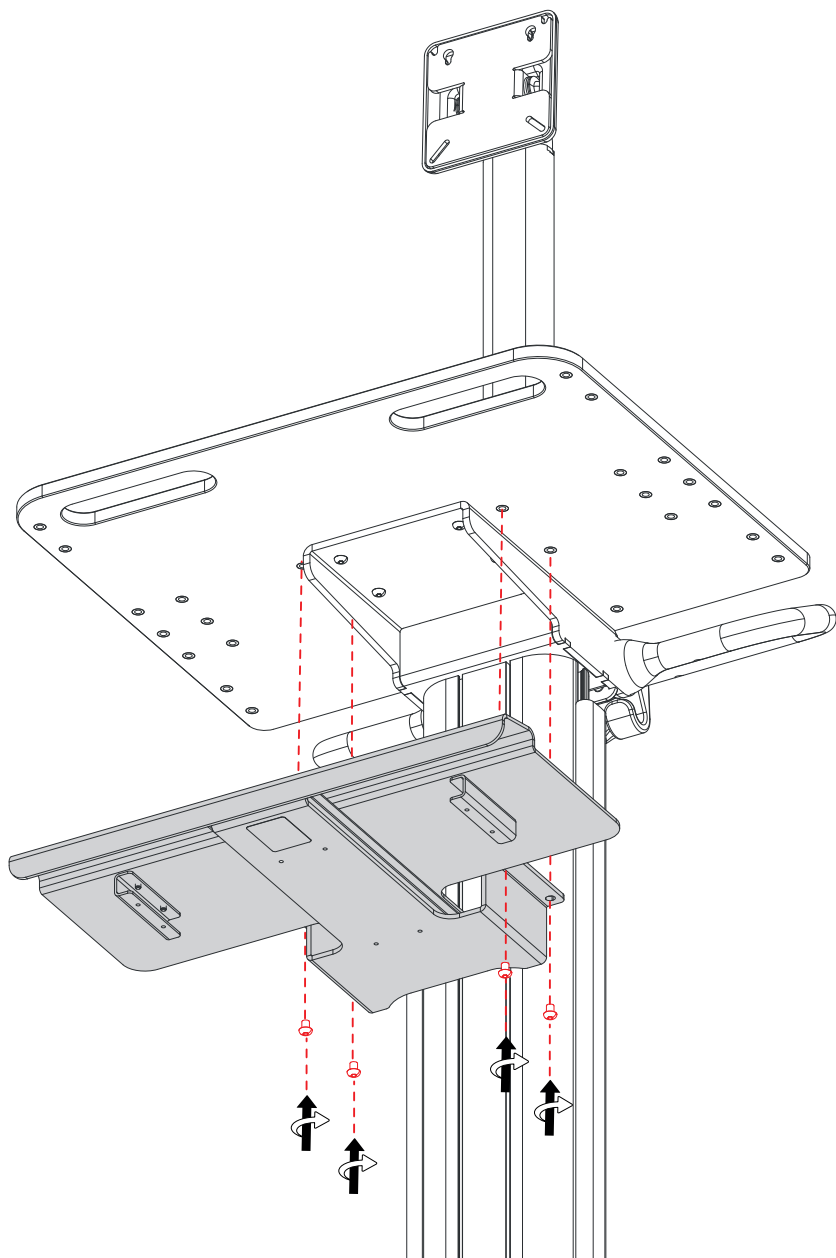

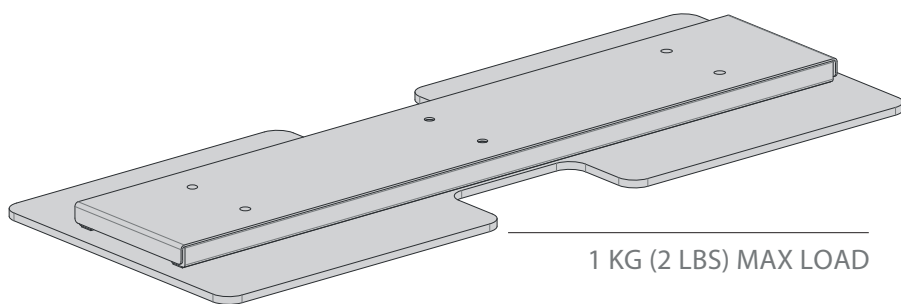


4x
M4X8

1




2x
M4X8

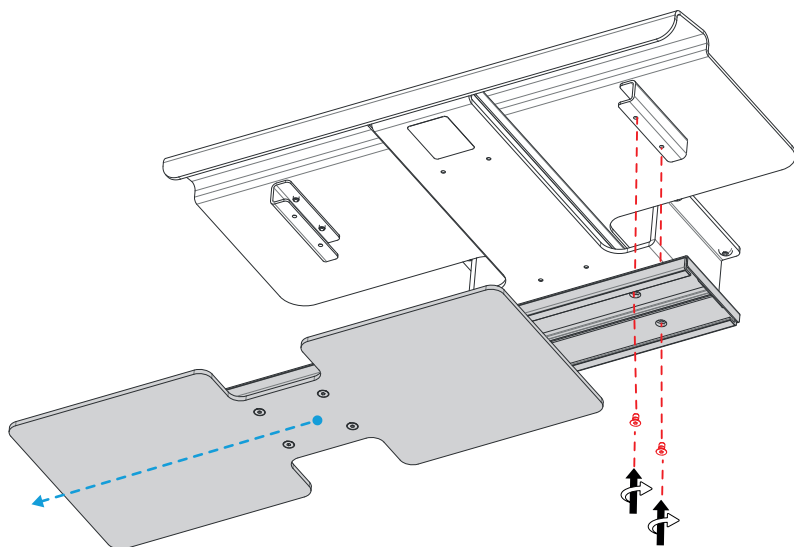

2



2x
M4X8

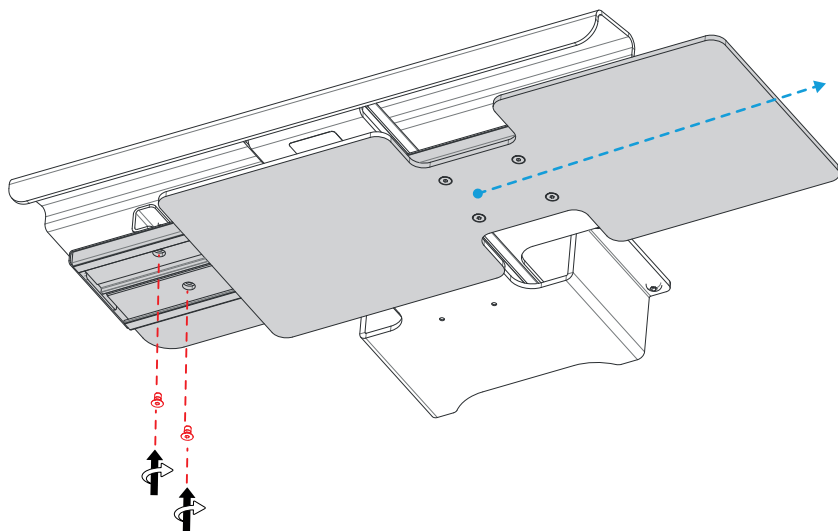



A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a “Szerelés” és “Karbantartás” című külön fejezetet).

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Az **X1 TALL kocsi** lehetővé teszi a **készülék és tartozékainak** szállítását a kórházi környezetben és a korlátozott ellátást nyújtó intézményekben a terápiás pontok között.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK

- Használat előtt el kell olvasni a kocsi használati utasítását.
- Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- A terméket kizárólag a használati útmutatóban említett módszerekhez készítették. Minden más felhasználás nem megfelelőnek tekintendő.
- A kocsi manipulálása vagy helytelen használatából eredő károk a garancia azonnali elvesztését vonják maguk után.
- A Multix Solutions nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és/vagy tárgyi károkért.
- Ha **egy készüléket** a kocsira szerelnek, a **rendszer telepítőjének** felelőssége annak biztosítása, hogy a rendszer megfeleljen az aktuálisan alkalmazandó szabványoknak, az EN 60601-1 aktuális változatának.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVATOSSÁG

A kocsi biztonságát az alábbi figyelmeztetések gondos betartása garantálja:



- Győződjön meg róla, hogy a kocsi megfelel a kézikönyvben található ábrának.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem tört vagy sérült-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a mozgó és reteszelő alkatrészek, például a kerekek, a fékek és (ha van) a gázrugó működőképese-e.
- A rendszer és tartozékai összeszerelésekor a kocsi mind a négy kerekét rögzíteni kell.
- Ha a kocsit nem hajtja, győződjön meg arról, hogy a kocsi kerekei rögzítve vannak, és hogy a rendszer nem parkol egyenetlen felületen.
- A kocsi minden kerekét ki kell oldani, mielőtt a kocsit tolni kezdené.
- A kocsi felborulásának megakadályozása érdekében a fogantyút meg kell fogni, ha a kocsival akadályok (például hálózati kábelek) fölé hajtunk.
- Kerülje a túlzott erőt a kocsi tolása közben.
- Ezen az eszközön semmilyen változtatás nem megengedett..




BETÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

- **TILOS A KOCSIRA ÜLNI**
- **TILOS TOLNI, HA A KEREKEK BLOKKOLVA VANNAK**
- Kövesse a “szállítási helyzet és irány” szakaszban megadott maximális terhelési értékeket.
- Győződjön meg arról, hogy a felszerelt konfiguráció teljes súlya (a tartozékokkal együtt) nem haladja meg a kocsin elhelyezett címkén és a következő oldalon feltüntetett összsúlyt.

SZÁLLÍTÁSI HELYZET ÉS IRÁNY

A szállítás során a kocsit a gázrugó végéig le kell engedni, a fogantyú futását előre felé tartva, ahogy az alábbi képen látható:

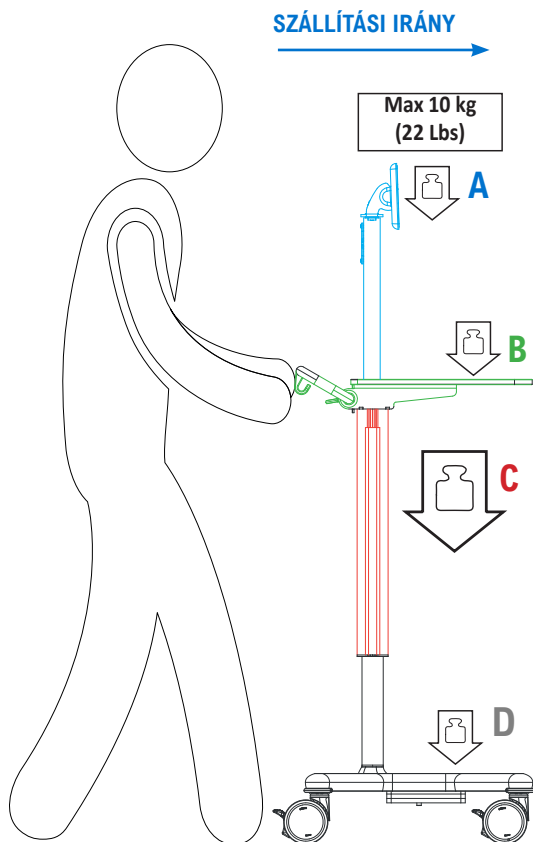

Maximális terhelés

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



A SZERELT KONFIGURÁCIÓ MAXIMÁLIS ÖSSZSÚLYA

(= kocsi + tartozékok + biztonságos munkaterhelés)

Teljes súly = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + kocsi súlya
kocsi súlya = 29kg (63.9 Lbs)

Maximális terhelés (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maximális terhelés D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - kocsi súlya (29kg) - (A+B+C)*

*Ha a kocsi mozgó részére (A + B+ C) alkalmazott terhelések nem érik el a megadott maximális terhelést, akkor a kocsi rögzített részére (D) a megadottnál nagyobb terhelést is lehet alkalmazni anélkül, hogy a maximális összsúlyt túllépnének.

Függelék



A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a “Szerelés” és “Karbantartás” című külön fejezetet).

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze az összes rögzítési pontot és mechanizmust 6 havonta.

A termék csak beltéri használatra alkalmas.

TISZTÍTÁS

Győződjön meg róla, hogy a terméket használat előtt az alkalmazási követelményeknek megfelelően megtisztították és fertőtlenítették.

Rendszeresen tisztítsa meg a fém- és/vagy műanyag felületeket nem korrodáló, semleges pH-értékű tisztítószerrel és puha sörtéjű ruhával/szivaccsal/kefével.

Ne öntsön közvetlenül a felületekre folyékony, klór- vagy ammóniaalapú tisztítószeret, zsíros és olajos anyagokat.

PÓTALKATRÉSZEK

Pótalkatrészekért forduljon a készülék forgalmazójához (lásd a Kapcsolat fejezetet).

ÉLETTARTAM ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartama 10 év.

A kocsit és a csomagolást a helyi vagy nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

kartondoboz és belső megerősítések	belső csomagolás
	
KARTON	ALACSONY SÚRÚSÉGŰ POLIETILÉN

SZIMBÓLUMJEGYZÉK

A következő szimbólumok szerepelnek a kocsin vagy az utasításban:



Figyelemzet



Üzemeltetési utasítás



Metikus eszköz



Páratartalom korlátozása



Tartsa szárazon



Tilos a kocsira ülni



Teljes súly



CE-jelölés



Gyártó



batchkód



Tájékozódás



Tartsa távol a napfénytől



Tolás tilos



Egyedi
eszközzazonosító



Katalógus száma



Termékszám



Gyártás dátuma



Törékeny, óvatosan
kezelje



Hőmérsékleti ha-
tárérték



Forgalmazó



Maximális terhelés

Forgalmazó: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Gyártó: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

