




LIETOŠANAS INSTRUKCIJA X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Lūdzu, pēc uzstādīšanas sniedziet lietošanas instrukciju galalietotājam..


Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).

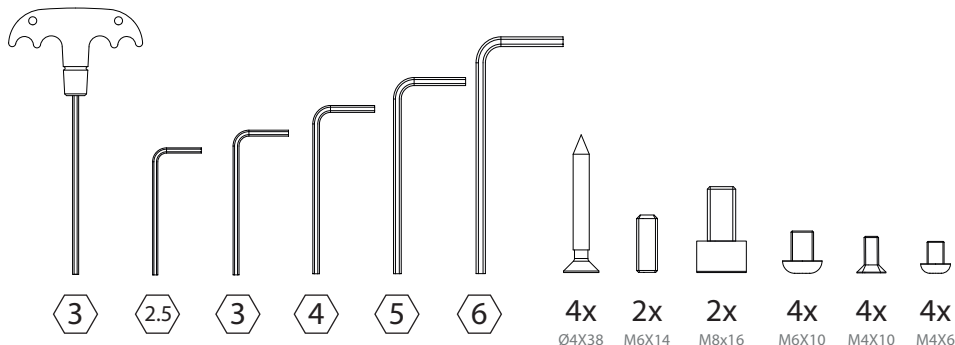

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

! Ja ir pieejami piederumi, pirms ratiņu montāžas skatiet attiecīgās instrukcijas.


1

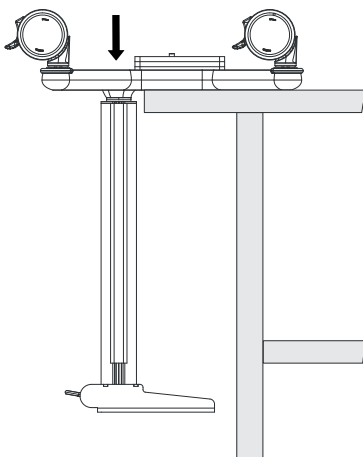

2




4x
Ø4X38

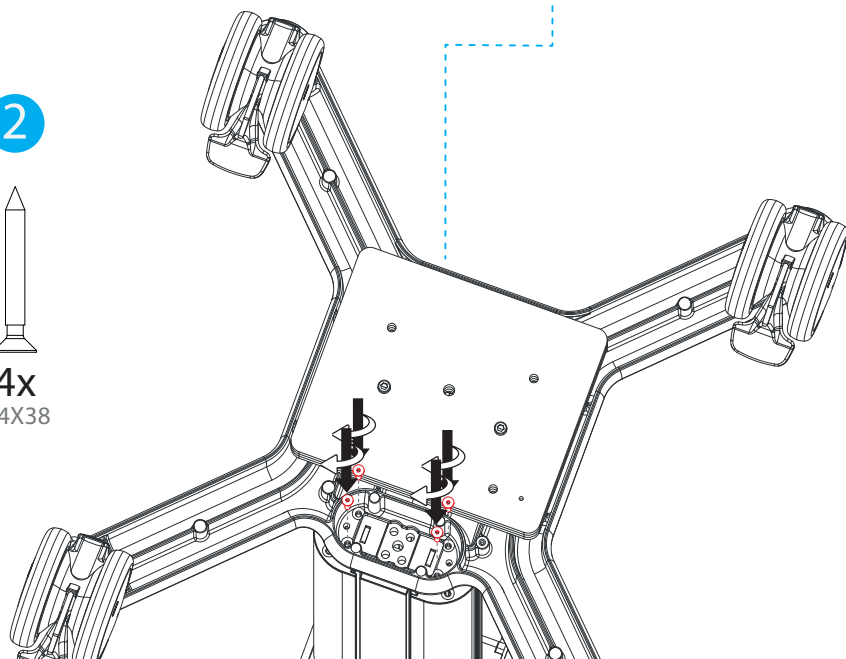


3

2x M6X14
2x M8x16

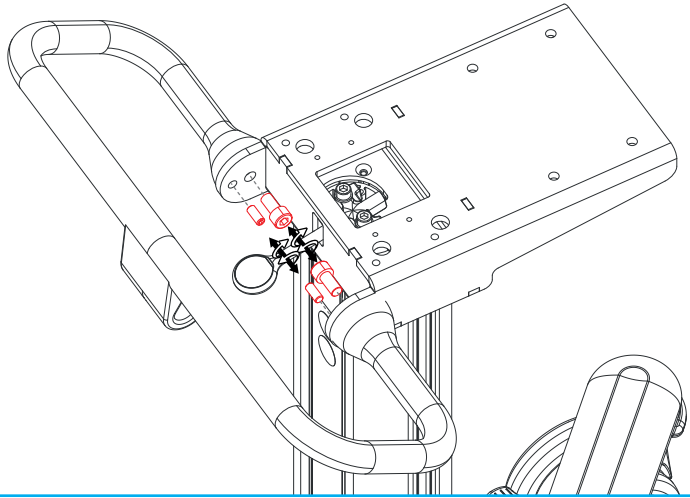

4

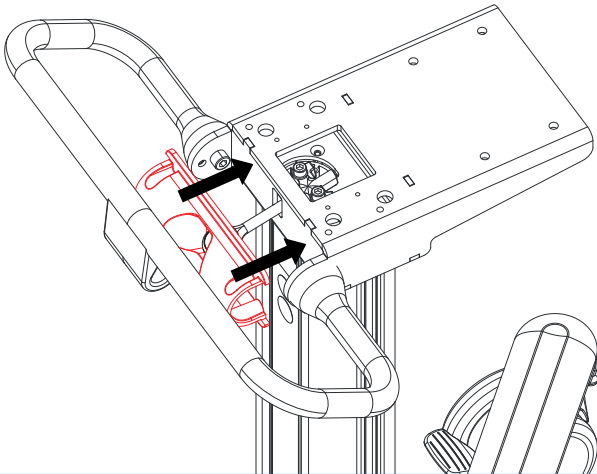


5




4x

M4X10

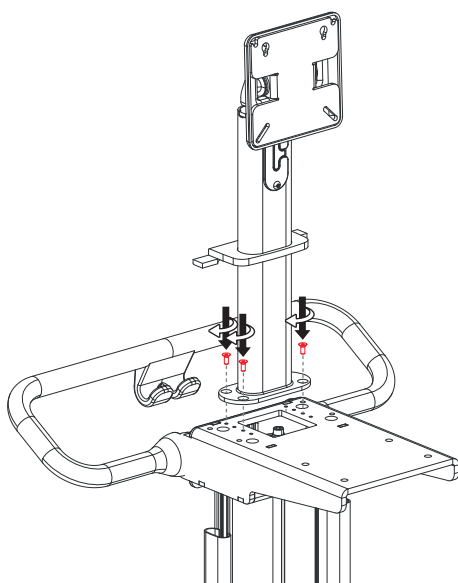


6

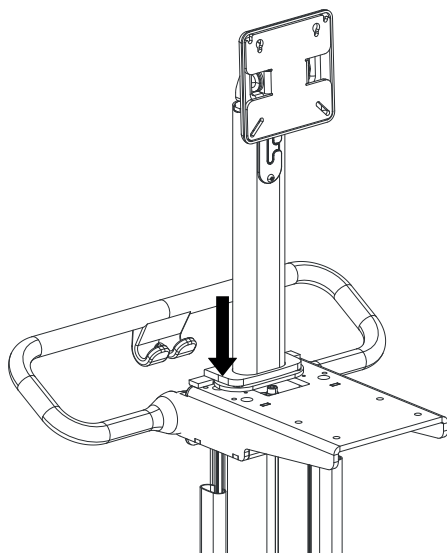

7




4x
M6X10




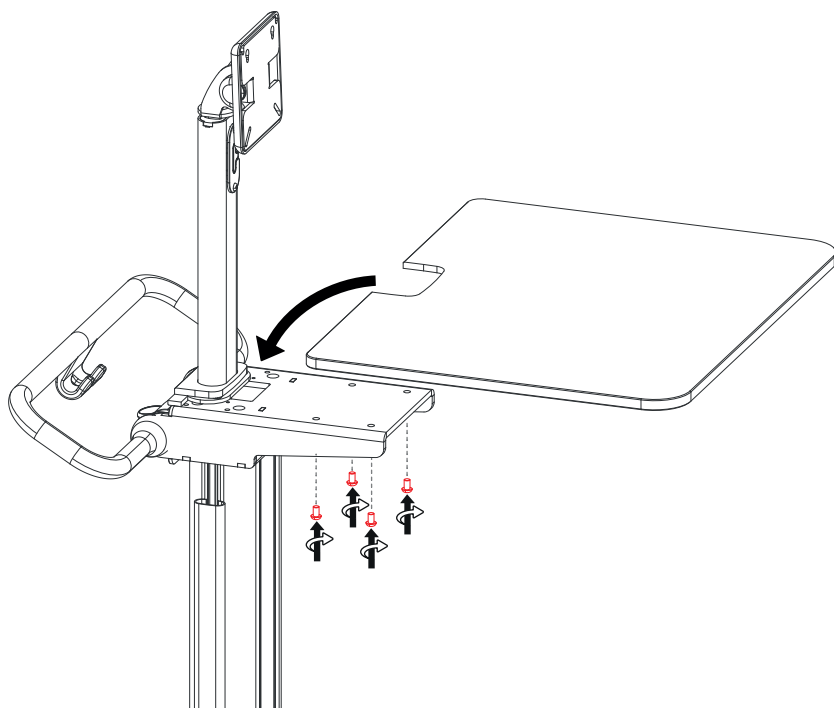


8




2x
M4X6

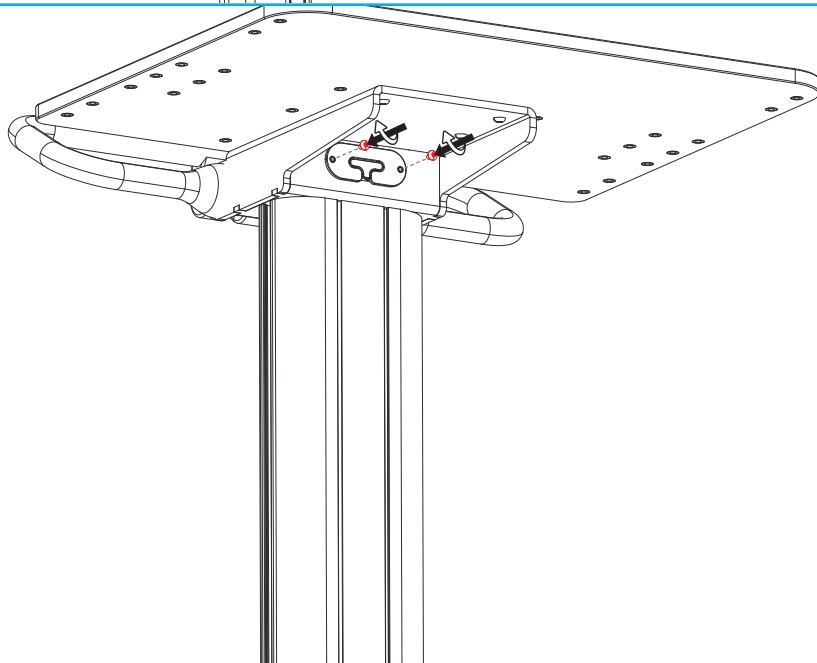


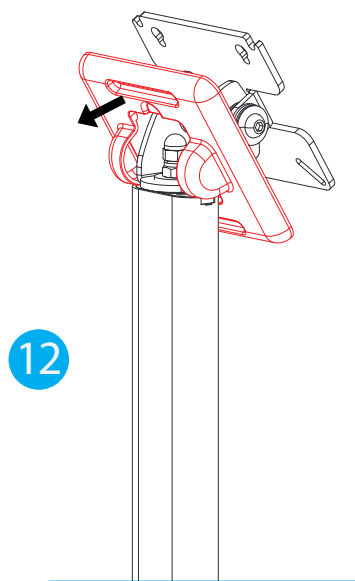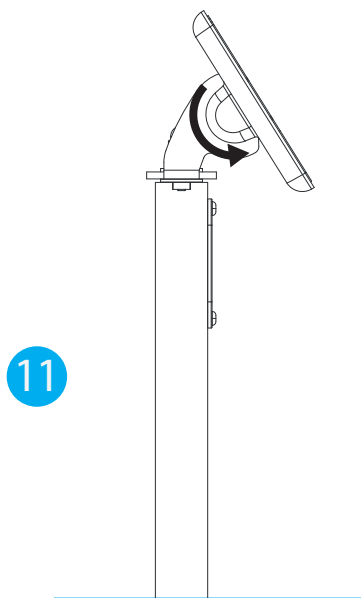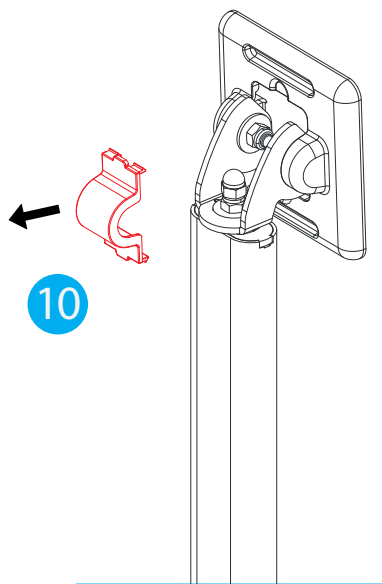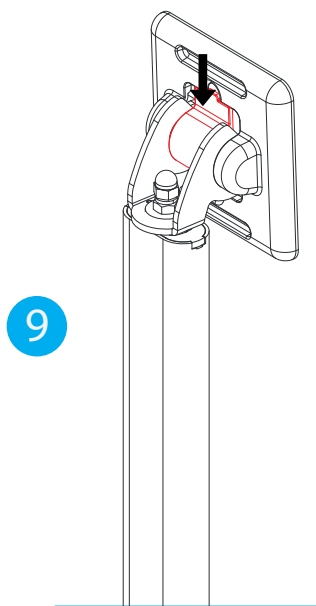

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA 032MLTACC - SHELF

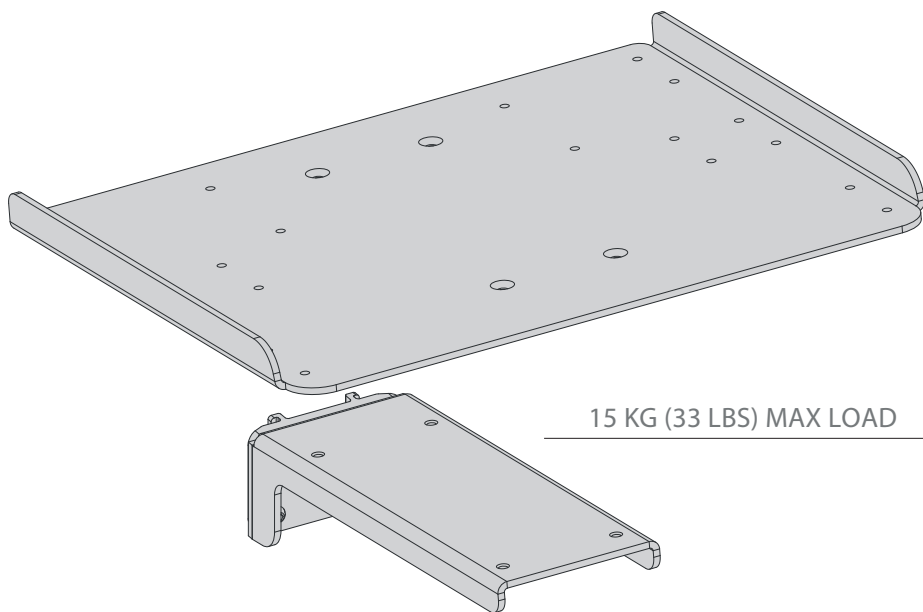

4x
M6X8

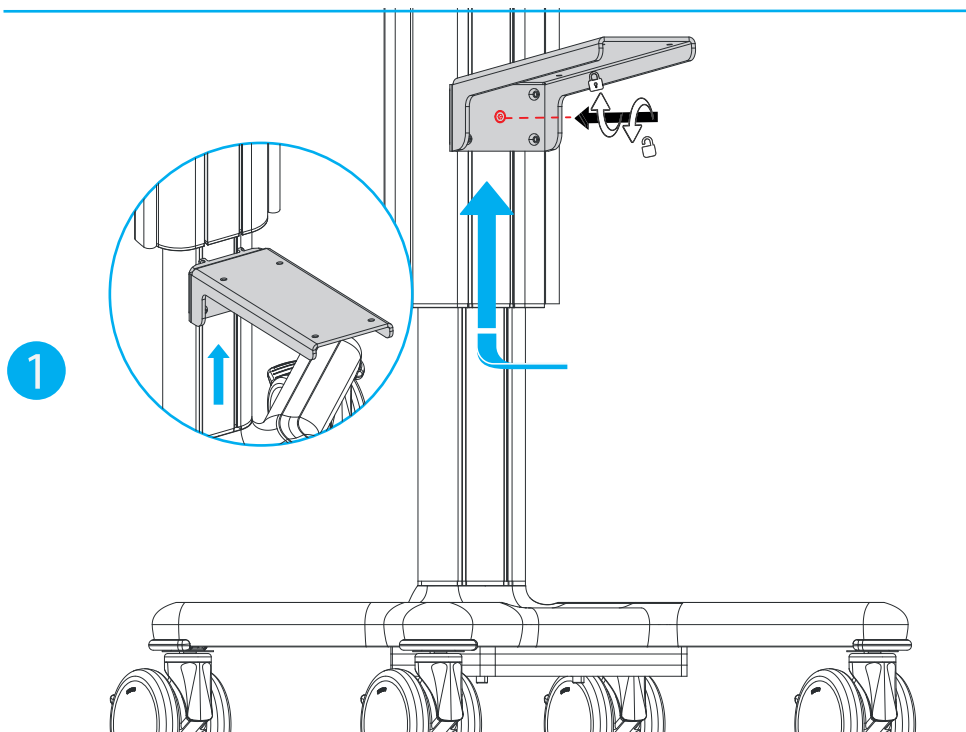



2



4x

M6X8

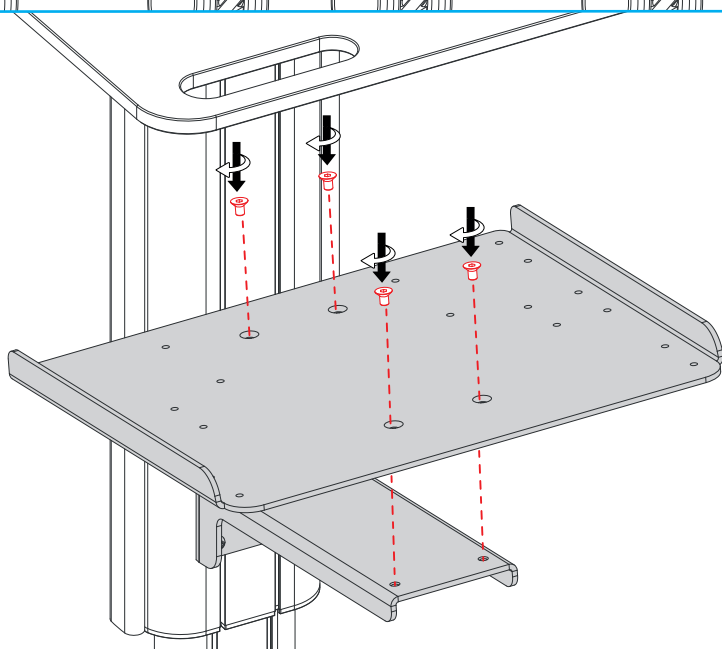

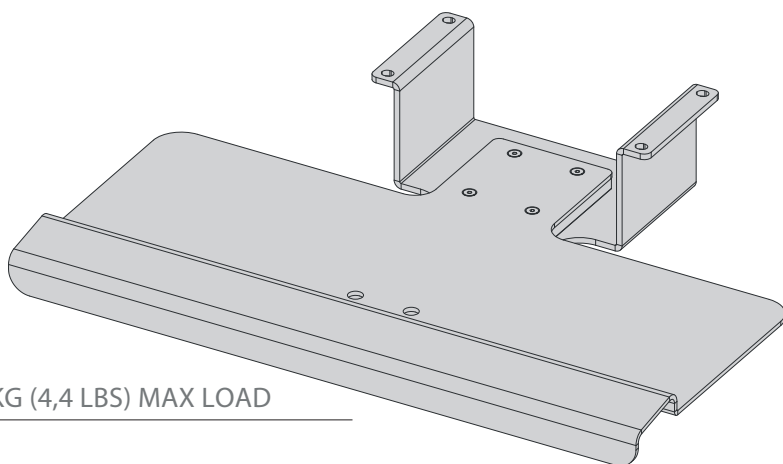



4x
M6X8

1



4x
M6X8

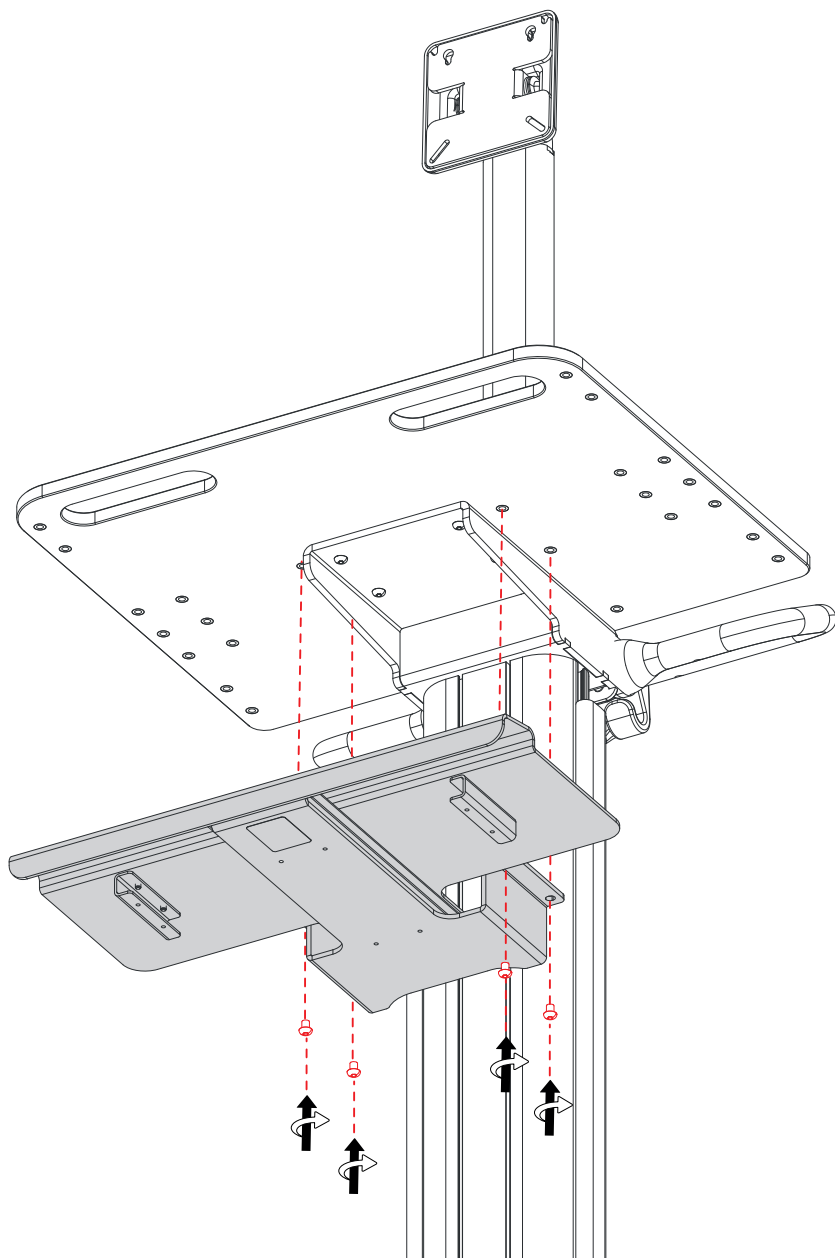

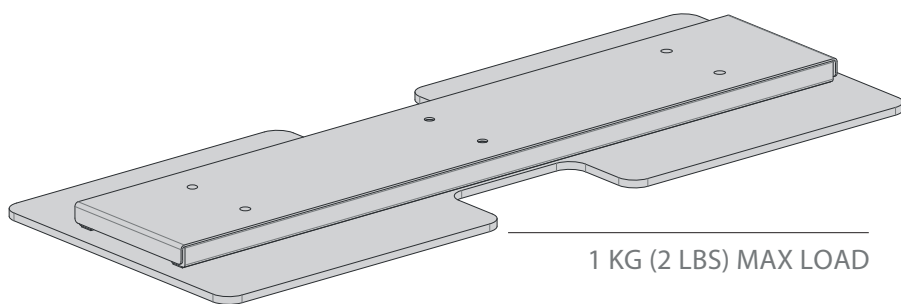


4x
M4X8

1




2x
M4X8

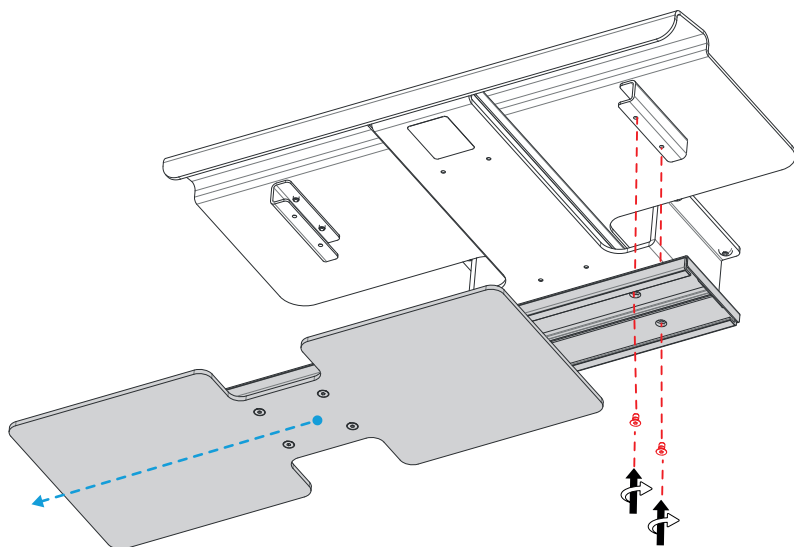

2



2x
M4X8

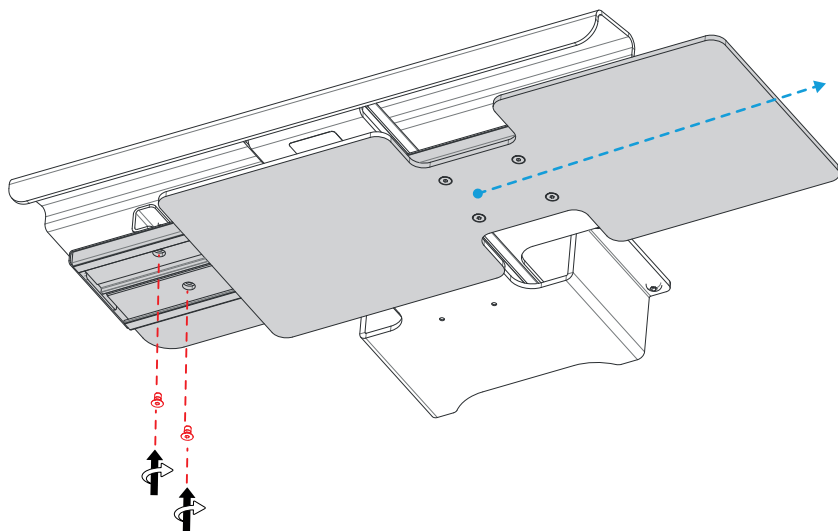

Svarīgi paziņojumi



Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

X1 TALL ratiņi ļauj transportēt ierīci un tās piederumus starp terapijas punktiem slimnīcā un ierobežotas aprūpes iestādēs.

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS PIENĀKUMI

- Pirms lietošanas ir jāizlasa ratiņu lietošanas instrukcija.
- Saglabājiēt norādījumus turpmākai atsaucei.
- Produkts tika radīts tikai lietošanas instrukcijā minētajām metodēm. Jebkāda cita izmantošana ir uzskatāma par neatbilstošu.
- Par nepareizas ratiņu lietošanas rezultātā nodarītiem bojājumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas ratiņu lietošanas rezultātā, garantija tiek nekavējoties anulēta.
- **Multix Solutions nav atbildīgs par kaitējumu personām un/vai lietām, kas radies nepareizas lietošanas dēļ.**
- Ja **ierīce ir** uzstādīta uz ratiņiem, **sistēmas uzstādītājs ir** atbildīgs par to, lai sistēma atbilstu spēkā esošajiem piemērojamajiem standartiem, EN 60601-1 pašreizējai versijai.



VISPĀRĪGS BRĪDINĀJUMS UN PIESARDZĪBA

Ratiņa drošība ir garantēta, rūpīgi ievērojot turpmāk sniegtos brīdinājumus:

- Pārliecinieties, ka grozs atbilst ilustrācijai rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tas nav salauzts vai bojāts.
- Pārbaudiet, vai kustīgās un bloķējošās daļas, piemēram, riteņi, bremzes un (ja ir) gāzes atspere, darbojas.
- Kad sistēma un tās piederumi ir samontēti, visi četri ratiņu riteņi ir jānofiksē.
- Ja ratiņi netiek darbināti, pārliecinieties, ka ratiņu riteņi ir bloķēti un sistēma nav novietota uz nelīdzenas virsmas.
- Pirms ratiņi tiek stumti, visiem ratiņu riteņiem jābūt atbloķētiem.
- Lai novērstu ratiņu apgāšanos, rokturis ir jātur, ja ratiņi brauc pāri šķēršļiem (piemēram, elektrības vadiem).
- Izvairieties no pārmērīga spēka, stumjot ratiņus.
- Šajā ierīcē nav atļauts veikt nekādas izmaiņas.




ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- **IR AIZLIEGTS SĒDĒT UZ RATINIEM.**
- **STUMŠANA AIZLIEGTA, JA RITENI IR BLOKĒTI**
- Ievērojiet maksimālās slodzes, kas norādītas sadaļā “transportēšanas pozīcija un virziens”.
- **Pārliecinieties, ka uzstādītās konfigurācijas kopējais svars (kopā ar piederumiem) nepārsniedz kopējo svaru, kas norādīts uz etiķetes, kas piestiprināta pie ratiņiem, un nākamajā lapā.**

TRANSPORTEŠANAS POZĪCIJA UN VIRZIENS

Transportēšanas laikā ratiņi jānolaiž līdz gāzes atsperes galam, turot rokturi vērstu uz priekšu, kā parādīts attēlā zemāk:

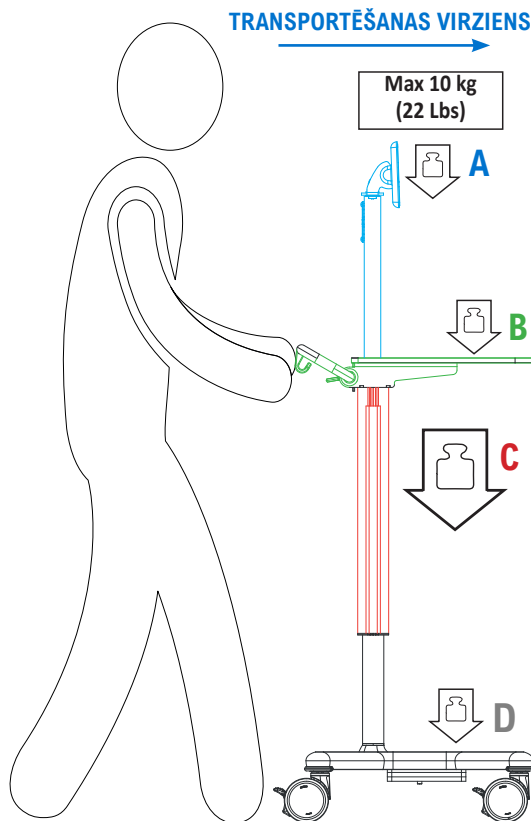

Maksimālā slodze

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



UZMONTĒTĀS KONFIGURĀCIJAS
MAKSIMĀLĀ KOPĒJĀ SĒJA
(= ratiņi + piederumi + droša darba
slodze)

Kopējais svars = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + ratiņu svars

Ratiņu svars = 29kg (63.9 Lbs)

Maksimālā slodze (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maksimālā slodze D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - ratiņu svars (29kg) - (A+B+C)*

*Ja ratiņu kustīgajai daļai (A + B + C) pieliktā slodze nesasniedz norādīto maksimālo slodzi, ratiņu stacionārajai daļai (D) ir iespējams pielikt lielāku slodzi nekā norādīts, nepārsniedzot maksimālo kopējo svaru.

Pielikums



Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).

UZTURĒŠANA

Ik pēc 6 mēnešiem pārbaudiet visus stiprinājuma punktus un mehānismus. Izstrādājums ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās.

TĪRĪŠANA

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka produkts ir iztīrīts un dezinficēts saskaņā ar lietošanas prasībām.

Regulāri tīriet metāla un/vai plastmasas virsmas ar nekaitīgiem, neitrāla pH mazgāšanas līdzekļiem un drānu/spūnu/suku ar mīkstiem sariem.

Nelejiet tieši uz virsmām šķidrums, uz hlora vai amonjaka bāzētus mazgāšanas līdzekļus, taukainas un eļļainas vielas.

REZERVES DAĻAS

Par rezerves daļām vērsieties pie ierīces izplatītāja (skatīt sadaļu “Kontakti”).

KALPOŠANAS LAIKS UN IZNĪCINĀŠANA

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir 10 gadi.

Groz un iepakojums jāiznīcina saskaņā ar vietējiem vai valsts tiesību aktiem.

kartona kaste un iekšējie stiprinājumi	iekšējais iepakojums
KARTONS	ZEMA BLĪVUMA POLIETILĒNS

SIMBOLU GLOSĀRIJS

Ratiņā vai instrukcijā ir norādīti šādi simboli:



Uzmanību



Ekspluatācijas instrukcija



Mediska ierīce



Mitruma iero-bežojums



Saglabāt sausu



Aizliegts sēdēt uz ratiem



kopējā masa



CE marķējums



Ražotājs



Partijas kods



Orientācija



Sargāt no saules gaismas



Stumšana aizliegta



Unikāls ierīces identifikators



Kataloga numurs



Produkta numurs



Ražošanas datums



Trausls, rokturis uzmanīgi



Temperatūras iero-bežojums



Izplata



Maksimalkuorma

Izplatītājs: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Ražotājs: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com