

Návod na použitie




INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Po inštalácii poskytnite konečnému používateľovi
návod na používanie.


Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov
na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

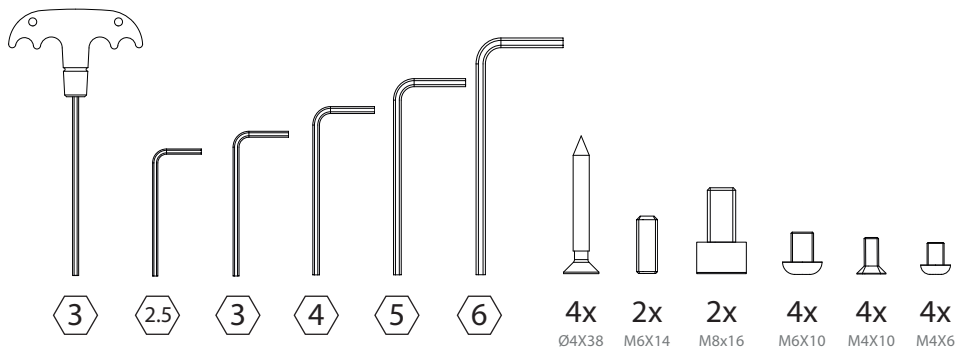


MONTÁŽNY NÁVOD

- ! Ak je súčasťou dodávky príslušenstvo, pred zostavením vozíka skontrolujte
• návod na použitie.

1

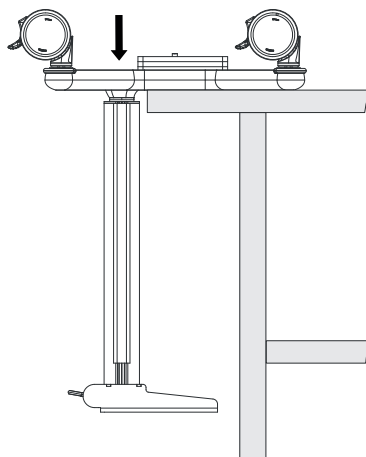


2

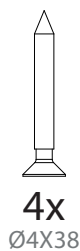


3

2x M6X14
2x M8x16

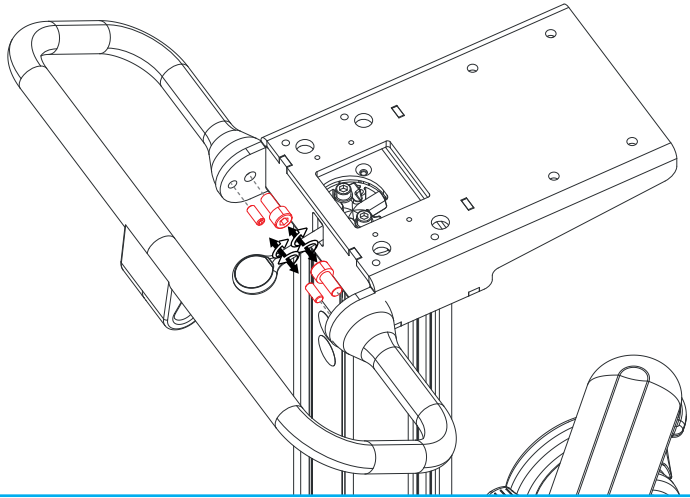


4

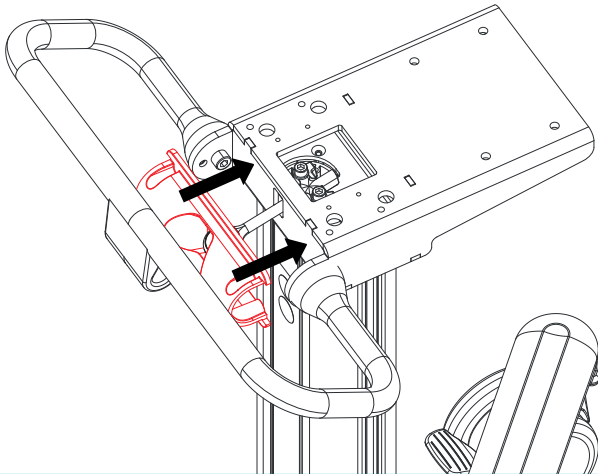


5



4x
M4X10

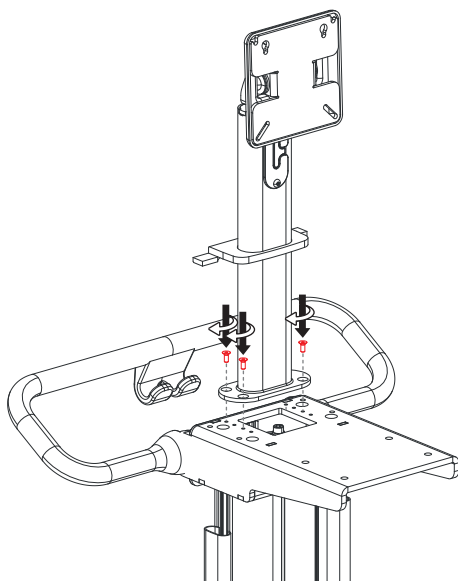


6

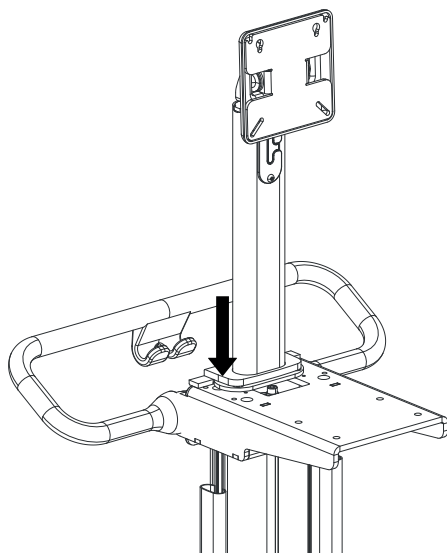

7




4x
M6X10




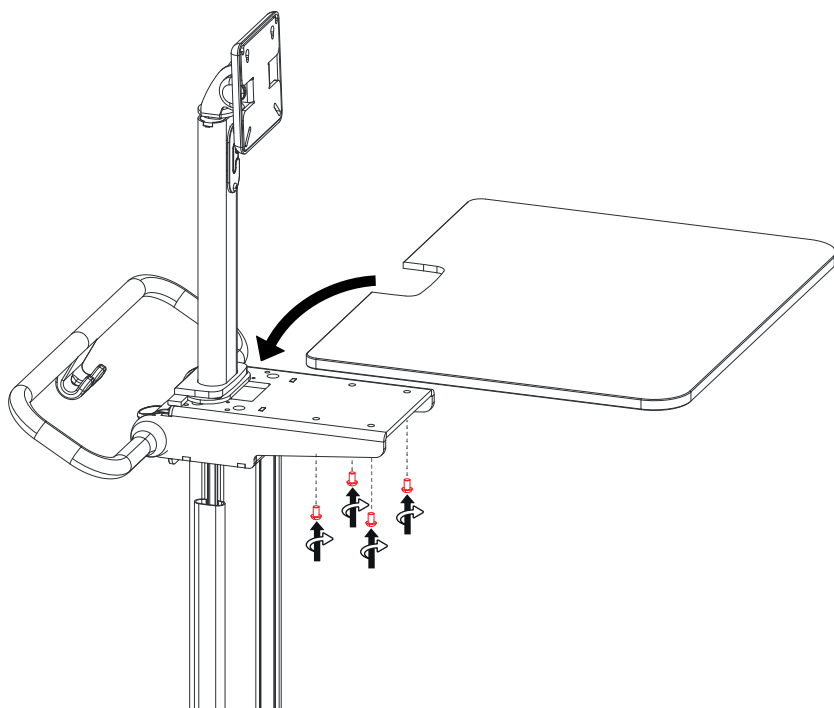


8




2x
M4X6

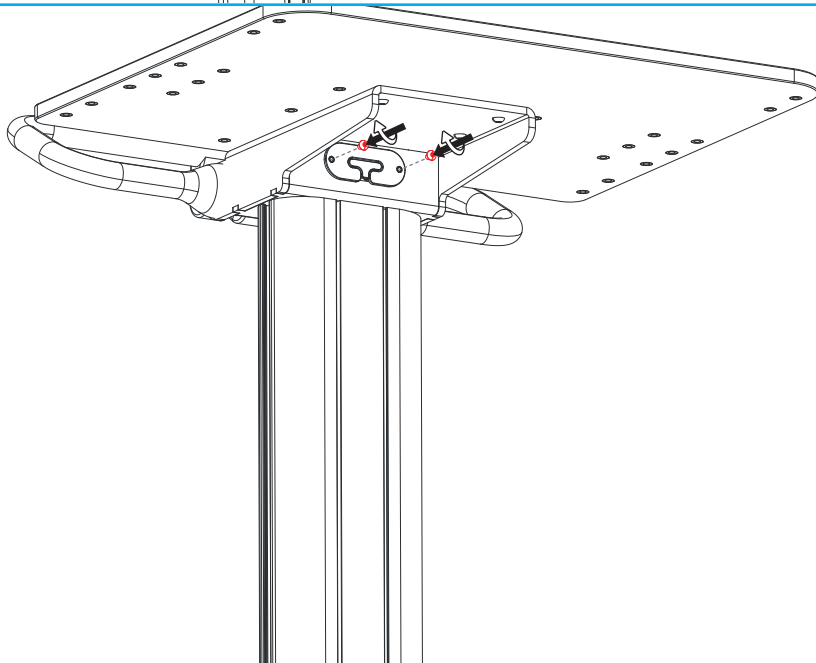


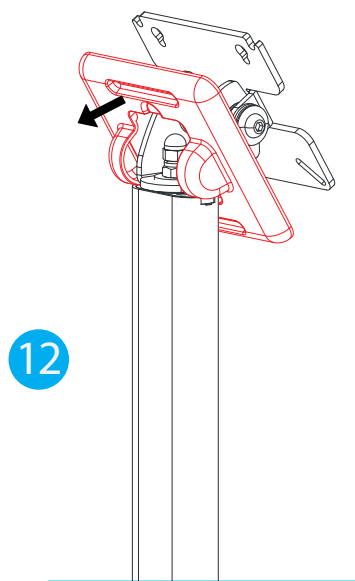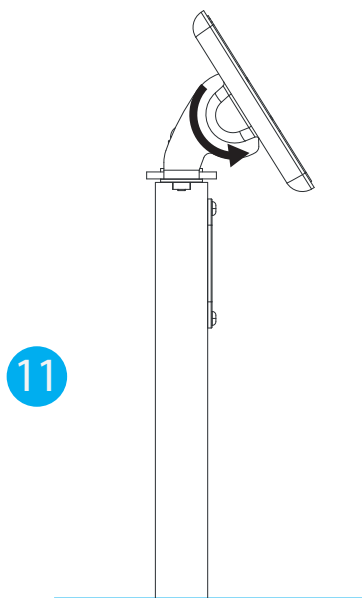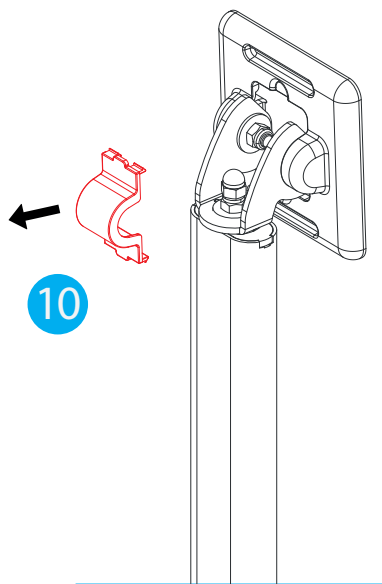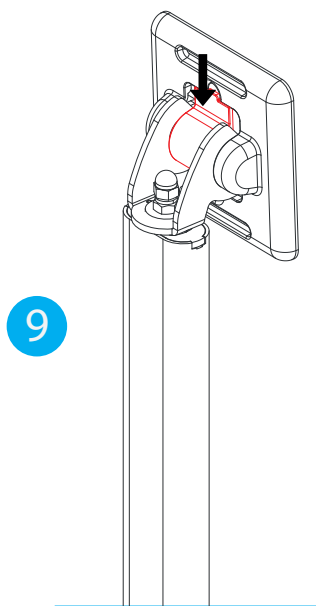

MONTÁŽNY NÁVOD 032MLTACC - SHELF

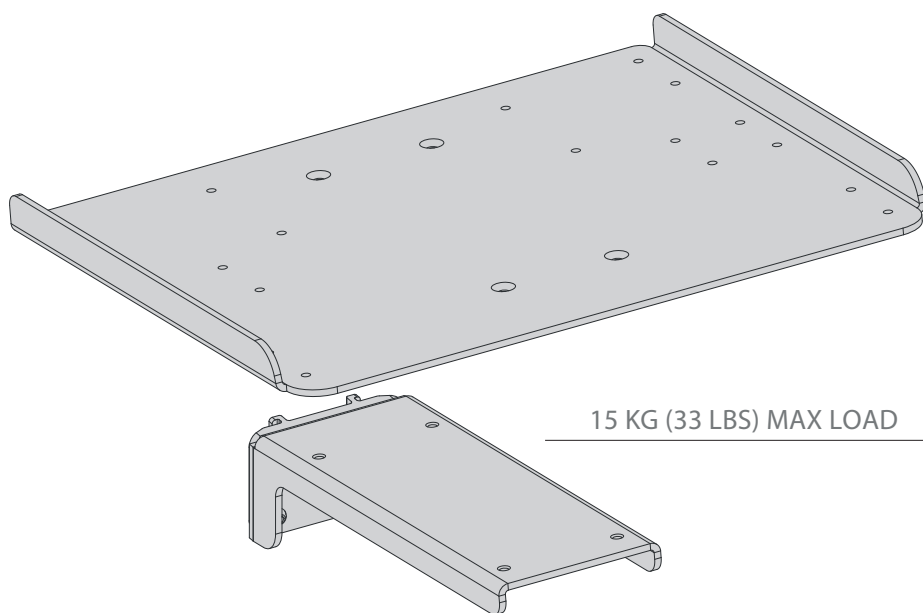


4x
M6X8

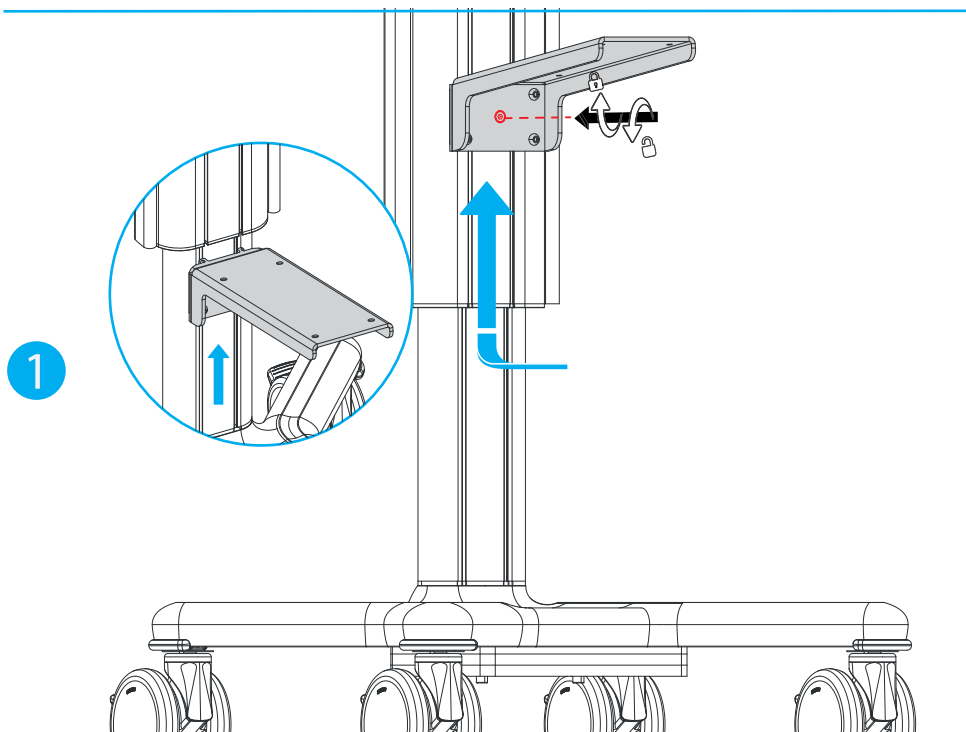


2



4x
M6X8

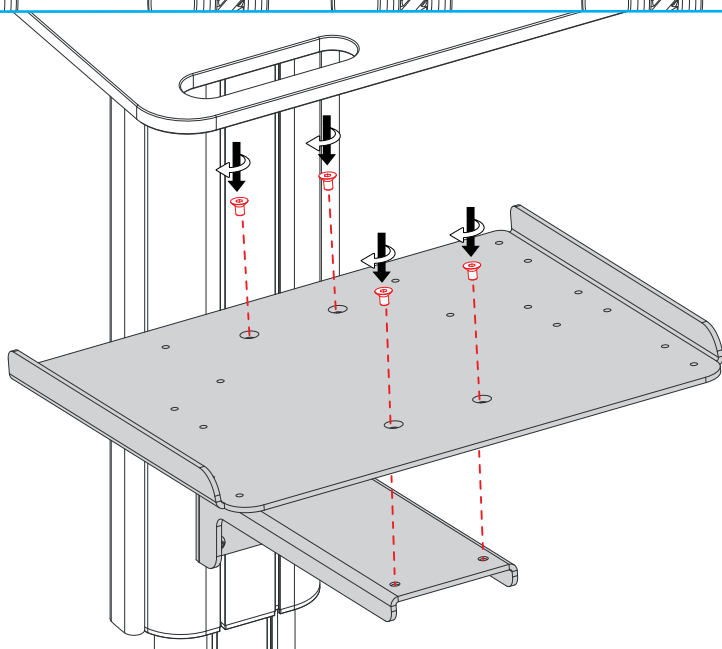

MONTÁŽNY NÁVOD 025MLTACC - QWERTY SUPPORT

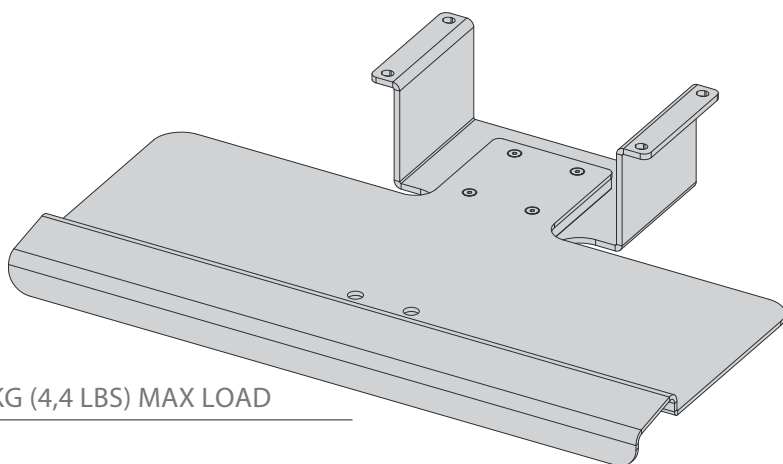


4x
M6X8


1



4x
M6X8

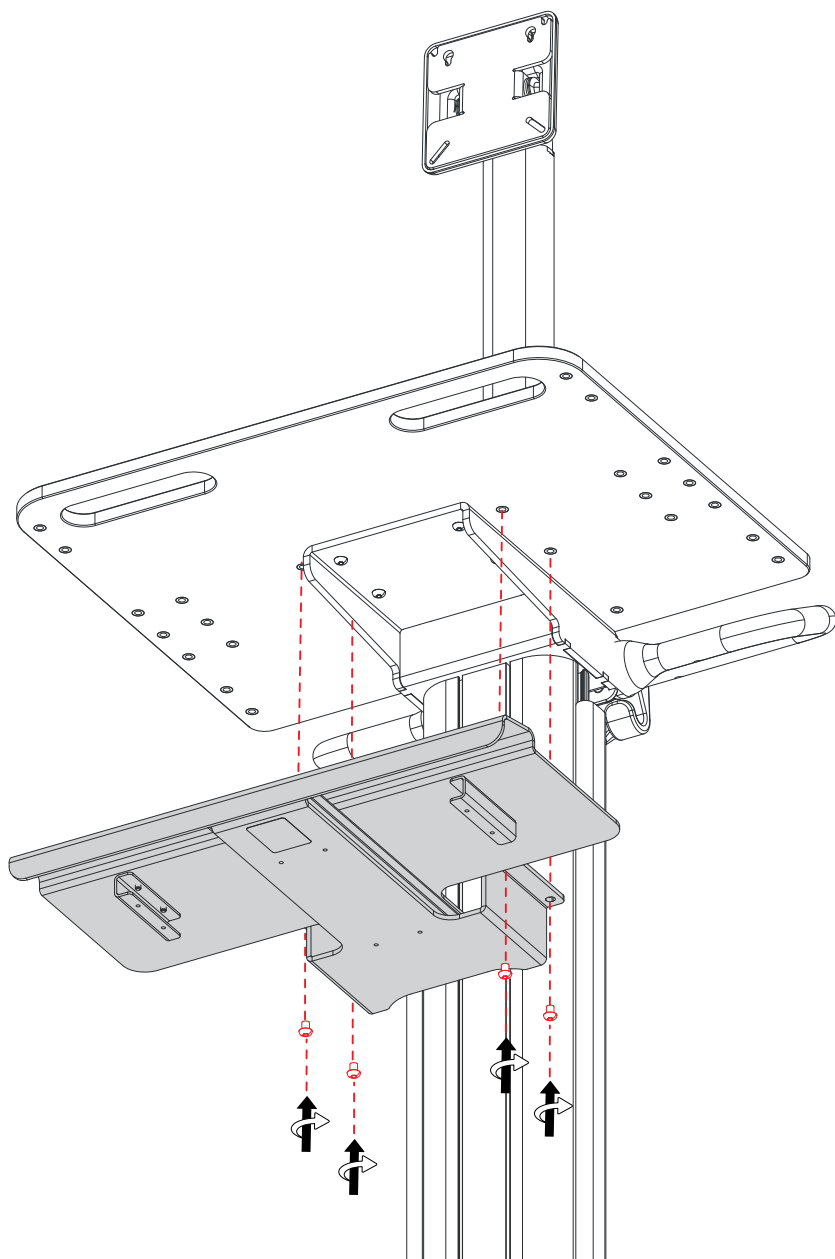

MONTÁŽNY NÁVOD 017MLTACC - L-R MOUSEPAD

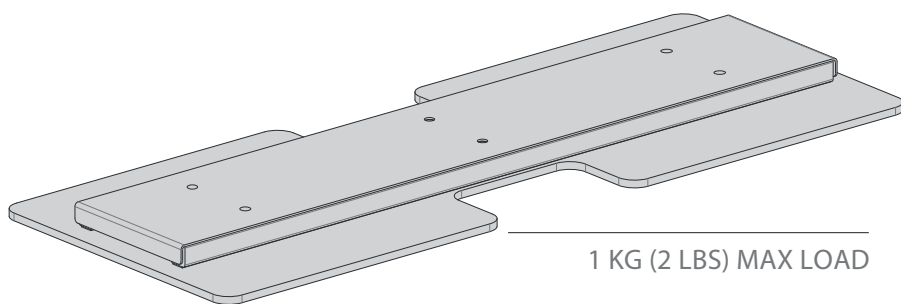


4x
M4X8

1




2x
M4X8

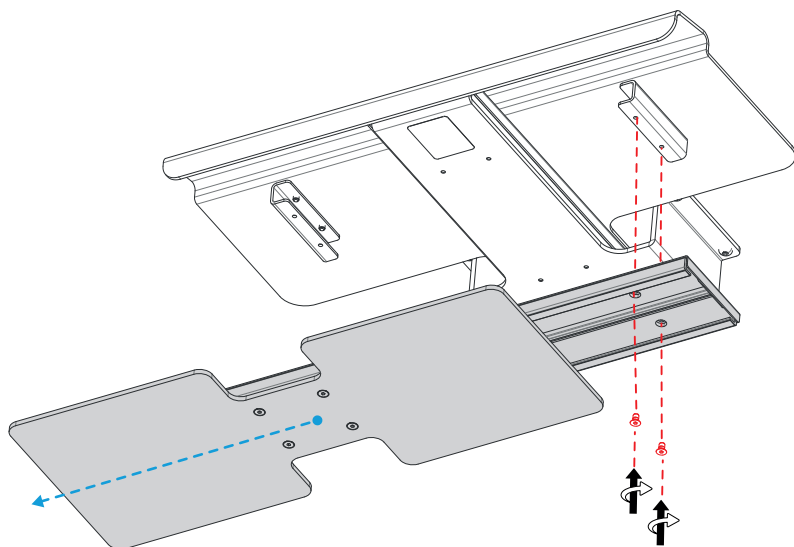

2



2x
M4X8

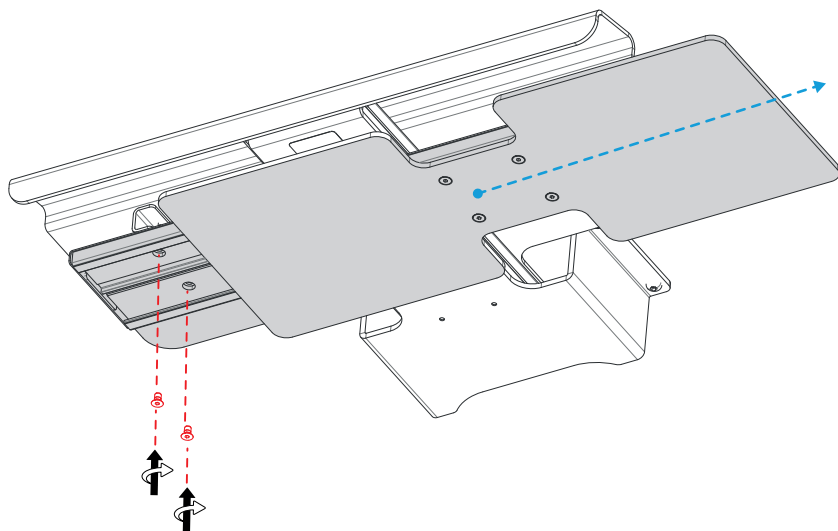

Dôležité upozornenia



Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

URČENÉ POUŽITIE

Vozík X1 TALL umožňuje prepravu **prístroja a jeho príslušenstva** medzi miestami terapie v nemocničnom prostredí a v prostredí zariadení s obmedzenou starostlivosťou..

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POVINNOSTI

- Pred použitím je potrebné prečítať si návod na používanie vozíka.
- Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Výrobok bol vytvorený výlučne pre metódy uvedené v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Manipulácia alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním vozíka vedie k okamžitému prepadnutiu záruky.
- **Spoločnosť Multix Solutions nezodpovedá za škody na osobách a/alebo veciach spôsobené nesprávnym používaním.**
- Ak je **zariadenie** namontované na vozíku, **inštalatér systému je povinný** zabezpečiť, aby systém vyhovoval aktuálnym platným normám EN 60601-1 v aktuálnej verzii.



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE A VÝSTRAHA

Bezpečnosť vozíka je zaručená dôsledným dodržiavaním nižšie uvedených upozornení:

- Uistite sa, že vozík zodpovedá obrázku v príručke.
- Skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodil alebo nerozbil.
- Skontrolujte, či sú pohyblivé a blokovacie časti, ako sú kolesá, brzdy a plynová pružina (ak je prítomná), funkčné.
- Po zostavení systému a jeho príslušenstva musia byť všetky štyri kolesá vozíka zablokované.
- Ak vozík nie je poháňaný, zabezpečte, aby boli kolesá vozíka zablokované a aby systém nebol zaparkovaný na nerovnom povrchu.
- Pred tlačением vozíka sa musia odblokovať všetky kolesá vozíka.
- Aby sa zabránilo prevráteniu vozíka, je potrebné držať rukoväť, ak vozík prechádza cez prekážky (napríklad elektrické káble).
- Pri tlačení vozíka nepoužívajte nadmernú silu.
- Na tomto zariadení nie sú povolené žiadne zmeny.




POKYNY NA NAČÍTANIE

- **JE ZAKÁZANÉ SEDIET NA VOZÍKU**
- **ZÁKAZ TLAČIŤ, KEĎ SÚ KOLESÁ ZABLOKOVANÉ**
- Dodržiavajte maximálne zaťaženie uvedené v časti “poloha a smer prepravy”.
- **Uistite sa, že celková hmotnosť namontovanej konfigurácie (spolu s príslušenstvom) nepresahuje celkovú hmotnosť uvedenú na štítku nalepenom na vozíku a na nasledujúcej strane.**

Dôležité upozornenia

PREPRAVNÁ POLOHA A SMER

Počas prepravy musí byť vozík spustený až po koniec plynovej pružiny , pričom drží chod rukoväte smerom dopredu, ako je znázornené na obrázku nižšie:

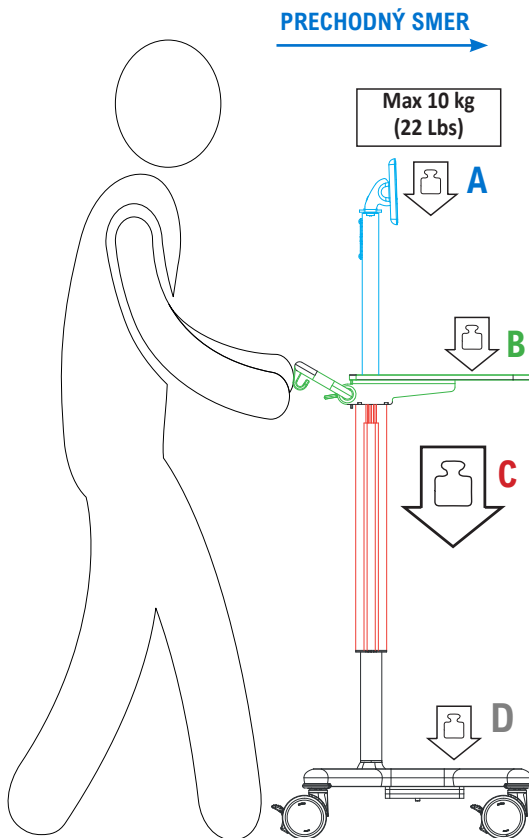

Max. zaťaženie

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



MAXIMÁLNA CELKOVÁ HMOTNOSŤ
MONTOVANEJ KONFIGURÁCIE
(= vozík + príslušenstvo + bezpečné
pracovné zaťaženie)

Celková hmotnosť = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + Hmotnosť vozíka

Hmotnosť vozíka = 29kg (63.9 Lbs)

Max. zaťaženie (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Max. zaťaženie D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - Hmotnosť vozíka (29kg) - (A+B+C)*

*Ak zaťaženie pohyblivej časti vozíka (A + B+ C) nedosahuje uvedené maximálne zaťaženie, je možné na pevnú časť vozíka (D) aplikovať vyššie zaťaženie, ako je uvedené, bez prekročenia maximálnej celkovej hmotnosti.

Príloha



Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

ÚDRŽBA

Každých 6 mesiacov skontrolujte všetky upevňovacie body a mechanizmy. Výrobok je vhodný len na použitie vo vnútornom prostredí.

ČISTENIE

Uistite sa, že výrobok je pred použitím vyčistený a vydezinfikovaný podľa požiadaviek na použitie. Kovové a/alebo plastové povrchy pravidelne čistite nekorozívnymi čistiacimi prostriedkami s neutrálnym pH a handričkou/hubou/štetcom s mäkkými štetinami. Nelejte priamo na povrchy tekuté, chlórové alebo amoniakové čistiace prostriedky, masťné a olejové látky.

NÁHRADNÉ DIELY

Náhradné diely nájdete u distribútora zariadenia (pozri časť Kontakt).

ŽIVOTNOSŤ A LIKVIDÁCIA

Životnosť výrobku je 10 rokov.

Vozík a obal sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi alebo vnútroštátnymi predpismi.

kartónová krabica a vnútorné výstupy	vnútorné balenie
KARTÓNOVÁ KRABICA	POLYETYLÉN S NÍZKOU HUSTOTOU

SLOVNÍK SYMBOLOV

Na vozíku alebo v návode sa uvádzajú tieto symboly:



Opatrnosť



Návod na obsluhu



Zdravotnícka pomôcka



Obmedzenie vlhkosti



Udržujte v suchu



Je zakázané sedieť na vozíku



Benďra mase



Označenie CE



Gamintojas



Batch kód



Orientácia



Vyhýbajte sa slnečnému žiareniu



Tlačenie zakázané



Unikátny identifikátor pomôcky



Katalógové číslo



Číslo produktu



Dátum výroby



Krehké, zaobchádzajte opatrne



Teplotný limit



Distribútor



Max. zaťaženie

Distribútor: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Vyrába: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com