




BRUKSANVISNING X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Vänligen lämna bruksanvisningen till slutanvändaren efter installationen.


Installation och underhåll måste utföras av kvalificerad teknisk personal och i enlighet med monterings- och underhållsinstruktionerna (se de särskilda avsnitten “Montering” och “Underhåll”) i denna bruksanvisning.

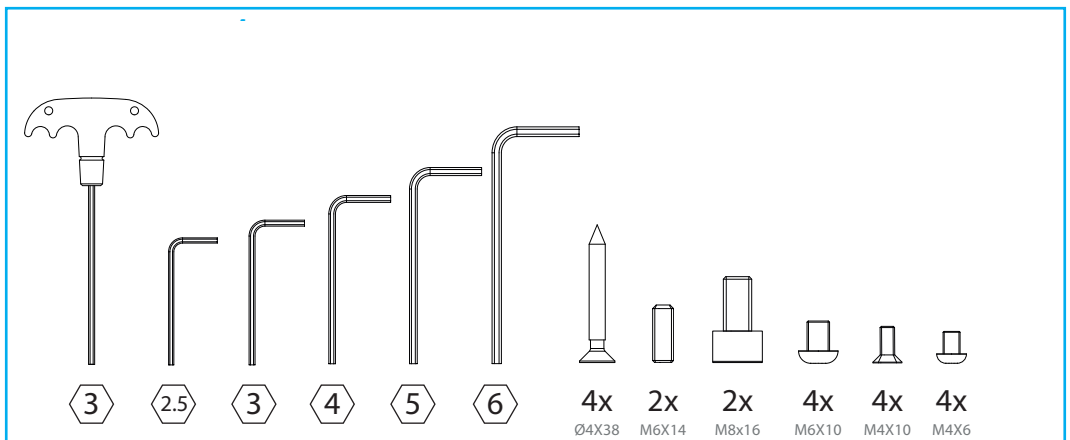


MONTERINGSANVISNING

! Om det finns tillbehör, se instruktionerna för dessa innan vagnen monteras

1

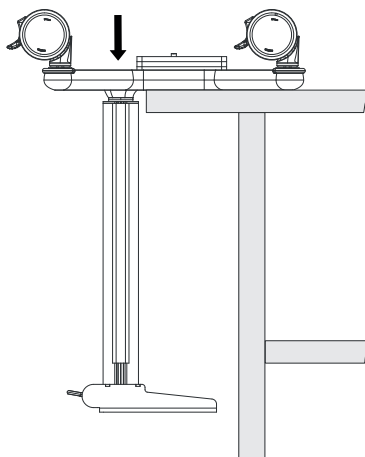


2

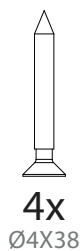


3

2x M6X14
2x M8x16

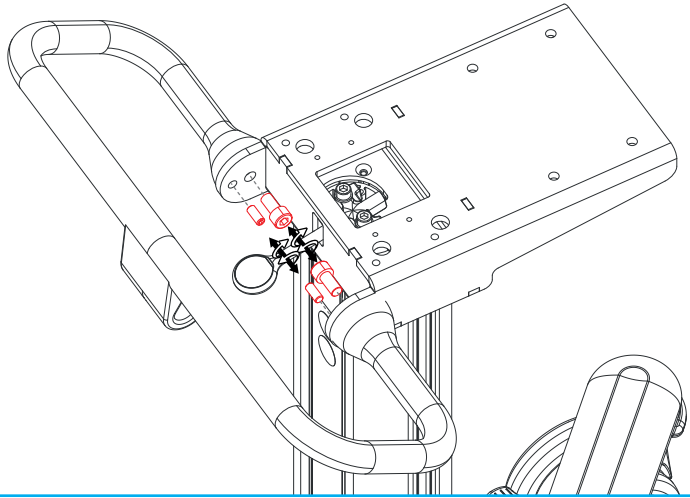


4

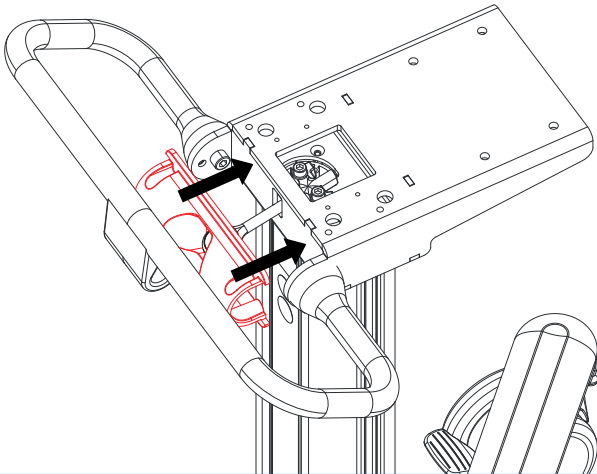


5



4x
M4X10

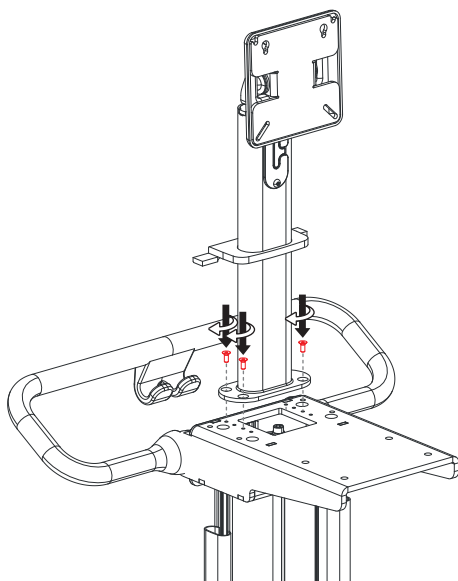


6

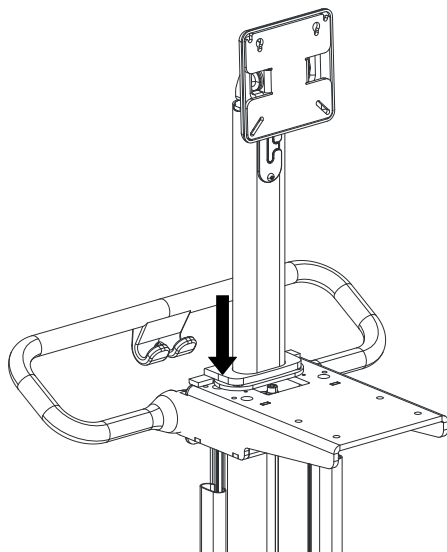

7




4x
M6X10




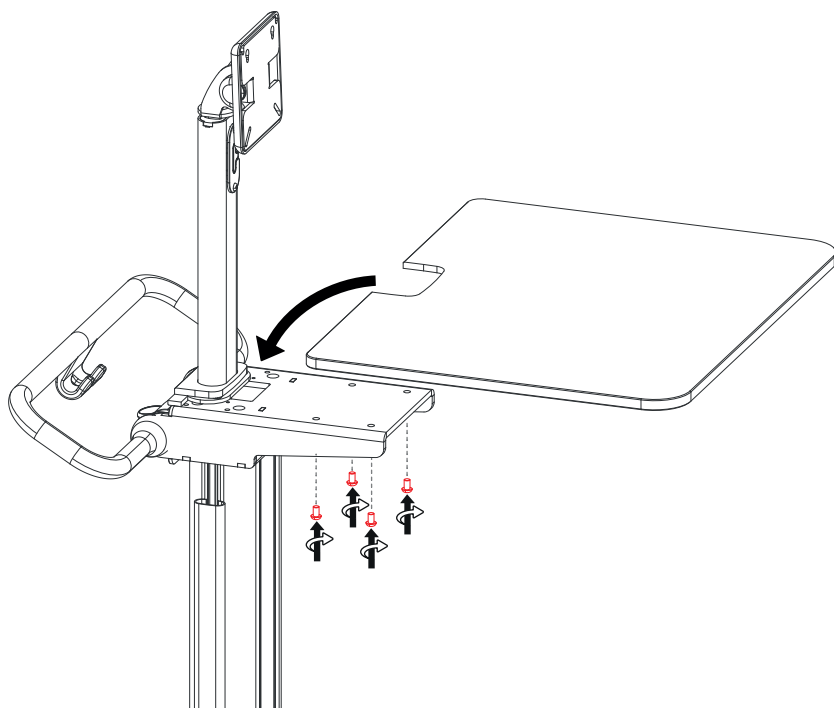


8




2x
M4X6

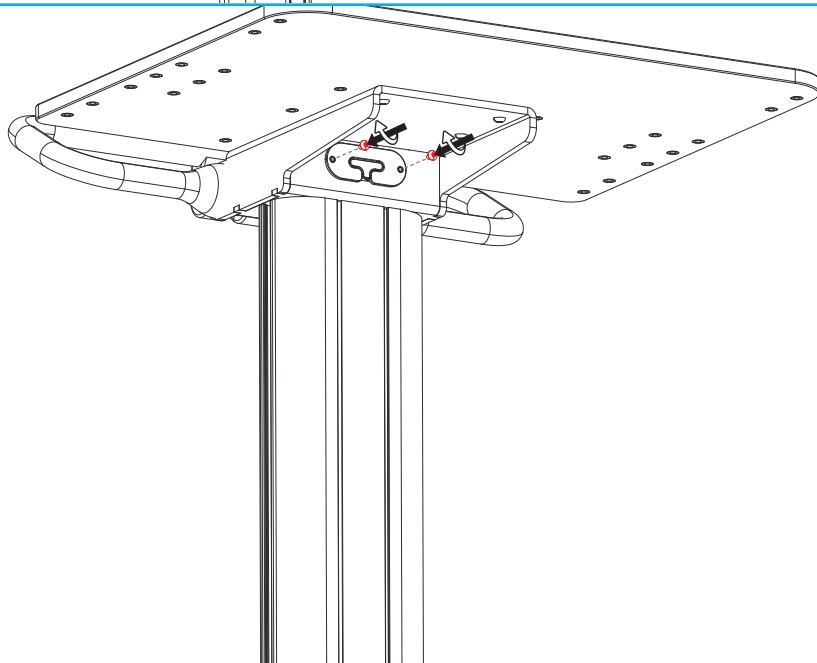

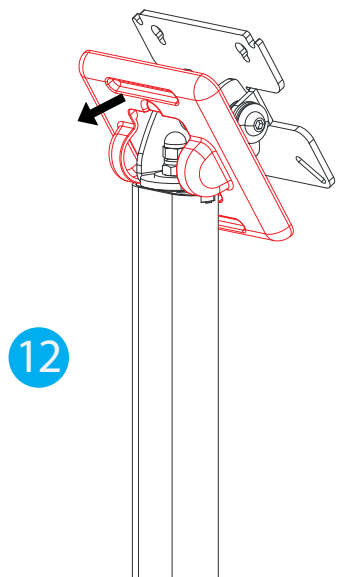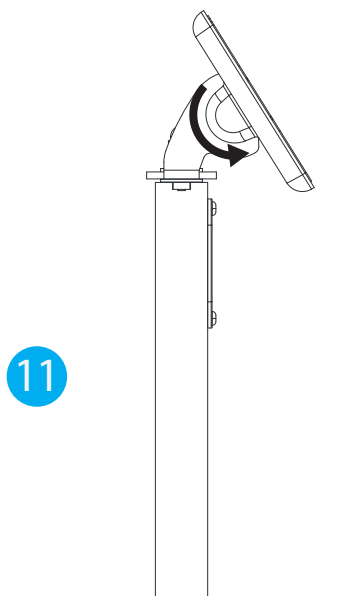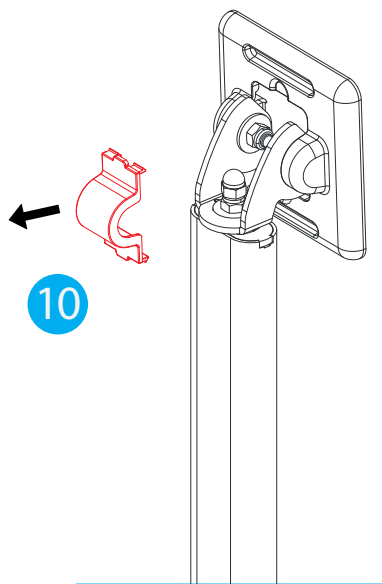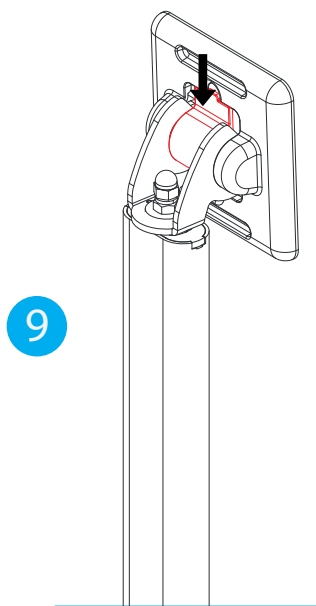

MONTERINGSANVISNING 032MLTACC - SHELF

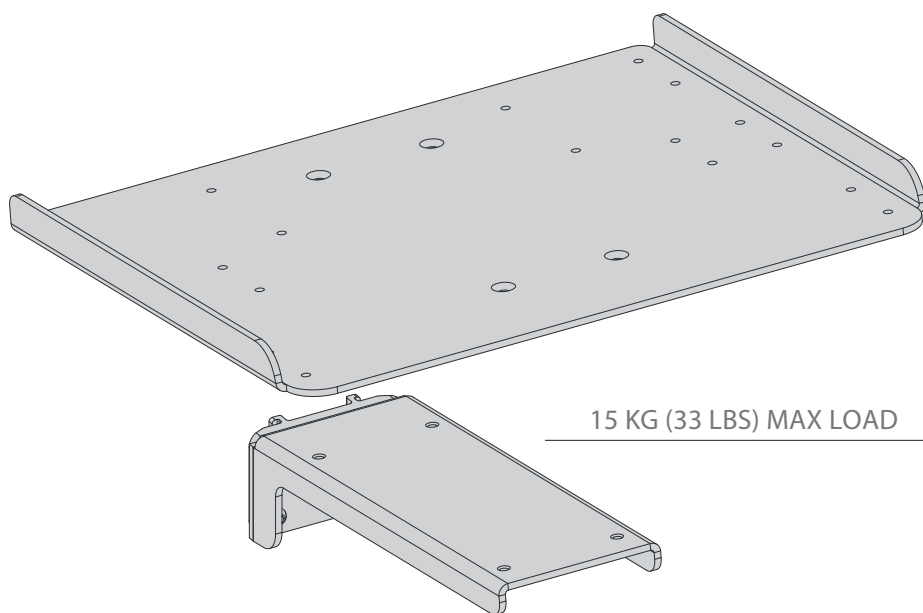


15 KG (33 LBS) MAX LOAD



4x


M6X8

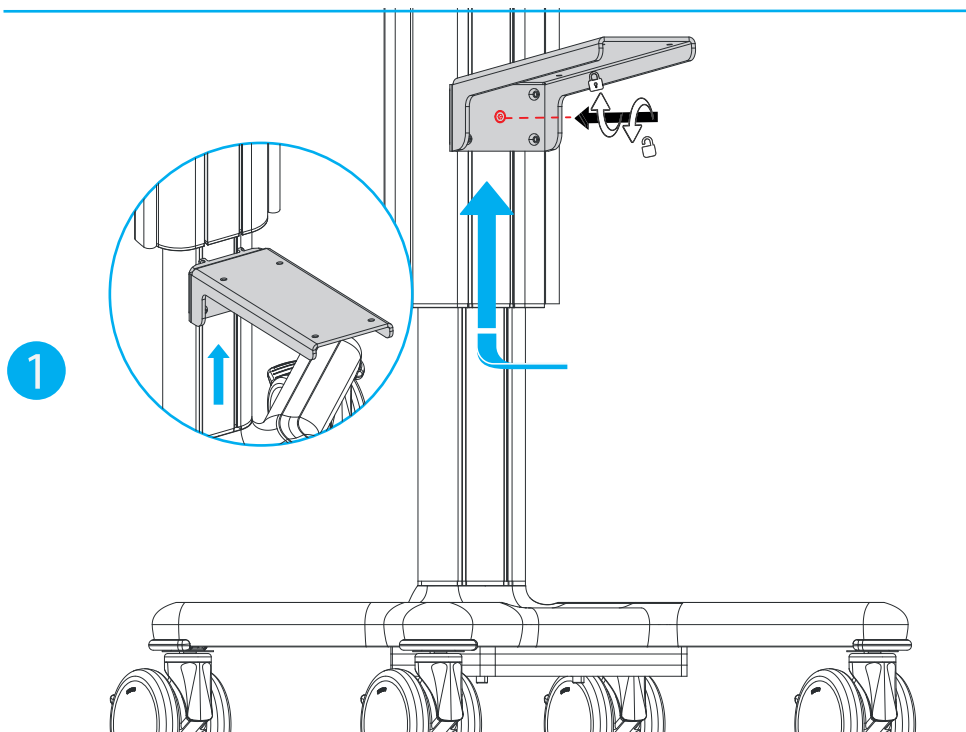


2



4x
M6X8

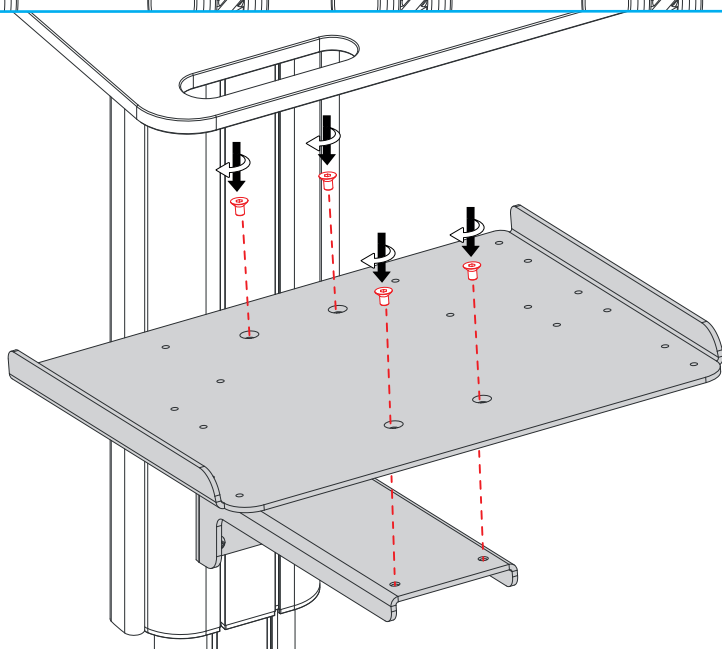

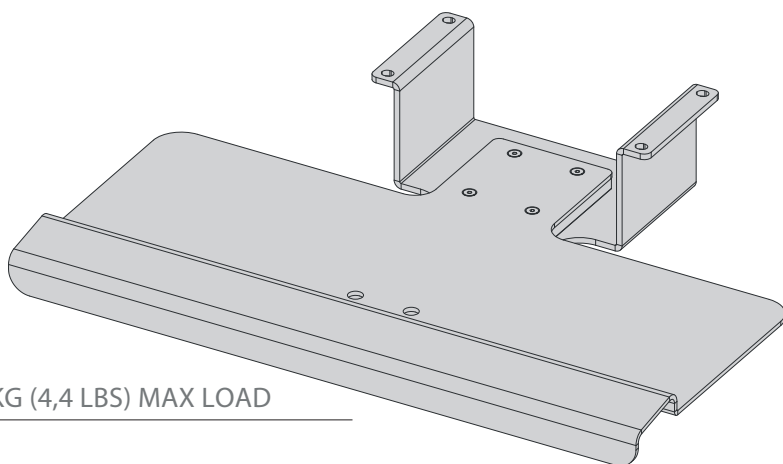



4x
M6X8

1



4x
M6X8

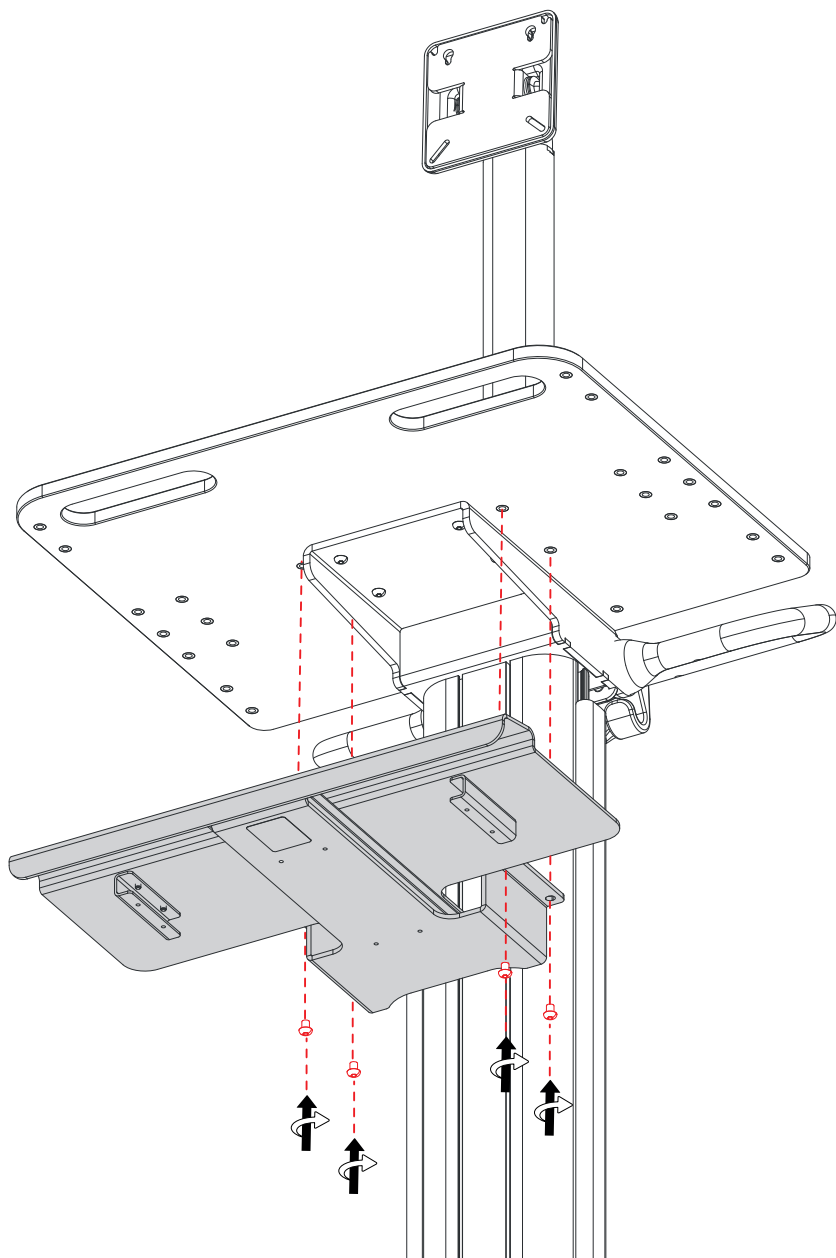

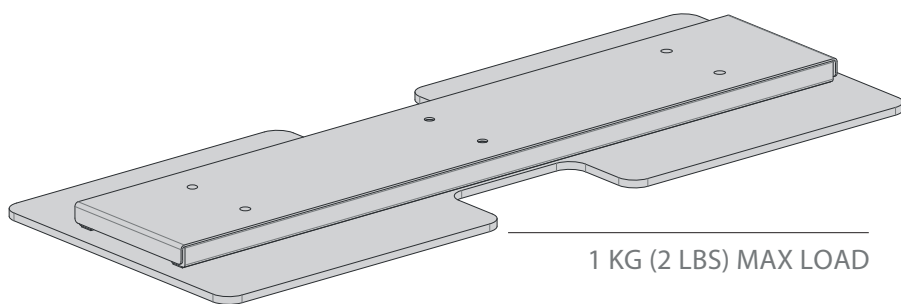


4x
M4X8

1




2x
M4X8

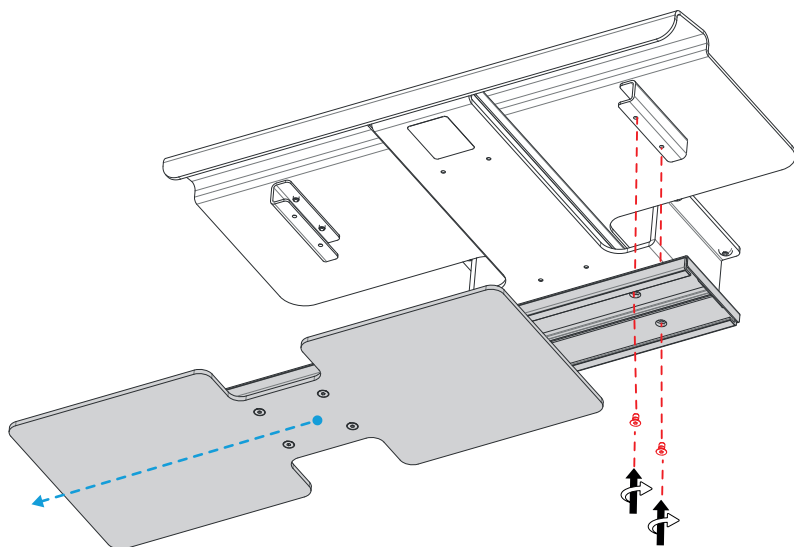

2



2x
M4X8

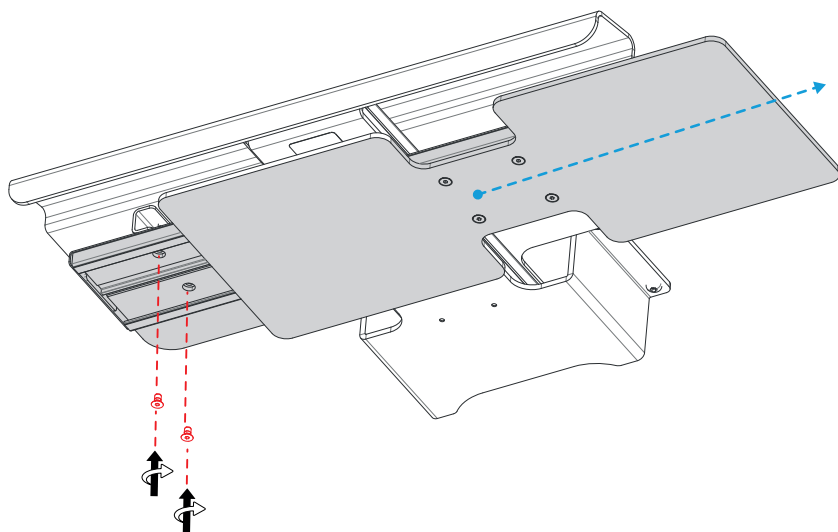

Viktiga meddelanden



Installation och underhåll måste utföras av kvalificerad teknisk personal och i enlighet med monterings- och underhållsinstruktionerna (se de särskilda avsnitten "Montering" och "Underhåll") i denna bruksanvisning.

AVSEDD ANVÄNDNING

Trolley X1 TALL möjliggör transport av **en enhet och dess tillbehör** mellan behandlingsställen i sjukhusmiljö och miljöer med begränsad vård.

ALLMÄNNA SÄKERHETSKRAV

- Instruktionerna för vagnen måste läsas före användning.
- Spara instruktionerna för framtida bruk.
- Produkten har skapats uteslutande för de metoder som anges i bruksanvisningen. All annan användning är att betrakta som otillbörlig.
- Om vagnen manipuleras eller skadas på grund av felaktig användning upphör garantin omedelbart att gälla.
- **Multix Solutions ansvarar inte för skador på personer och/eller saker som orsakats av felaktig användning.**
- När **en enhet** monteras på vagnen är det **systeminstallatörens** ansvar att säkerställa att systemet överensstämmer med gällande standarder, EN 60601-1 aktuell version.



ALLMÄN VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

Vagnens säkerhet garanteras genom att noggrant följa nedanstående varningar:

- Kontrollera att vagnen överensstämmer med illustrationen i bruksanvisningen.
- Kontrollera att den inte har gått sönder eller skadats under transporten.
- Kontrollera att de rörliga och låsbara delarna som hjul, bromsar och (om sådan finns) gasfjäder är funktionsdugliga.
- Alla fyra hjulen på vagnen måste vara låsta när systemet och dess tillbehör är monterade.
- När vagnen inte körs ska du se till att vagnens hjul är låsta och att systemet inte parkeras på ojämnt underlag.
- Alla vagnens hjul måste vara upplåsta innan vagnen får skjutas.
- För att förhindra att vagnen välter måste du hålla i handtaget om vagnen körs över hinder (t.ex. elsladdar).
- Undvik överdriven kraft när du skjuter vagnen.
- Inga ändringar av denna enhet är tillåtna.




INSTRUKTIONER FÖR LASTNING

- **DET ÄR FÖRBJUDET ATT SITTA PÅ VAGNEN**
- **SKJUTNING FÖRBJUDEN NÄR HJULEN ÄR BLOCKERADE**
- Följ de maximala laster som anges i avsnitt "Transportläge och transportriktning"
- **Se till att den totala vikten för den monterade konfigurationen (med tillbehör) inte överstiger den totalvikt som anges på den etikett som sitter på vagnen och på nästa sida.**

TRANSPORTLÄGE OCH TRANSPORTRIKTNING

Under transport måste vagnen sänkas ned till gasfjäderns ände, med handtaget riktat framåt, enligt bilden nedan:

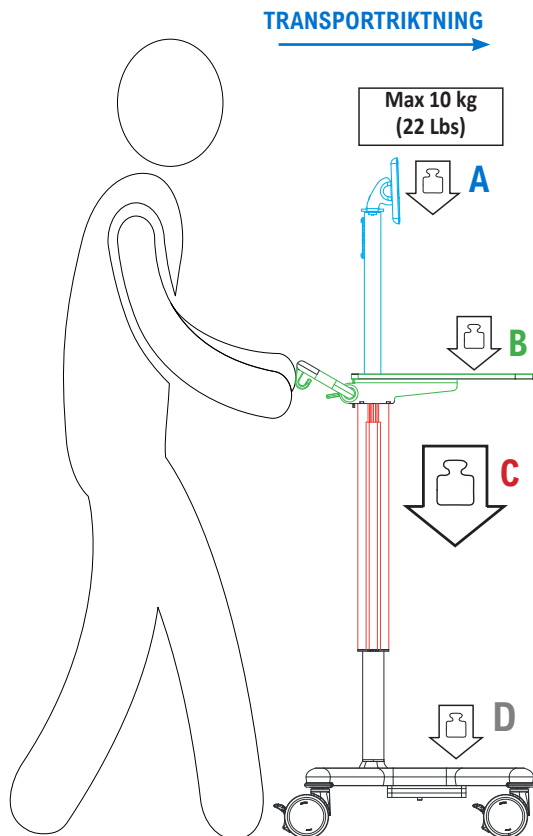

Maxbelastning

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



MAX TOTALVIKT FÖR DEN
MONTERADE KONFIGURATIONEN
(= vagn + tillbehör + säker
arbetsbelastning)

Totalvikt = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + Vagnens vikt

Vagnens vikt = 29kg (63.9 Lbs)

Maxbelastning (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maxbelastning D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - Vagnens vikt (29kg) - (A+B+C)*

*Om belastningen på vagnens rörliga del (A + B + C) inte når upp till den angivna maxbelastningen, är det möjligt att belasta vagnens fasta del (D) med högre belastningar än de angivna, utan att överskrida den maximala totalvikten.

Tillägg



Installation och underhåll måste utföras av kvalificerad teknisk personal och i enlighet med monterings- och underhållsinstruktionerna (se de särskilda avsnitten "Montering" och "Underhåll") i denna bruksanvisning.

ÚDRŽBA

Kontrollera alla fästpunkter och mekanismer var 6:e månad.
Produkten är endast lämplig för användning i inomhusmiljöer.

RENGÖRING

Se till att produkten är rengjord och desinficerad i enlighet med applikationskraven innan den används.

Rengör regelbundet metall- och/eller plastytorna med icke-korrosiva rengöringsmedel med neutralt pH-värde och en trasa/svamp/borste med mjuka borststrån.

Håll inte flytande, klor- eller ammoniakbaserade rengöringsmedel, feta eller oljiga ämnen direkt på ytan.

RESERVDELAR

För reservdelar hänvisas till enhetens distributör (se avsnittet Kontakt).

LIVSLÄNGD OCH BORTSKAFFANDE

Produktens livslängd är 10 år.

Vagnen och förpackningen ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella bestämmelser.

kartong och invändiga förstärkningar	invändig förpackning
KARTONG	POLYETEN MED LÅG DENSITET

ORDLISTA ÖVER SYMBOLER

Följande symboler förekommer på vagnen eller i instruktionerna:



Försiktighet



Instruktion för operation



Medicinteknisk produkt



Begränsning av luftfuktighet



Håll dig torr



Det är förbjudet att sitta på vagnen



Totalvikt



CE-märkning



Tillverkare



Batch-kod



Orientering



Håll dig borta från solljus



Pushing förbjudet



Unik enhetsidentifierare



Katalognummer



Produktnummer



Tillverkningsdatum



Bräcklig, hantera med försiktighet



Temperaturgräns



Distribueras av



Maxbelastning

Distribueras av: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Tillverkad av: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

