

Ръководство за употреба



Моля, предоставете инструкцията за употреба на крайния потребител след инсталирането.




Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на това ръководство.

Възпроизвеждането, копирането или преводът, дори и под формата на извлечения, са забранени без предварително разрешение от Multix Solutions S.r.l.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ



Trolley X1T е медицинско устройство от клас I съгласно правилата за класификация на приложение VIII и носи маркировката „CE“ в съответствие с Регламента за медицинските устройства (MDR) (ЕС) 2017/745. Той отговаря на IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 и отговаря на общите изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики на приложение I към горепосочения регламент за медицинските изделия.

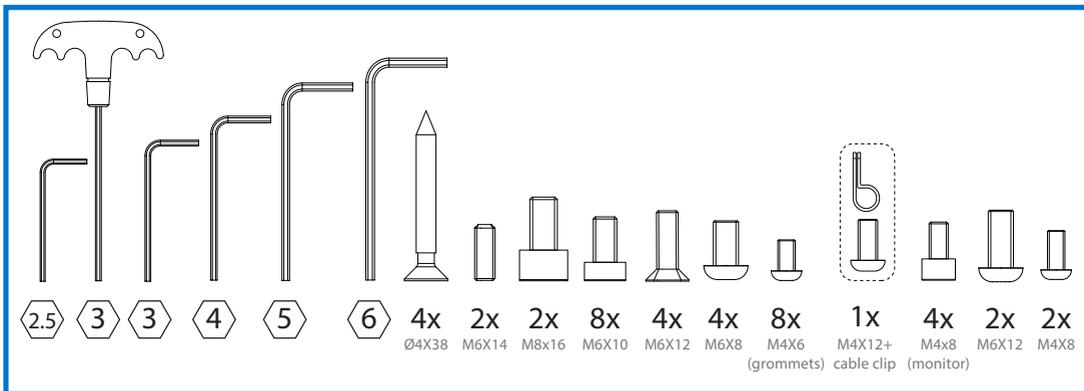

2




2x

M6X14





2x

M8x16

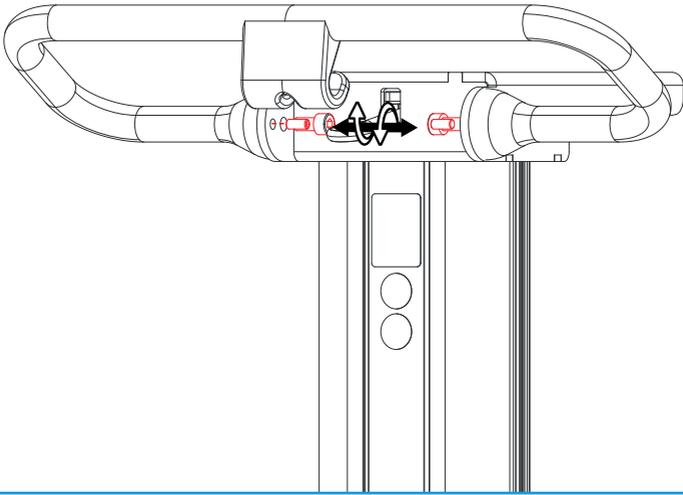


3

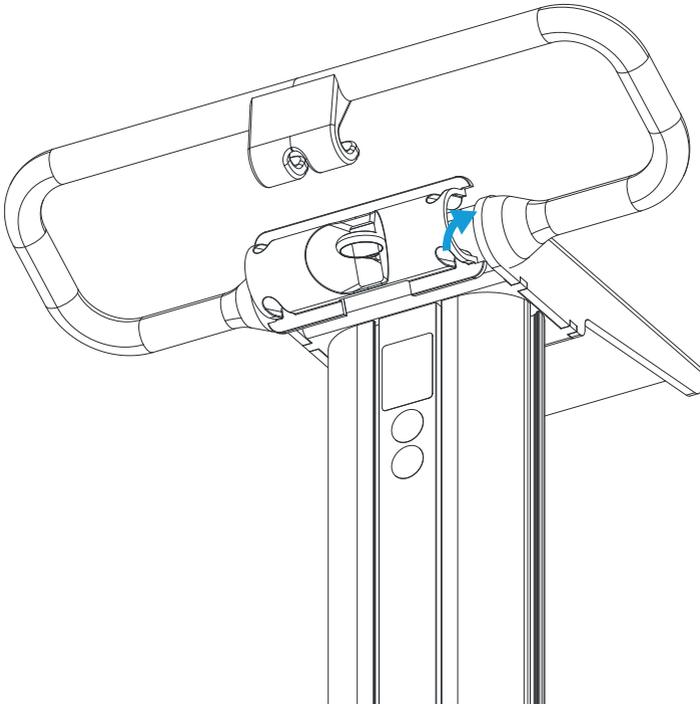

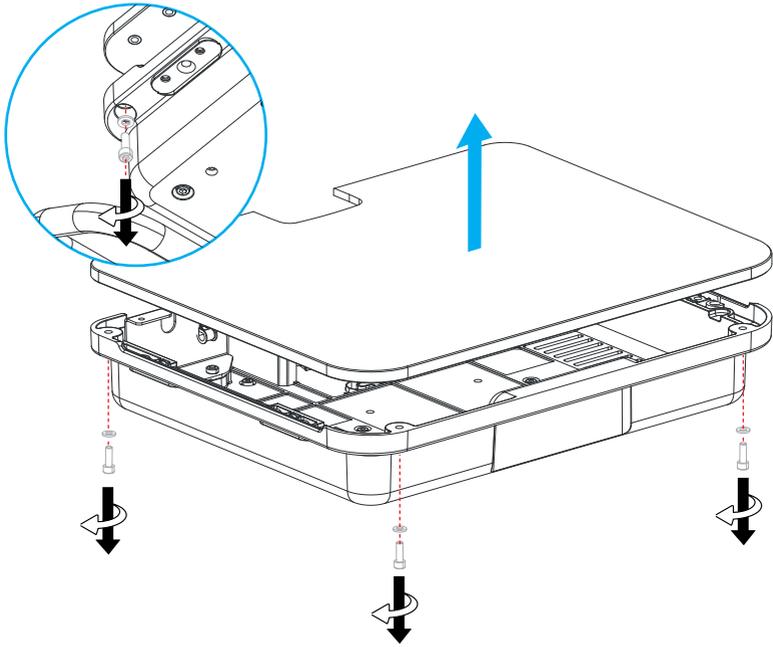


5

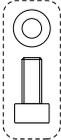

4x
M6x18
metal washer

5

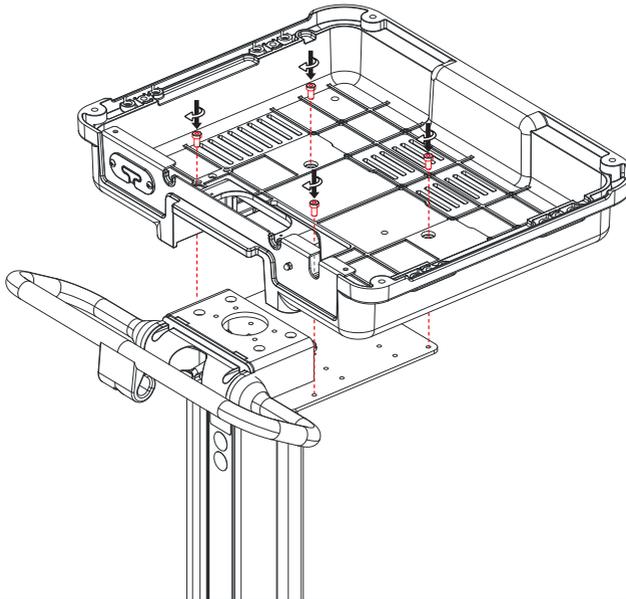

6




4x
M6x12

4

7




4x
M6x12

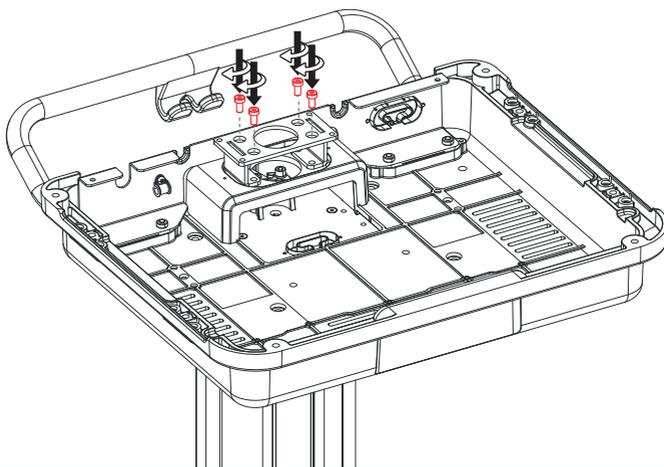


8



4x
M6x10

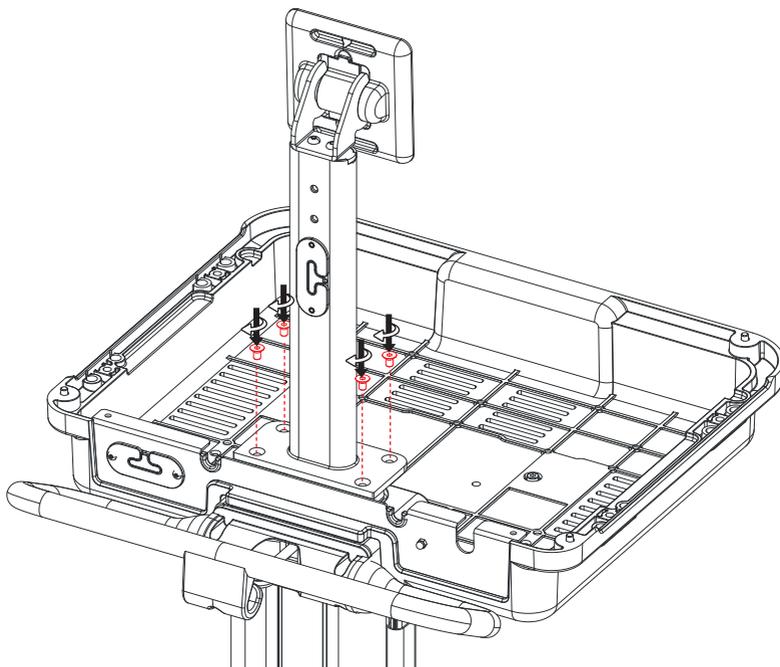


9

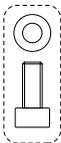

4x
M6x18
metal washer

5

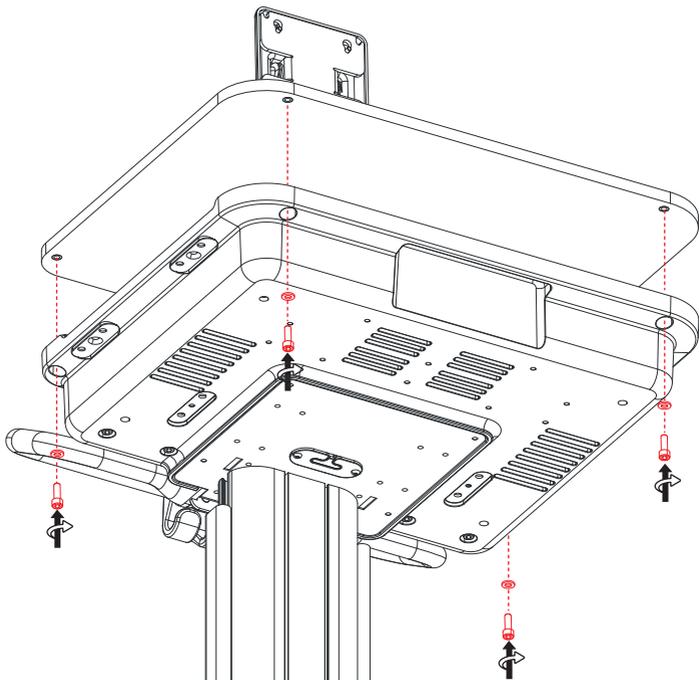



10



4x
M6x8

4

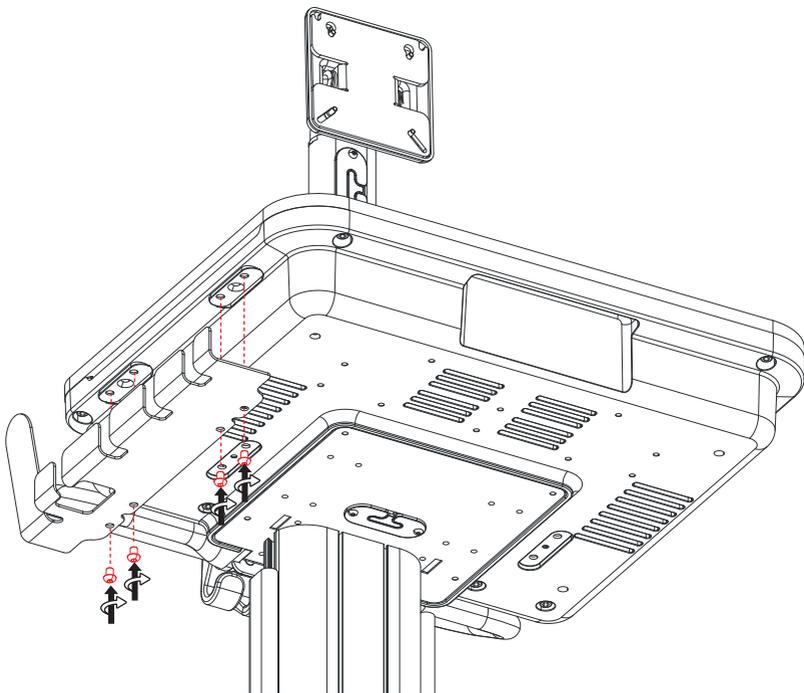

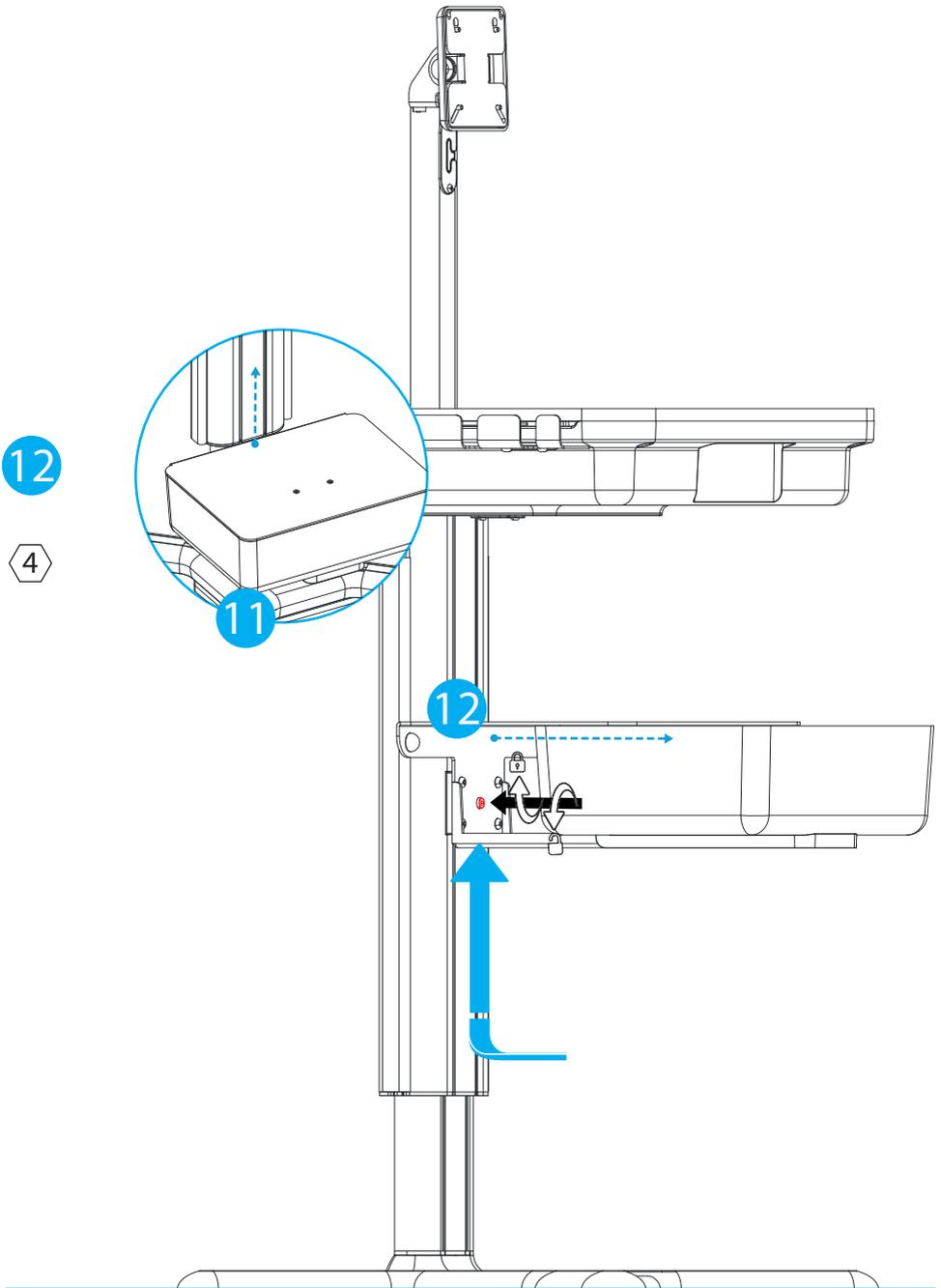


13



4x

M4X6

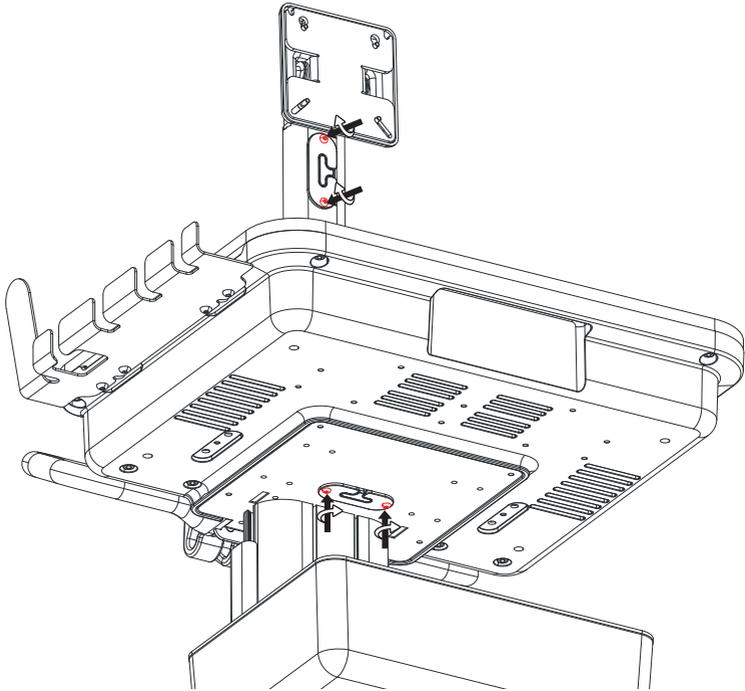


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip

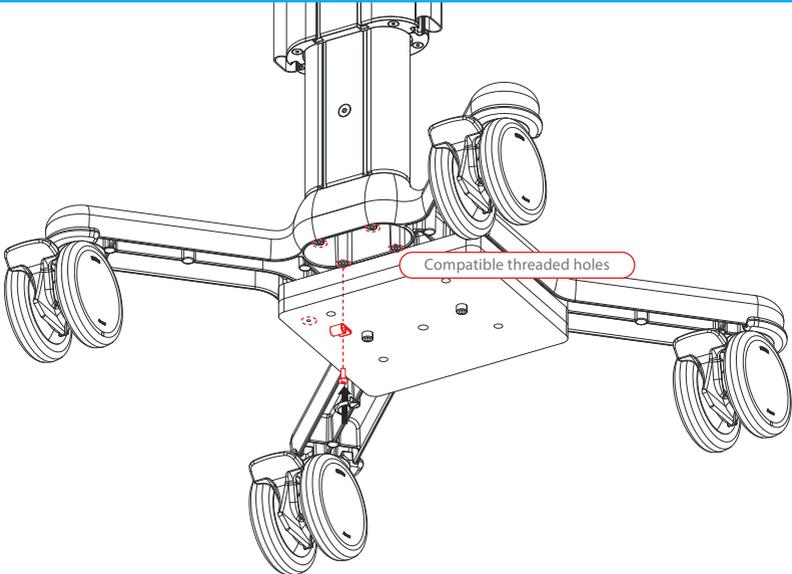

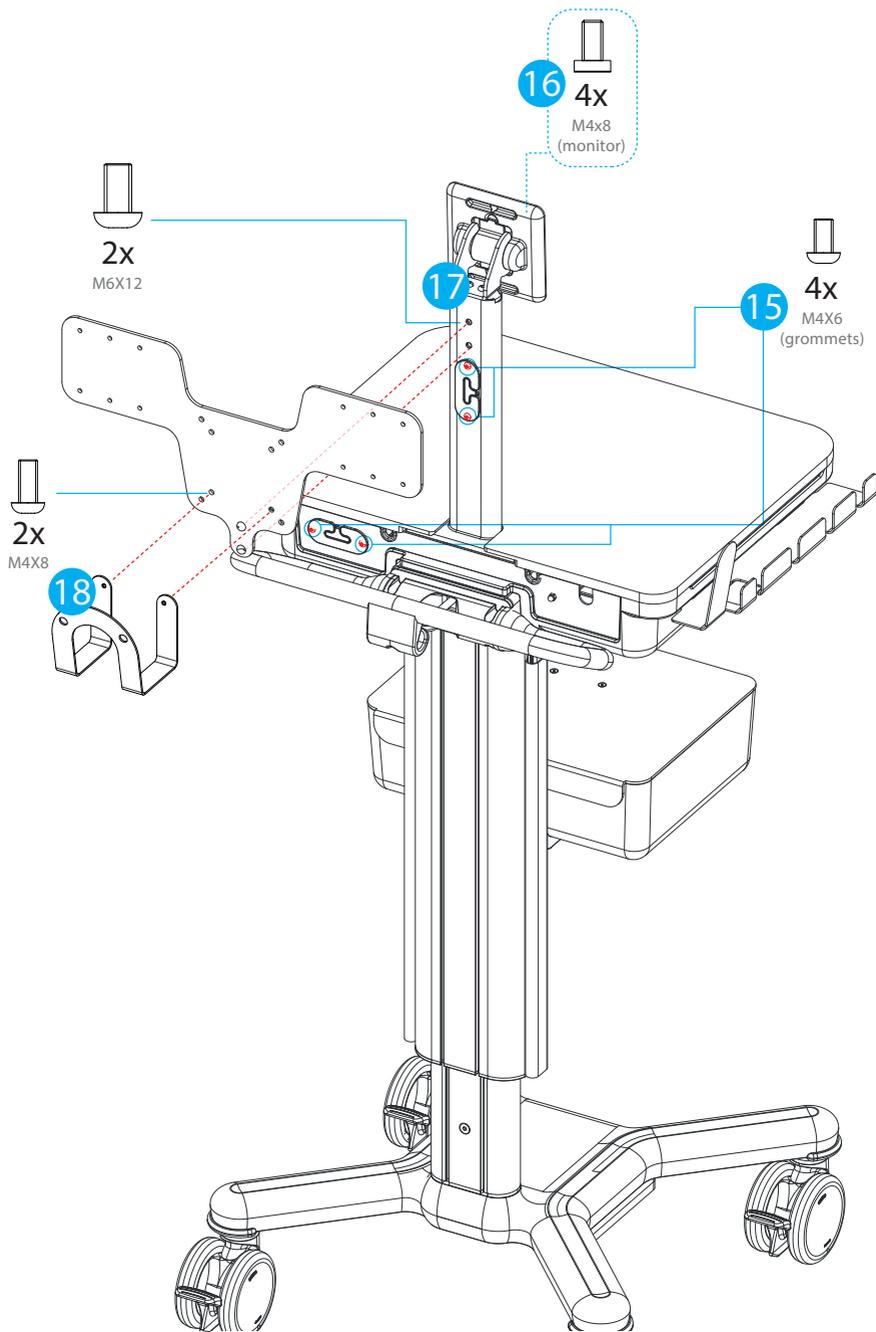

if needed, use the M4x6 to fix the grommets

Важни известия



Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на товарьководство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОЛЗА

Количката X1T - 000CNSX1T дава възможност за транспортиране на **апарата и неговите аксесоари** между точките на терапия в болничната среда и в заведенията за ограничени грижи.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба трябва да се прочетат инструкциите на количката.
- Запазете инструкциите за бъдещи справки.
- Продуктът е създаден изключително за методите, посочени в ръководството за употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна.
- Нарушенията или повредите, причинени от неправилна употреба на количката, водят до незабавно отнемане на гаранцията
- **Multix Solutions не носи отговорност за повреди на хора и/или вещи, причинени от неправилна употреба.**
- Когато **устройството** е монтирано на количката, отговорността за това е на **инсталатора на системата**, който трябва да гарантира, че системата отговаря на действащите стандарти, EN 60601-1, актуална версия.



ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Безопасността на количката е гарантирана, ако внимателно спазвате предупрежденията по-долу:

- Уверете се, че количката съответства на илюстрацията в ръководството.
- Проверете дали не е счупен или повреден по време на транспортирането.
- Проверете дали движещите се и блокиращи се части, като например колелата, спирачките и (ако има такива) газовата пружина, функционират.
- Всичките четири колела на количката трябва да бъдат блокирани, когато системата и нейните принадлежности са сглобени.
- Когато количката не се задвижва, се уверете, че колелата на количката са заключени и че системата не е паркирана върху неравни повърхности.
- Всички колела на количката трябва да бъдат отключени, преди тя да бъде бутната.
- За да се предотврати преобръщането на количката, дръжката трябва да се държи, ако количката се движи по препятствия (например захранващи кабели).
- Избягвайте прекомерна сила при бутане на количката.
- Не се допускат никакви промени в това устройство.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ


- **ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ СЕДИ НА КОЛИЧКАТА**
- **ЗАБРАНЕНО Е БУТАНЕТО, КОГАТО КОЛЕЛАТА СА БЛОКИРАНИ**
- Спазвайте максималните натоварвания, както е посочено в раздел “Транспортно положение и посока”.
- **Уверете се, че общото тегло на монтираната конфигурация (заедно с аксесоарите) не надвишава общото тегло, посочено на етикета, поставен върху количката, и на следващата страница.**

Важни известия

ПОЗИЦИЯ И ПОСОКА НА ТРАНСПОРТИРАНЕ

По време на транспортирането количката трябва да се спусне до края на газовата пружина, като се държи дръжката е насочена напред, както е показано на снимката по-долу:

ПОСОКА НА ТРАНСПОРТИРАНЕ

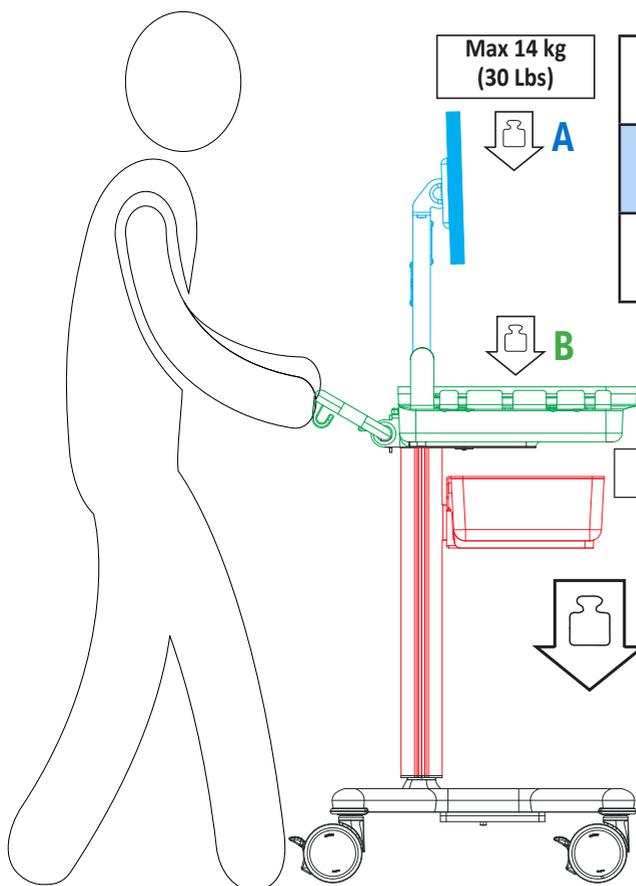

Макс. натоварване

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)

80 kg
(176.4 Lbs)

Приложение



Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран технически персонал, като се спазват инструкциите за монтаж и поддръжка (вж. специалните раздели “Монтаж” и “Поддръжка”) на товаръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Проверявайте всички точки на закрепване и механизми на всеки 6 месеца.

Продуктът е подходящ за използване само в закрити помещения.

ПОЧИСТВАНЕ

Редовно почиствайте металните и/или пластмасовите повърхности с некорозионни препарати с неутрално рН и кърпа/гъба/четка с мек косъм.

Не изсипвайте директно върху повърхностите течни, хлорни или амонячни почистващи препарати, мазни и маслени вещества.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За резервни части се обърнете към дистрибутора на устройството (вж. раздел “Контакти”).

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Срокът на експлоатация на продукта е 10 години.

Количката и опаковката се изхвърлят в съответствие с местните или националните разпоредби.

картонена кутия и вътрешни укрепления  КАРТОН	вътрешна опаковка  ПОЛИЕТИЛЕН С НИСКА ПЛЪТНОСТ
--	---

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ

Върху количката или в инструкцията са посочени следните символи:



Предпазливост



Инструкция за експлоатация



Медическо устройство



Ограничаване на влажността



Пазете сухо



Забранено е да седнеш на количката



общо тегло



CE-маркировка



Производител



Ватч код



Ориентация



Да се пази от слънчева светлина



Бутане забранено



Каталожен номер



Номер на продукта



Дата на производство



Крежка, дръжка с внимание



Температурна граница



Разпространява се по

Разпространява се от: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Произведено от: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com