

# Uputa Priručnik



Molimo vas da nakon instalacije krajnjem korisniku dostavite upute za uporabu.




Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovaj ovaj priručnik.

**Reprodukcija, dupliranje ili prevođenje, čak i u obliku isječaka, zabranjeno je bez prethodne dozvole tvrtke Multix Solutions S.r.l.**

## SKUPŠTINA UPUTA




Trolley X1T je medicinski proizvod klase I prema pravilima klasifikacije iz Priloga VIII i nosi oznaku “CE” u skladu s Uredbom o medicinskim proizvodima (MDR) (EU) 2017/745. U skladu je s normom IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 i ispunjava opće zahtjeve za sigurnost i ispravnost iz Priloga I navedene Uredbe o medicinskim proizvodima.

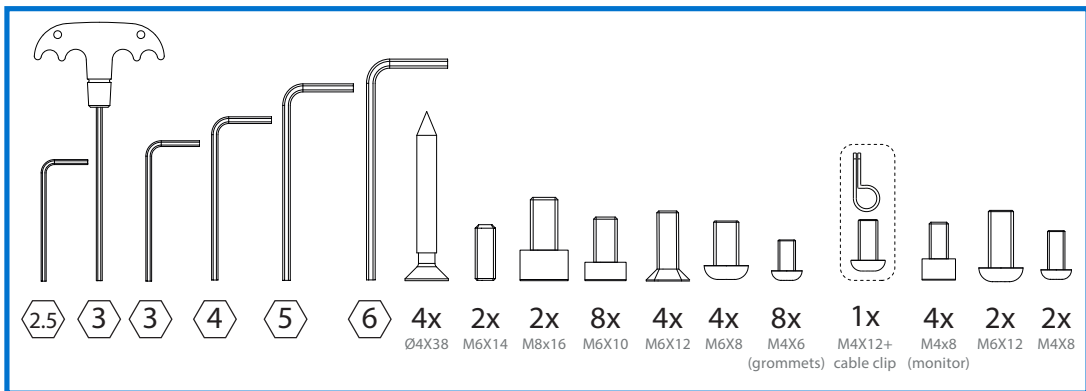

## SKUPŠTINA UPUTA 000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! Ako su prisutni bilo kakvi dodaci, molimo pogledajte odgovarajuće upute prije  
• sastavljanja kolica.

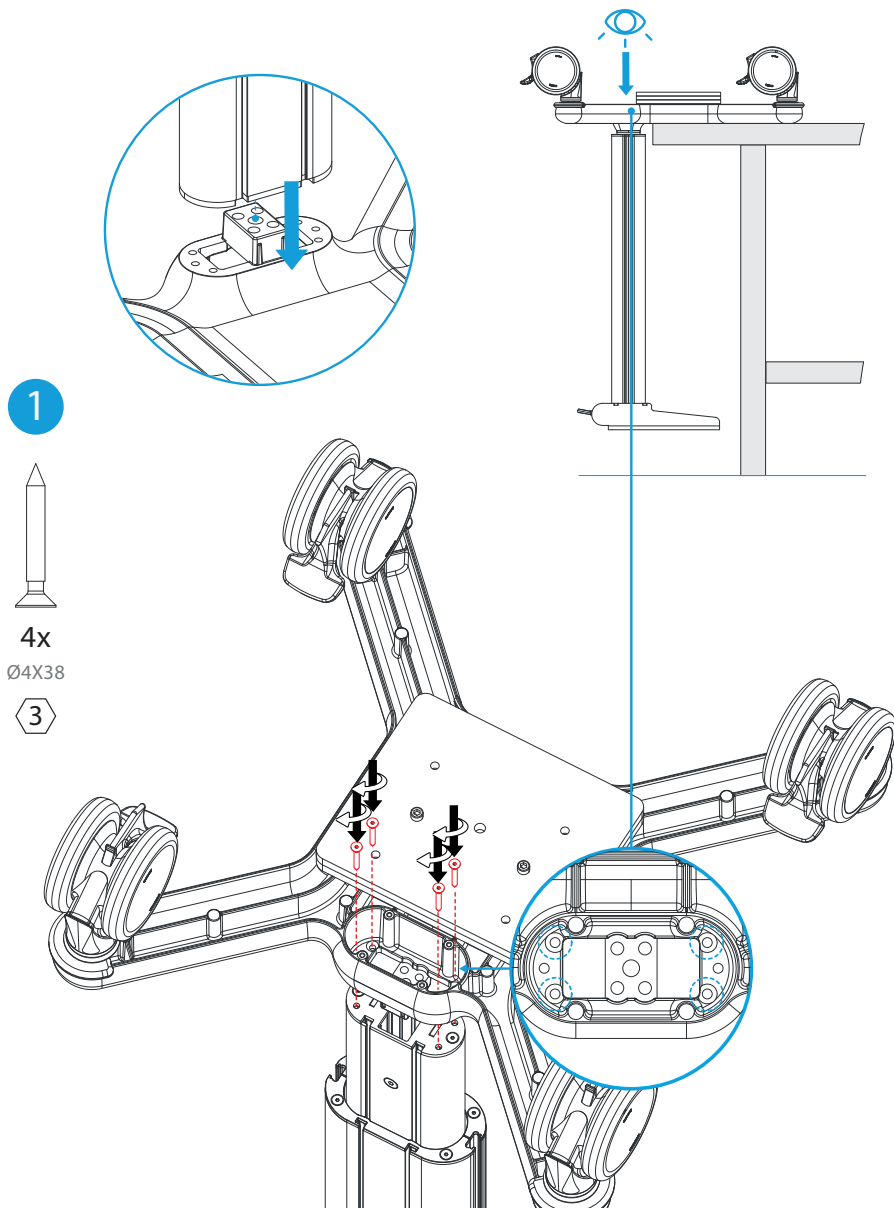

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

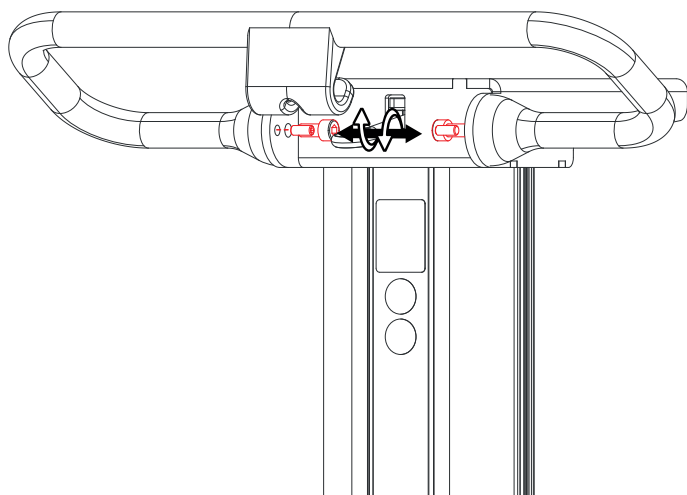


3

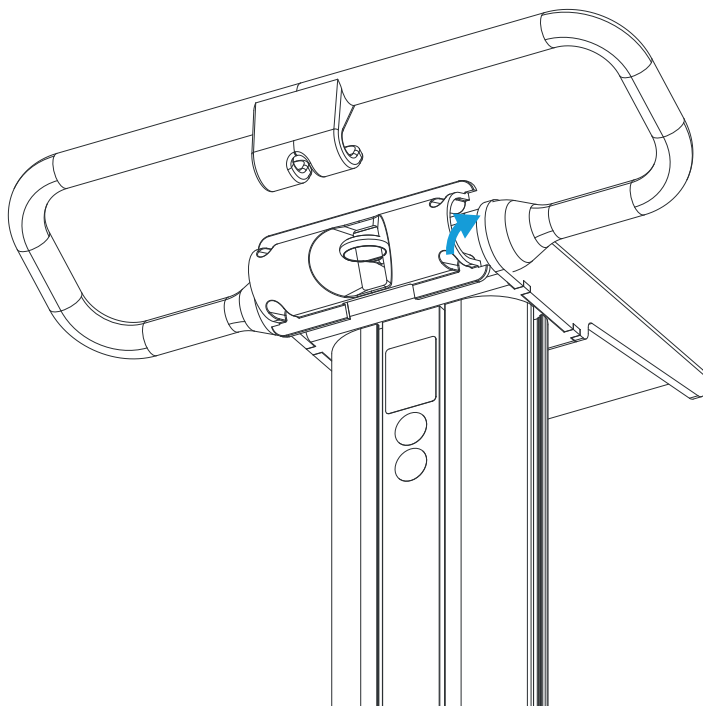

- 5
- 4x  
M6x18  
metal washer
- 5

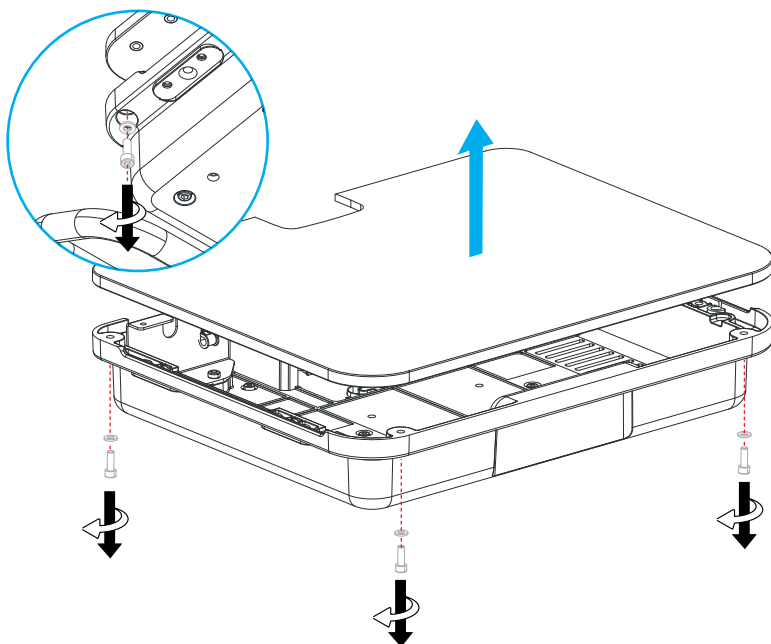

- 6
- 4x  
M6x12
- 4

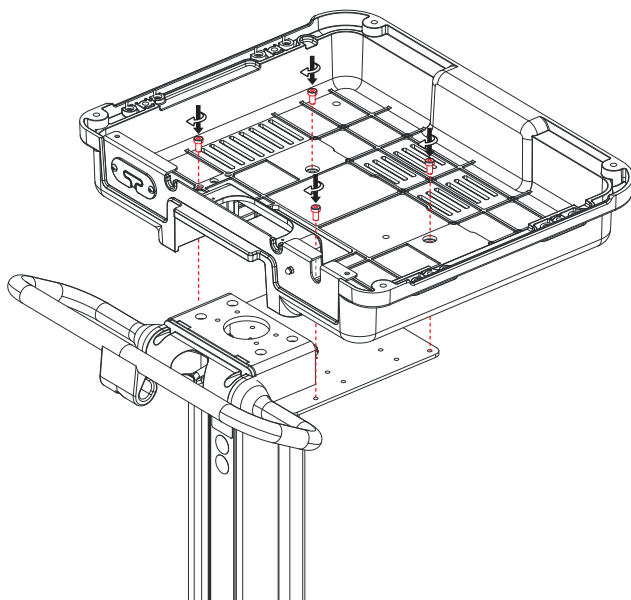


7



4x  
M6x12

4

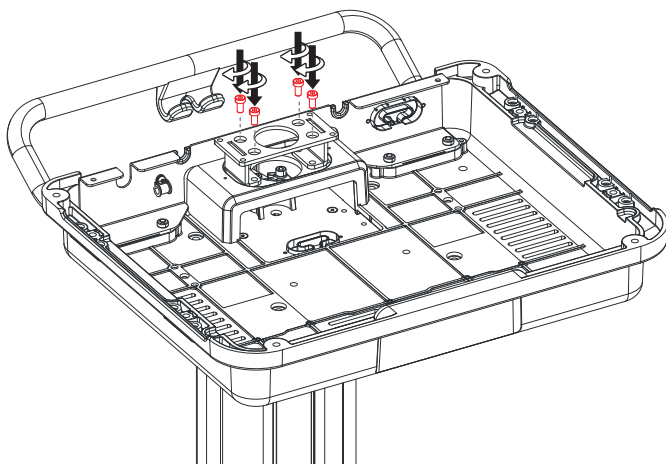


8




4x  
M6x10

4

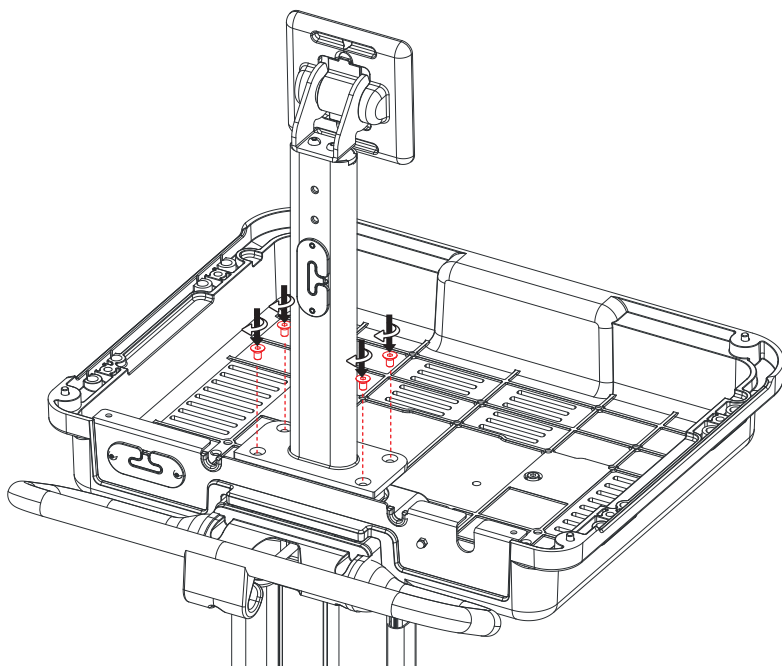


9

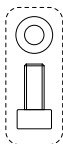

4x  
M6x18  
metal washer

5

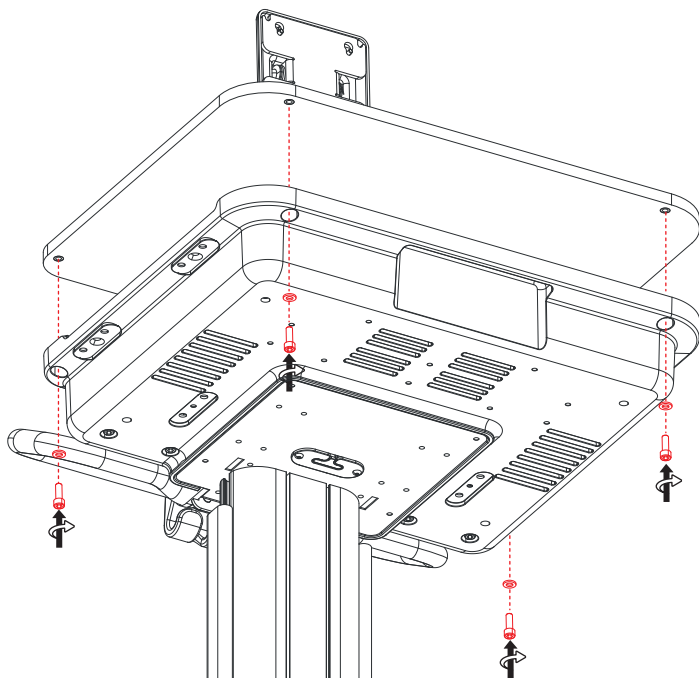


10




4x  
M6X8

4

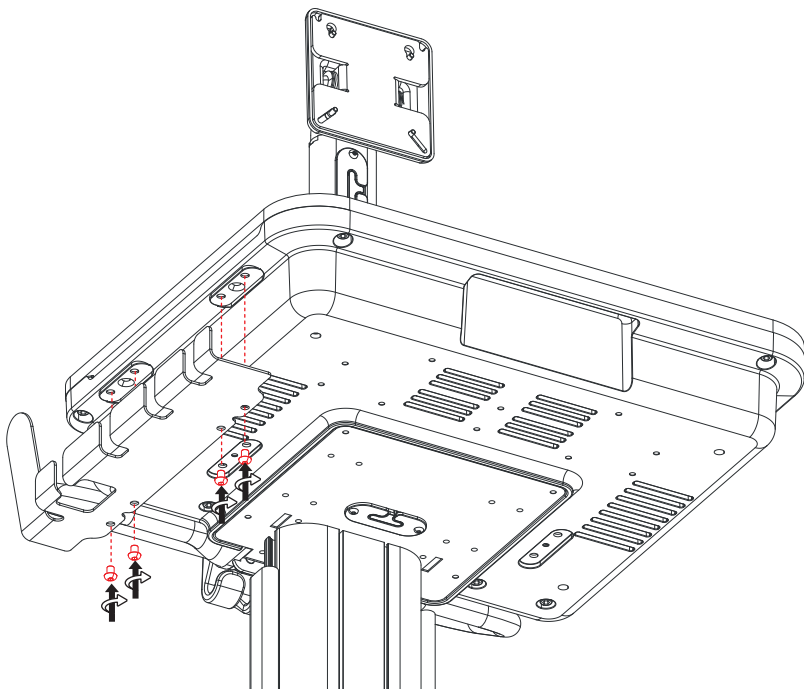



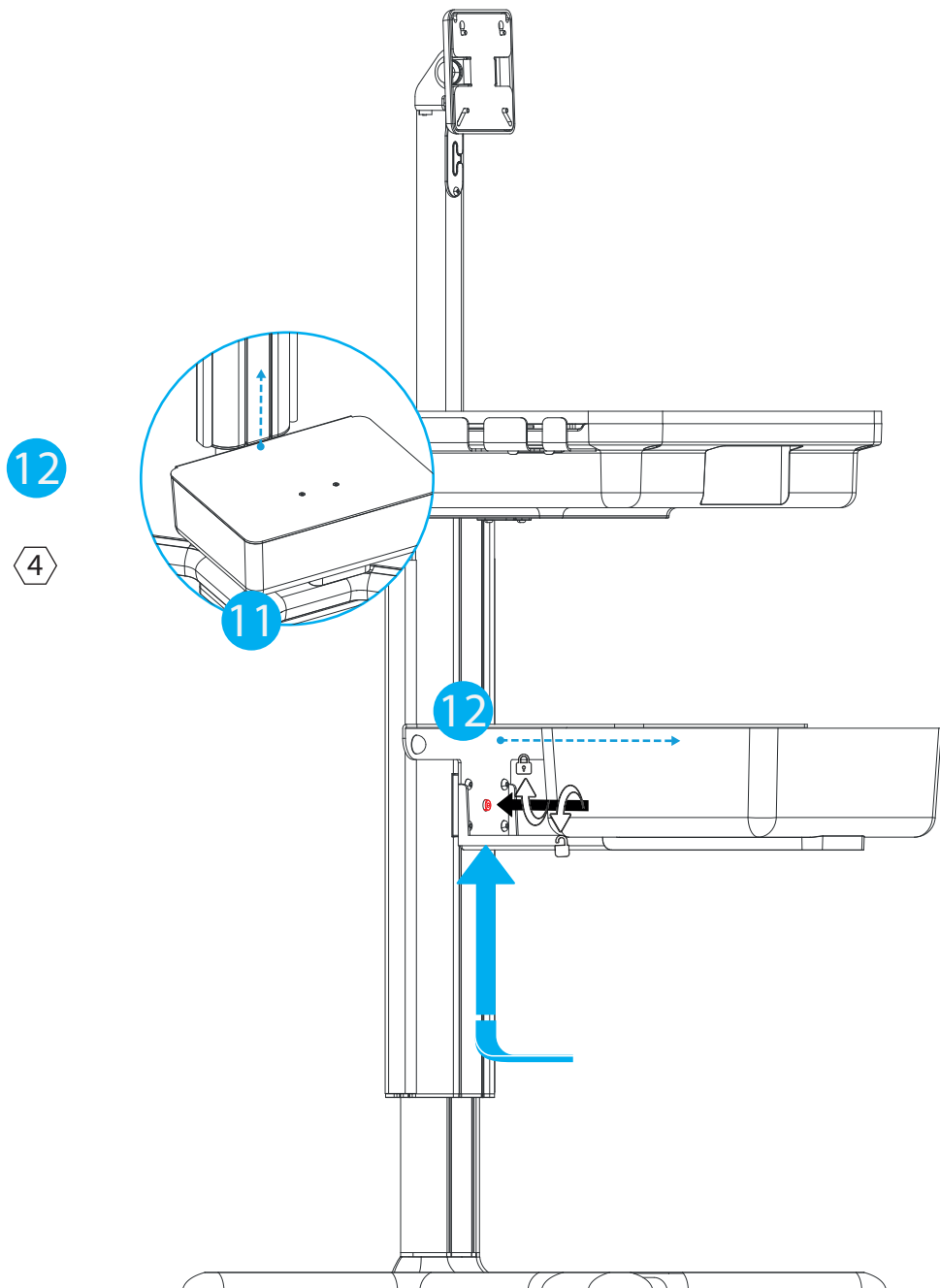


13




4x

M4X6

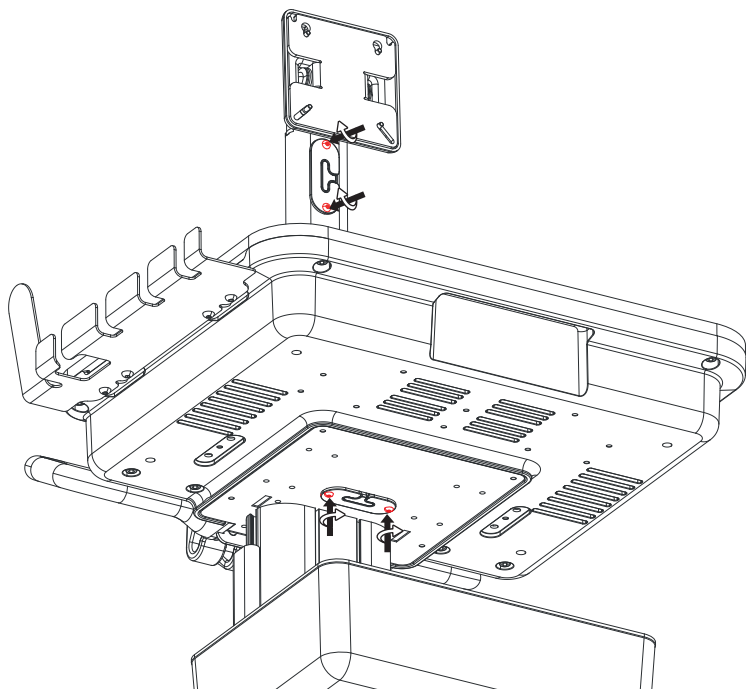


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

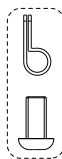

1x

M4X12+  
cable clip

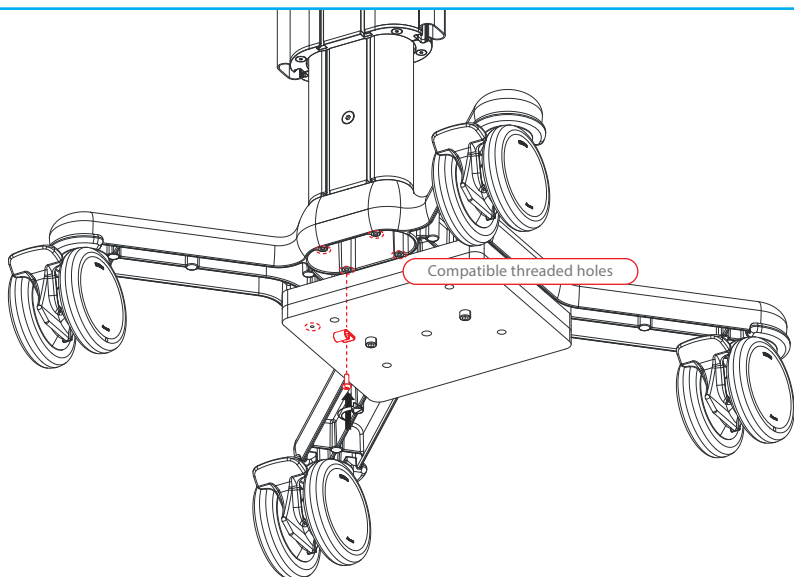

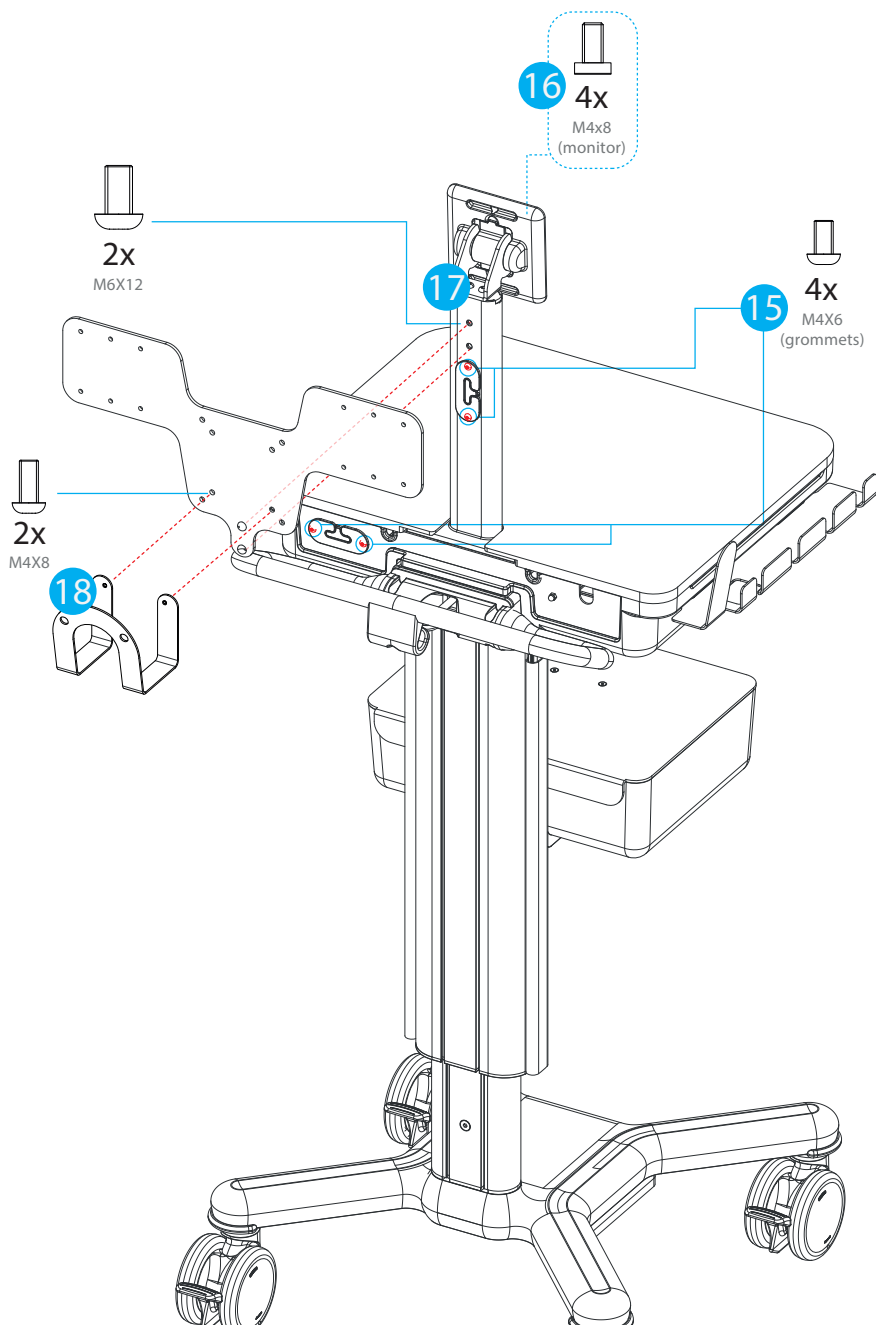

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

## Važne obavijesti



**Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovaj ovaj priručnik.**

### NAMJENJENO KORISTITI

**Kolica X1T - 000CNSX1T** omogućuju transport **uređaja i njegovih dodataka** između točaka terapije u bolničkom okruženju i okruženju ustanove za ograničenu skrb.

### OPĆENITO SIGURNOST OBVEZE

- the Kolica upute mora dobro čitati prije koristiti.
- zadržati the upute za budućnosti referenca.
- Proizvod je stvoren isključivo za metode navedene u uputama za uporabu. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom.
- Neovlašteno mijenjanje ili oštećenje uzrokovano nepravilnom uporabom kolica dovodi do trenutnog gubitka jamstva.
- **Multix Solutions je ne odgovoran za šteta do osobe i/ili stvari dva do nepravilno koristiti.**
- Kada je **uređaj montiran na kolica, instalater sustava** bit će odgovoran da osigura da je sustav u skladu s trenutno primjenjivim standardima, EN 60601-1 trenutna verzija.



### OPĆENITO UPOZORENJE I OPREZ

**The sigurnost od the kolica je Zagarantiran po pažljivo slijedeći the upozorenja ispod:**

- Napraviti Naravno the kolica šibice the ilustracija u the priručnik.
- Ček da to je Bilješka slomljen ili oštećena tijekom prijevoz.
- Provjerite jesu li pokretni dijelovi i dijelovi za zaključavanje, kao što su kotači, kočnice i (ako postoji) plinska opruga, funkcionalni.
- Sva četiri kotača kolica moraju biti zaključana kada su sustav i njegovi dodaci sastavljeni.
- Kada se kolica ne voze, uvjerite se da su kotači kolica blokirani i da sustav nije parkiran na neravnim površinama.
- svi kotači od the kolica imati do dobro otključan prije the kolica je gurnuti.
- Kako biste spriječili prevrtanje kolica, ručku morate držati ako se kolica voze preko prepreka (na primjer kabela za napajanje).
- Izbjegavajte an pretjerano sila kada guranje the kolica.
- Ne promjene do ovaj uređaj su dopuštena.




### UPUTE ZA TERET

- **ZABRANJENO JE SJEDENJE NA KOLICA**
- **ZABRANJENO GURANJE KADA SU KOTAČI BLOKIRANI**
- **slijedite maksimalno opterećenje kako je navedeno u odjeljku “Transportni položaj i smjer”**
- **Osigurajte da ukupna težina sklopljene konfiguracije (dodan pribor) odgovara ne prelazi ukupnu težinu naznačenu na naljepnici na kolicima i na sljedećoj stranici**

# Važne obavijesti

## PRIJEVOZ POLOŽAJ I SMJER

Tijekom transporta, kolica moraju biti spuštena do kraja plinske opruge, držeći ručku okrenutu prema naprijed, kao što je prikazano na slici ispod:

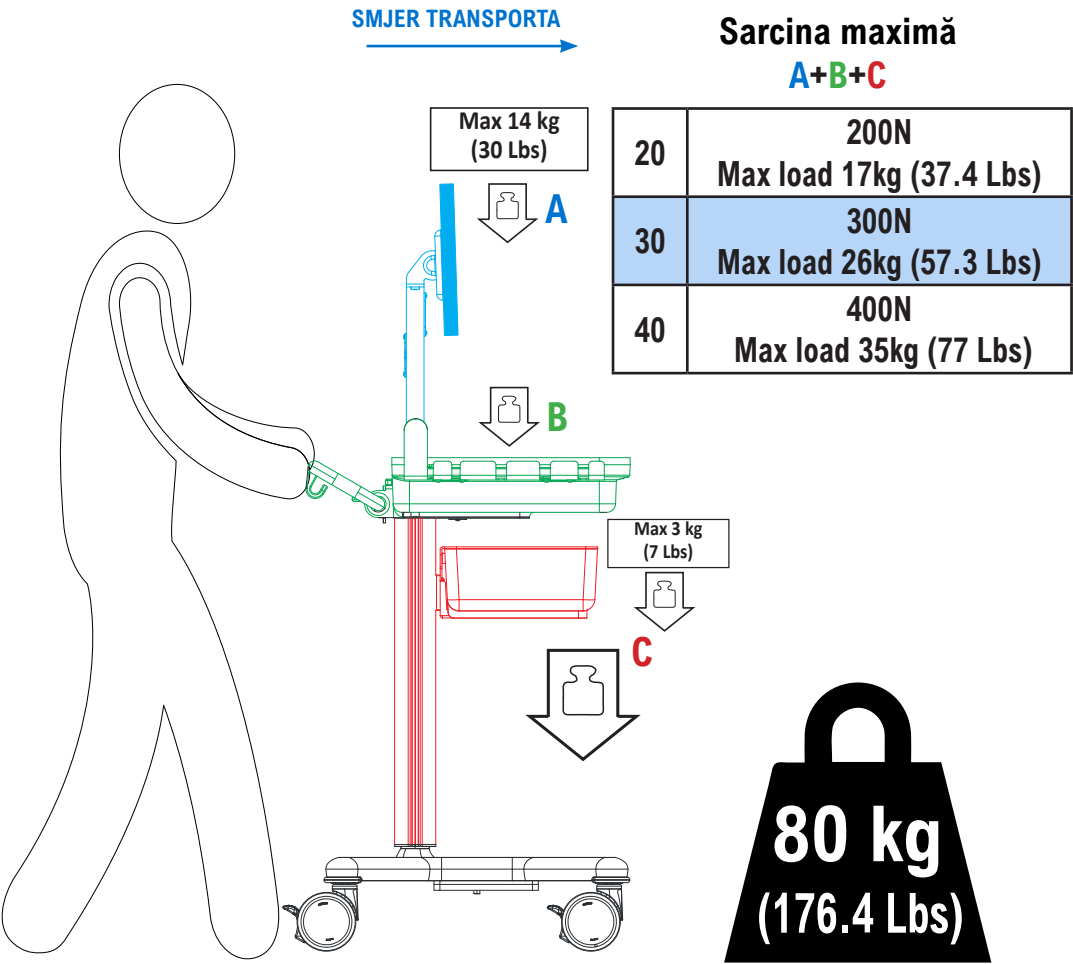

## Dodatak



**Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovaj ovaj priručnik.**

### ODRŽAVANJE

Ček svi učvršćenja bodova i mehanizmima svaki 6 mjeseca.

Proizvod je prikladan samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

### ČIŠĆENJE

Redovito čistite metalne i/ili plastične površine nekorozivnim neutralnim pH deterdžentima i krpom/spužvom/četkom s mekim vlaknima.

Ne izlijevajte izravno na površine tekuće deterdžente na bazi klora ili amonijaka, masne i uljne tvari.

### REZERVNI DIJELOVI

Za rezervni dijelovi uputiti do the uređaj distributer (ako je Kontakt odjeljak).

### RADNI VIJEK I ODLAGANJE

Vijek trajanja proizvoda je 10 godina.

Kolica i ambalaža moraju se odložiti u skladu s lokalnim ili nacionalnim propisima.

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| karton i unutarnja ojačanja | unutarnje pakiranje      |
|                             |                          |
| KARTON                      | POLIETILEN NISKE GUSTOĆE |

### GLOSAR OD SIMBOLI

The slijedeći simboli su prijavi poštovani the kolica ili u the upute:



Oprez



Upute za operaciju



Medički uređaj



Ograničenje vlažnosti



Držite suho



Zabranjeno je sjediti na kolicima.



Totalna težina



CE oznaka



Производитель



Batch kod



Orijentacija



Držite se podalje od sunčeve svjetlosti



Guranje zabranjeno



Broj kataloga



Broj proizvoda



Datum proizvodnje



Krhka, pažljivo se rukujte



Ograničenje temperature



Distribuirao po



**Distribuirao:** CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13  
8020 Graz  
Austria  
[www.cnsystems.com](http://www.cnsystems.com)

**Proizveden po:** Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2  
22066  
Mariano Comense (CO)  
Italy  
[www.multix-trolley.com](http://www.multix-trolley.com)

