

Uživatelská příručka



Po instalaci poskytněte koncovému uživateli návod k použití.




Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technický personál podle pokynů k montáži a údržbě (viz zvláštní kapitola “Montáž” a “Údržba”) tohoto návodu.

Reprodukce, kopírování nebo překlady, a to i ve formě výňatků, jsou bez předchozího souhlasu společnosti Multix Solutions S.r.l. zakázány.

MONTÁŽNÍ NÁVOD




Vozík X1T je zdravotnický prostředek třídy I podle klasifikačních pravidel přílohy VIII a nese označení „CE“ v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích (MDR) (EU) 2017/745. Je v souladu s normou IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 a splňuje obecné požadavky na bezpečnost a výkonnost uvedené v příloze I výše zmíněného nařízení o zdravotnických prostředcích.

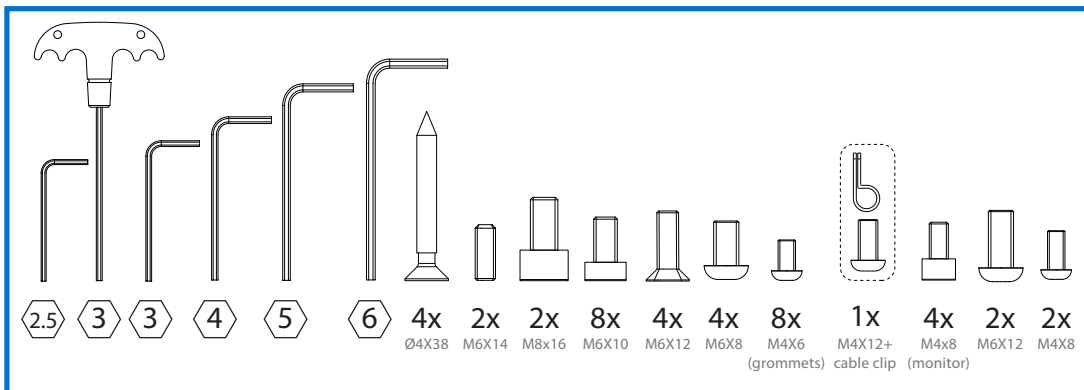

MONTÁŽNÍ NÁVOD

000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Ako su prisutni bilo kakvi dodaci, molimo pogledajte odgovarajuće upute prije
• sastavljanja kolica.

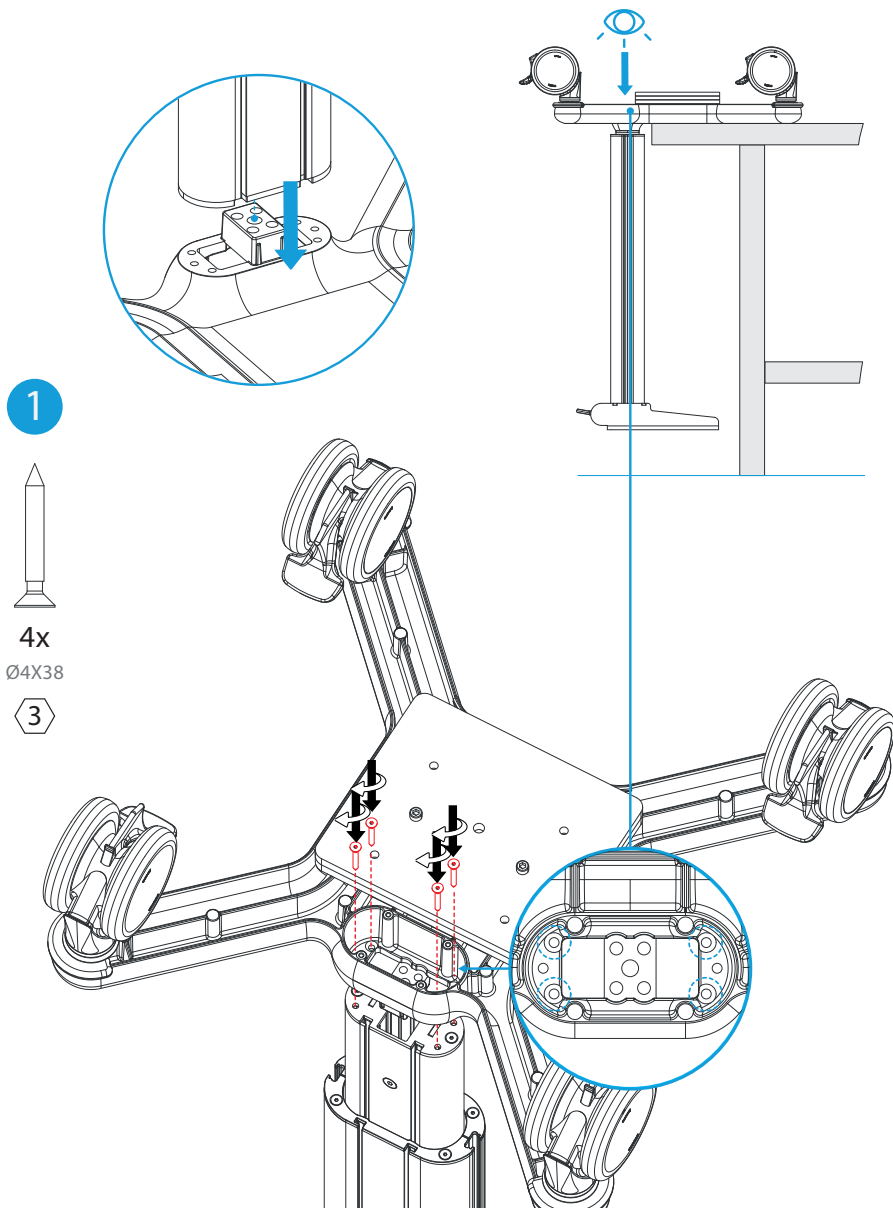

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

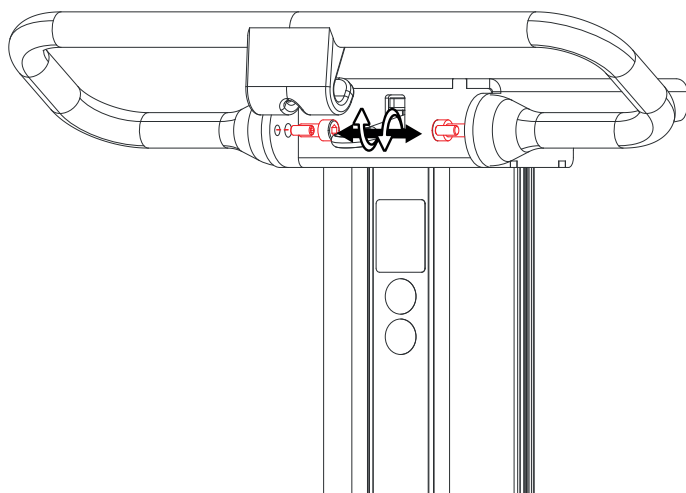

3

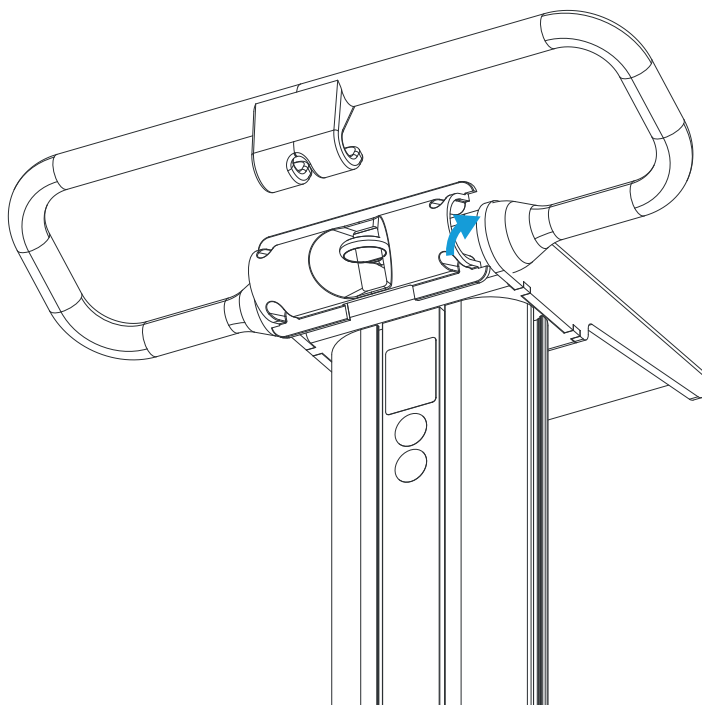


5

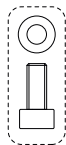

4x
M6x18
metal washer

5

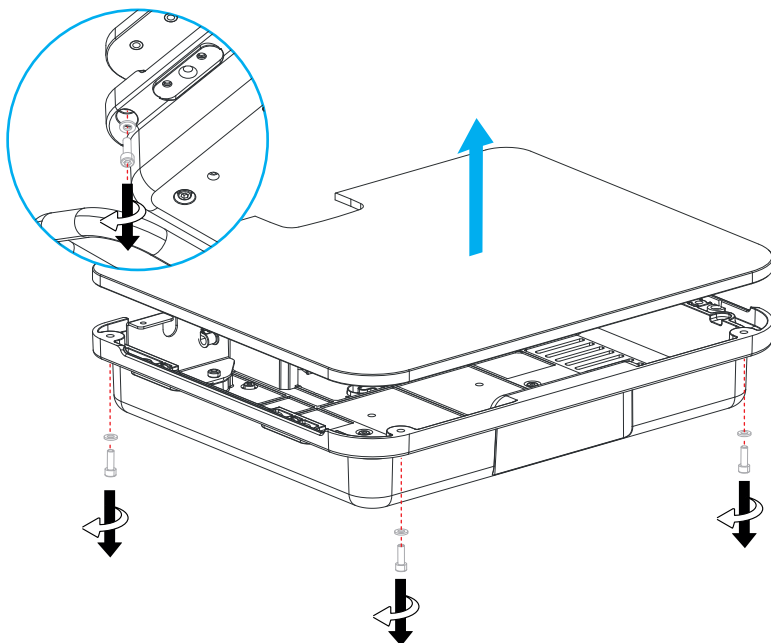


6



4x
M6x12

4

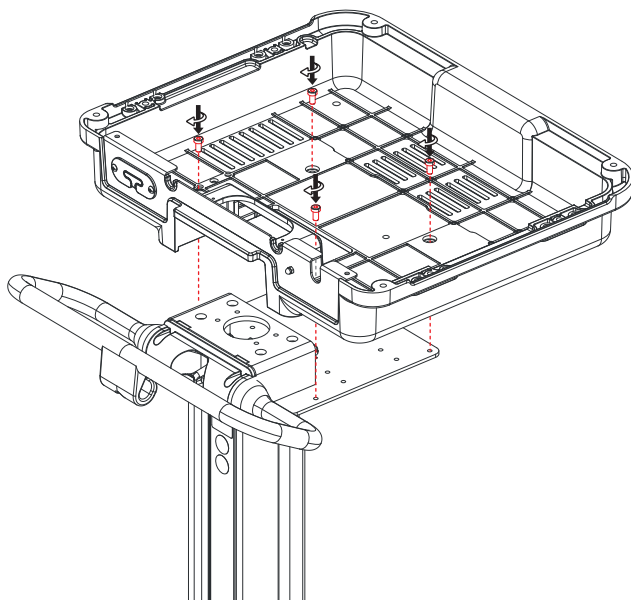


7



4x
M6x12

4

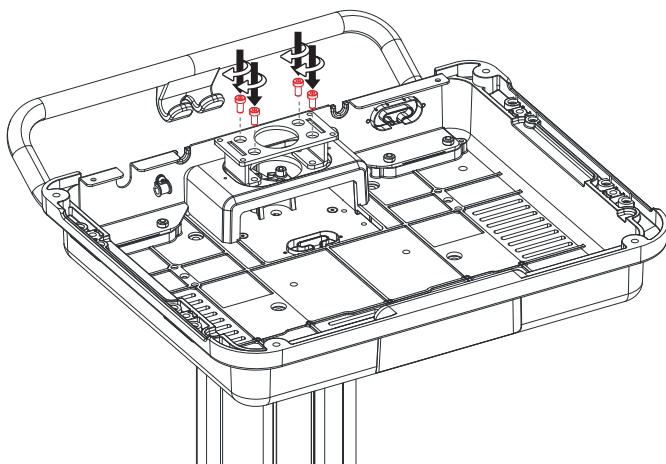


8




4x
M6x10

4

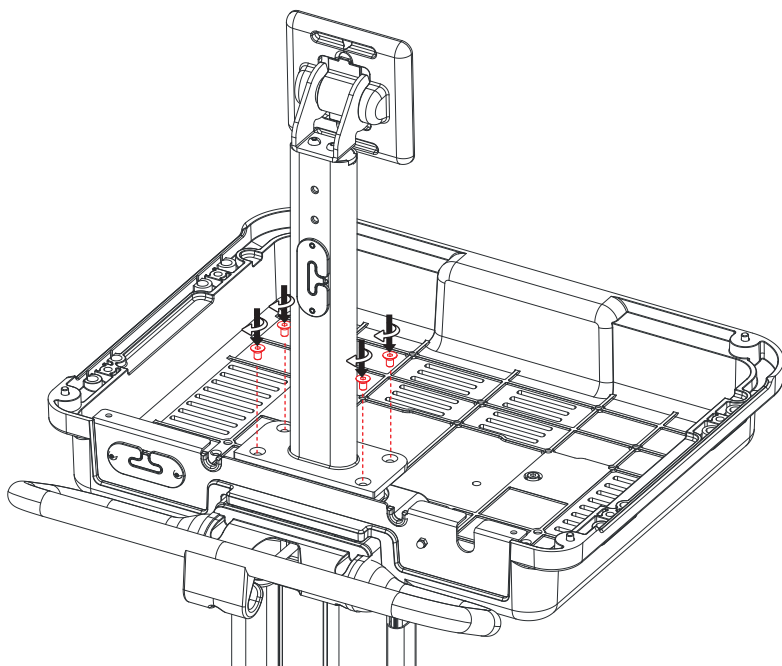


9

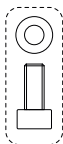

4x
M6x18
metal washer

5

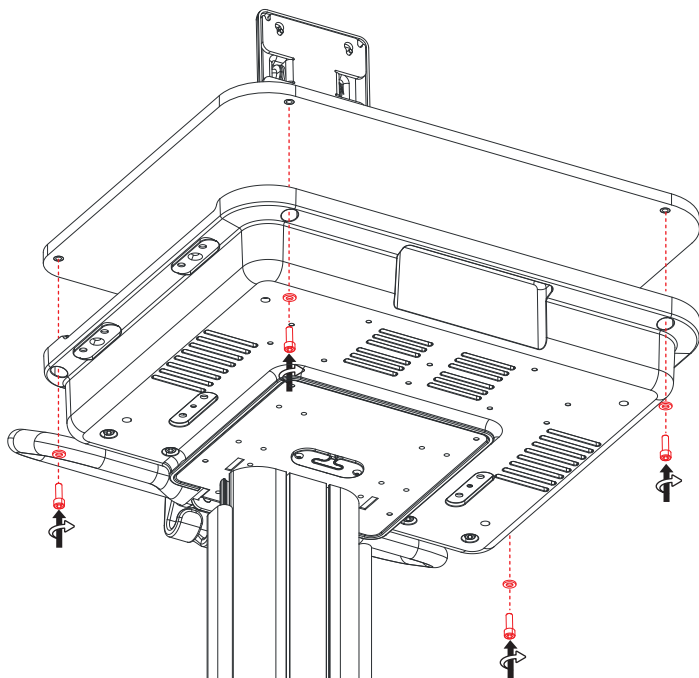



10



4x
M6X8

4

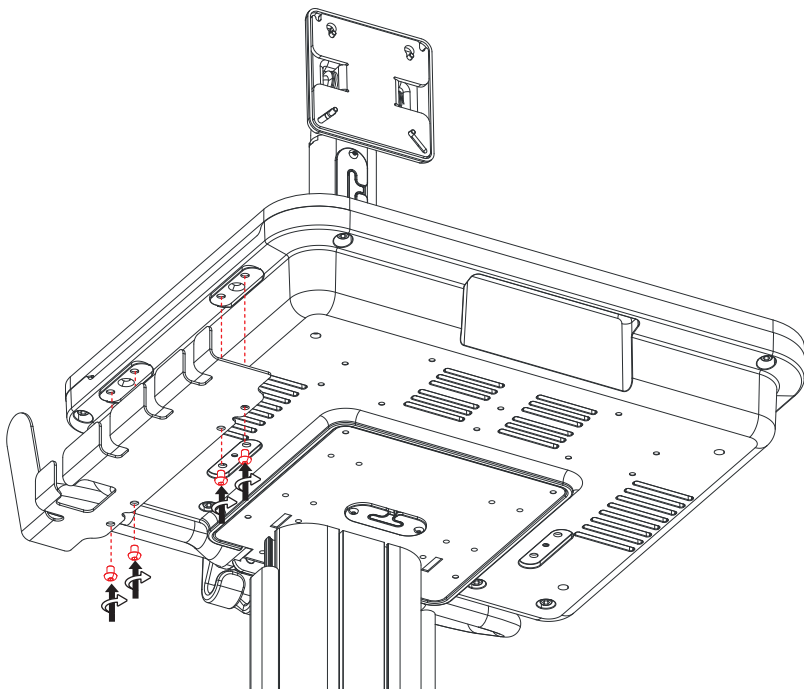

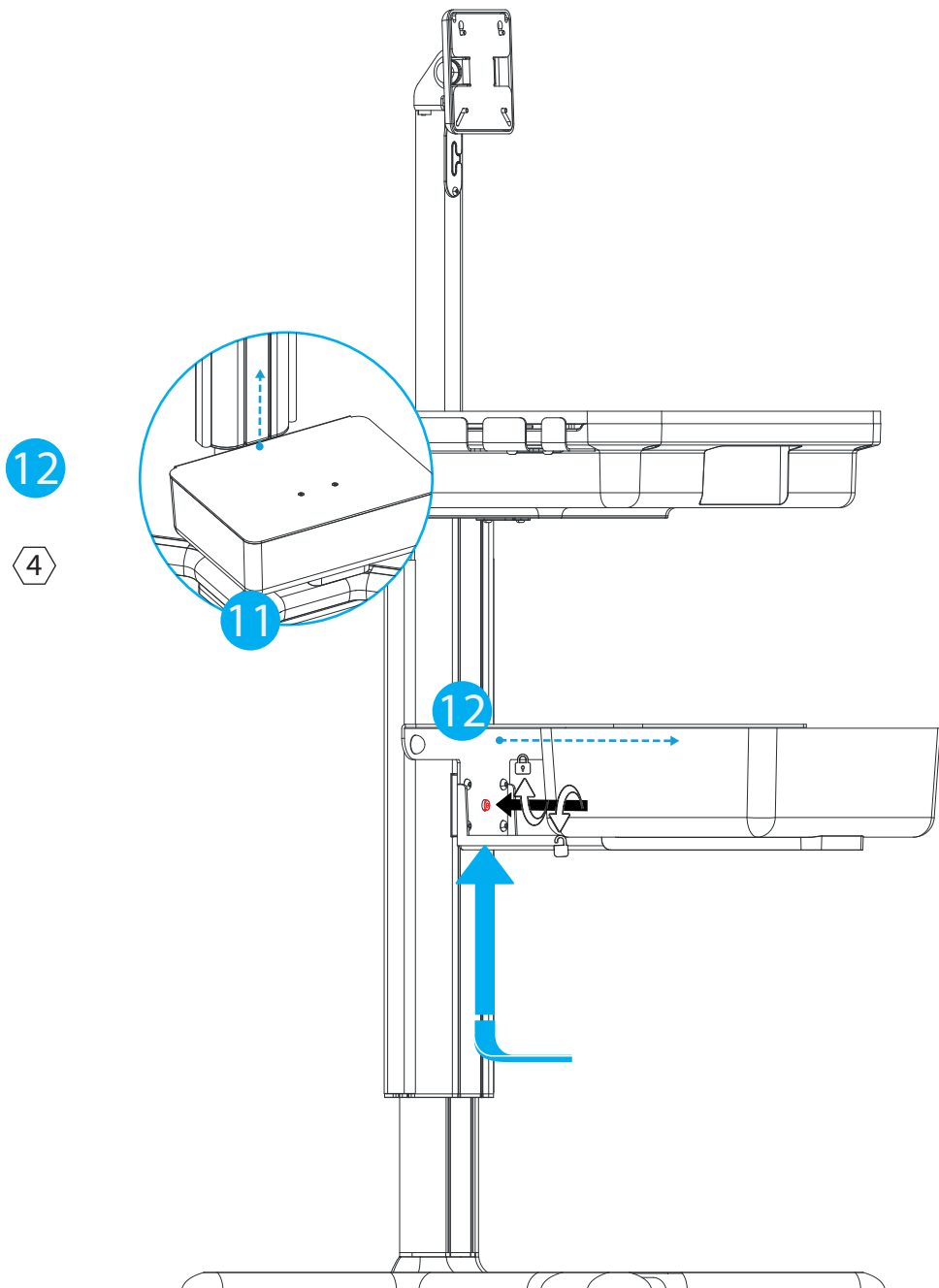


13




4x

M4X6

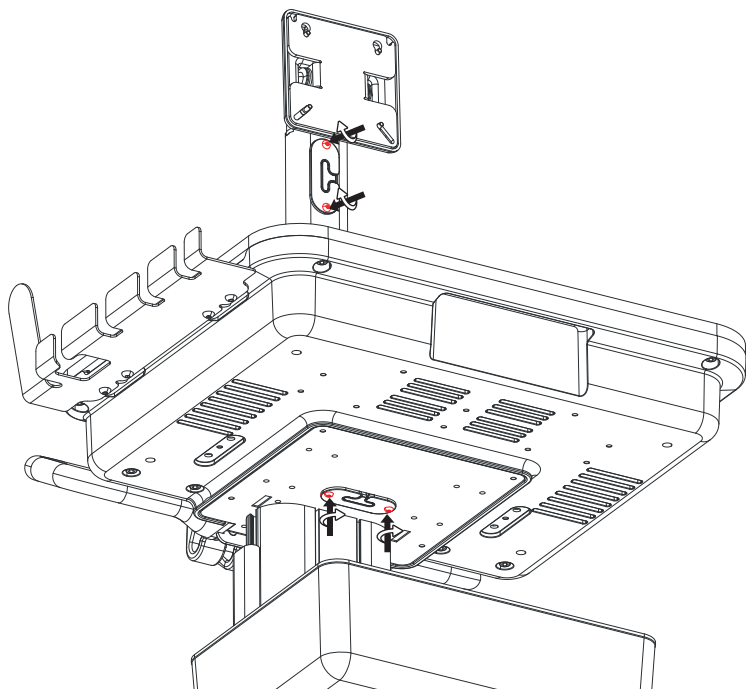


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

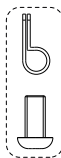

1x

M4X12+
cable clip

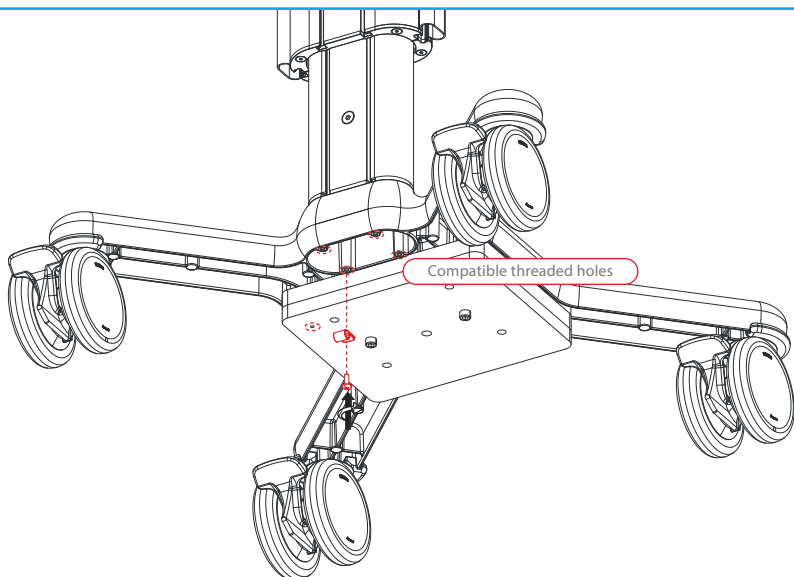

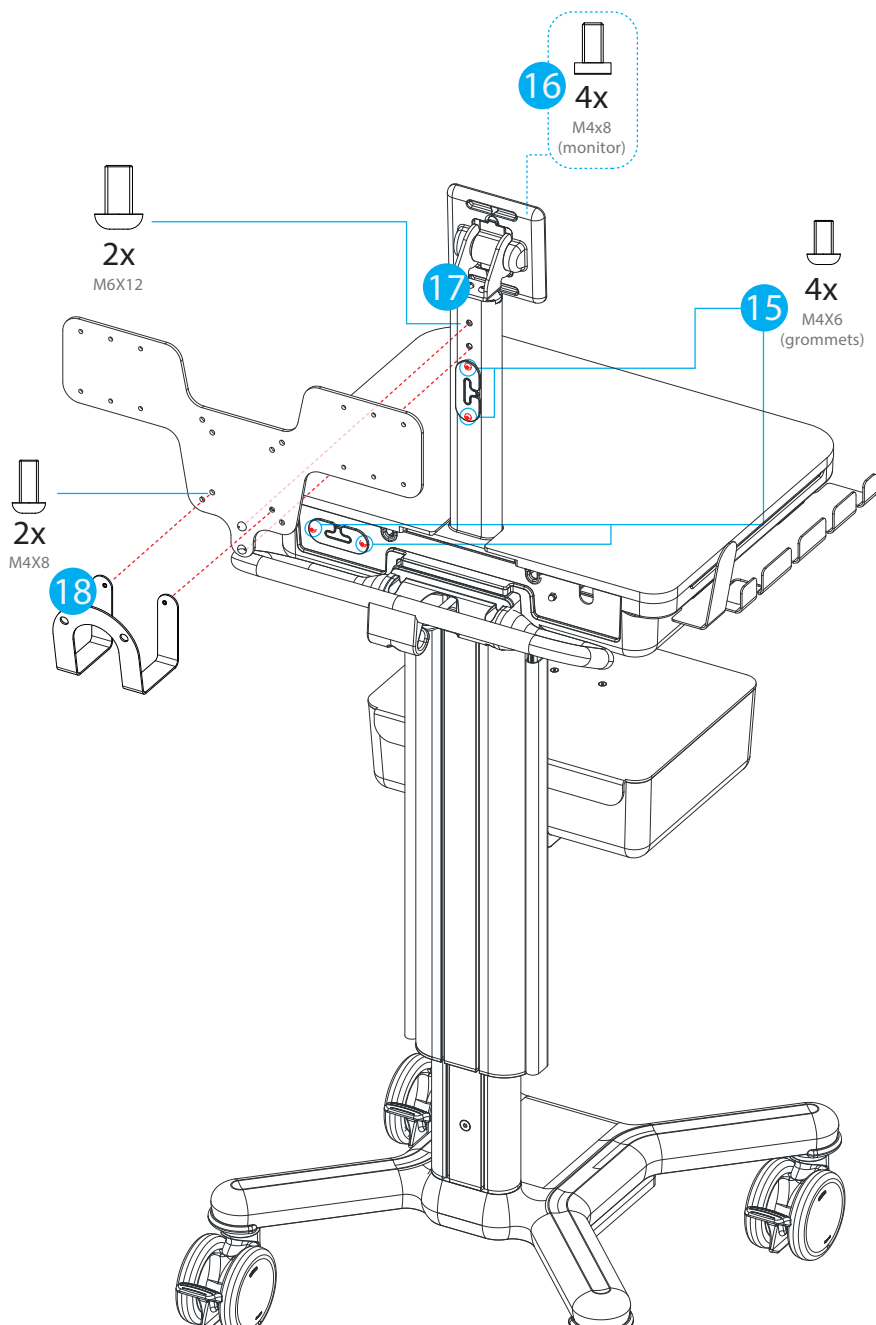

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Důležitá upozornění



Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technický personál podle pokynů k montáži a údržbě (viz zvláštní kapitola “Montáž” a “Údržba”) tohoto návodu.

URČENÉ POUŽITÍ

Vozík X1T - 000CNSX1T umožňuje přepravu **přístroje a jeho příslušenství** mezi místy terapie v nemocničním prostředí a v prostředí zařízení s omezenou péčí.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVINNOSTI

- Před použitím je nutné si přečíst návod k použití vozíku.
- Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Výrobek byl vytvořen výhradně pro metody uvedené v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nevhodné.
- Zásah do vozíku nebo jeho poškození způsobené nesprávným používáním vede k okamžitému propadnutí záruky.
- **Společnost Multix Solutions neodpovídá za škody na osobách a/nebo věcech způsobené nesprávným používáním.**
- Pokud je **zařízení** namontováno na vozík, je povinností **instalátora systému** zajistit, aby systém vyhovoval aktuálním platným normám, tj. aktuální verzi normy EN 60601-1.



OBECNÉ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Bezpečnost vozíku je zaručena pečlivým dodržováním níže uvedených upozornění:

- Zkontrolujte, zda vozík odpovídá obrázku v příručce.
- Zkontrolujte, zda se během přepravy nepoškodil nebo nezničil.
- Zkontrolujte funkčnost pohyblivých a blokových částí, jako jsou kola, brzdy a plynová pružina (pokud je přítomna).
- Po sestavení systému a jeho příslušenství musí být všechna čtyři kola vozíku zablokována.
- Pokud vozík nejedí, zajistěte, aby byla kola vozíku zablokována a aby systém nebyl zaparkován na nerovném povrchu.
- Před tlačení vozíku musí být všechna kola vozíku odblokována.
- Aby se vozík nepřevrátil, je nutné držet rukojeť, pokud vozík přejíždí přes překážky (např. elektrické kabely).
- Při tlačení vozíku nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Na tomto zařízení nejsou povoleny žádné změny.




POKYNY PRO NAČÍTÁNÍ

- **JE ZAKÁZÁNO SEDĚT NA VOZÍKU.**
- **ZÁKAZ TLAČENÍ PŘI ZABLOKOVANÝCH KOLECH**
- Dodržujte maximální zatížení uvedené v části “převážná poloha a směr”.
- **Ujistěte se, že celková hmotnost namontované konfigurace (sečtené příslušenství) nepřesahuje celkovou hmotnost uvedenou na štítku nalepeném na vozíku a na následující straně.**

Důležitá upozornění

POLOHA A SMĚR PŘEPRAVY

Při přepravě musí být vozík spuštěn až na konec plynové pružiny, přičemž držíte chod rukojeti směrem dopředu, jak je znázorněno na obrázku níže:

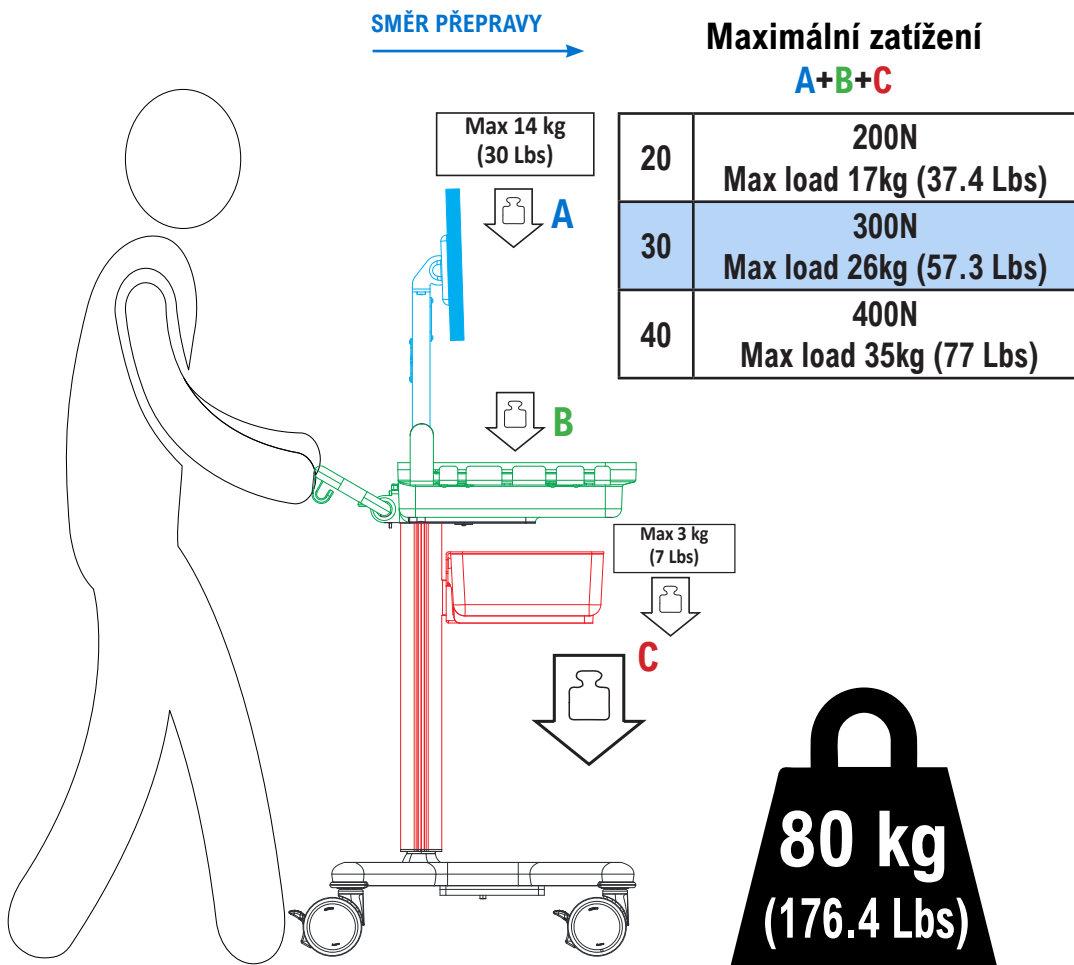



Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovog priručnika.

ÚDRŽBA

Každých 6 měsíců zkontrolujte všechny upevňovací body a mechanismy. Výrobek je vhodný pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelně čistěte kovové a/nebo plastové povrchy nekorozivními čistícími prostředky s neutrálním pH a hadříkem/houbou/kartáčem s měkkými štětinami. Nenalévejte přímo na povrchy tekuté čistící prostředky na bázi chlóru nebo čpavku, mastné a olejové látky.

NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly si vyžádejte u distributora zařízení (viz část Kontakt).

RADNI VIJEK I ODLAGANJE

Životnost výrobku je 10 let.

Vozík a obal se likvidují v souladu s místními nebo vnitrostátními předpisy.

Kartonová krabice a vnitřní výztuhy	vnitřní obal
KARTONOVÁ DESKA	POLYETHYLEN S NÍZKOU HUSTOTOU

SLOVNÍČEK SYMBOLŮ

Na vozíku nebo v návodu jsou uvedeny následující symboly:



Opatrnost



Návod k obsluze



Mlékařské zařízení



Teplotní limit



Uchovávejte v suchu



Je zakázáno sedět na vozíku



celková hmotnost



Označení CE



Производитель



Batch kód



Orientace



Chraňte před slunečním zářením



Tlačení zakázáno



Katalogové číslo



Číslo výrobku



Datum výroby



Křehké, zacházejte opatrně



Температурна граница



Distribuoval

Distribuuje: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Vyrobil: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

