

Instructiehandleiding



Geef de gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker na de installatie.




Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

**Reproducties, duplicaties of vertalingen, zelfs in de vorm van uittreksels, zijn
verboden zonder voorafgaande toestemming van Multix Solutions S.r.l.**

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIE




De Trolley X1T is een medisch hulpmiddel van klasse I volgens de classificatieregels van bijlage VIII en draagt de “CE”-markering in overeenstemming met de verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) (EU) 2017/745. Hij voldoet aan IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 en voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I van de bovengenoemde verordening betreffende medische hulpmiddelen.

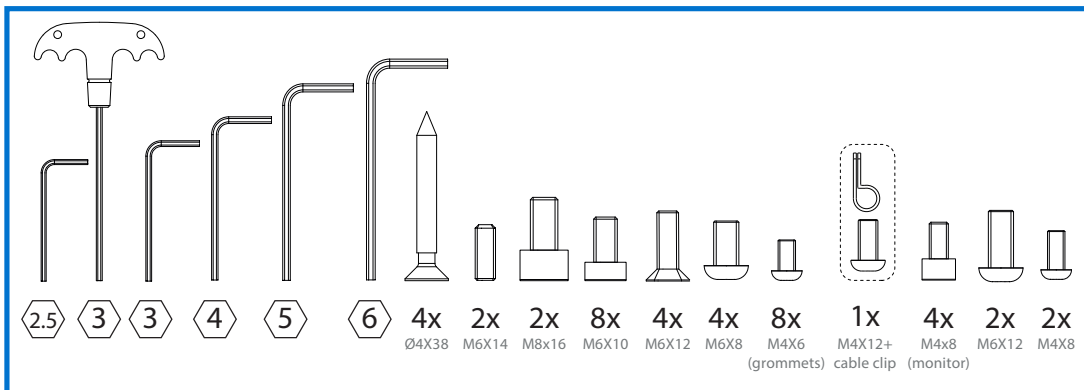

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIE 000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Als er accessoires aanwezig zijn, raadpleeg dan de bijbehorende instructies voordat u de trolley in elkaar zet.

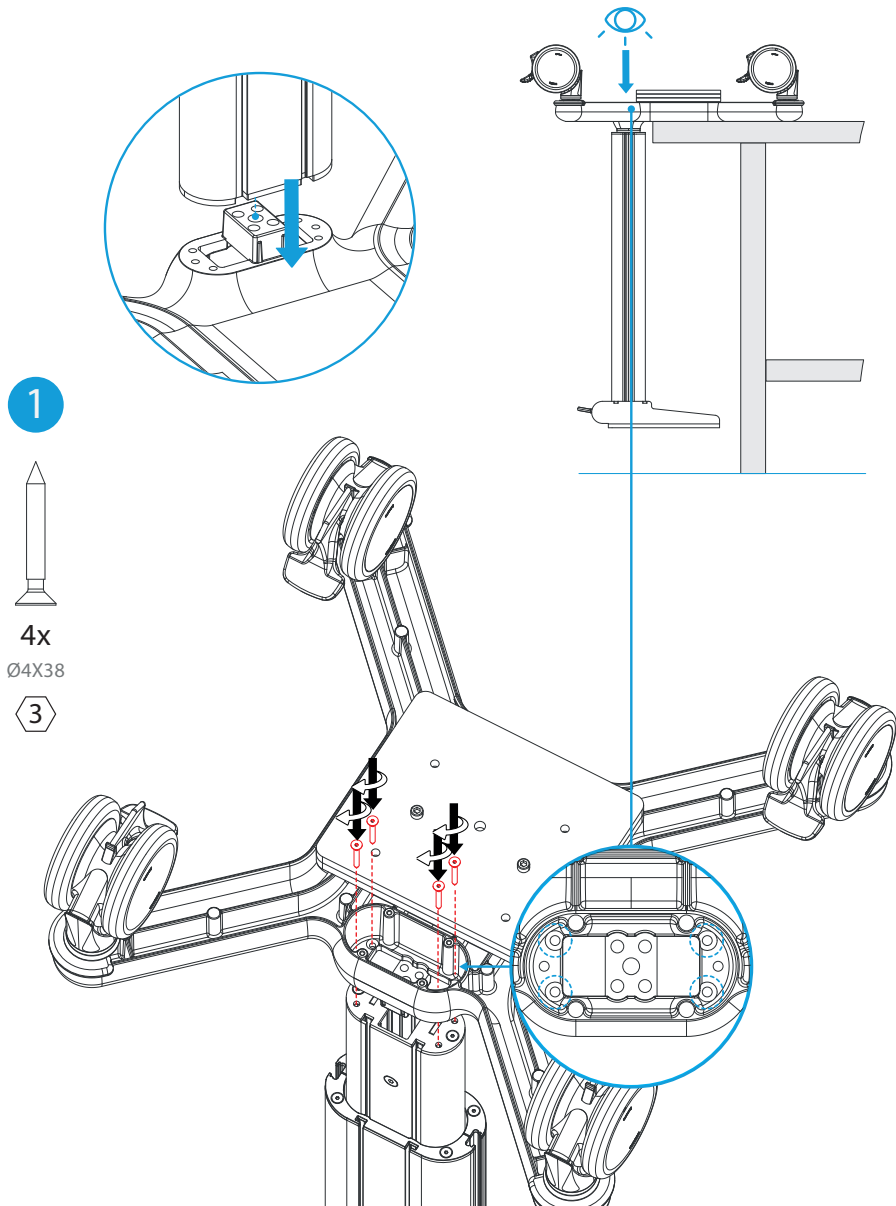

2



2x

M6X14



3




2x


M8x16




6

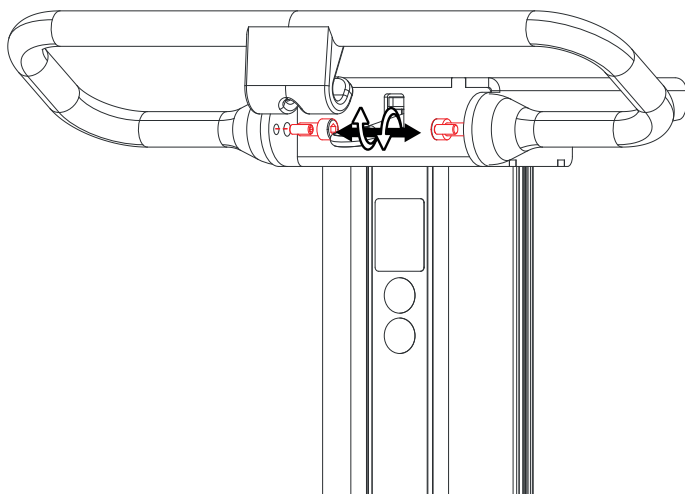


3

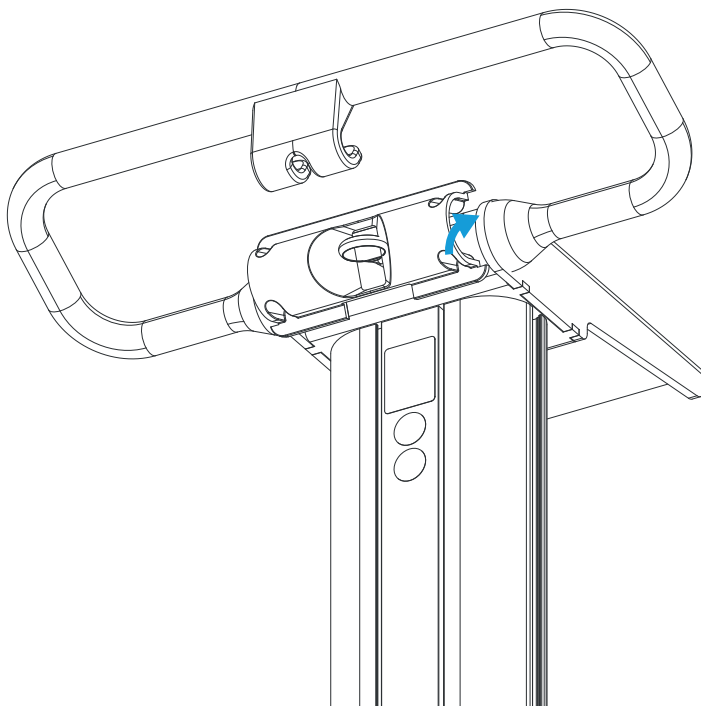

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

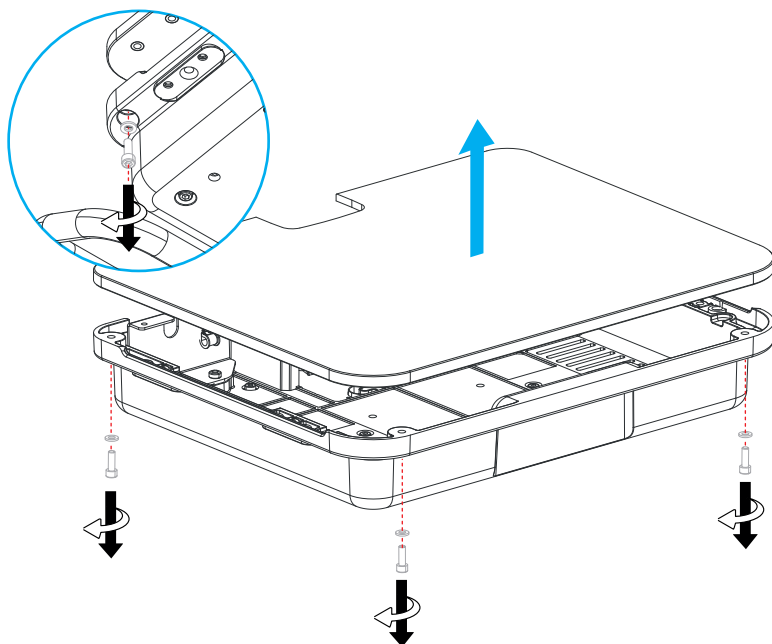

- 6
- 4x
M6x12
- 4

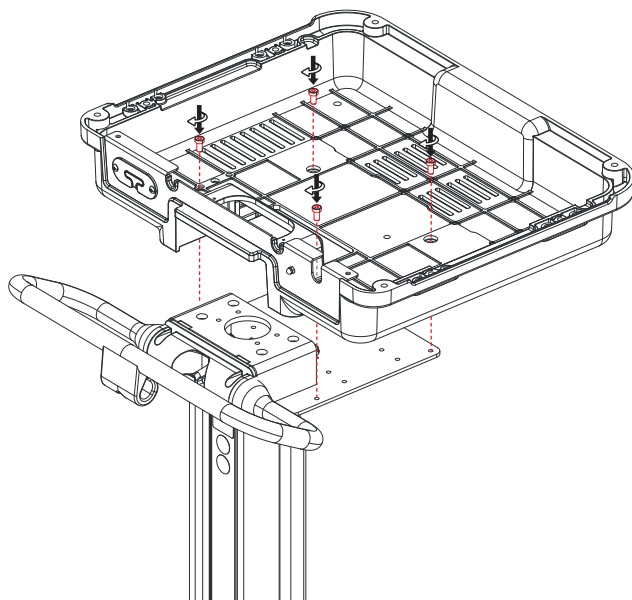


7



4x
M6x12

4

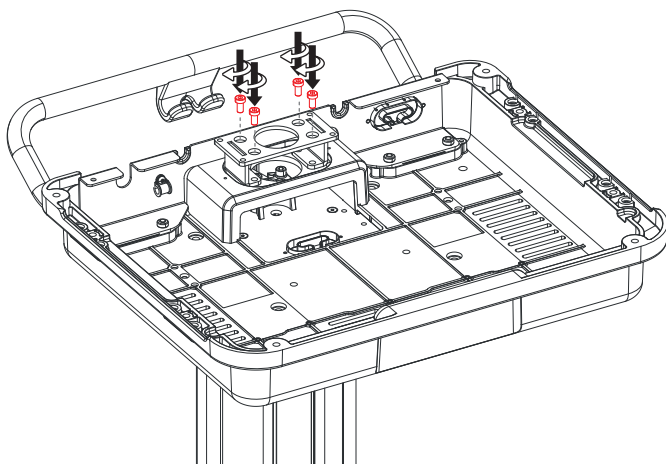


8




4x
M6x10

4

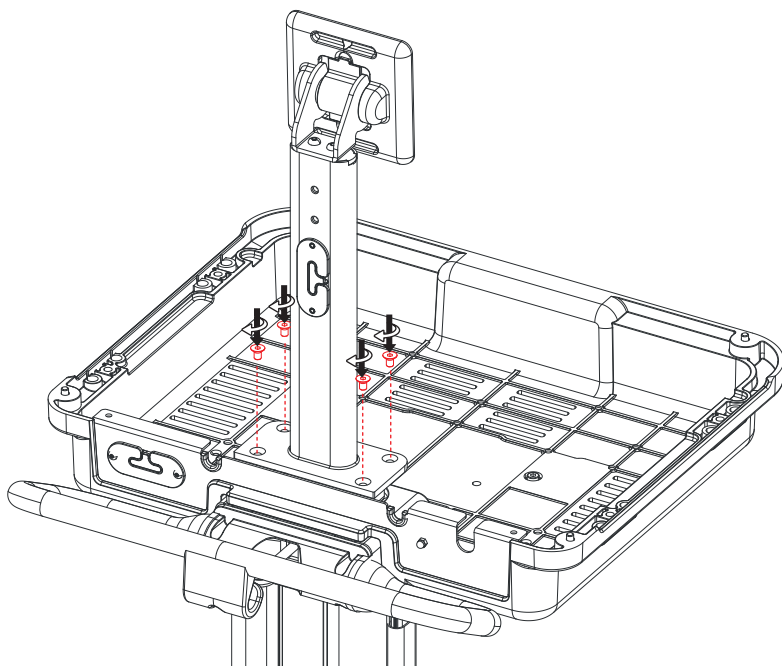


9

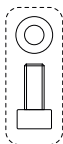

4x
M6x18
metal washer

5

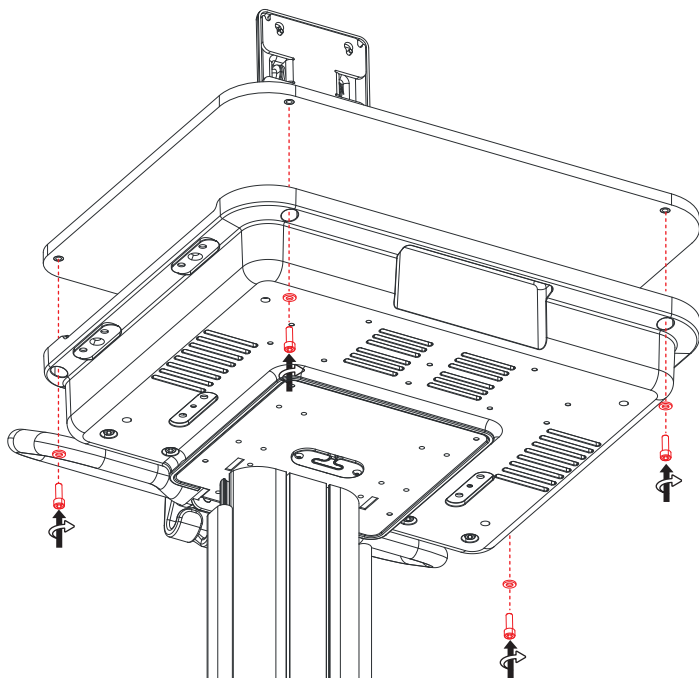



10



4x
M6X8

4

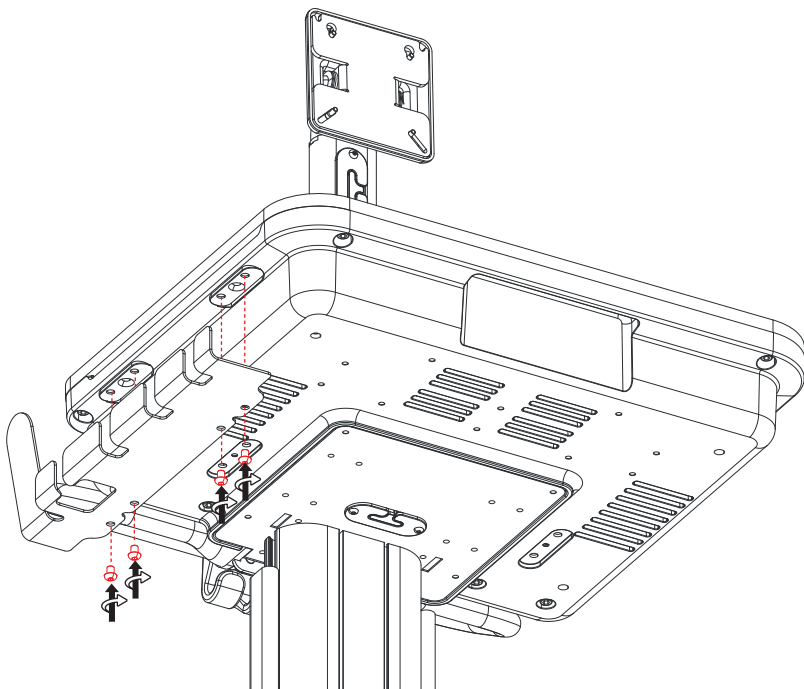

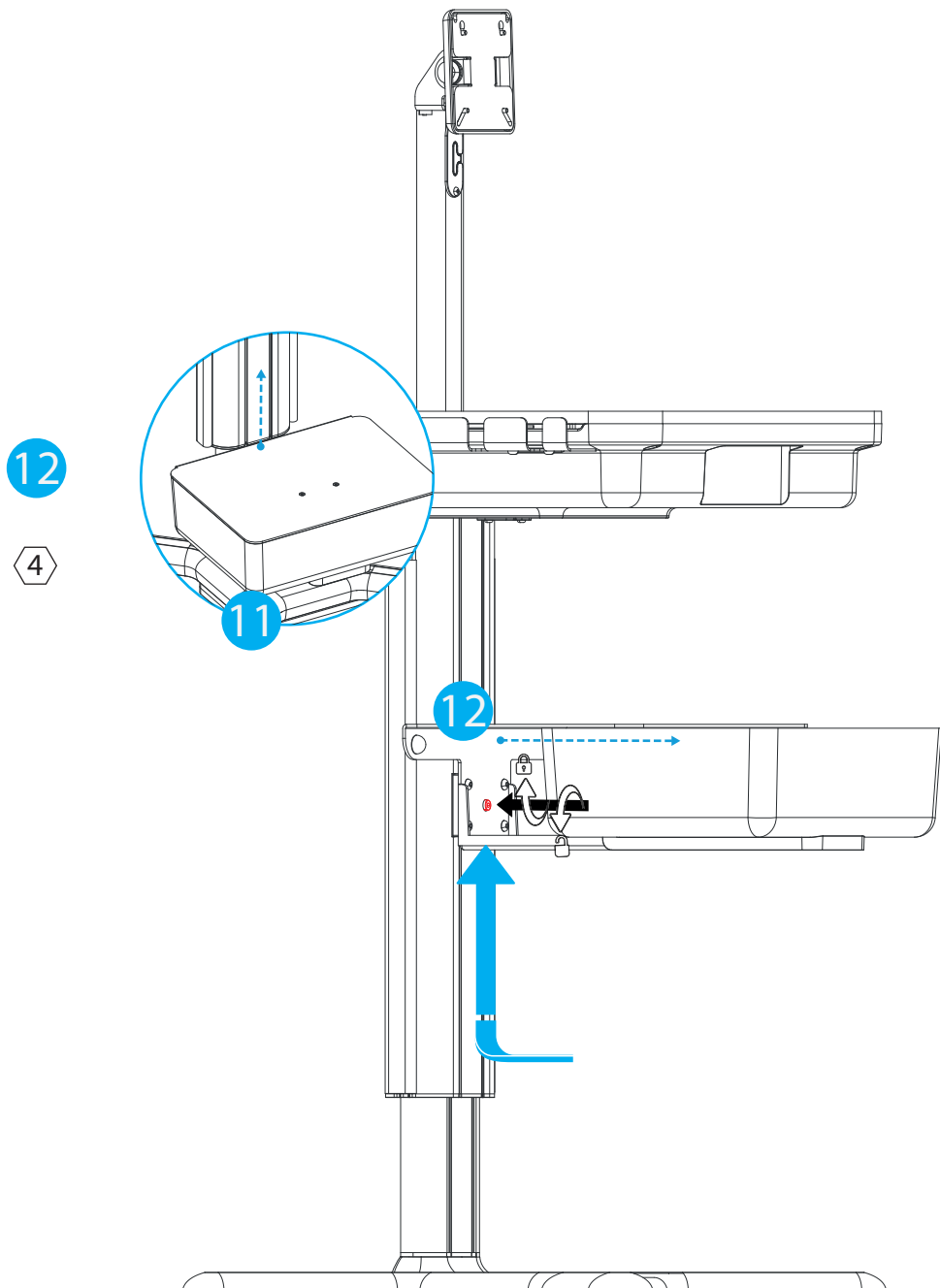


13




4x

M4X6

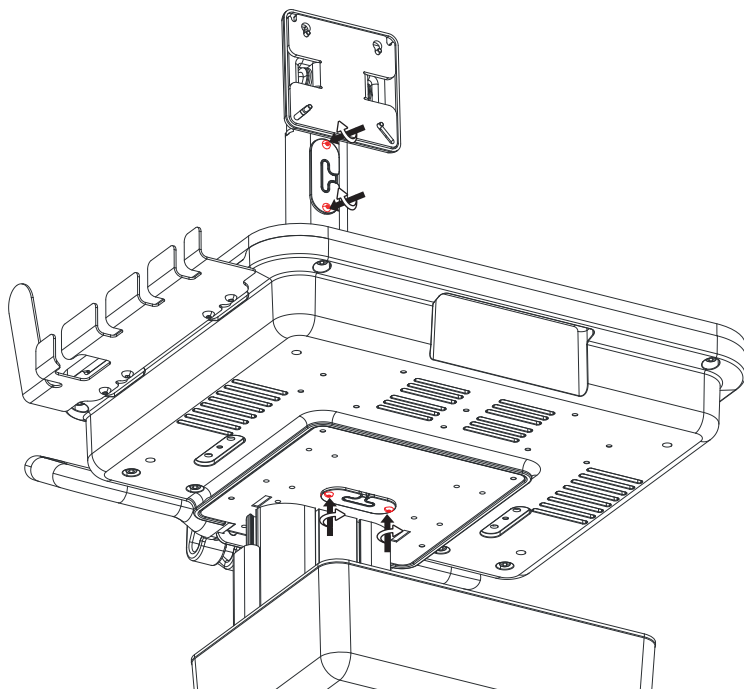


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

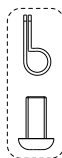

1x

M4X12+
cable clip

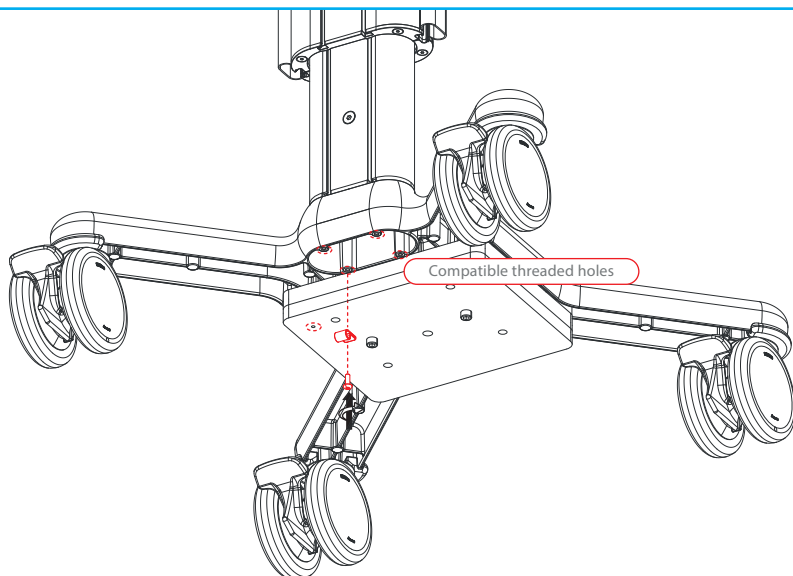

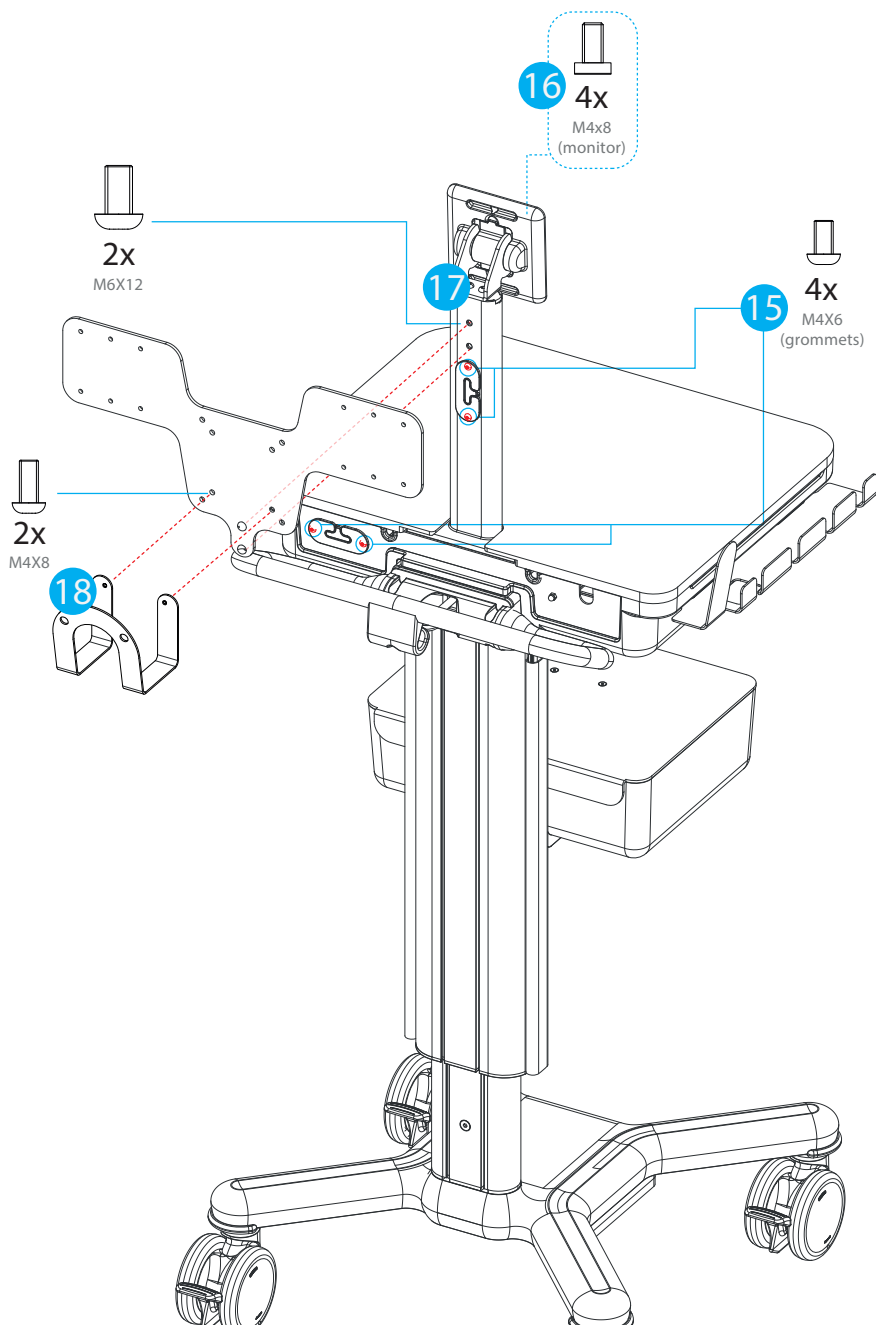

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Belangrijke opmerkingen



Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

BEOOGD GEBRUIK

De **Trolley X1T - 000CNSX1T** maakt het mogelijk om **een apparaat en de bijbehorende accessoires** te vervoeren tussen therapiepunten in ziekenhuizen en instellingen voor beperkte zorg.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN

- Lees voor gebruik de instructies van de trolley.
- Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Het product is uitsluitend gemaakt voor de methoden die in de handleiding worden genoemd. Elk ander gebruik moet als onjuist worden beschouwd.
- Knoeien of schade door verkeerd gebruik van de kar leidt tot onmiddellijke verbeuring van de garantie.
- Multix Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken door oneigenlijk gebruik.
- Wanneer **een apparaat** op de trolley wordt gemonteerd, is het de verantwoordelijkheid **van de installateur** van het systeem om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de huidige toepasselijke normen, EN 60601-1 huidige versie.

ALGEMENE WAARSCHUWING EN VOORZICHTIGHEID



De veiligheid van de kar wordt gegarandeerd door de onderstaande waarschuwingen zorgvuldig op te volgen:

- Zorg ervoor dat het wagentje overeenkomt met de illustratie in de handleiding.
- Controleer of het niet gebroken of beschadigd is tijdens transport.
- Controleer of de bewegende en vergrendelende onderdelen zoals wielen, remmen en (indien aanwezig) de gasveer goed werken.
- Alle vier de wielen van de wagen moeten worden geblokkeerd wanneer het systeem en de accessoires worden gemonteerd.
- Als er niet met de kar wordt gereden, zorg er dan voor dat de wielen van de kar geblokkeerd zijn en dat het systeem niet op oneffen oppervlakken wordt geparkeerd.
- Alle wielen van de kar moeten ontgrendeld zijn voordat de kar wordt geduwd.
- Om te voorkomen dat de kar omvalt, moet de handgreep worden vastgehouden als de kar over obstakels (bijvoorbeeld elektriciteitsnoeren) wordt gereden.
- Vermijd overmatige kracht bij het duwen van de kar.
- Wijzigingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.




LAADINSTRUCTIES

- **HET IS VERBODEN OM OP DE KAR TE ZITTEN**
- **DUWEN VERBODEN WANNEER DE WIELEN GEBLOKKEERD ZIJN**
- Volg de maximale belasting zoals aangegeven in het hoofdstuk “transportpositie en-richting”.
- Zorg ervoor dat het totale gewicht van de gemonteerde configuratie (inclusief de accessoires) niet hoger is dan het totale gewicht dat vermeld staat op het label dat op de kar en op de volgende pagina is aangebracht.

Important notices

TRANSPORTPOSITIE EN -RICHTING

Tijdens het transport moet de trolley tot het einde van de gasveer worden neergelaten met de handgreep naar voren gericht, zoals op de onderstaande afbeelding:

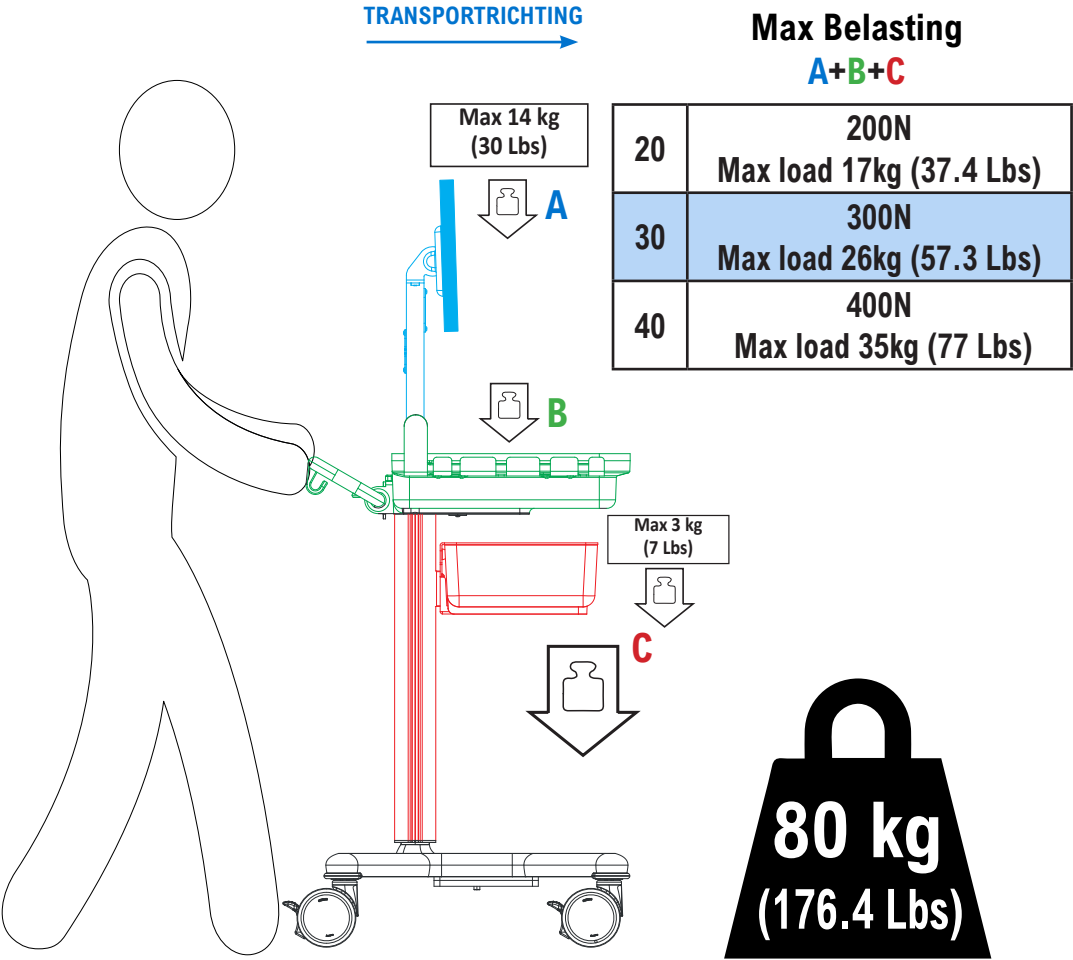

Bijlage



Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel en volgens de montage- en onderhoudsinstructies (zie het specifieke hoofdstuk “Montage” en “Onderhoud”) van deze handleiding.

ODRŽAVANJE

Controleer alle bevestigingspunten en mechanismen om de 6 maanden.

Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

SCHOONMAKEN

Reinig de metalen en/of kunststof oppervlakken regelmatig met niet-corrosieve neutrale pH reinigingsmiddelen en een doek/spons/borstel met zachte haren.

Giet geen vloeibare, chloor- of ammoniakhoudende detergents, vette en olieachtige stoffen rechtstreeks op oppervlakken..

RESERVEONDERDELEN

Neem voor reserveonderdelen contact op met de distributeur van het apparaat (zie hoofdstuk Contact).

RADNI VIJEK I ODLAGANJE

De levensduur van het product is 10 jaar.

De kar en de verpakking moeten worden weggegooid volgens de plaatselijke of landelijke voorschriften.

kartonnen doos en interne versterkingen	interne verpakking
	
KARTON	POLYETHYLEEN MET LAGE DICHTHEID

VERKLARENDE WOORDENLIJST VAN SYMBOLEN

De volgende symbolen worden vermeld op de wagen of in de instructie:



Voorzichtigheid



Bedieningsinstructie



Medical apparaat



Vochtigheidsbeperking



Droog bewaren



Het is verboden om op de kar te zitten



Totaal gewicht



CE-markering



Fabrikant



Code Batch



Oriëntatie



Uit de buurt van zonlicht houden



Duwen verboden



Catalogusnummer



Productnummer



Datum van vervaardiging



Breekbaar, voorzichtig hanteren



Температурна граница



Gedistribueerd door

Gedistribueerd door: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Gefabriceerd door: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com