

Käyttöohje

cnsystems 



Toimita käyttöohjeet loppukäyttäjälle asennuksen jälkeen.




Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat “Kokoonpano” ja “Huolto”).

**Jäljentäminen, kopioiminen tai kääntäminen, myös osittain, on kielletty ilman
Multix Solutions S.r.l.:n etukäteen antamaa lupaa.**

KOKOONPANO-OHJEET




Trolley X1T on liitteen VIII luokittelusääntöjen mukainen luokan I lääkinnällinen laite, ja siinä on lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (MDR) (EU) 2017/745 mukainen CE-merkintä. Se on standardin IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 mukainen ja täyttää edellä mainitun lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen liitteessä I esitetyt yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.

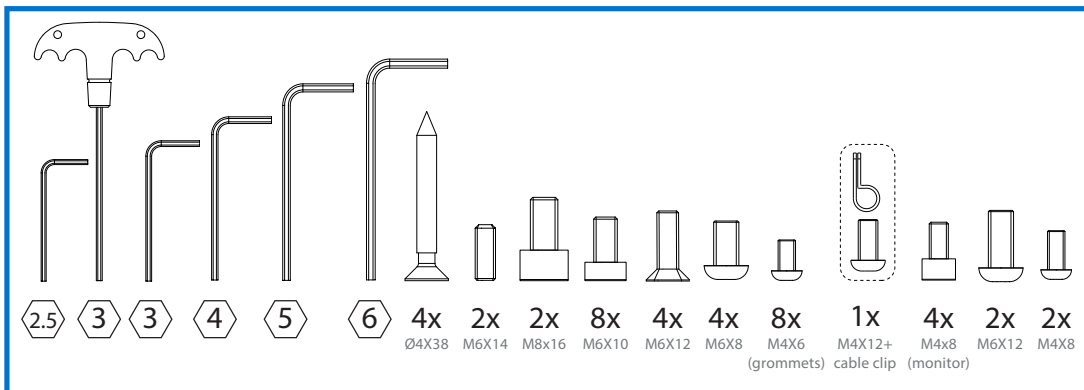

KOKOONPANO-OHJEET

000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! Jos mukana on lisävarusteita, tutustu niihin liittyviin ohjeisiin ennen vaunun kokoamista

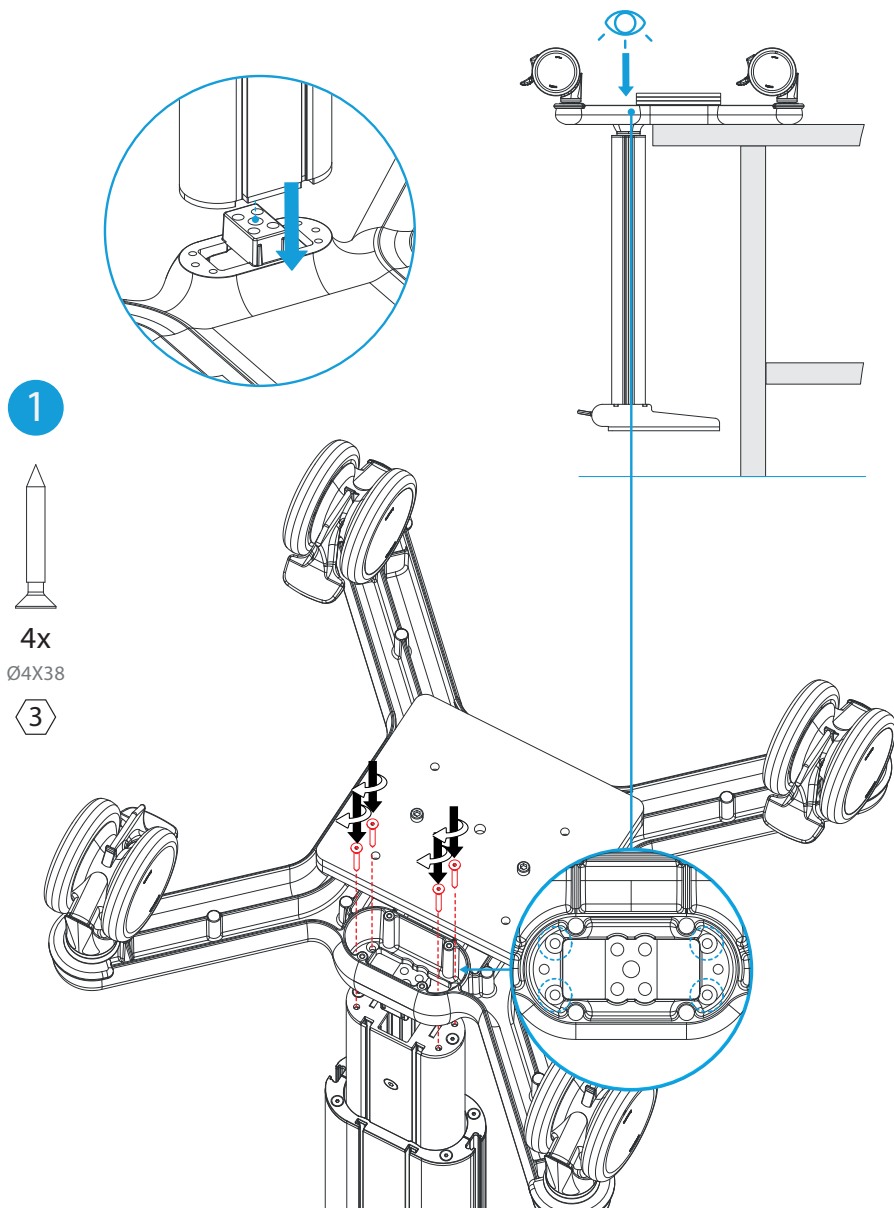

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

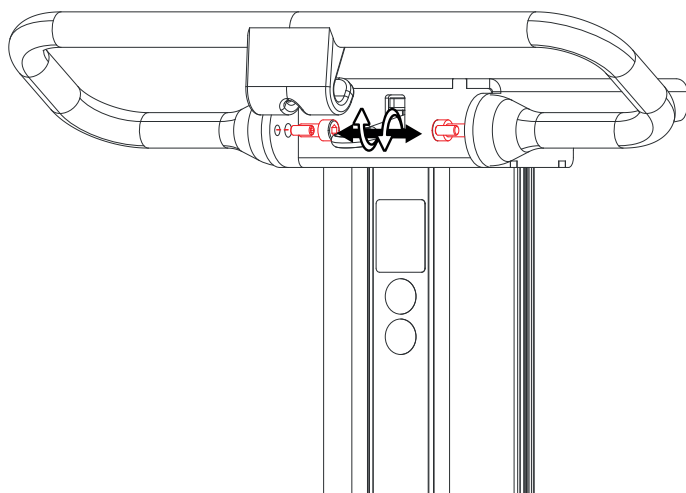


3

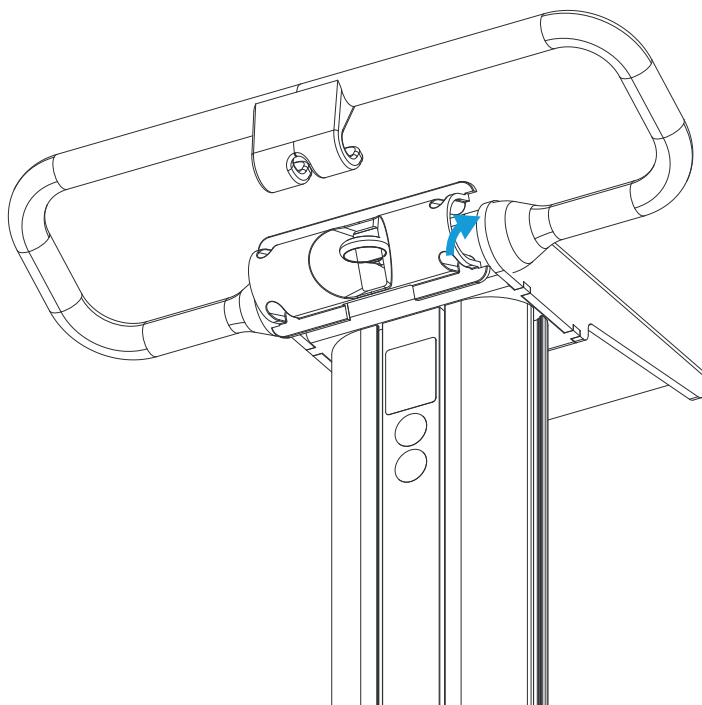

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

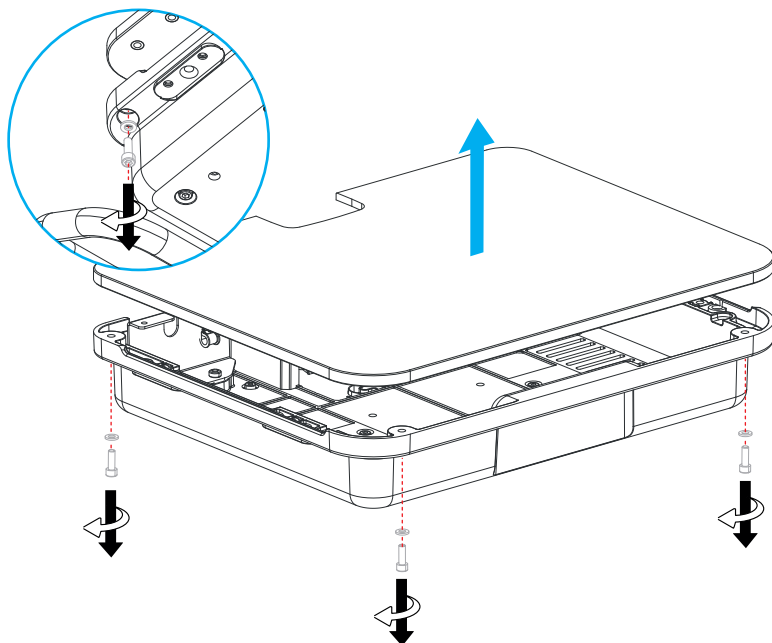

- 6
- 4x
M6x12
- 4

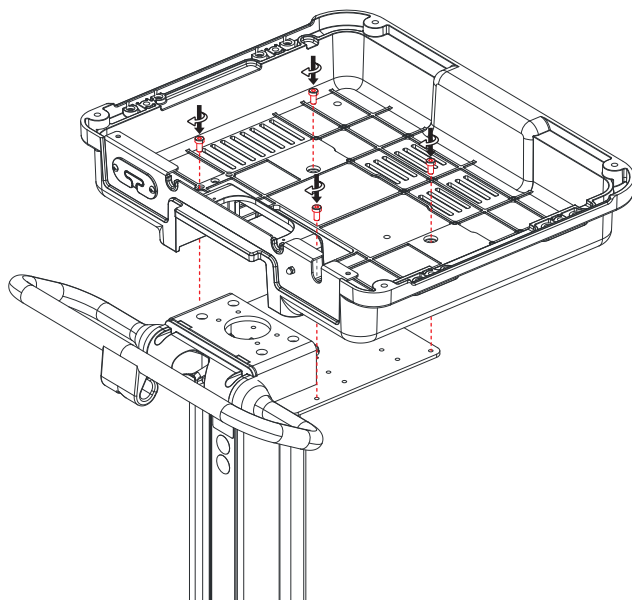


7



4x
M6x12

4

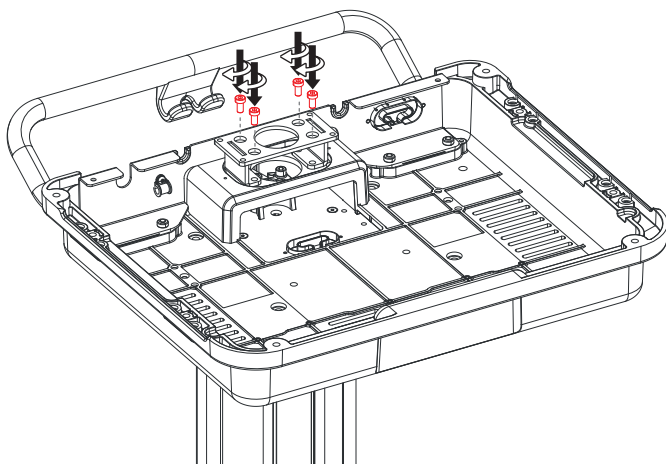


8




4x
M6x10

4

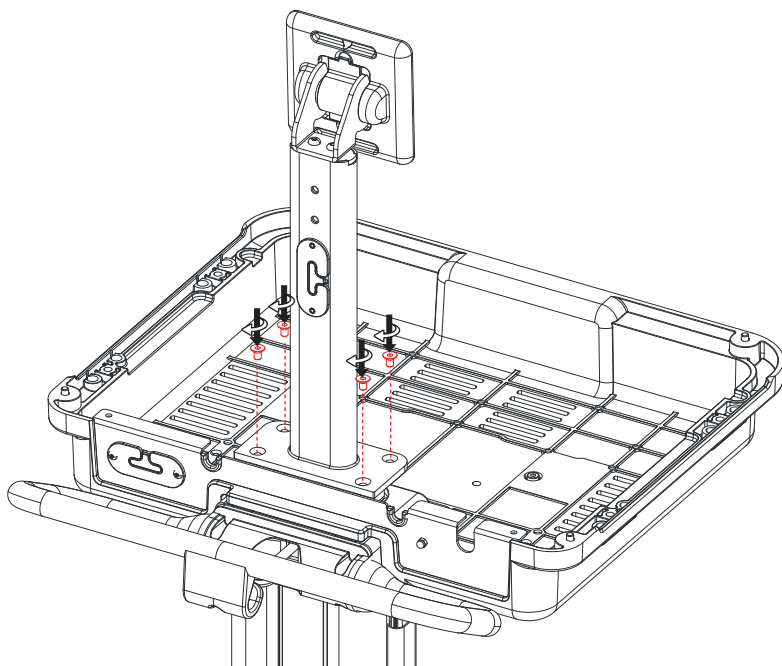


9

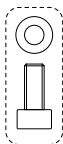

4x
M6x18
metal washer

5

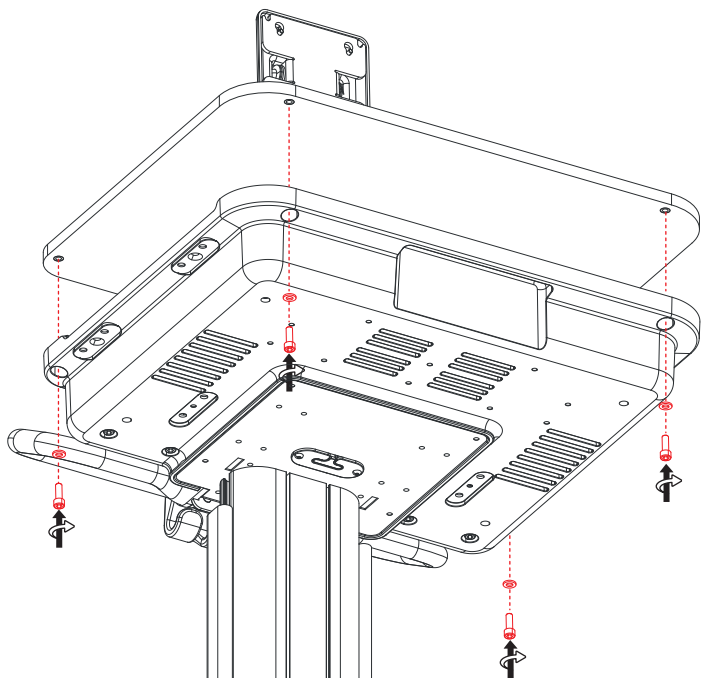



10



4x
M6X8

4

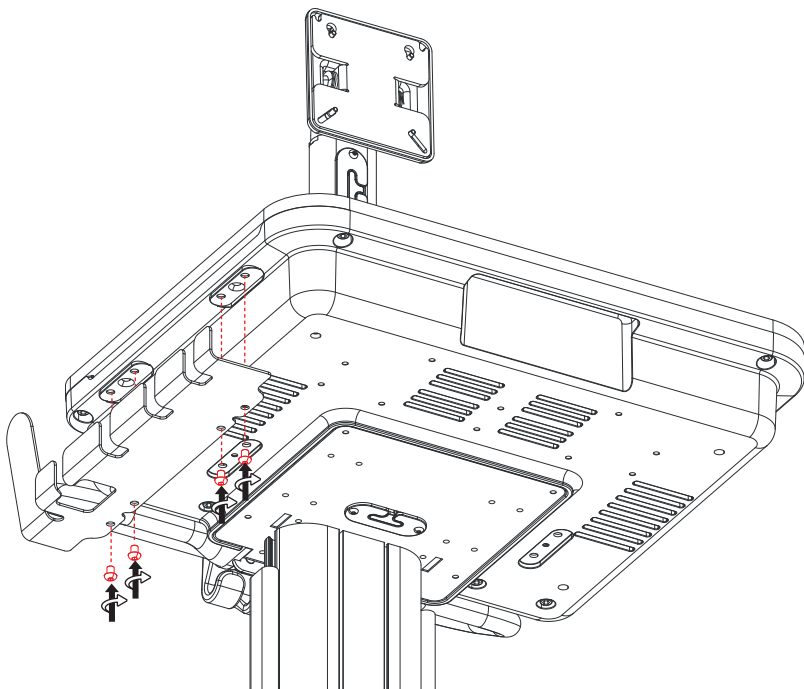

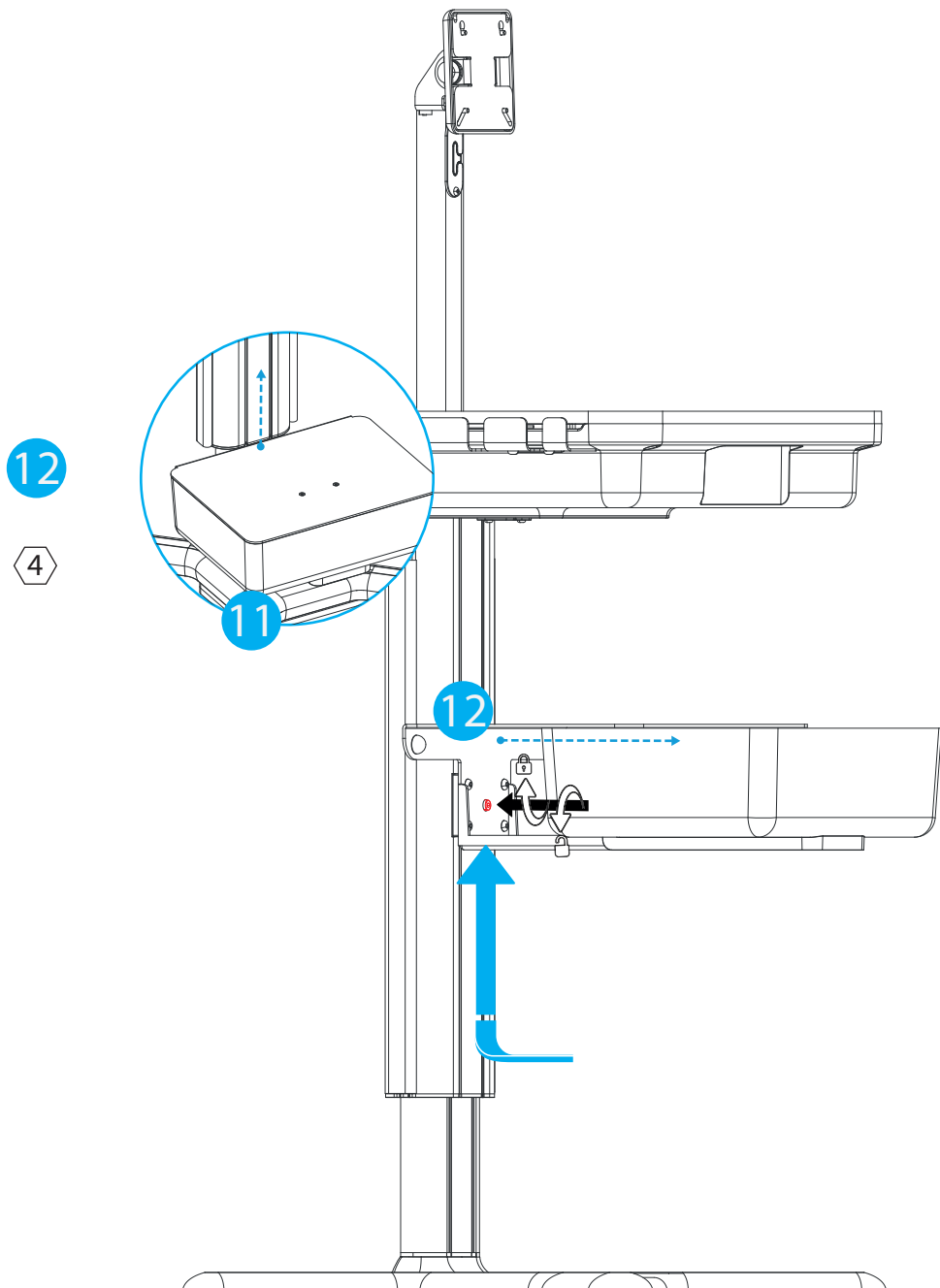


13



4x

M4X6

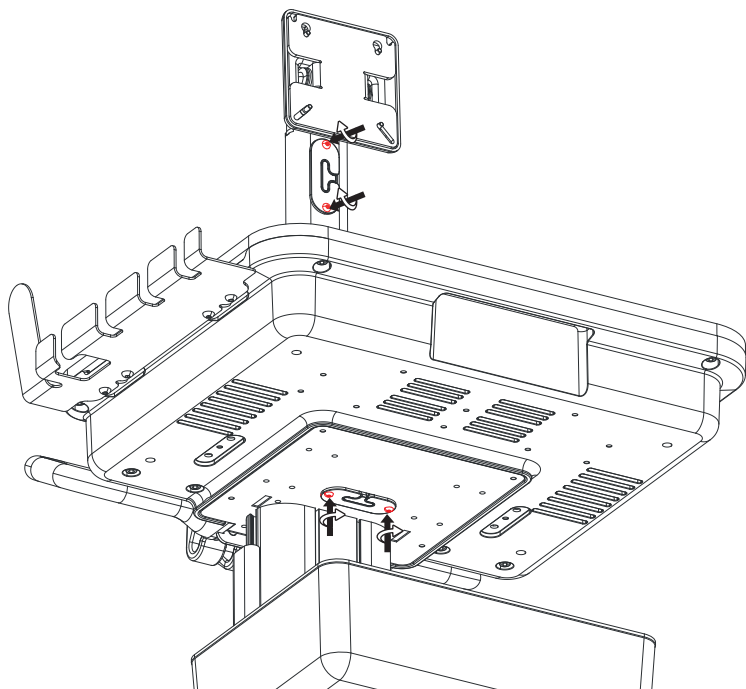


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip

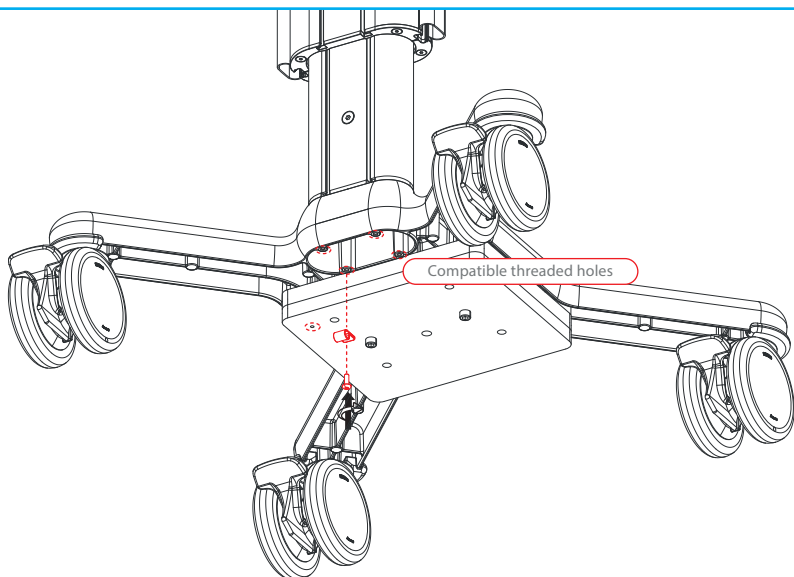

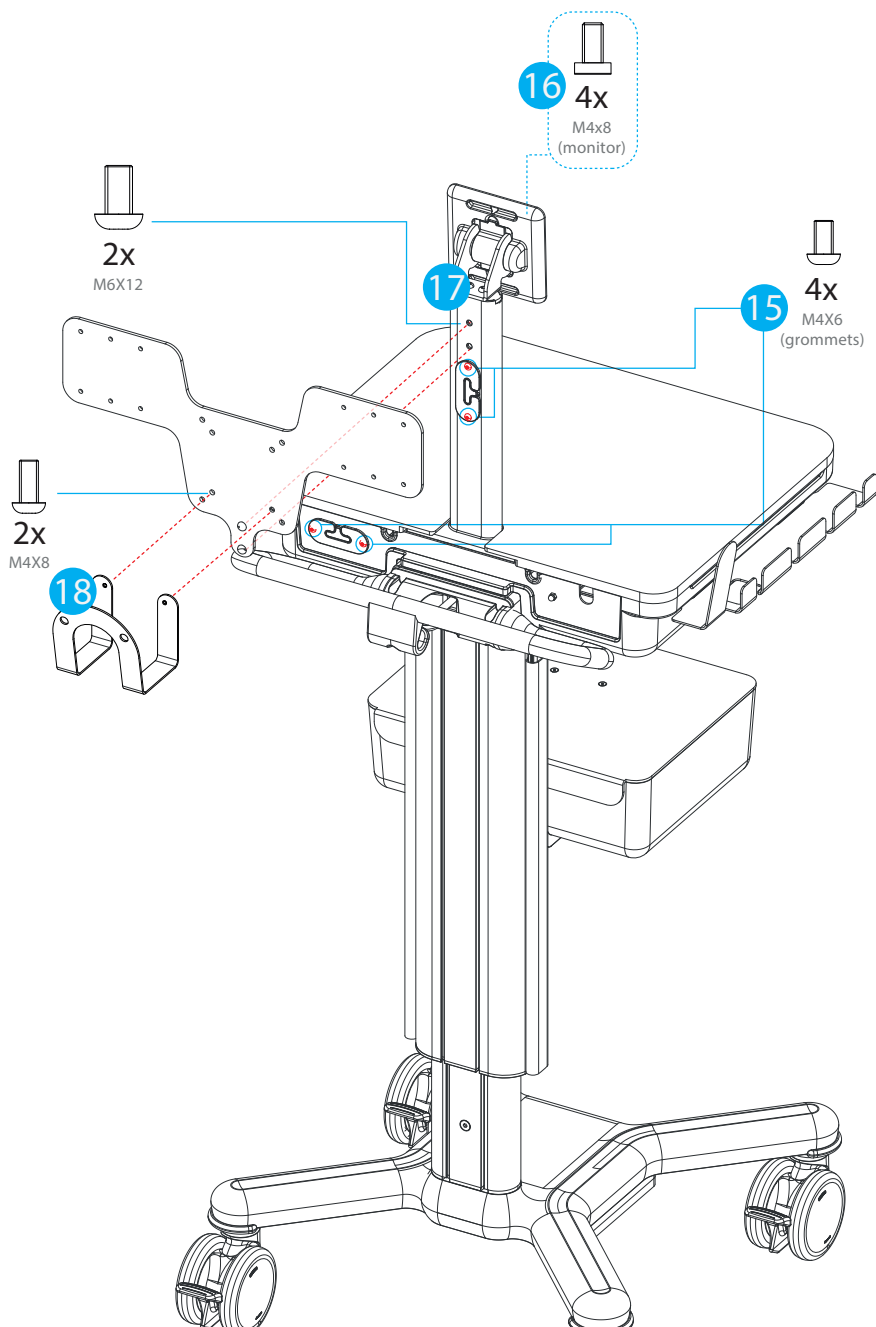

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Tärkeitä huomautuksia



Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat “Kokoonpano” ja “Huolto”).

TAVOITTEELLINEN KÄYTTÖ

Trolley X1T - 000CNSX1T mahdollistaa **laitteen ja sen lisävarusteiden** kuljettamisen hoitopaikkojen välillä sairaalalämpäristössä ja rajoitetun hoidon laitosympäristössä.

YLEISET TURVALLISUUSVELVOITTEET

- Vaunun käyttöohjeet on luettava ennen käyttöä.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Tuote on luotu yksinomaan käyttöohjeessa mainittuja menetelmiä varten. Muuta käyttöä on pidettävä sopimattomana.
- Jos kärryä peukaloidaan tai se vahingoittuu vääränlaisen käytön seurauksena, takuu raukeaa välittömästi.
- **Multix Solutions ei ole vastuussa henkilö- ja/tai esinevahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä.**
- Kun **laite** asennetaan vaunuun, **järjestelmän asentajan** vastuulla on varmistaa, että järjestelmä on voimassa olevien standardien EN 60601-1 nykyisen version mukainen.



YLEINEN VAROITUS JA VAROITUS

Kärryn turvallisuus taataan noudattamalla huolellisesti alla olevia varoituksia:

- Varmista, että kärry vastaa käyttöohjeen kuvaa.
- Tarkista, ettei se ole rikkoutunut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Tarkista, että liikkuvat ja lukittavat osat, kuten pyörät, jarrut ja (jos on) kaasujousi, toimivat.
- Kaikkien kärryn neljän pyörän on oltava lukittuina, kun järjestelmä ja sen lisävarusteet on koottu.
- Kun kärryä ei ajeta, varmista, että kärryn pyörät on lukittu ja että järjestelmää ei ole pysäköity epätasaiselle alustalle.
- Kärryn kaikkien pyörien on oltava lukitsematta ennen kärryn työntämistä.
- Jotta kärry ei kaatuisi, kahvasta on pidettävä kiinni, jos kärryllä ajetaan esteiden yli (esimerkiksi virtajohtojen yli).
- Vältä liiallista voimankäyttöä työntäessäsi kärryä.
- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.




LATAUSOHJEET

- **KÄRRYILLÄ ISTUMINEN ON KIELLETTY.**
- **TYÖNTÄMINEN KIELLETTY, KUN PYÖRÄT OVAT TUKOSSA**
- Noudata kohdassa “Kuljetusasento ja -suunta” ilmoitettuja enimmäiskuormia
- **Varmista, että asennetun kokoonpanon kokonaispaino (lisävarusteet mukaan luettuina) ei ylitä kärryyn kiinnitetyssä tarrassa ja seuraavalla sivulla ilmoitettua kokonaispainoa.**

Tärkeitä huomautuksia

KULJETUSASENTO JA -SUUNTA

Kuljetuksen aikana vaunu on laskettava alas kaasujousen päähän asti, pitäen kahvan kulkua eteenpäin, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty:

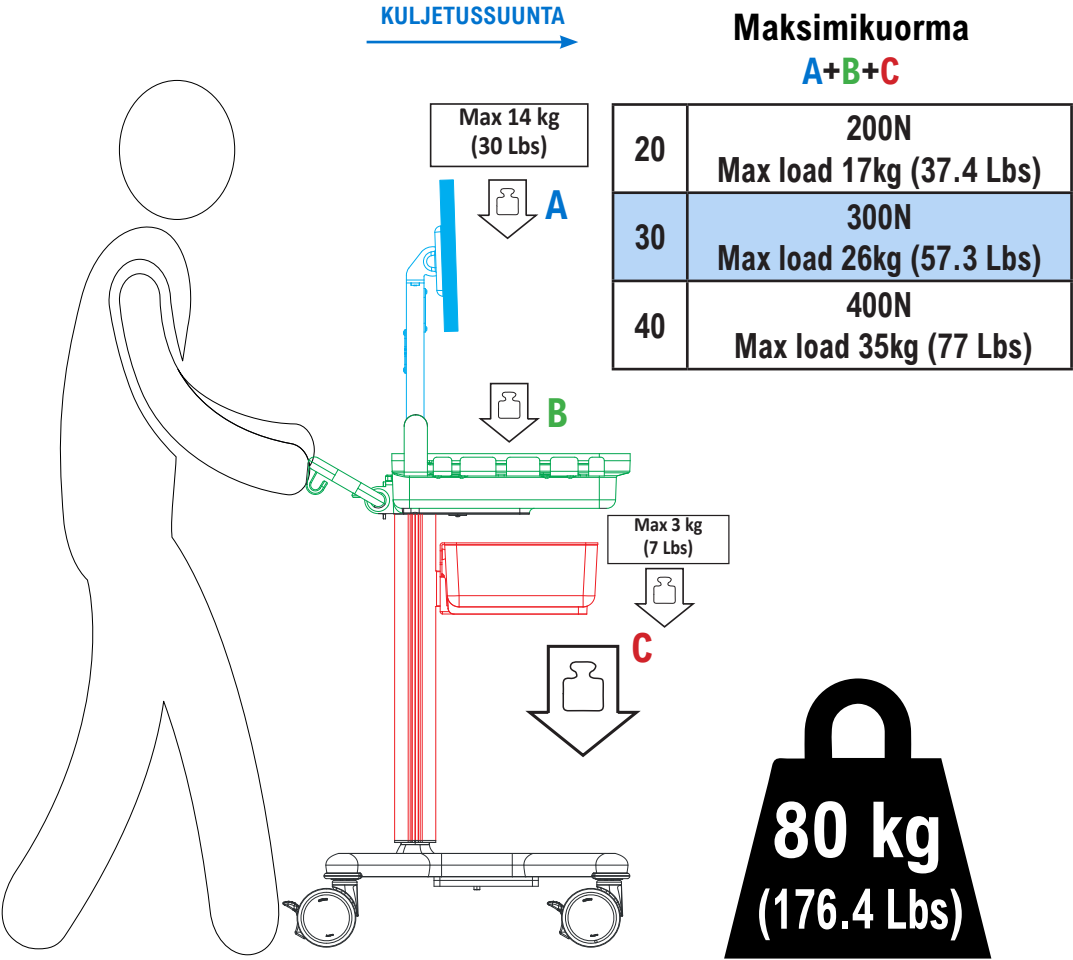

Liite



Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat “Kokoonpano” ja “Huolto”).

HUOLTO

Tarkasta kaikki kiinnityspisteet ja mekanismit 6 kuukauden välein.
Tuote soveltuu vain sisätiloissa käytettäväksi.

PUHDISTUS

Puhdista metalli- ja/tai muovipinnat säännöllisesti syövyttämättömillä neutraalin pH:n pesuaineilla ja pehmeäharjaksisella liinalla/sienellä/harjalla.
Älä kaada suoraan pinnoille nestemäisiä, klooripohjaisia tai ammoniakkipohjaisia pesuaineita, rasvaisia ja öljyisiä aineita.

VARAOSAT

Varaosia saa laitteen jälleenmyyjältä (ks. kohta Yhteystiedot).

KÄYTTÖIKÄ JA HÄVITTÄMINEN

Tuotteen käyttöikä on 10 vuotta.

Kärry ja pakkaus on hävitettävä paikallisten tai kansallisten määräysten mukaisesti.

Kartonová krabice a vnitřní výztuh	vnitřní obal
	
KARTONOVÁ DESKA	POLYETHYLEN S NÍZKOU HUSTOTOU

SYMBOLIEN SANASTO

Na vozíku nebo v návodu jsou uvedeny následující symboly:



Предпазливост



Toiminnan ohje



Medical-laite



Kosteuden rajoitus



Pidä kuivana



Kärryssä ei saa istua



kokonaispaino



CE-merkintä



valmistaja



Batch-koodi



Suunnistus



Pysy poissa auringonvalosta



Työntäminen kielletty



Luettelon numero



Tuotenumero



Valmistuspäivä



Hauras, käsittele huolellisesti



Lämpötilan raja-arvo



Jakanut

Jakelija: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Valmistanut: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

