

Εγχειρίδιο οδηγιών



Παρέχετε το εγχειρίδιο οδηγιών στον τελικό χρήστη μετά την εγκατάσταση.




Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η μετάφραση, ακόμη και με τη μορφή αποσπασμάτων, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Multix Solutions S.r.l.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




Το Trolley X1T είναι ιατρική συσκευή Κατηγορίας I σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης του Παραρτήματος VIII και φέρει τη σήμανση «CE» σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Ιατρικές Συσκευές (MDR) (ΕΕ) 2017/745. Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 και πληροί τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης του Παραρτήματος I του προαναφερθέντος Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

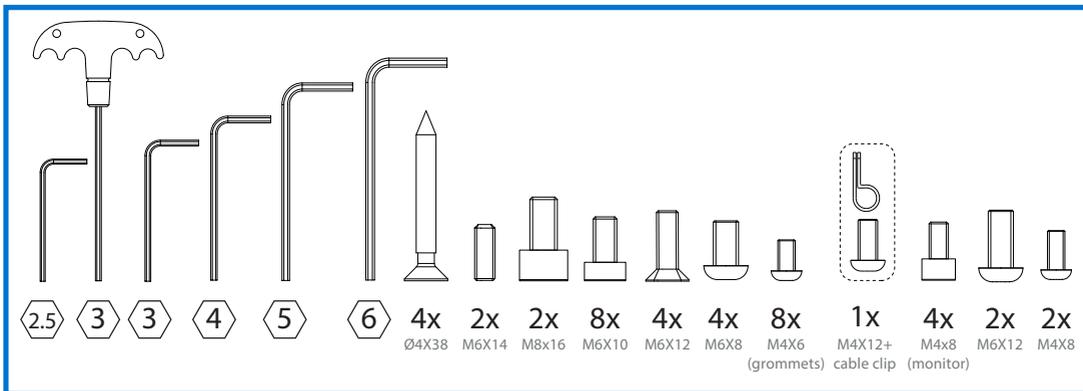

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! Εάν υπάρχουν αξεσουάρ, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες πριν συναρμολογήσετε το καροτσάκι.

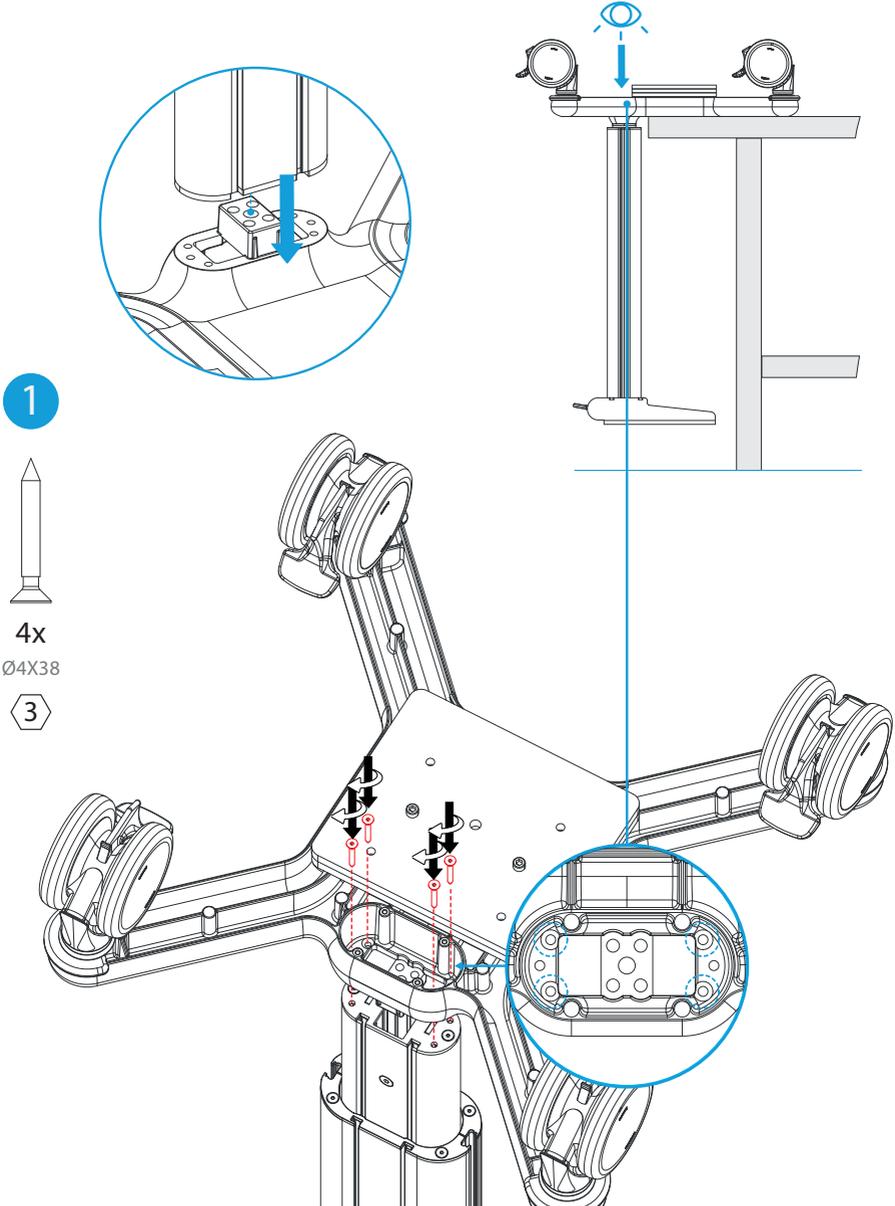

2




2x

M6X14





2x

M8x16

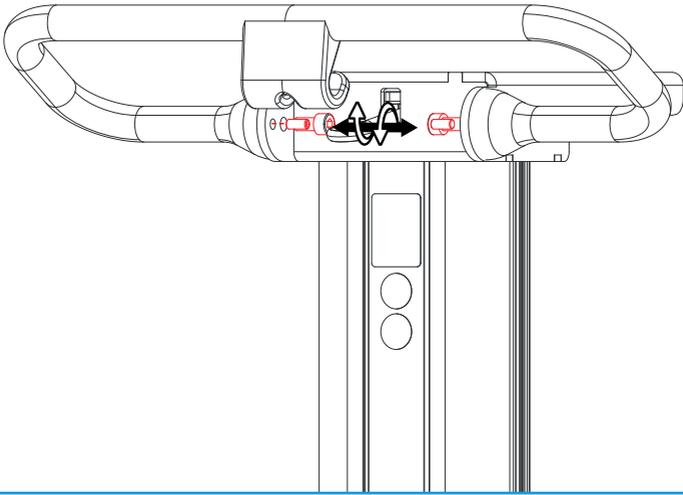


3

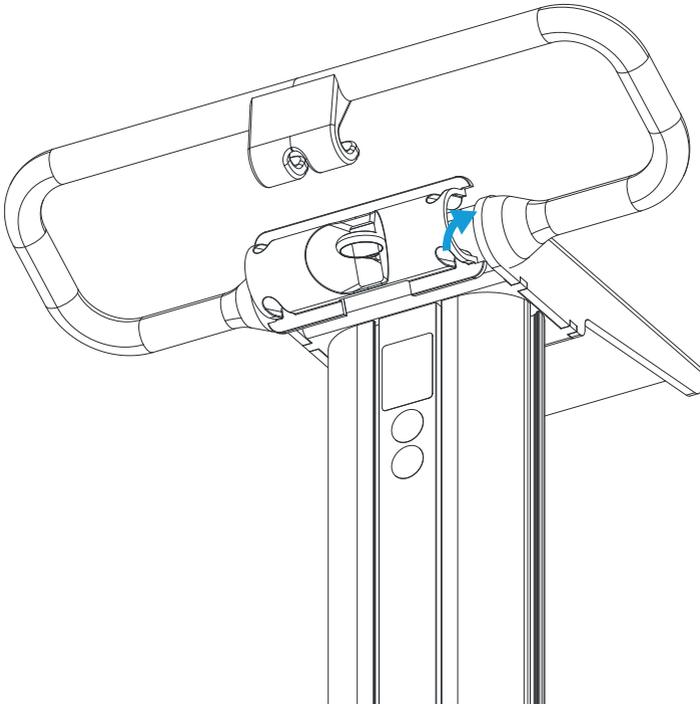

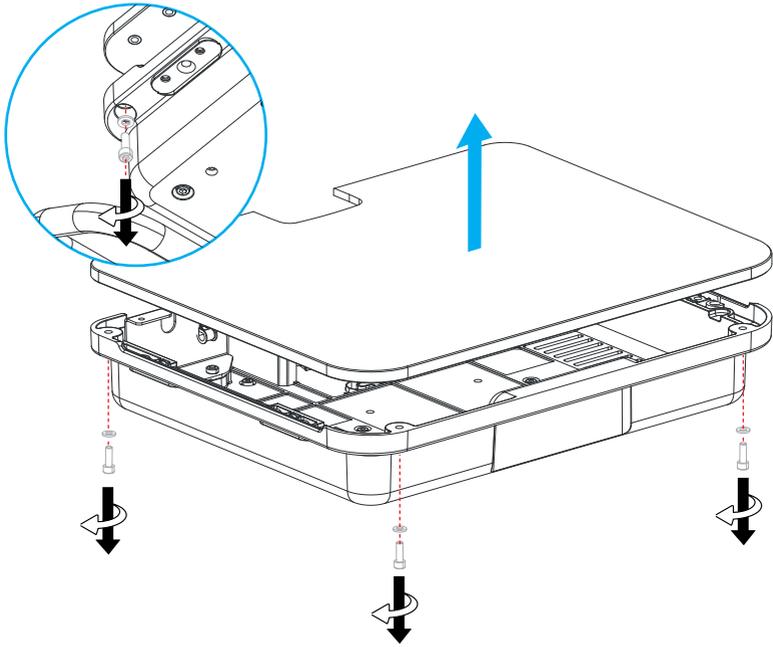


5

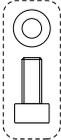

4x
M6x18
metal washer

5

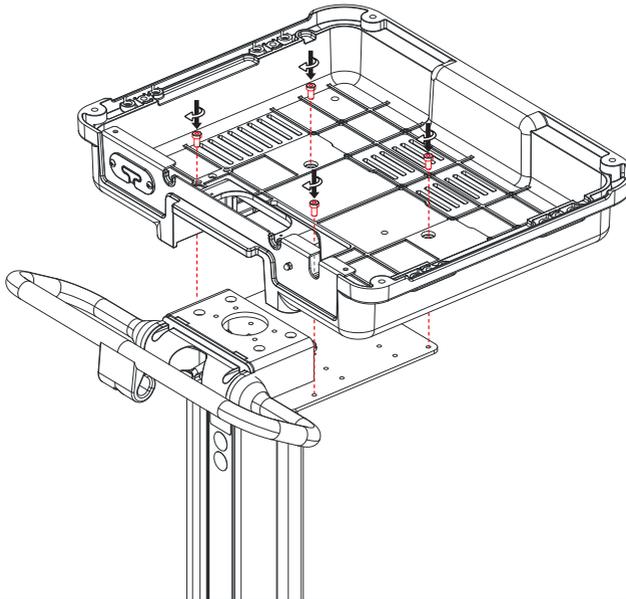

6




4x
M6x12

4

7




4x
M6x12

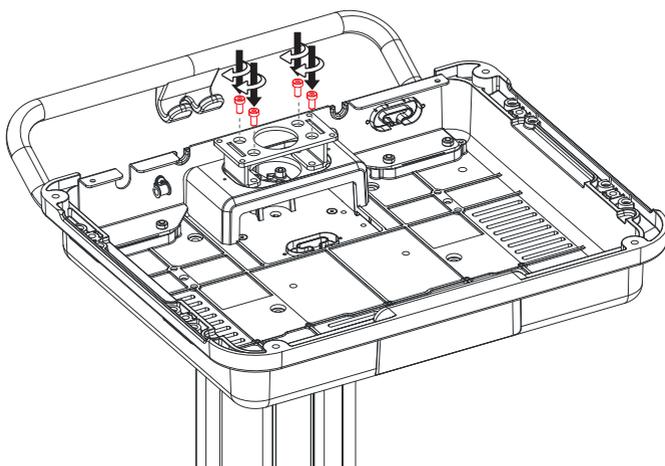


8



4x
M6x10

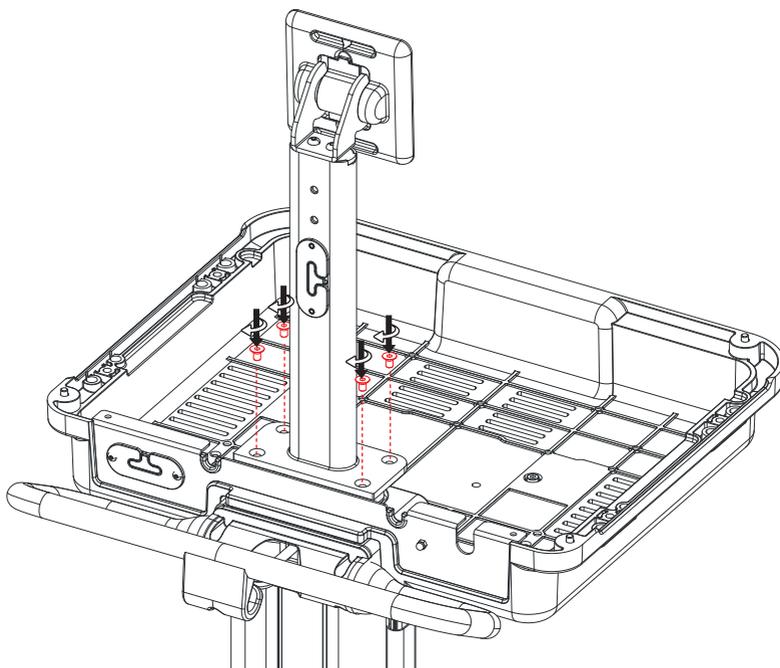


9

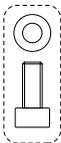

4x
M6x18
metal washer

5

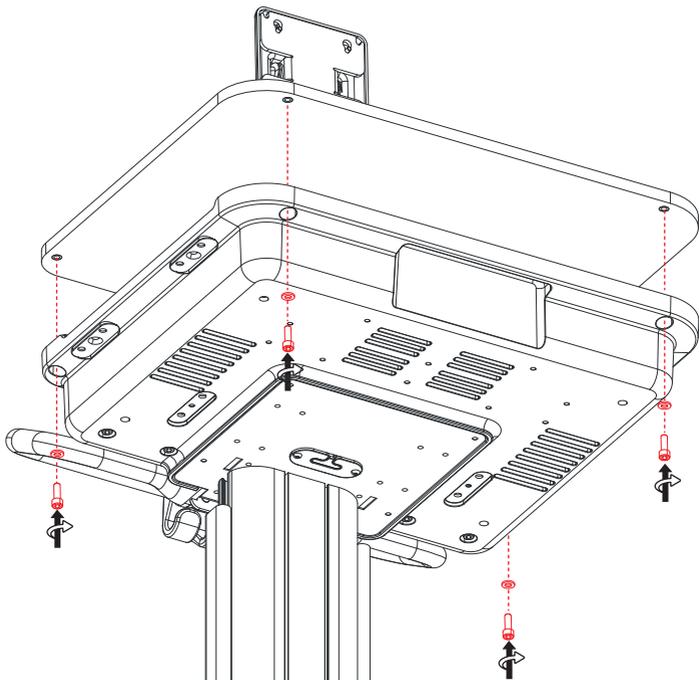



10



4x
M6x8

4

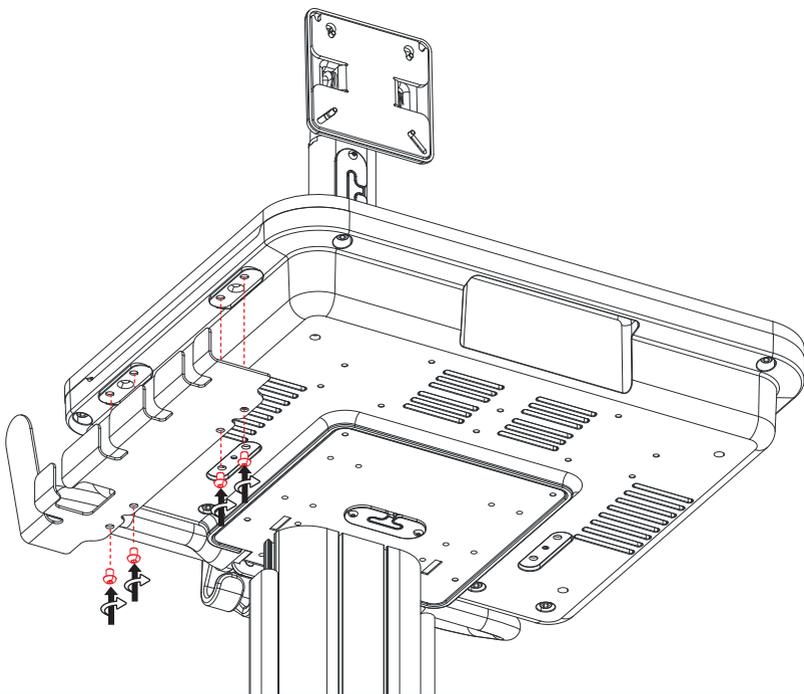

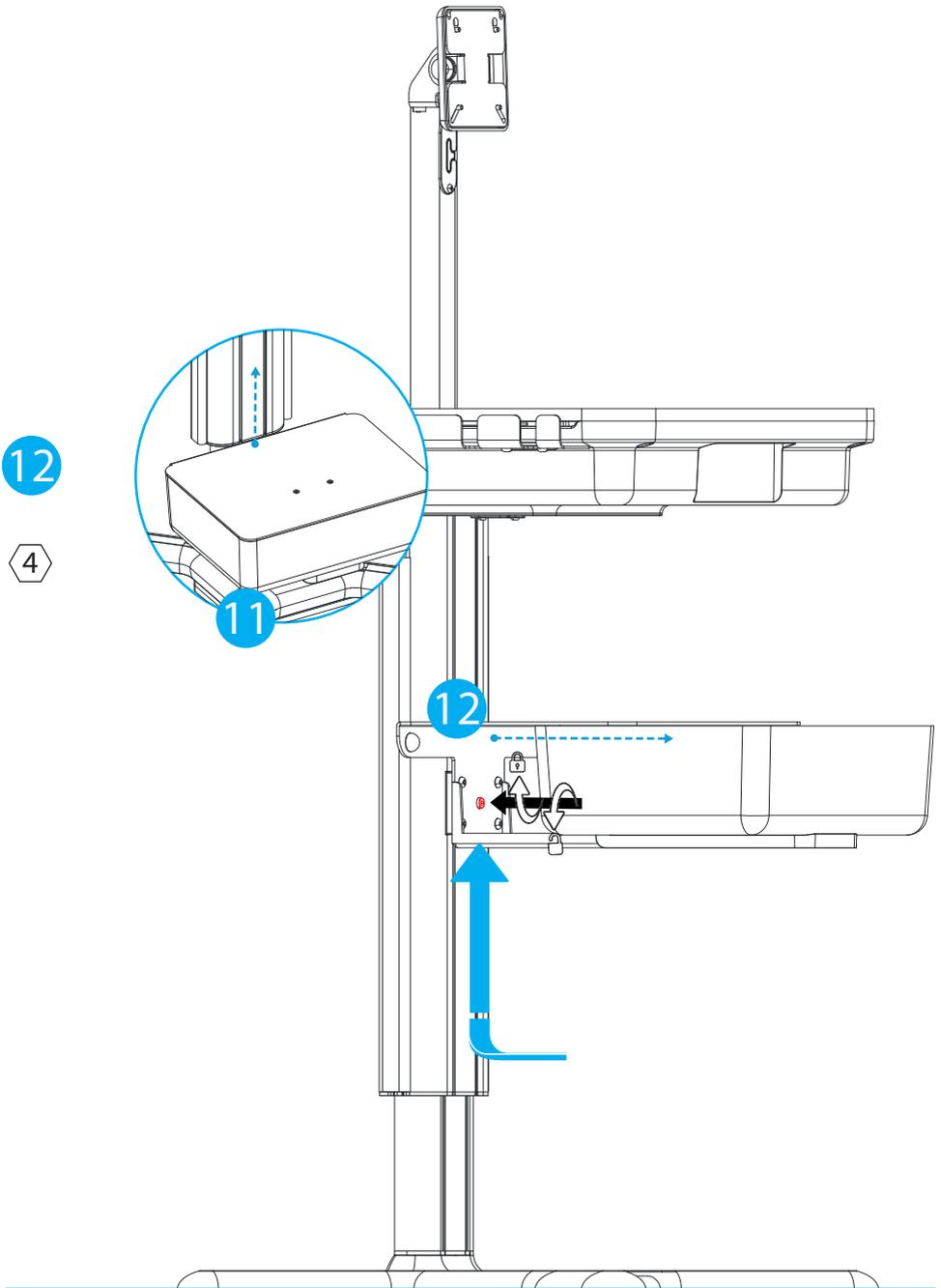


13



4x

M4X6

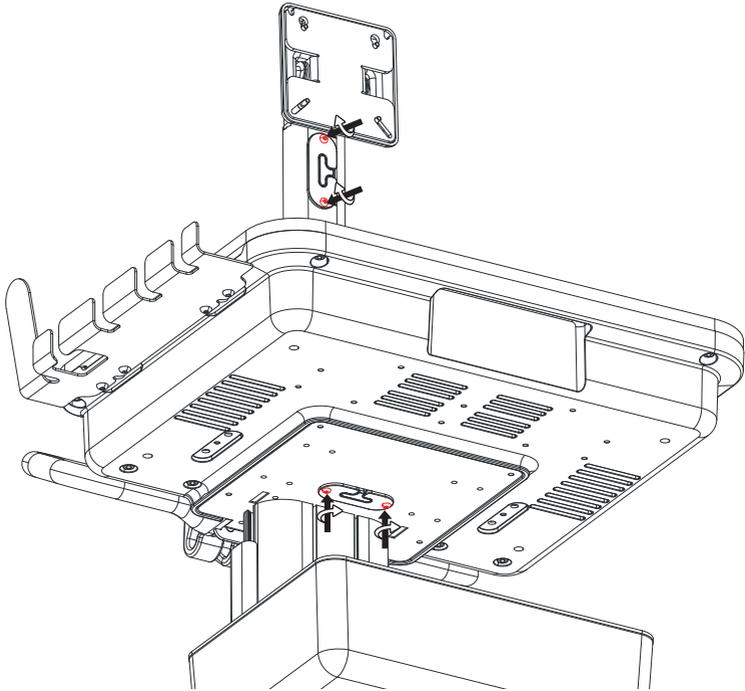


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip

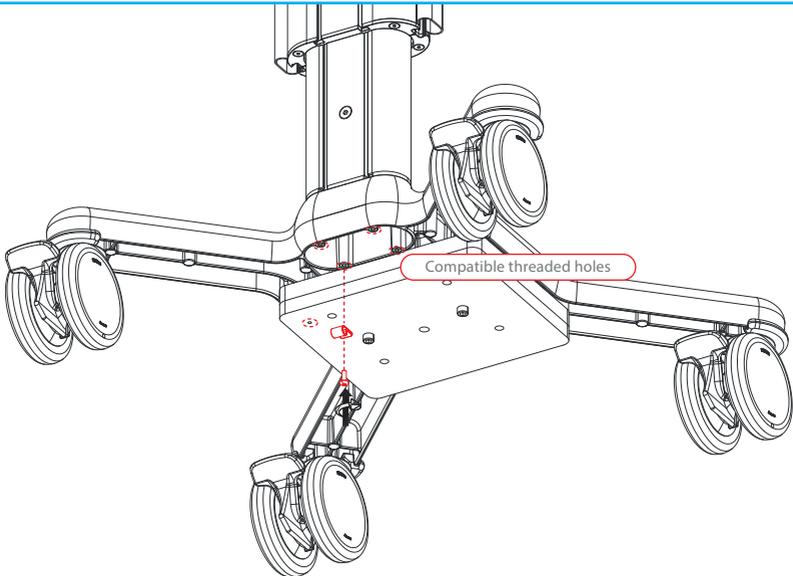

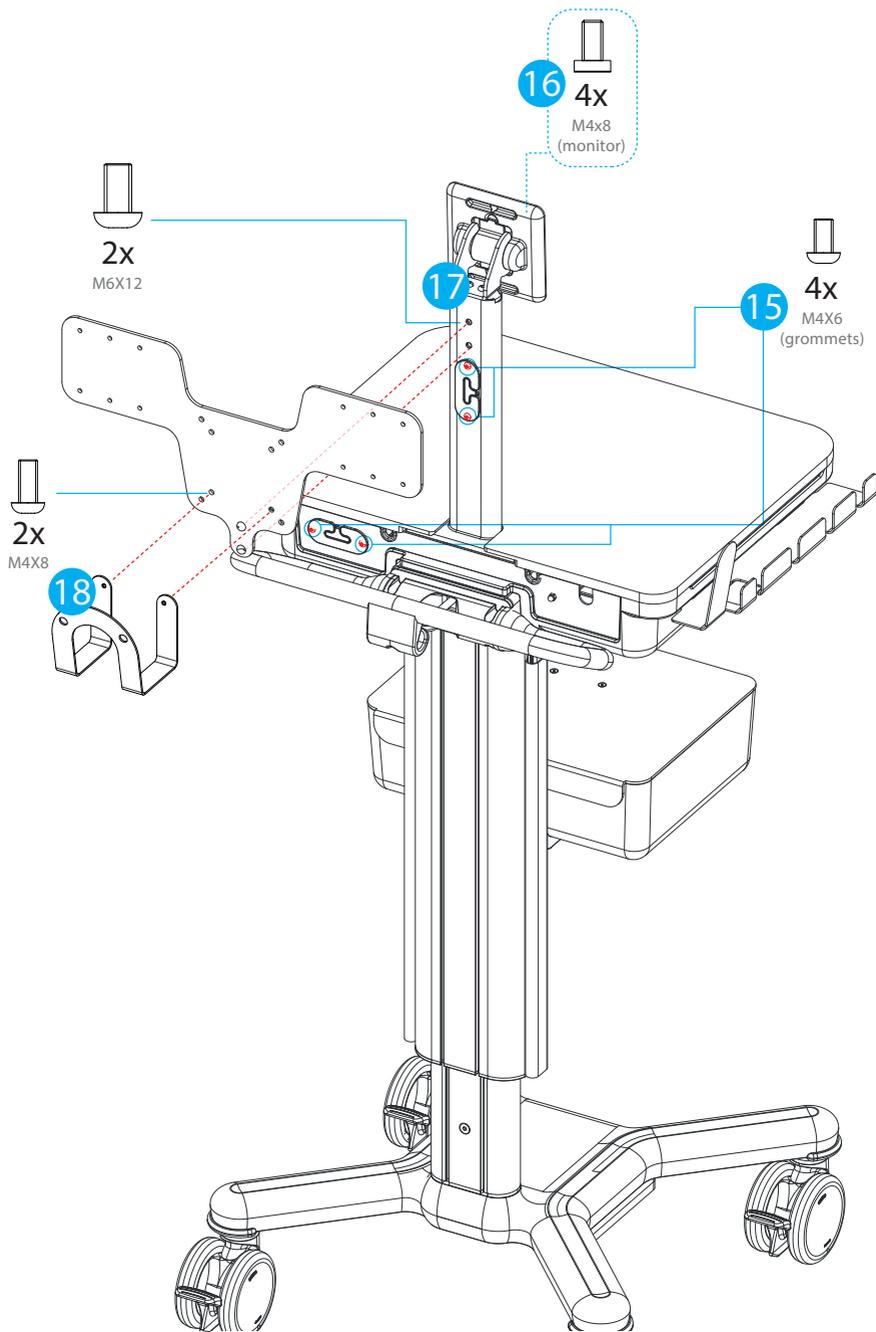

if needed, use the M4x6 to fix the grommets

Σημαντικές σημειώσεις



Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Το **καροτσάκι X1T - 000CNSX1T** επιτρέπει τη μεταφορά **μιας συσκευής και των εξαρτημάτων της** μεταξύ των σημείων θεραπείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στο περιβάλλον εγκαταστάσεων περιορισμένης φροντίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι οδηγίες χρήσης του καροτσιού πρέπει να διαβαστούν πριν από τη χρήση.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Το προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις μεθόδους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.
- Η αλλοίωση ή η βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη χρήση του καροτσιού οδηγεί σε άμεση απώλεια της εγγύησης.
- **Η Multix Solutions δεν ευθύνεται για ζημιές σε πρόσωπα ή/και πράγματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.**
- Όταν **μια συσκευή** τοποθετείται στο καροτσάκι, ο **εγκαταστάτης του συστήματος** είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, EN 60601-1 τρέχουσα έκδοση



ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

ασφάλεια του καροτσιού διασφαλίζεται με την προσεκτική τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων:

- Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι ταιριάζει με την απεικόνιση στο εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε ότι δεν έχει σπάσει ή υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη και τα μέρη ασφάλισης, όπως οι τροχοί, τα φρένα και (εάν υπάρχουν) το ελατήριο αερίου, είναι λειτουργικά.
- Και οι τέσσερις τροχοί του καροτσιού πρέπει να είναι κλειδωμένοι, όταν το σύστημα και τα εξαρτήματά του συναρμολογούνται.
- Όταν το καρότσι δεν οδηγείται, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί του καροτσιού είναι ασφαλισμένοι και ότι το σύστημα δεν είναι σταθμευμένο σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Όλοι οι τροχοί του καροτσιού πρέπει να είναι ξεκλειδωμένοι πριν το καρότσι προωθηθεί.
- Για να αποφευχθεί η ανατροπή του καροτσιού, η λαβή πρέπει να κρατιέται εάν το καρότσι οδηγείται πάνω από εμπόδια (π.χ. καλώδια ρεύματος).
- Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη κατά την ώθηση του καροτσιού.
- Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε αυτή τη συσκευή.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΩΘΗΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ


- Ακολουθήστε τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα “Θέση και κατεύθυνση μεταφοράς”.

- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό βάρος της τοποθετημένης διάταξης (μαζί με τα αξεσουάρ) δεν υπερβαίνει το συνολικό βάρος που αναγράφεται στην ετικέτα που τοποθετείται στο καρότσι και στην επόμενη σελίδα.

Σημαντικές σημειώσεις

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατά τη μεταφορά το καροτσάκι πρέπει να κατεβαίνει μέχρι το τέλος του ελατηρίου αερίου, κρατώντας την πορεία της λαβής στραμμένη προς τα εμπρός, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

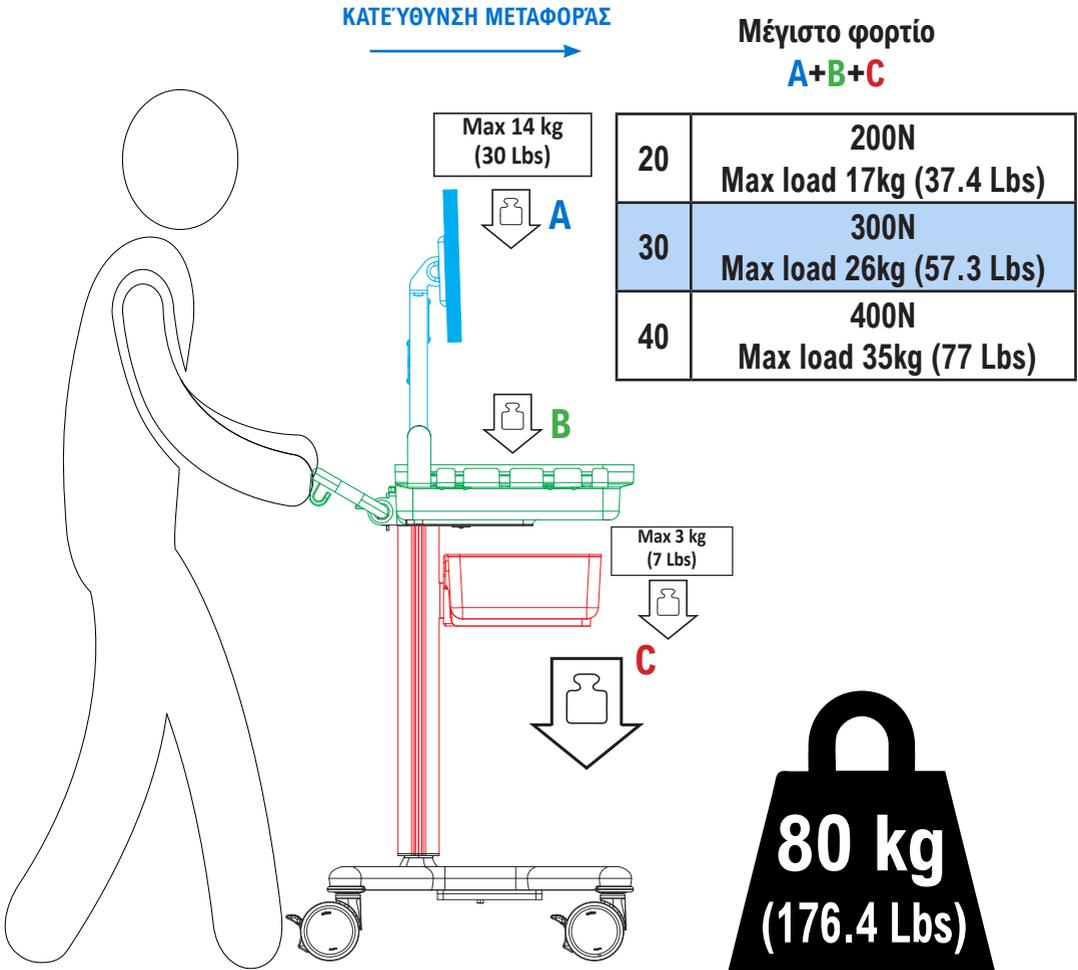

Παράρτημα



Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε όλα τα σημεία στερέωσης και τους μηχανισμούς κάθε 6 μήνες.
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζετε τακτικά τις μεταλλικές ή/και πλαστικές επιφάνειες με μη διαβρωτικά απορρυπαντικά ουδέτερου pH και ένα πανί/σφουγγάρι/βουρτσάκι με μαλακές τρίχες. Μην ρίχνετε απευθείας στις επιφάνειες υγρά, απορρυπαντικά με βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για ανταλλακτικά απευθυνθείτε στον διανομέα της συσκευής (βλ. ενότητα Επικοινωνία).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 10 έτη.

Το καλάθι και η συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

| | |
|---|---|
| χαρτοκιβώτιο και εσωτερικές ενισχύσεις  ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΟ | εσωτερική συσκευασία  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ |
|---|---|

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Τα ακόλουθα σύμβολα αναφέρονται στο καρότσι ή στις οδηγίες χρήσης:



Προσοχή



Σήμανση CE



Αριθμός καταλόγου



Οδηγίες λειτουργίας



Μανεφομεία



Αριθμός προϊόντος



Medical συσκευή



κωδικός παρτίδας



Ημερομηνία κατασκευής



Περιορισμός υγρασίας



Προσανατολισμός



Εύθραυστος, χειριστείτε με προσοχή



Διατηρήστε το στεγνό



Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου



Όριο θερμοκρασίας



Απαγορεύεται να κάθεσαι στο καρότσι



Απαγορεύεται η ώθηση



Διανέμεται από



συνολικό βάρος

Διανέμεται από: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Κατασκευάζεται από: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

