

Manuale di Istruzioni



Fornire l'istruzione per l'uso all'utente finale dopo l'installazione.




L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale tecnico qualificato e seguendo le istruzioni di montaggio e manutenzione (vedere le sezioni dedicate "Istruzioni di montaggio" e "Manutenzione") del presente manuale.

Sono vietate riproduzioni, duplicazioni o traduzioni, anche sotto forma di estratti, senza previa autorizzazione da parte di Multix Solutions S.r.l.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




Il Trolley X1T è un dispositivo medico di Classe I secondo le norme di classificazione dell'Allegato VIII e reca il marchio "CE" in conformità al Regolamento sui dispositivi medici (MDR) (UE) 2017/745. È conforme alla norma IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 e soddisfa i requisiti generali di sicurezza e prestazione dell'Allegato I del citato Regolamento sui dispositivi medici.

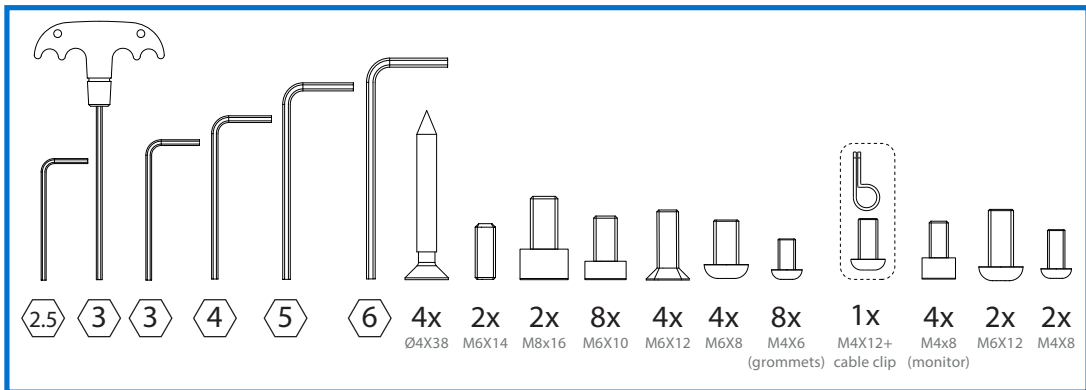

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! Se sono presenti accessori, prima di assemblare il carrello, consultare le relative istruzioni.

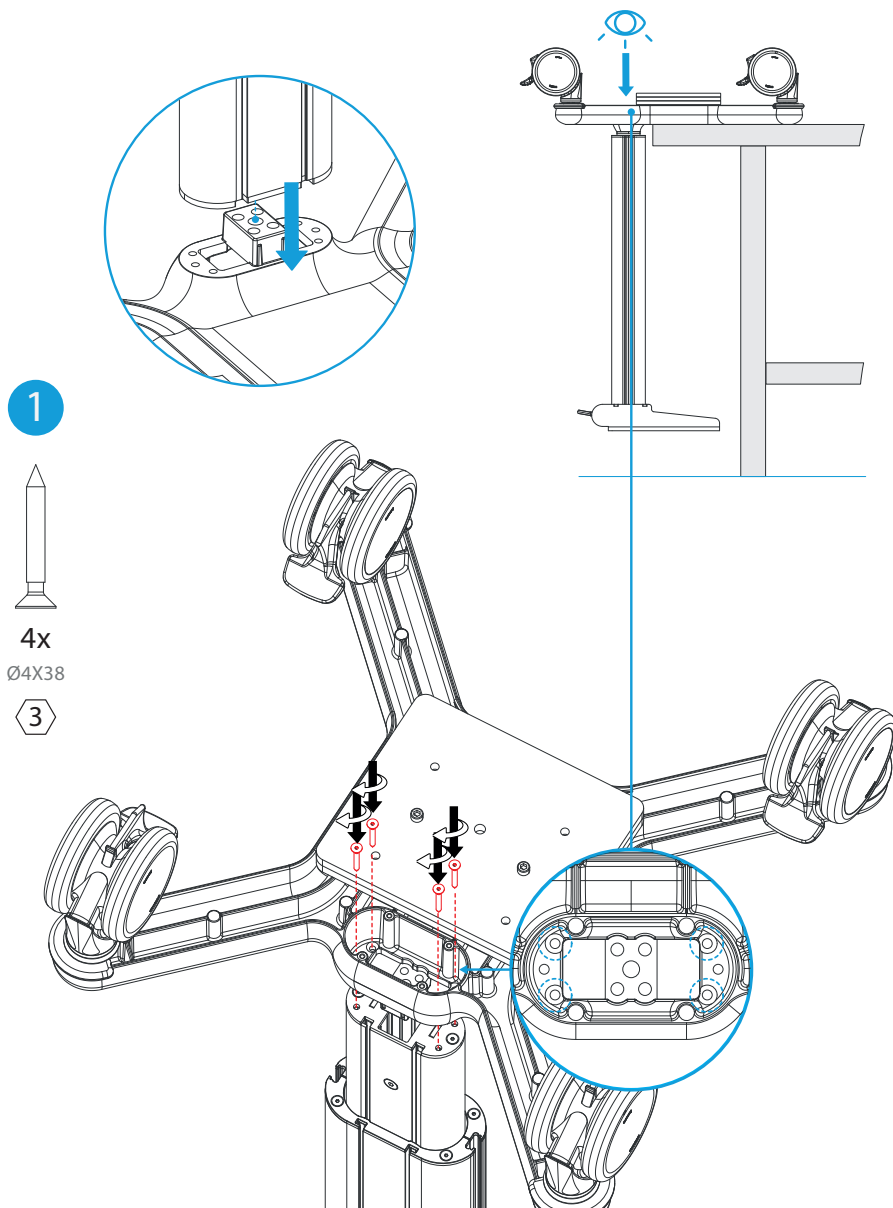

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

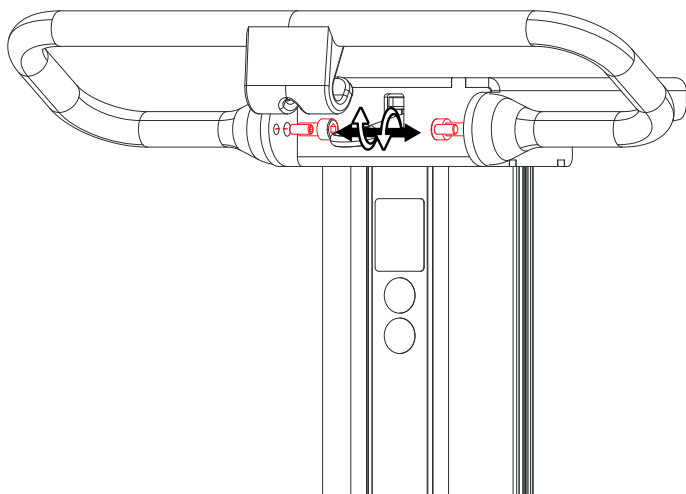


3

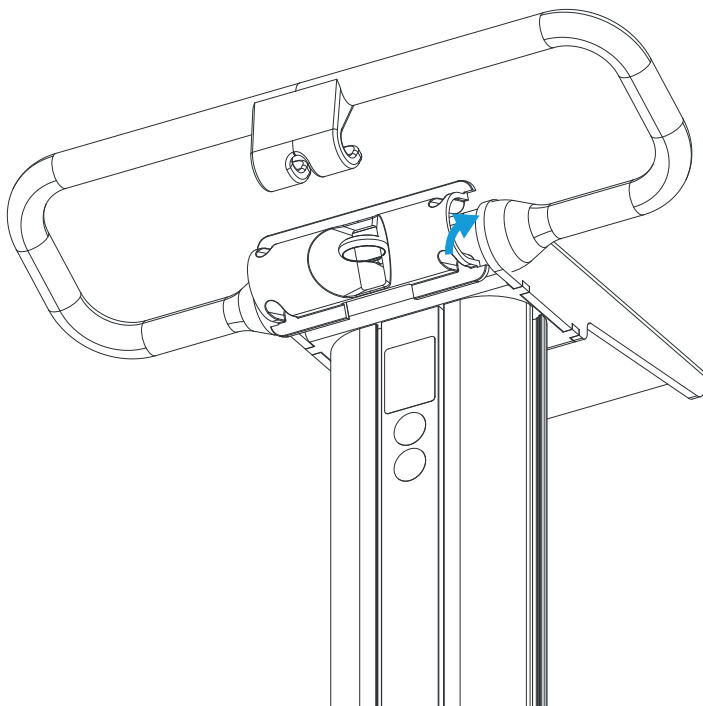

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

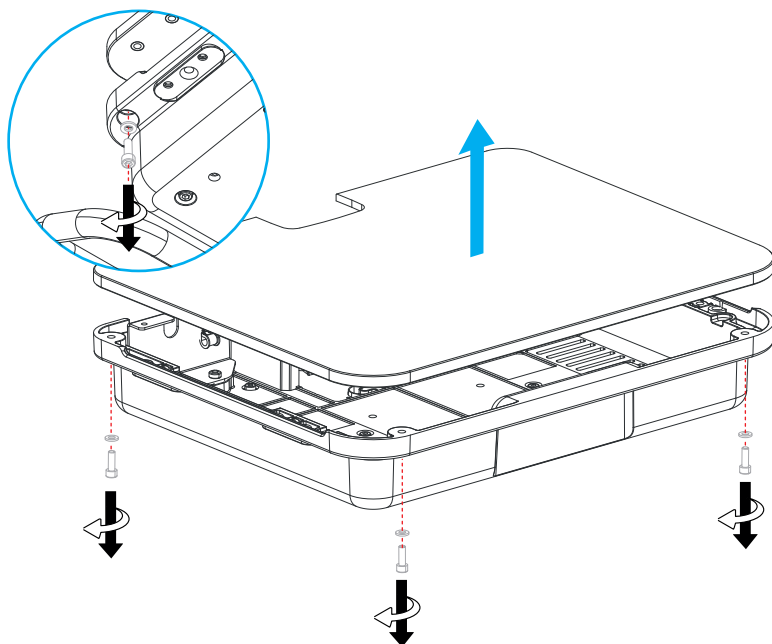

- 6
- 4x
M6x12
- 4

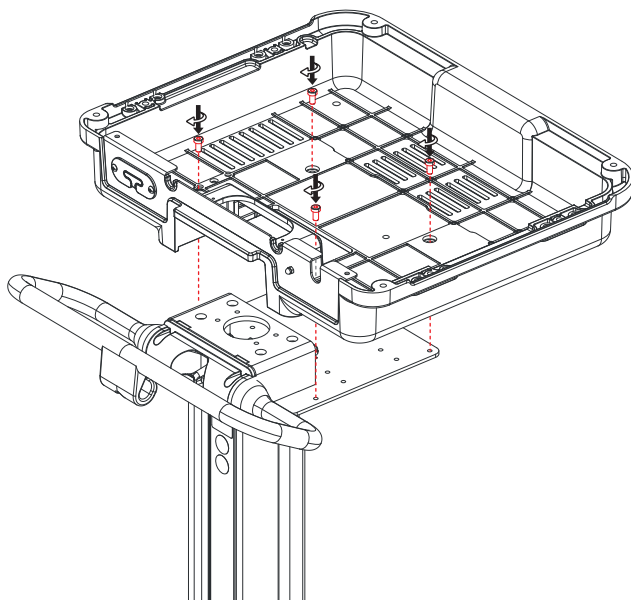


7



4x
M6x12

4

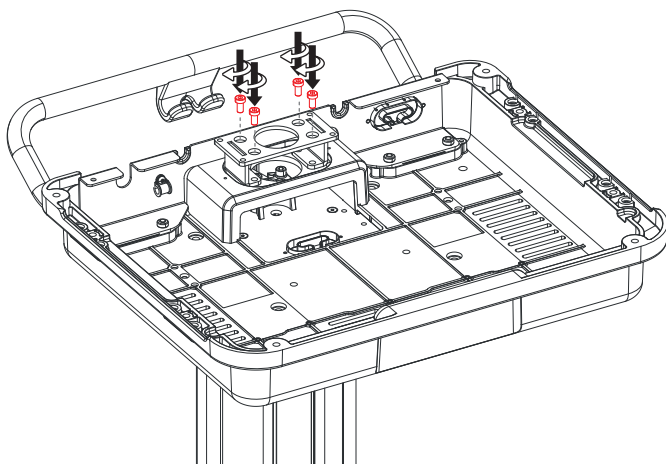


8




4x
M6x10

4

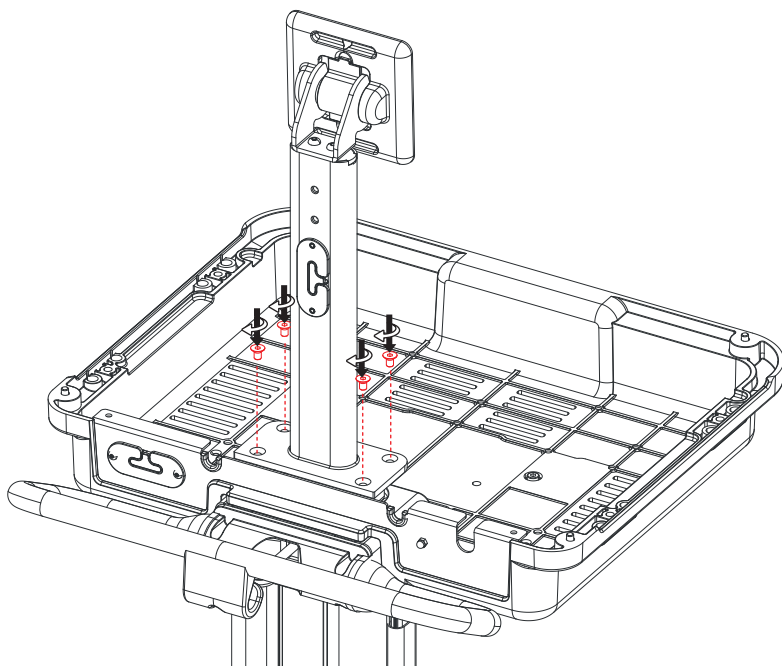


9

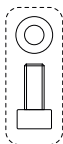

4x
M6x18
metal washer

5

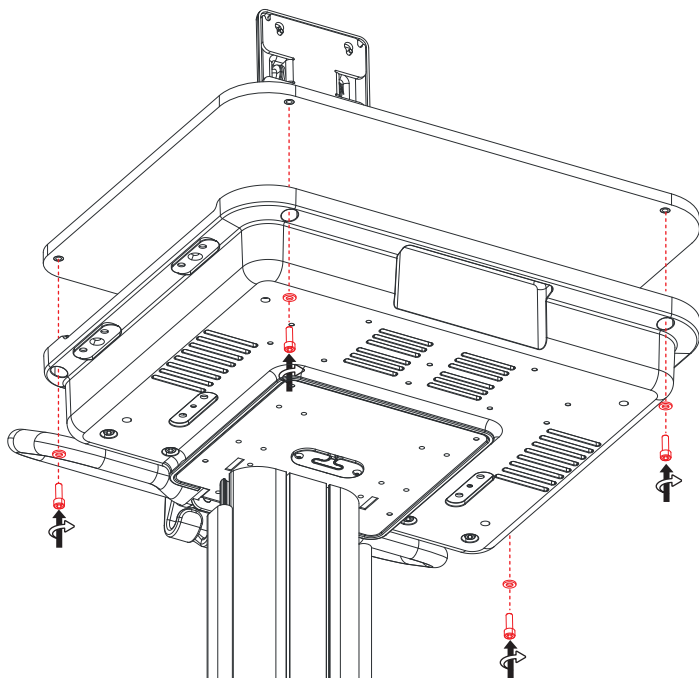



10



4x
M6X8

4

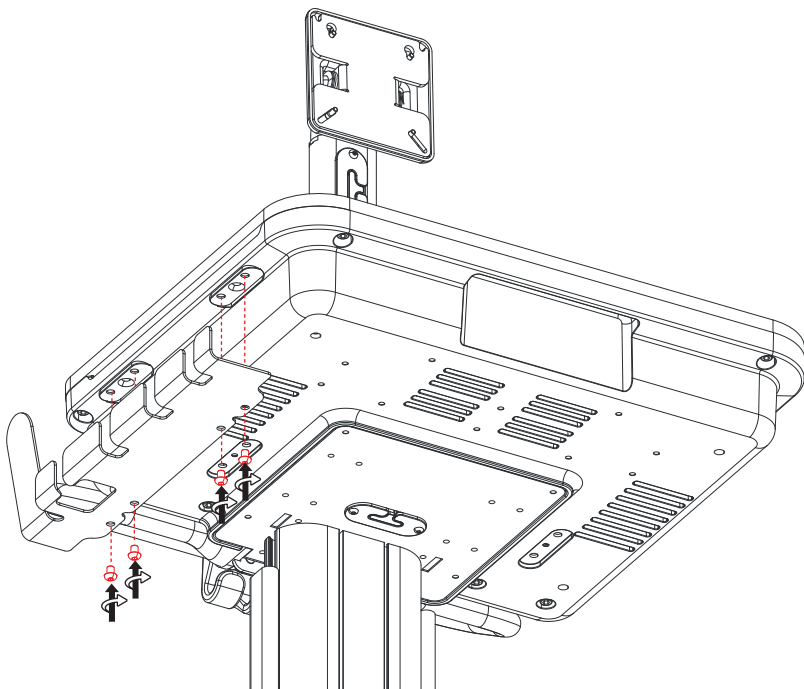

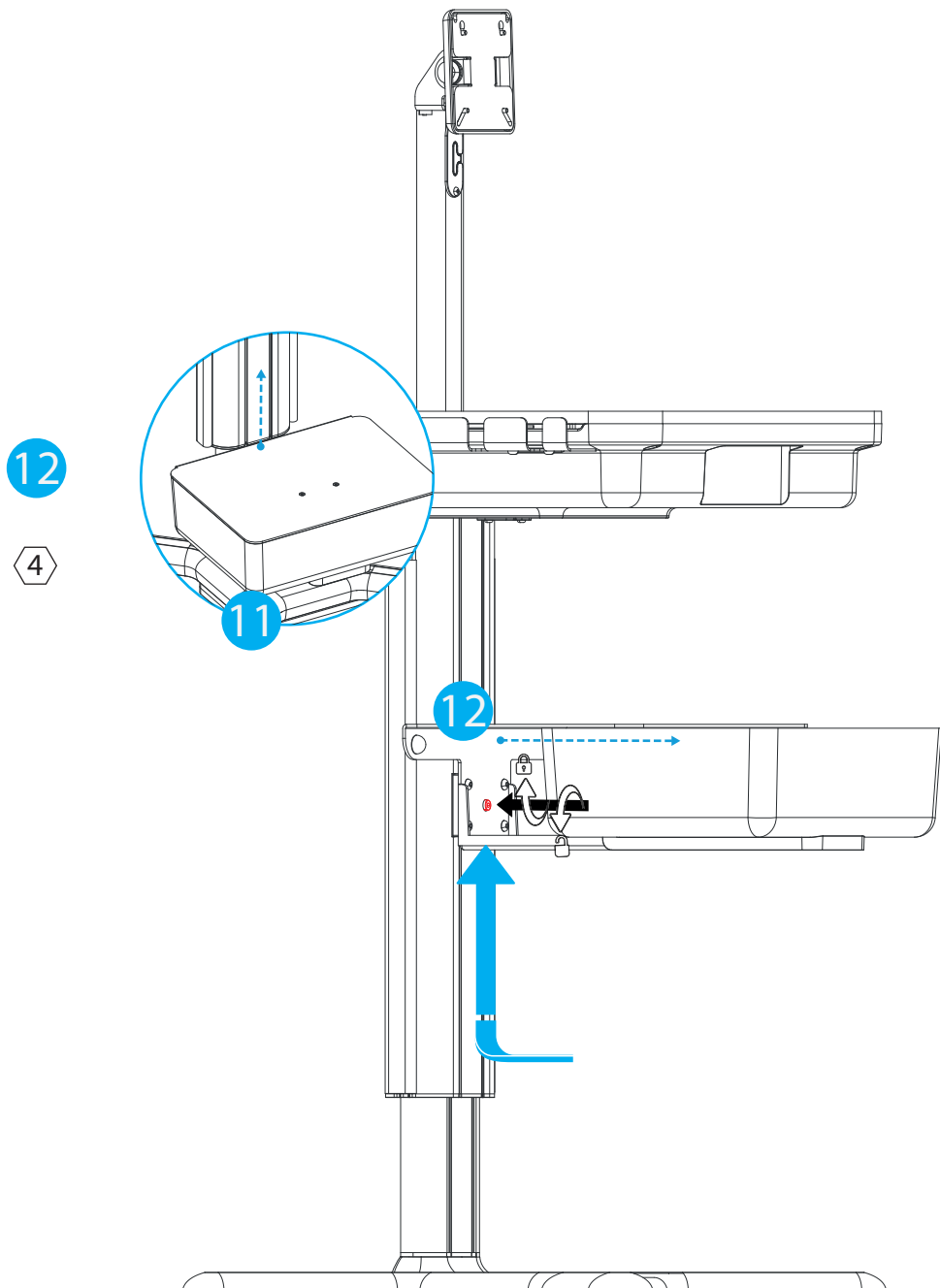


13




4x

M4X6

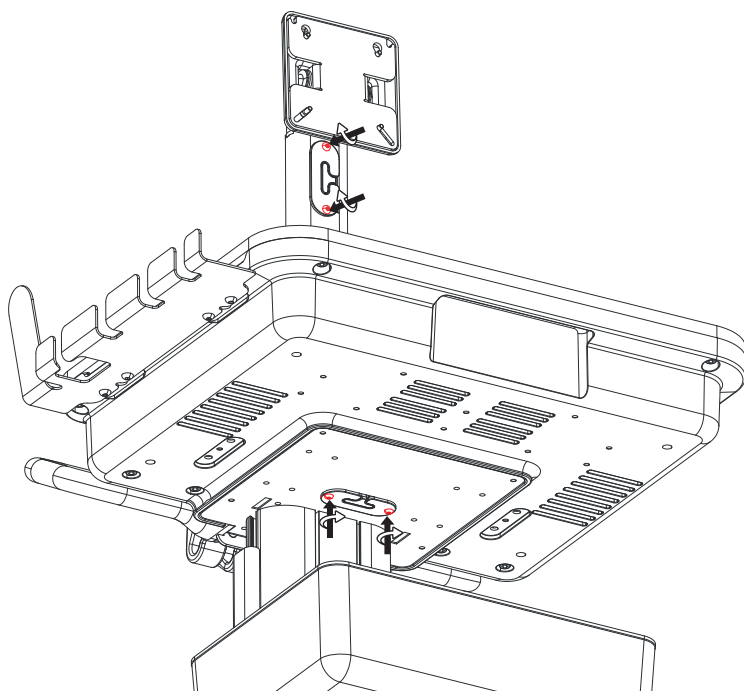


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

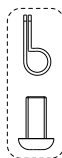

1x

M4X12+
cable clip

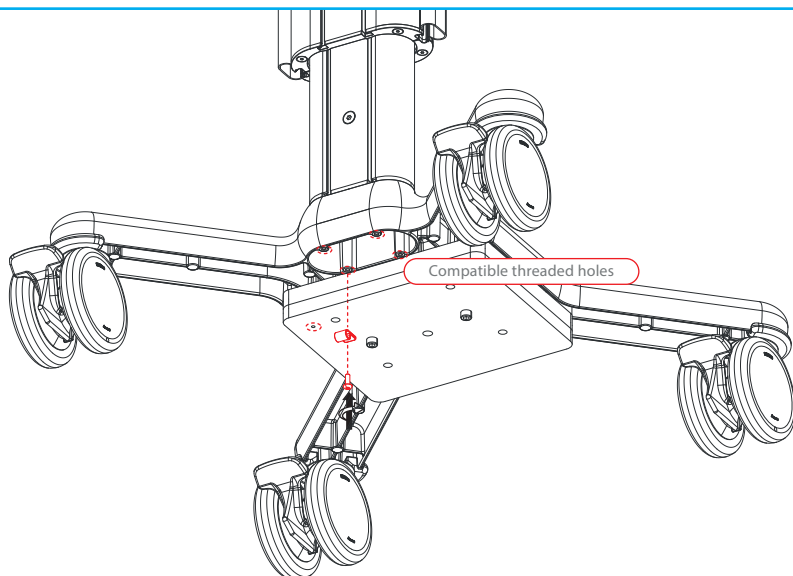

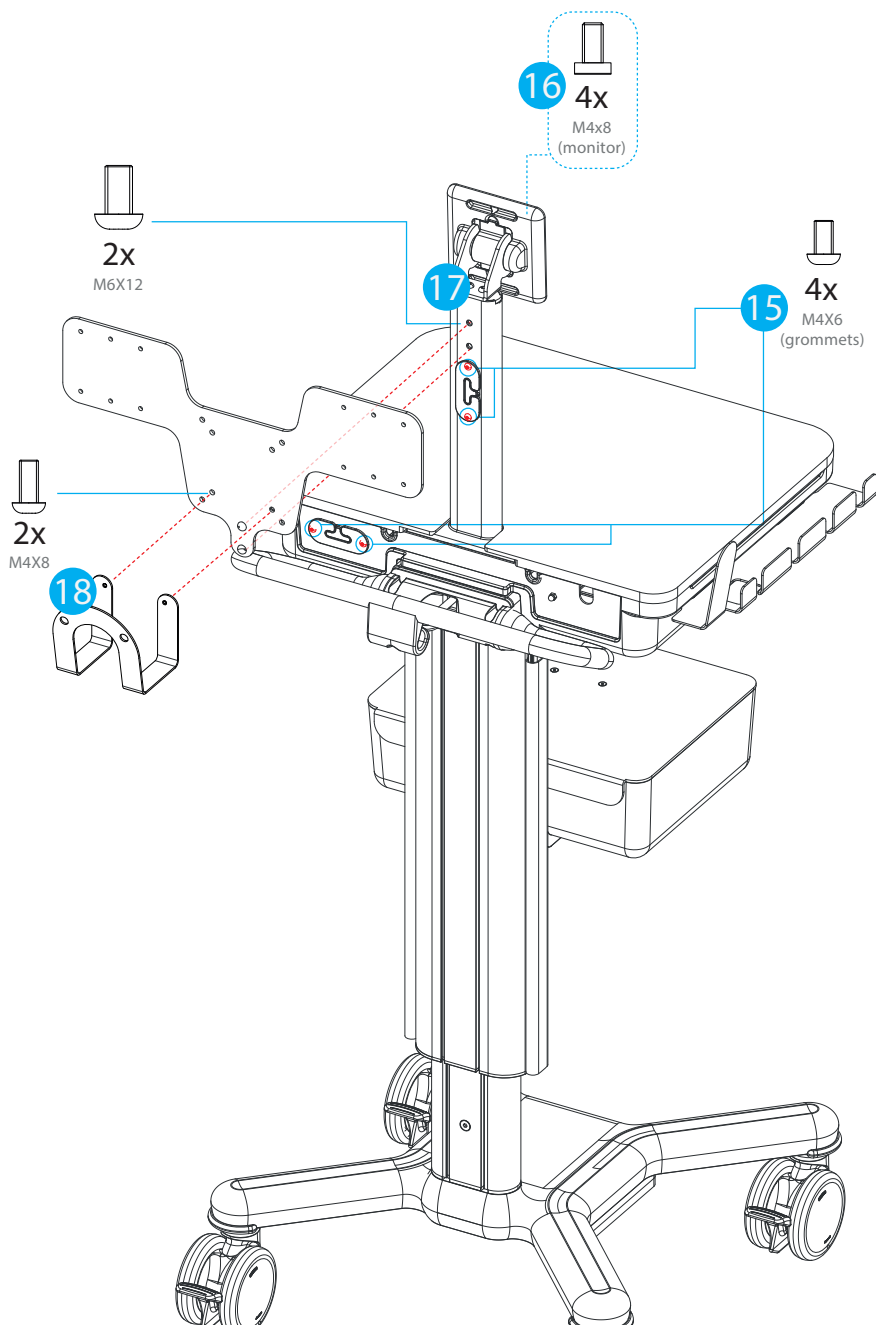

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Avvisi importanti



L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale tecnico qualificato e seguendo le istruzioni di montaggio e manutenzione (vedere le sezioni dedicate "Istruzioni di montaggio" e "Manutenzione") del presente manuale.

DESTINAZIONE D'USO

Il **trolley X1T - 000CNSX1T** consente il trasporto dei **dispositivi e dei loro accessori** tra più siti di terapia all'interno di ambienti ospedalieri e strutture di cura.

OBBLIGHI GENERALI DI SICUREZZA

- Le istruzioni del carrello devono essere lette prima dell'uso.
- Conservare le istruzioni per una futura consultazione.
- Il prodotto è stato creato esclusivamente per i metodi indicati nel manuale di istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio.
- La manomissione o i danni causati da un uso improprio del carrello comportano l'immediata decadenza della garanzia.
- **Multix Solutions non è responsabile per danni a persone e/o cose dovuti a un uso improprio.**
- Quando **un dispositivo** viene montato sul carrello, sarà responsabilità dell'**installatore del sistema** assicurarsi che il sistema sia conforme alle norme attualmente applicabili, EN 60601-1 versione attuale.



AVVERTENZE E ATTENZIONE GENERALI

La sicurezza del carrello è garantita dall'osservanza delle avvertenze riportate di seguito:

- Assicurarsi che il carrello corrisponda all'illustrazione del manuale.
- Verificare che non sia rotto o danneggiato durante il trasporto.
- Verificare che le parti mobili e bloccanti, come le ruote, i freni e (se presente) la molla a gas, siano funzionanti.
- Tutte e quattro le ruote del carrello devono essere bloccate quando il sistema e i suoi accessori sono assemblati.
- Quando il carrello non viene usato, assicurarsi che le ruote del carrello siano bloccate e che il sistema non sia parcheggiato su superfici irregolari.
- Tutte le ruote del carrello devono essere sbloccate prima di spingerlo.
- Per evitare che il carrello si ribalti, è necessario tenere la maniglia se il carrello viene spinto oltre gli ostacoli (ad esempio cavi di alimentazione).
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si spinge il carrello.
- Non è consentito apportare modifiche al dispositivo.



ISTRUZIONI DI CARICO

- È VIETATO SEDERSI SUL CARRELLO

- È VIETATO SPINGERE QUANDO LE RUOTE SONO BLOCCATE


- Rispettare i pesi massimi di carico indicati nella sezione "posizione e direzione di trasporto"

- Assicurarsi che il peso totale della configurazione montata (con l'aggiunta degli accessori) non superi il peso complessivo indicato sull'etichetta applicata sul carrello e alla pagina successiva.

Avvisi importanti

POSIZIONE E DIREZIONE DI TRASPORTO

Durante il trasporto il carrello deve essere abbassato fino all'estremità della molla a gas, tenendo la maniglia rivolta in avanti, come mostrato nella figura sottostante:

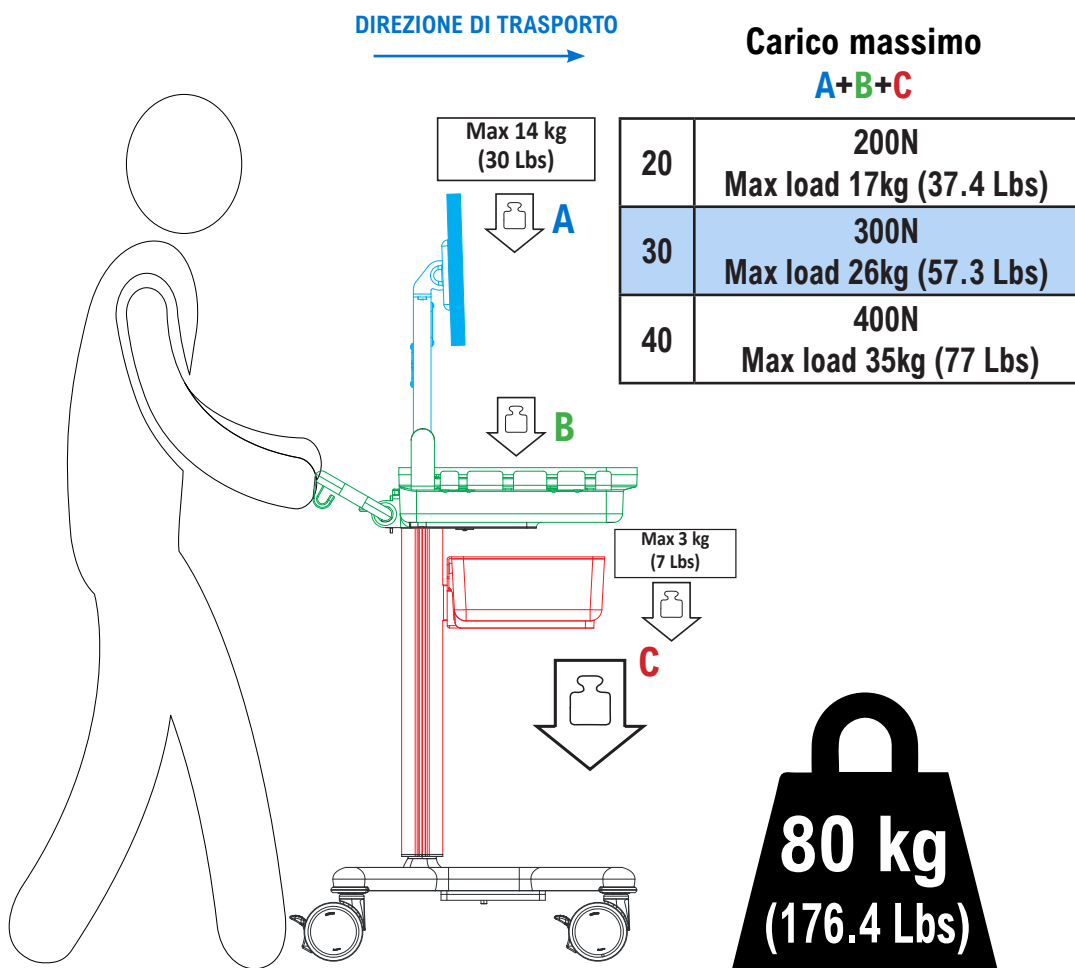

Appendice



L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale tecnico qualificato e seguendo le istruzioni di montaggio e manutenzione (vedere le sezioni dedicate "Istruzioni di montaggio" e "Manutenzione") del presente manuale.

MANUTENZIONE

Controllare tutti i punti di fissaggio e i meccanismi ogni 6 mesi.

Il prodotto è adatto solo per uso interno.

PULIZIA

Assicurarsi che il prodotto sia pulito e disinfettato secondo i requisiti dell'applicazione prima di utilizzarlo.

Pulire regolarmente le superfici metalliche e/o in plastica con detergenti non corrosivi a pH neutro e un panno/spugna/spazzola a setole morbide.

Non versare detergenti liquidi, contenenti cloro o ammoniaca, né sostanze grasse o oleose direttamente sulle superfici.

PARTI DI RICAMBIO

Per i pezzi di ricambio rivolgersi al distributore dell'apparecchio (vedere la sezione Contatti).

VITA UTILE E SMALTIMENTO

La durata del prodotto è di 10 anni.

Il carrello e l'imballaggio devono essere smaltiti secondo le norme locali o nazionali.

scatola di cartone e rinforzi interni	imballo interno
	
CARTONE	POLIETILENE A BASSA DENSITÀ

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

I simboli seguenti sono esposti sul prodotto o all'interno del manuale di istruzioni:



Attenzione



Marcatura CE



Numero di catalogo



Attenersi alle istruzioni
per il funzionamento



Produttore



Numero prodotto



Dispositivo medico



Codice lotto



Data di produzione



Limite di umidità



Orientamento



Fragile, maneggiare
con cura



Tenere all'asciutto



Tenere lontano dalla
luce del sole



Limite temperatura



È vietato sedersi
sul trolley



Vietato
spingere



Distributore



Peso totale

Distribuito da: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13

8020 Graz

Austria

www.cnsystems.com

Prodotto da: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2

22066

Mariano Comense (CO)

Italy

www.multix-trolley.com

info@multix-trolley.com