

Návod na použitie



Po inštalácii poskytnite konečnému používateľovi návod na používanie.




Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

Reprodukcia, kopírovanie alebo preklady, aj vo forme výňatkov, sú bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Multix Solutions S.r.l. zakázané.

MONTÁŽNY NÁVOD



Trolley X1T je zdravotnícky prostriedok triedy I podľa klasifikačných pravidiel prílohy VIII a nesie označenie „CE“ v súlade s nariadením o zdravotníckych prostriedkoch (MDR) (EÚ) 2017/745. Je v súlade s normou IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 a spĺňa všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkonnosť uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu o zdravotníckych pomôckach.

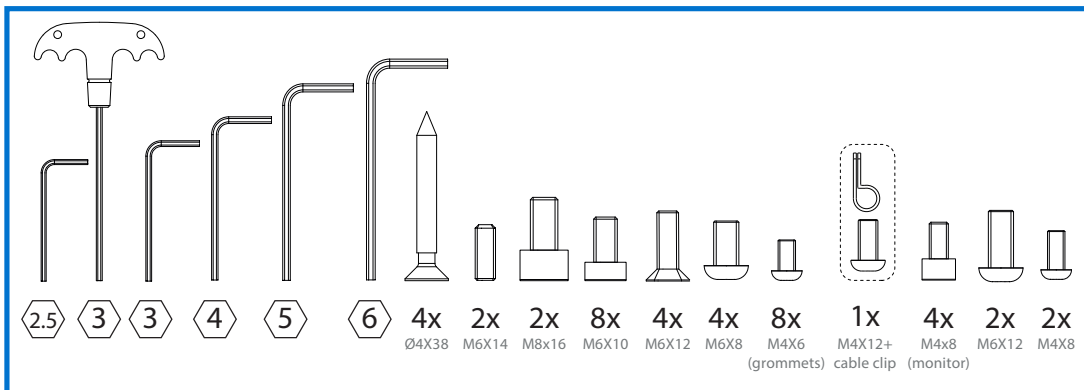


MONTÁŽNY NÁVOD

000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Ak je súčasťou dodávky príslušenstvo, pred zostavením vozíka skontrolujte

- návod na použitie.

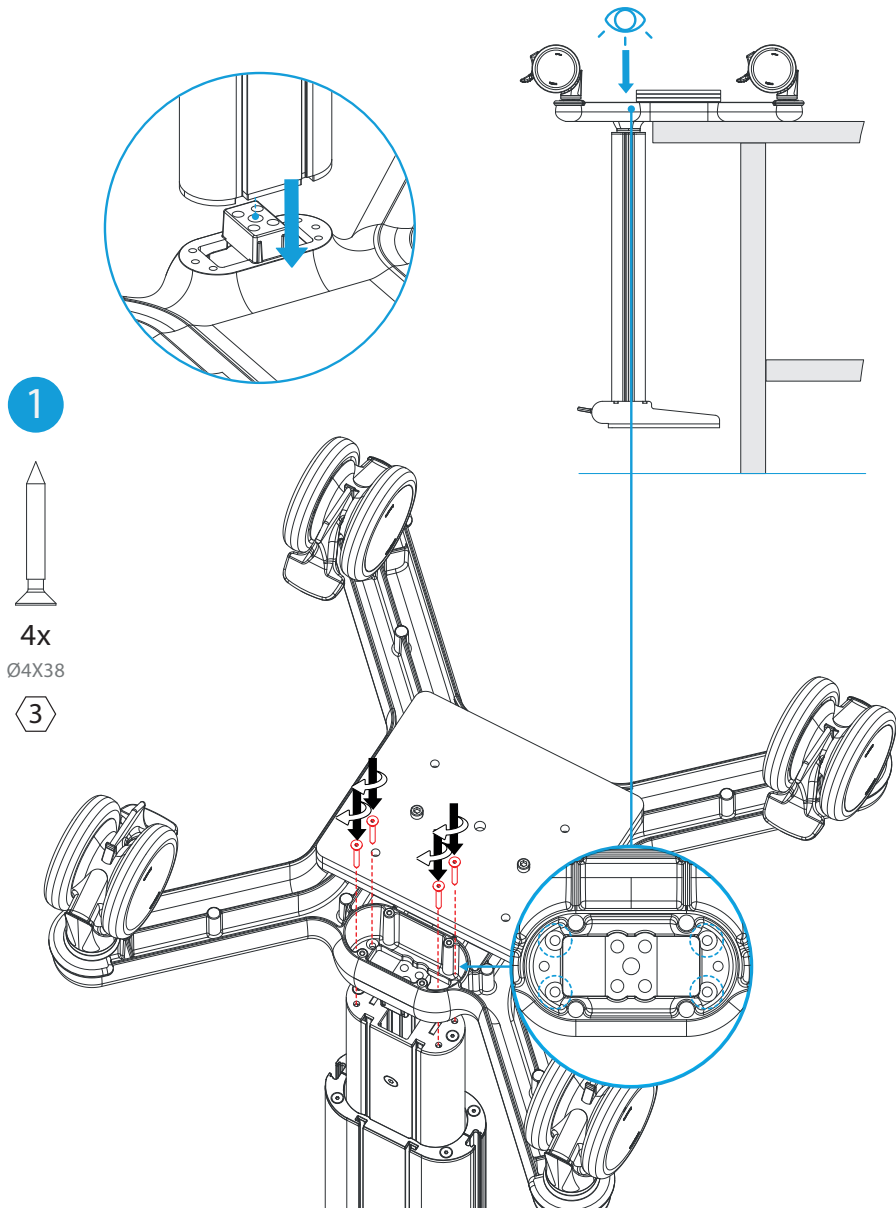

2




2x

M6X14




2x


M8x16

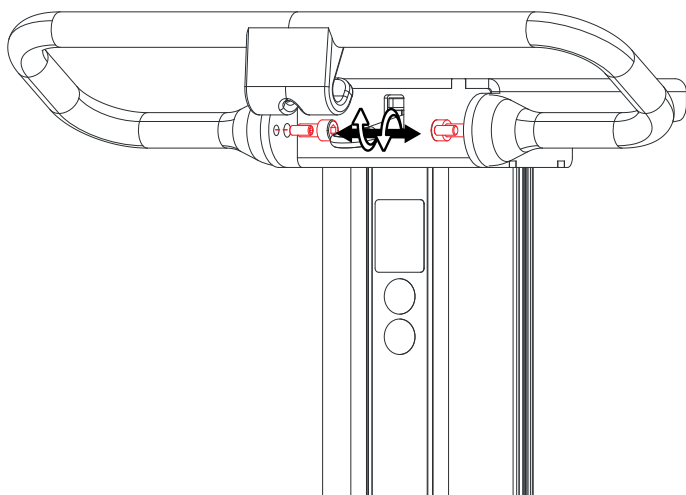


3

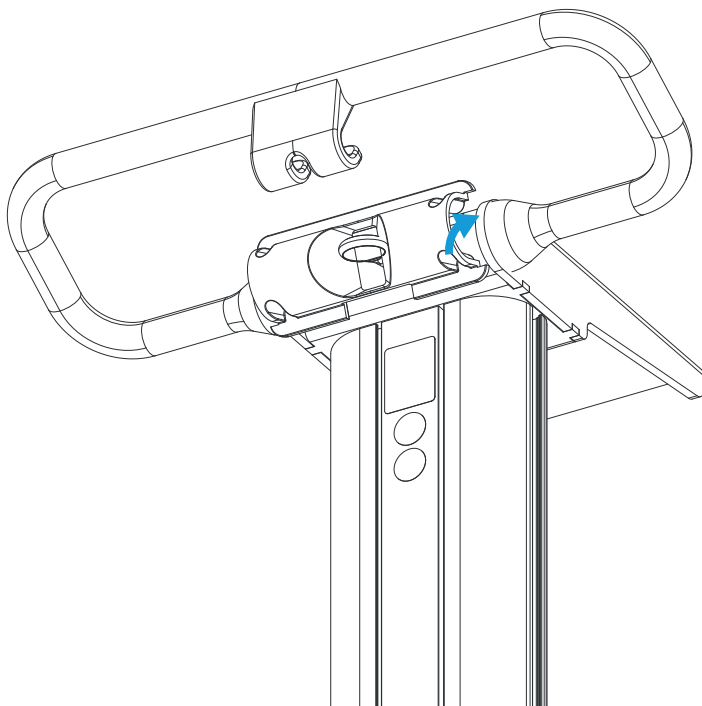

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

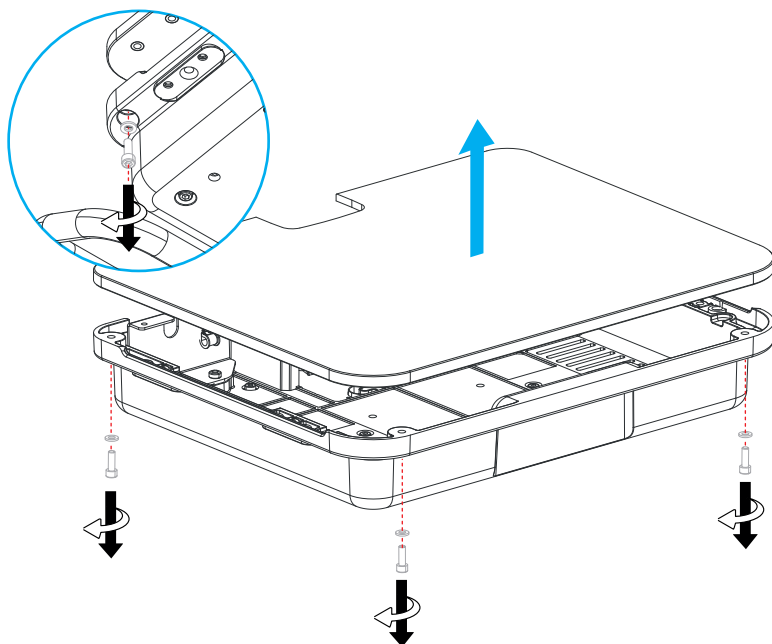

- 6
- 4x
M6x12
- 4

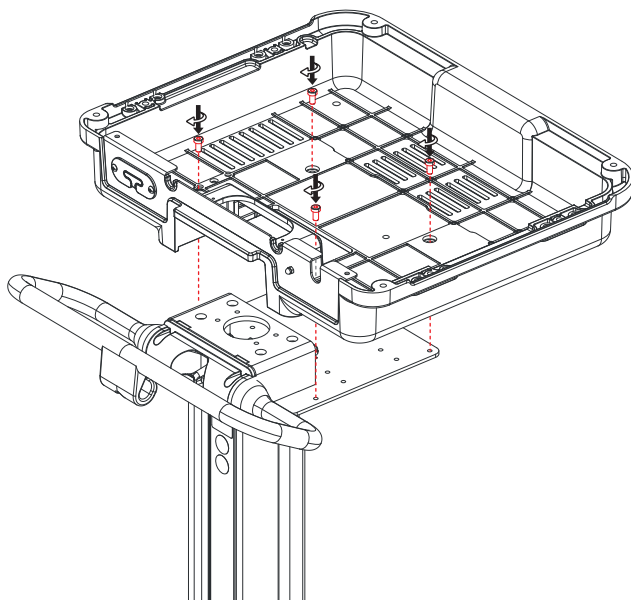


7



4x
M6x12

4

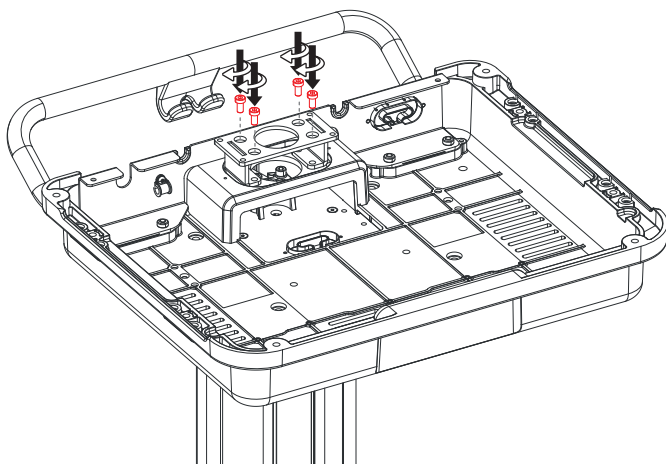


8




4x
M6x10

4

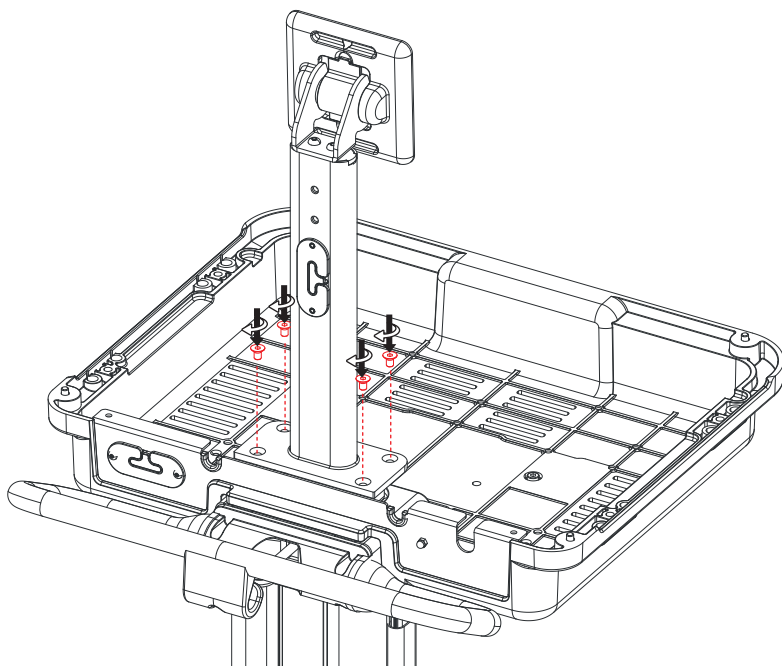


9

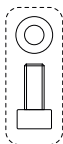

4x
M6x18
metal washer

5

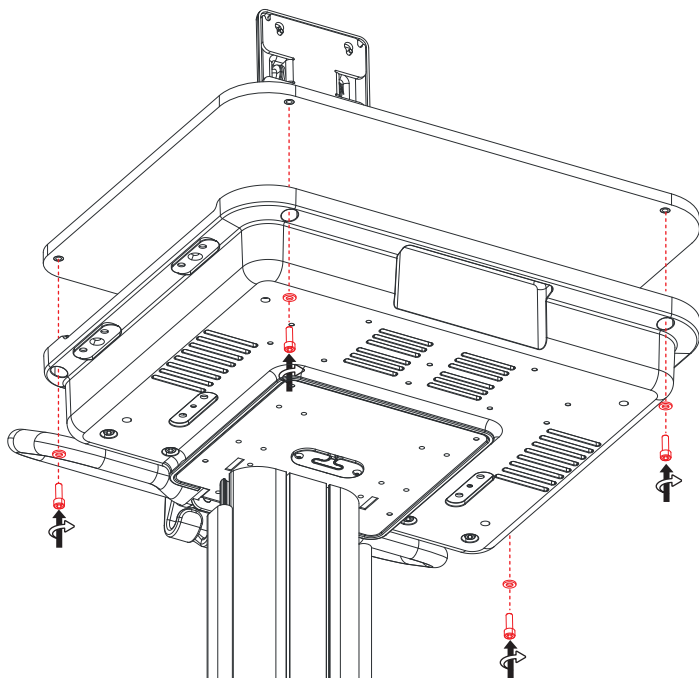



10



4x
M6X8

4

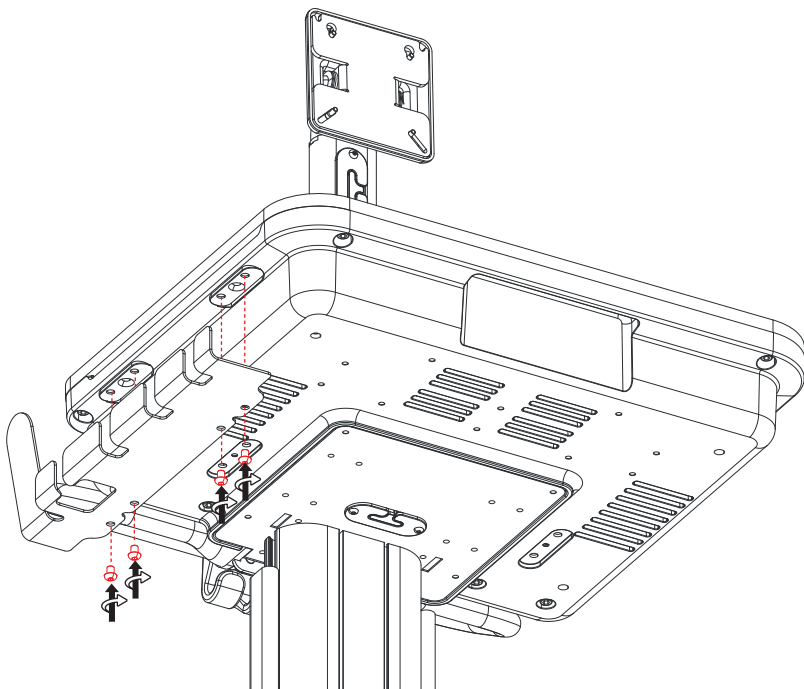


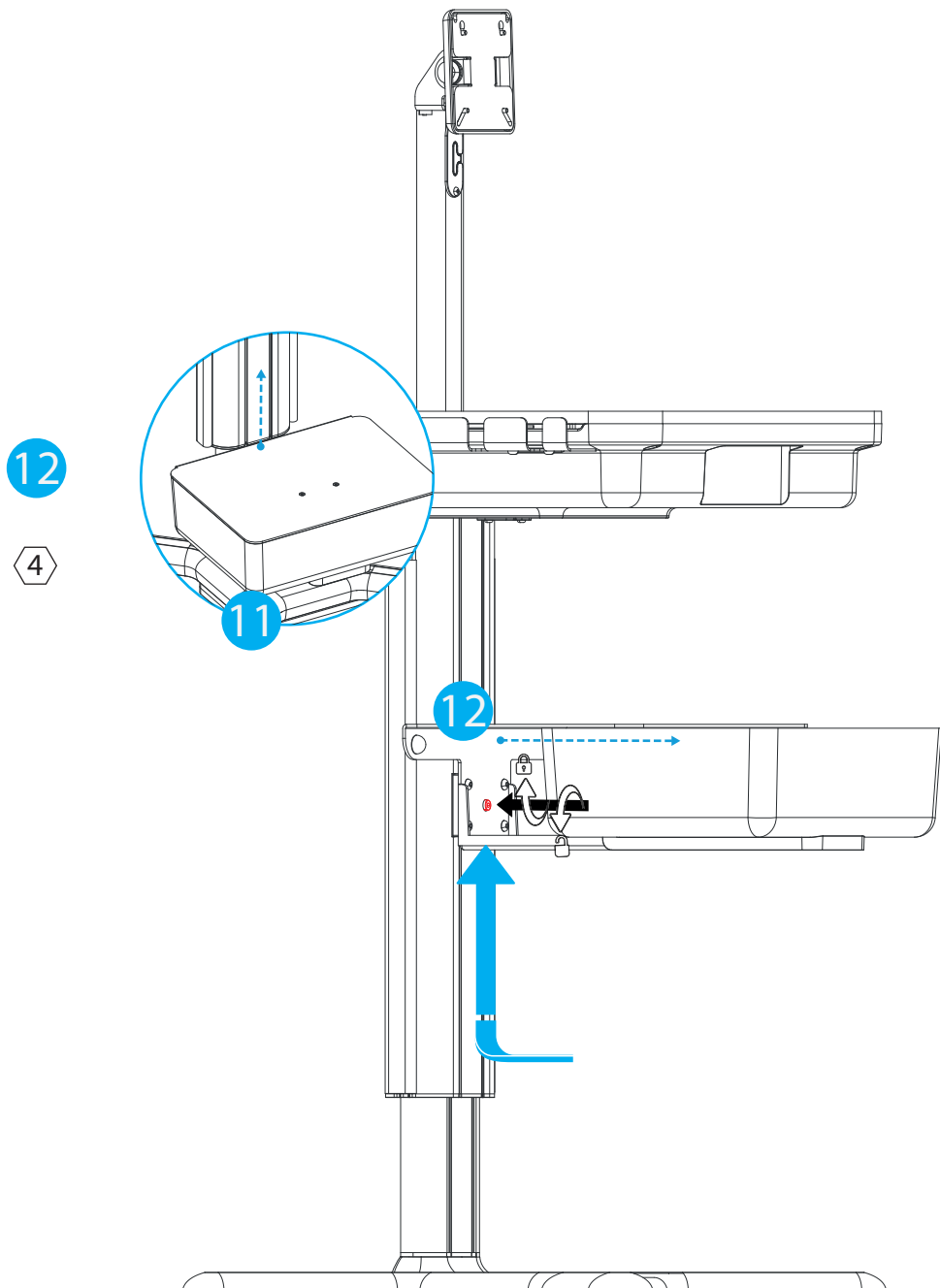

13




4x
M4X6

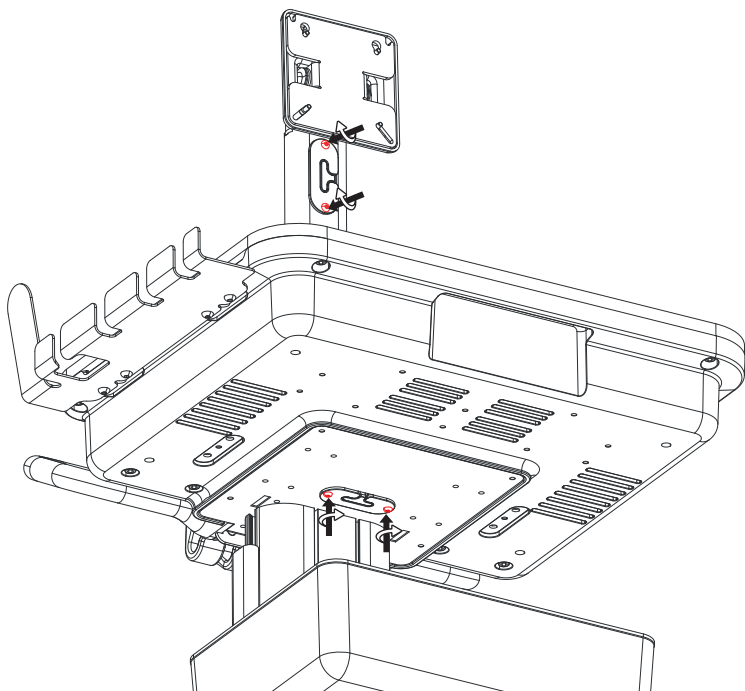



if needed, use the M4X6 to fix the grommets

14

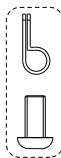

1x
M4X12+
cable clip

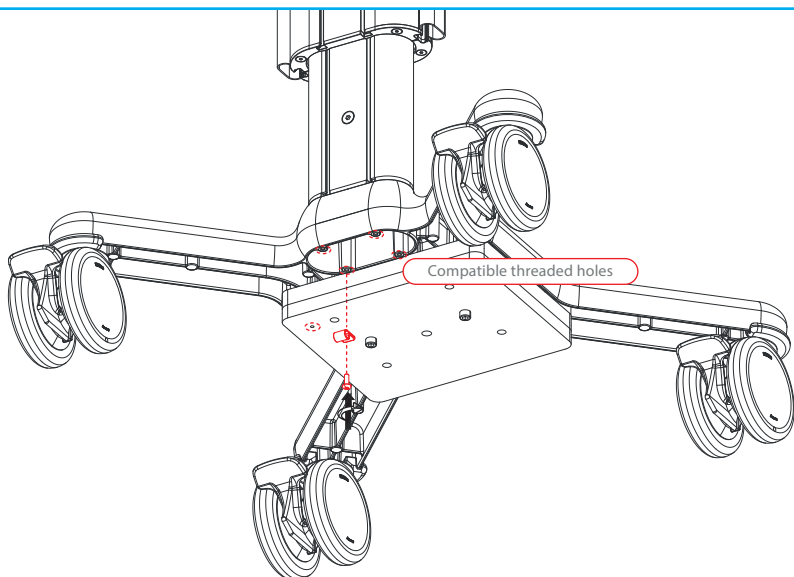

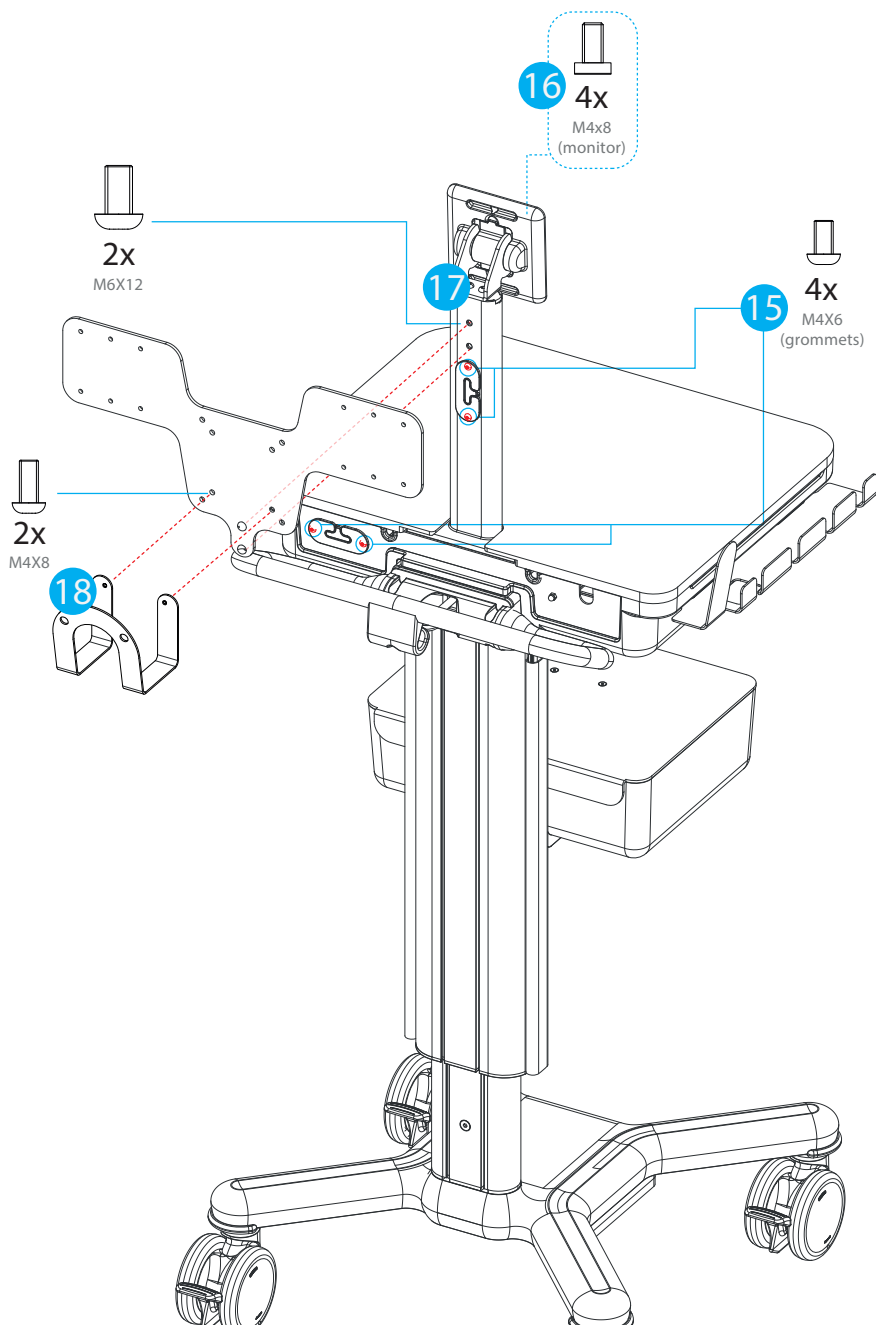

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Dôležité upozornenia



Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

URČENÉ POUŽITIE

Vozík X1T - 000CNSX1T umožňuje prepravu **prístroja a jeho príslušenstva** medzi miestami terapie v nemocničnom prostredí a v prostredí zariadení s obmedzenou starostlivosťou..

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POVINNOSTI

- Pred použitím je potrebné prečítať si návod na používanie vozíka.
- Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Výrobok bol vytvorený výlučne pre metódy uvedené v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Manipulácia alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním vozíka vedie k okamžitému prepadnutiu záruky.
- **Spoločnosť Multix Solutions nezodpovedá za škody na osobách a/alebo veciach spôsobené nesprávnym používaním.**
- Ak je **zariadenie** namontované na vozíku, **inštalatér systému je povinný** zabezpečiť, aby systém vyhovoval aktuálnym platným normám EN 60601-1 v aktuálnej verzii.



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE A VÝSTRAHA

Bezpečnosť vozíka je zaručená dôsledným dodržiavaním nižšie uvedených upozornení:

- Uistite sa, že vozík zodpovedá obrázku v príručke.
- Skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodil alebo nerozbil.
- Skontrolujte, či sú pohyblivé a blokovacie časti, ako sú kolesá, brzdy a plynová pružina (ak je prítomná), funkčné.
- Po zostavení systému a jeho príslušenstva musia byť všetky štyri kolesá vozíka zablokované.
- Ak vozík nie je poháňaný, zabezpečte, aby boli kolesá vozíka zablokované a aby systém nebol zaparkovaný na nerovnom povrchu.
- Pred tlačení vozíka sa musia odblokovať všetky kolesá vozíka.
- Aby sa zabránilo prevráteniu vozíka, je potrebné držať rukoväť, ak vozík prechádza cez prekážky (napríklad elektrické káble).
- Pri tlačení vozíka nepoužívajte nadmernú silu.
- Na tomto zariadení nie sú povolené žiadne zmeny.




POKYNY NA NAČÍTANIE

- **JE ZAKÁZANÉ SEDIET NA VOZÍKU**
- **ZÁKAZ TLAČIŤ, KEĎ SÚ KOLESÁ ZABLOKOVANÉ**
- Dodržiavajte maximálne zaťaženie uvedené v časti “poloha a smer prepravy”.
- **Uistite sa, že celková hmotnosť namontovanej konfigurácie (spolu s príslušenstvom) nepresahuje celkovú hmotnosť uvedenú na štítku nalepenom na vozíku a na nasledujúcej strane.**

Dôležité upozornenia

PREPRAVNÁ POLOHA A SMER

Počas prepravy musí byť vozík spustený až po koniec plynovej pružiny , pričom drží chod rukoväť smerom dopredu, ako je znázornené na obrázku nižšie:

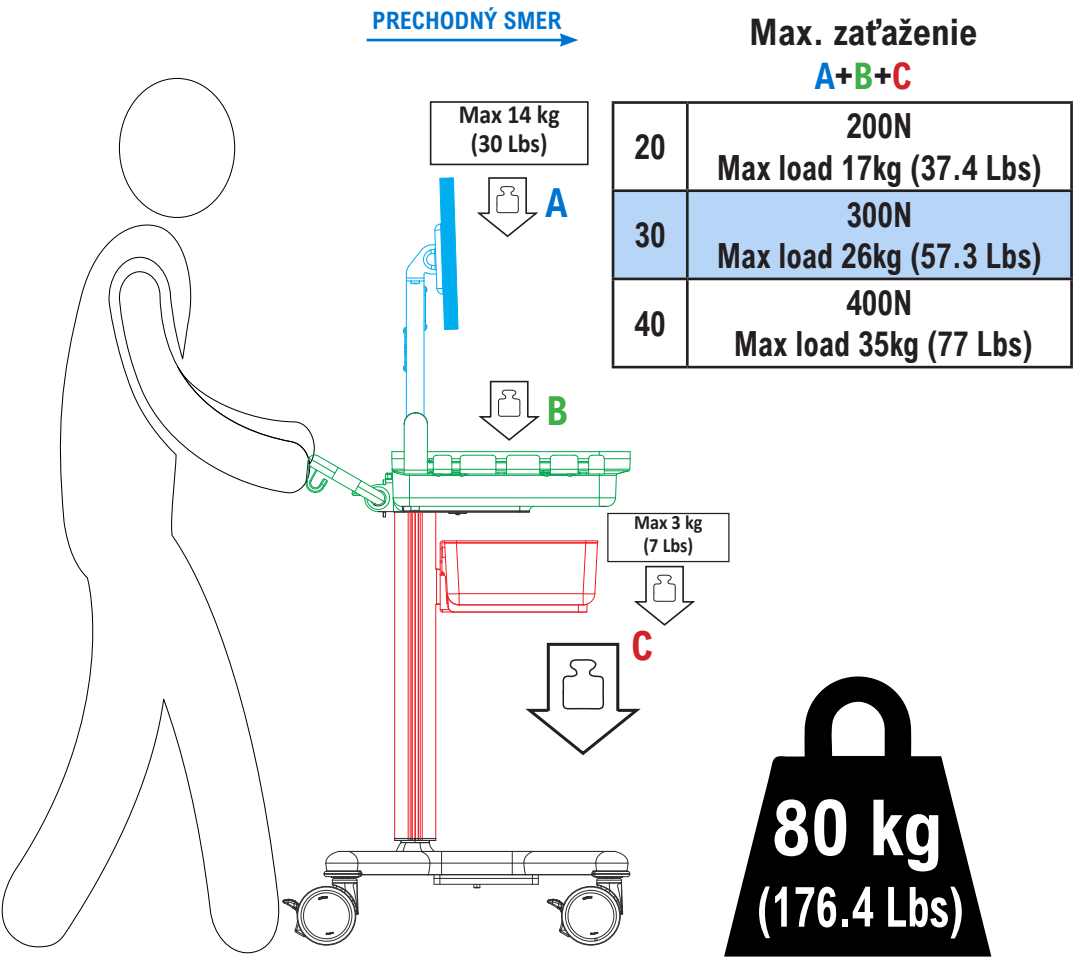

Príloha



Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technický personál podľa pokynov na montáž a údržbu (pozri vyhradenú časť “Montáž” a “Údržba”) tohto návodu.

ÚDRŽBA

Každých 6 mesiacov skontrolujte všetky upevňovacie body a mechanizmy. Výrobok je vhodný len na použitie vo vnútornom prostredí.

ČISTENIE

Kovové a/alebo plastové povrchy pravidelne čistite nekorozívnymi čistiacimi prostriedkami s neutrálnym pH a handričkou/hubou/štetcom s mäkkými štetinami. Nelejte priamo na povrchy tekuté, chlórové alebo amoniakové čistiace prostriedky, masné a olejové látky.

NÁHRADNÉ DIELY

Náhradné diely nájdete u distribútora zariadenia (pozri časť Kontakt).

ŽIVOTNOSŤ A LIKVIDÁCIA

Životnosť výrobku je 10 rokov.

Vozík a obal sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi alebo vnútroštátnymi predpismi.

kartónová krabica a vnútorné výstuhy	vnútorné balenie
KARTÓNOVÁ KRABICA	POLYETYLÉN S NÍZKOU HUSTOTOU

SLOVNÍK SYMBOLOV

Na vozíku alebo v návode sa uvádzajú tieto symboly:



Opatrnosť



Návod na obsluhu



Zdravotnícka pomôcka



Obmedzenie vlhkosti



Udržujte v suchu



Je zakázané sedieť na vozíku



Bendra mase



Označenie CE



Výrobca



Batch kód



Orientácia



Vyhýbajte sa slnečnému žiareniu



Tlačenie zakázané



Katalógové číslo



Číslo produktu



Dátum výroby



Krehké, zaobchádzajte opatrne



Teplotný limit



Distribútor

Distribútor: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Výrobca: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com