

Priročnik z navodili



Po inštalácii poskytnite konečnému používateľovi
návod na používanie.




Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno tehnično osebje v skladu z navodili za montažo in vzdrževanje (glej namensko poglavje “Montaža” in “Vzdrževanje”) tega priročnika.

Reprodukcije, kopiranje ali prevajanje, tudi v obliki izvlečkov, so brez predhodnega dovoljenja družbe Multix Solutions S.r.l. prepovedani.

NAVODILA ZA MONTAŽO




Voziček X1T je medicinski pripomoček razreda I v skladu s pravili razvrščanja iz Priloge VIII in nosi oznako „CE“ v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (MDR) (EU) 2017/745. Je v skladu z IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 in izpolnjuje splošne varnostne in zmogljivostne zahteve iz Priloge I zgoraj navedene Uredbe o medicinskih pripomočkih.

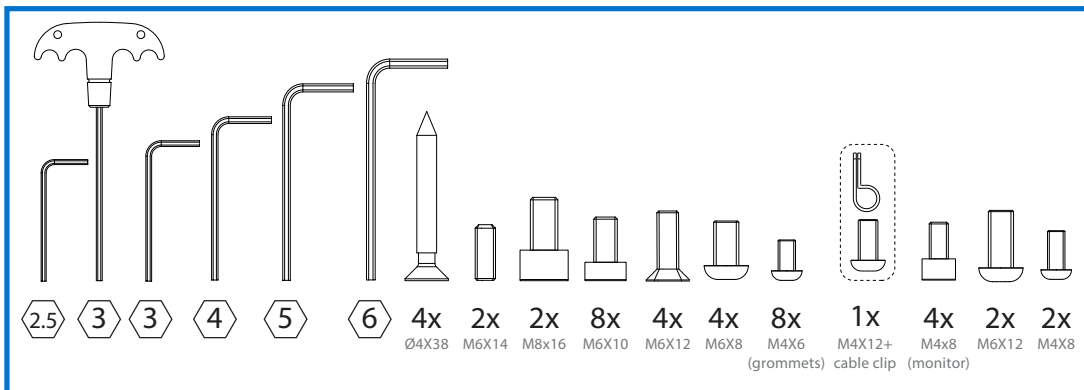

NAVODILA ZA MONTAŽO 000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Če je priložena dodatna oprema, pred sestavljanjem vozička preverite navodila za uporabo.

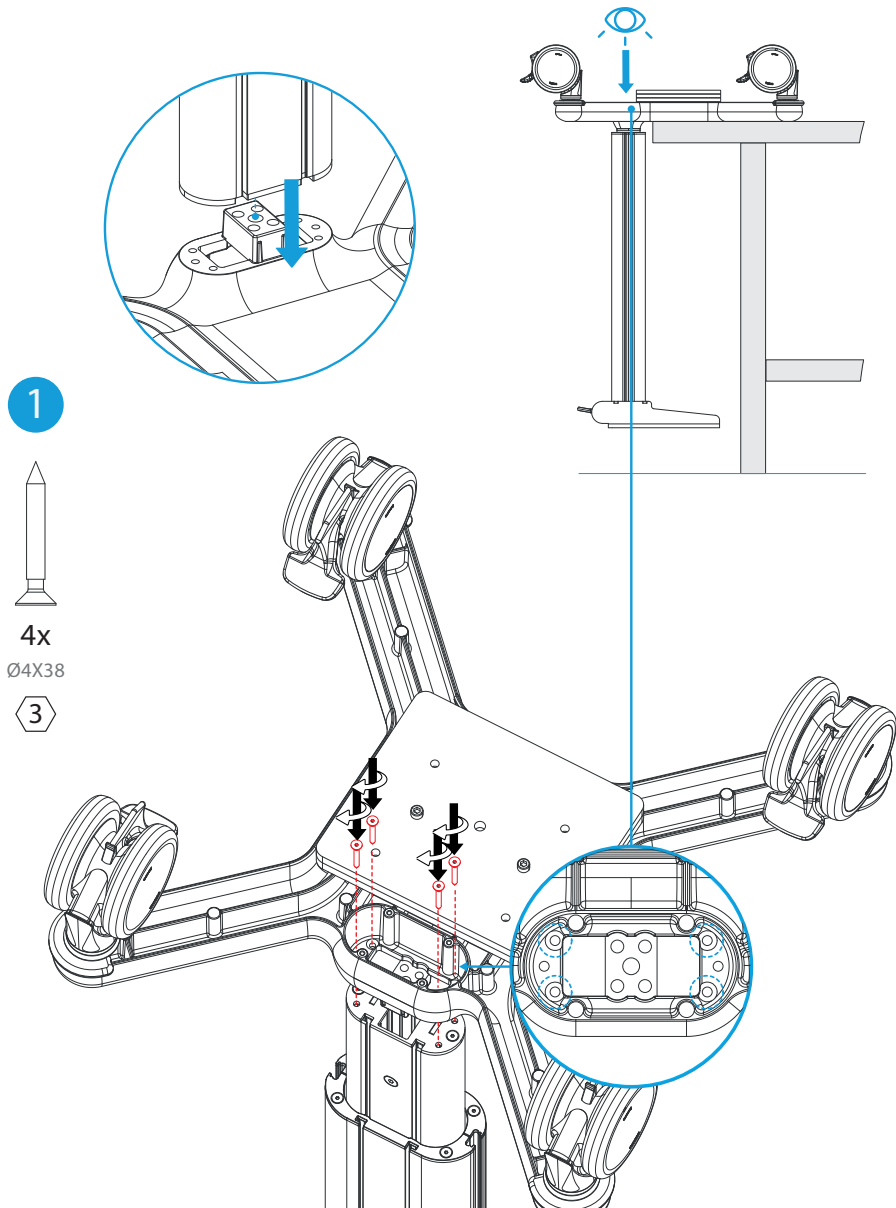

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

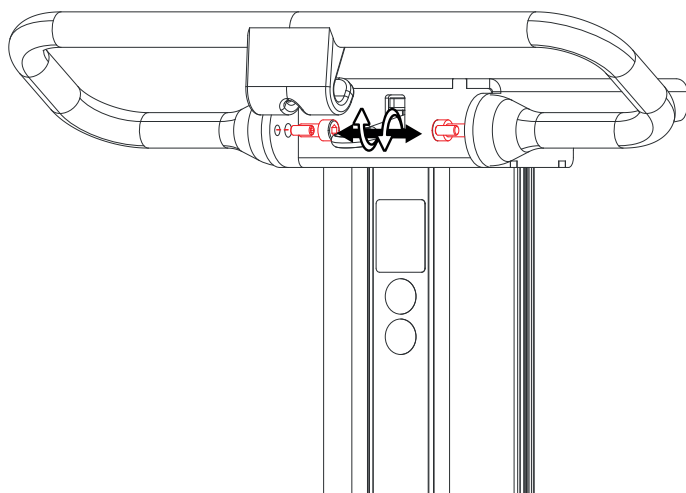


3

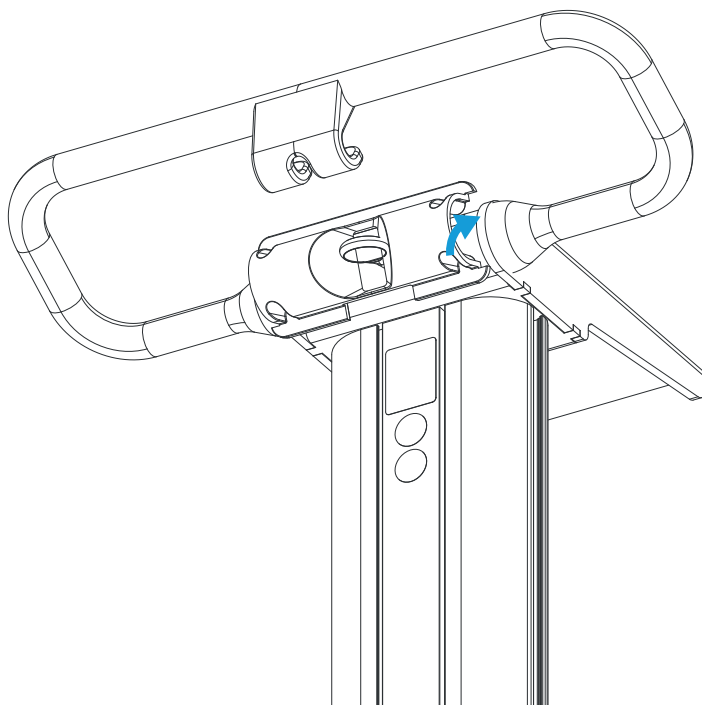

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

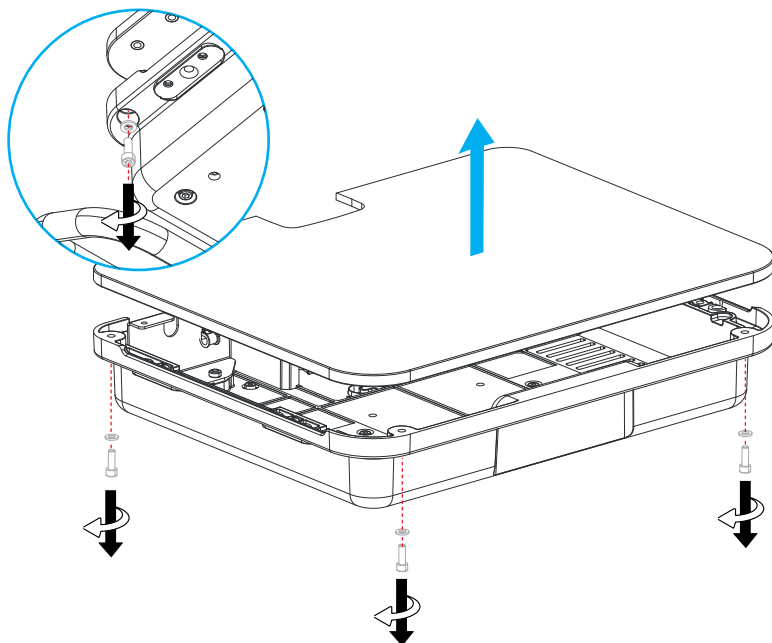

- 6
- 4x
M6x12
- 4

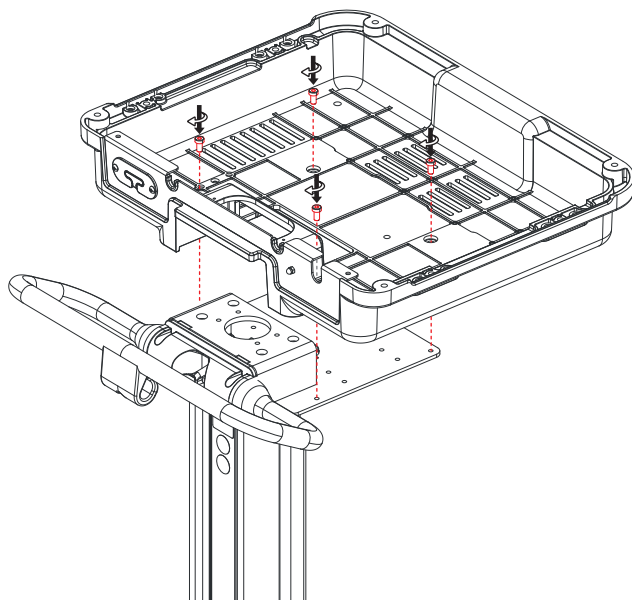


7



4x
M6x12

4

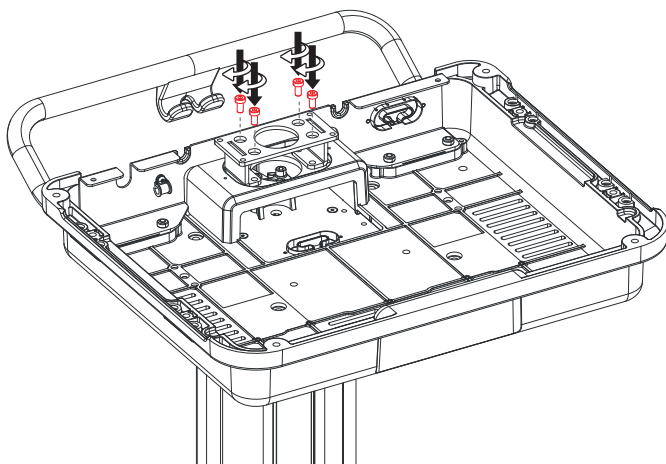


8




4x
M6x10

4

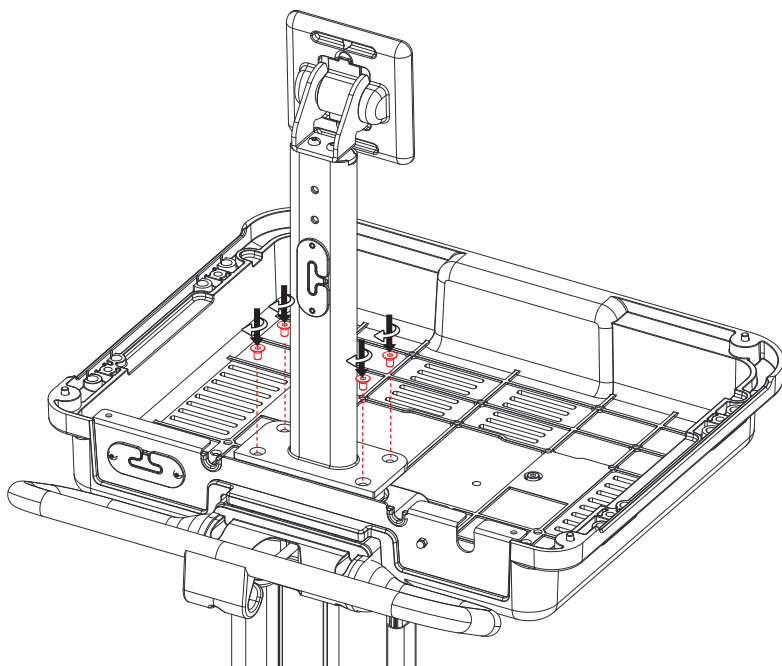


9

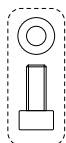

4x
M6x18
metal washer

5

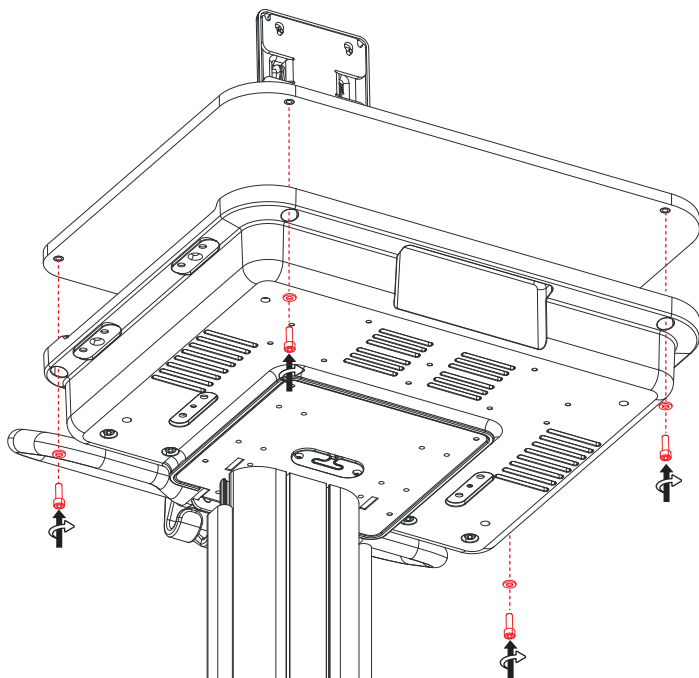



10



4x
M6X8

4

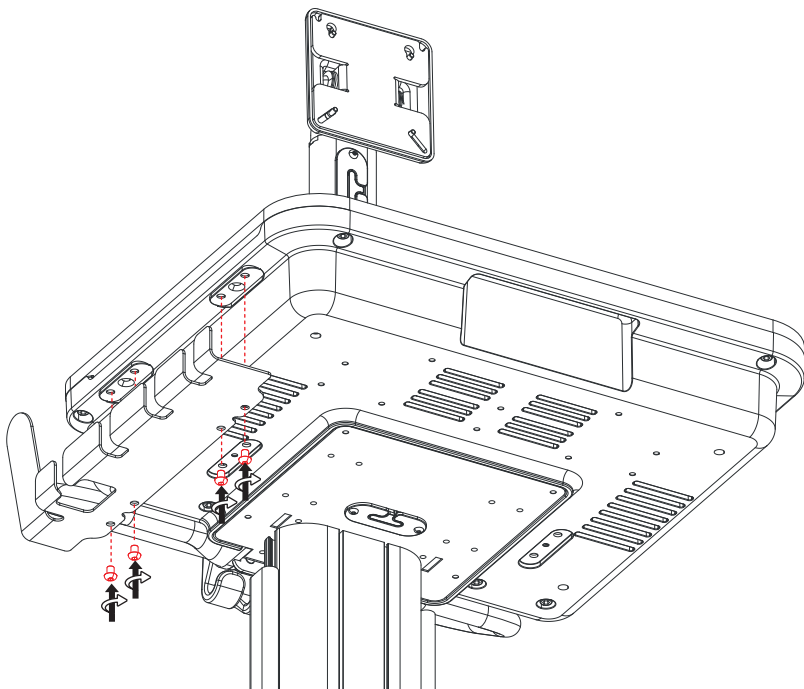

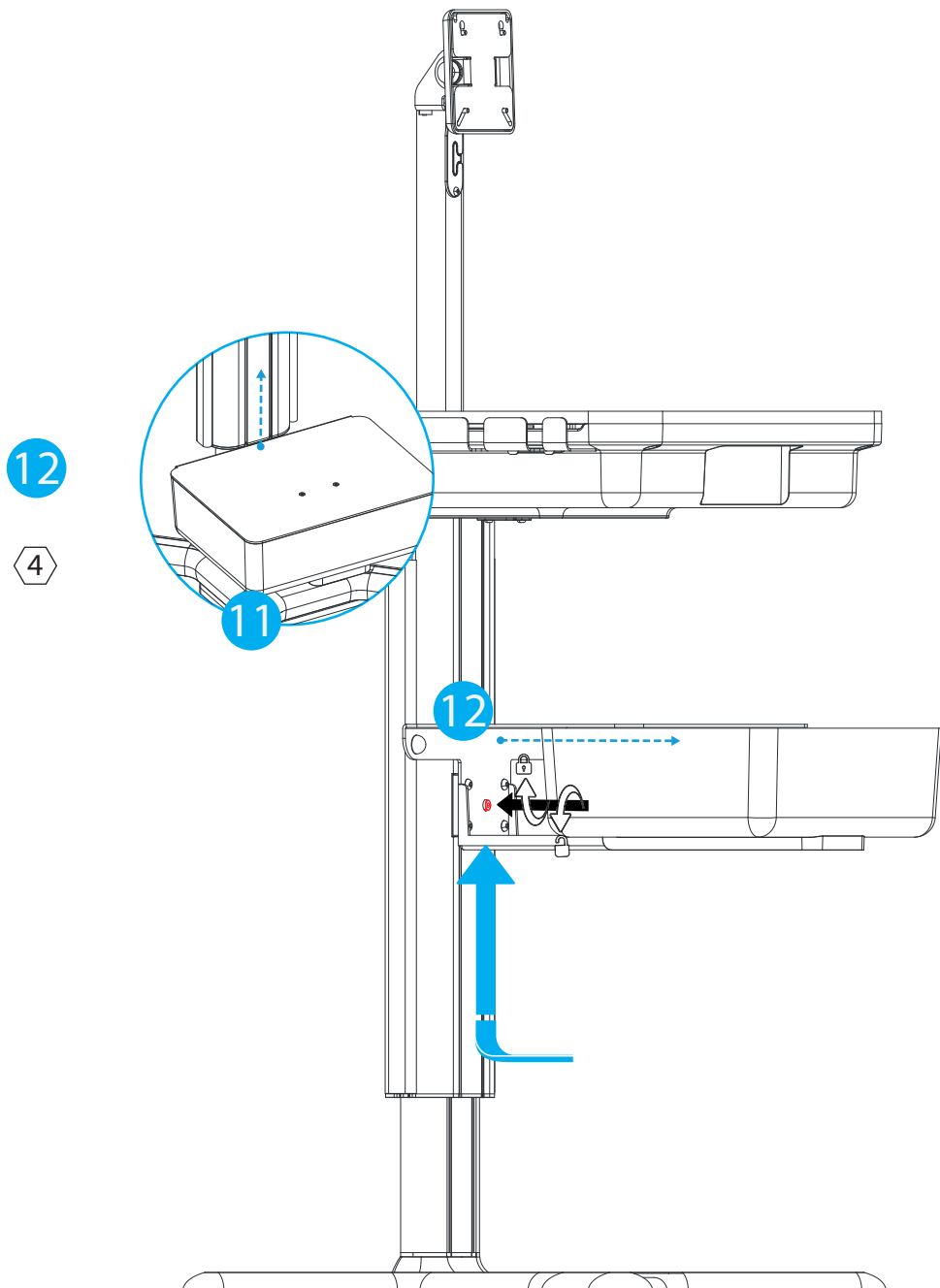


13



4x

M4X6

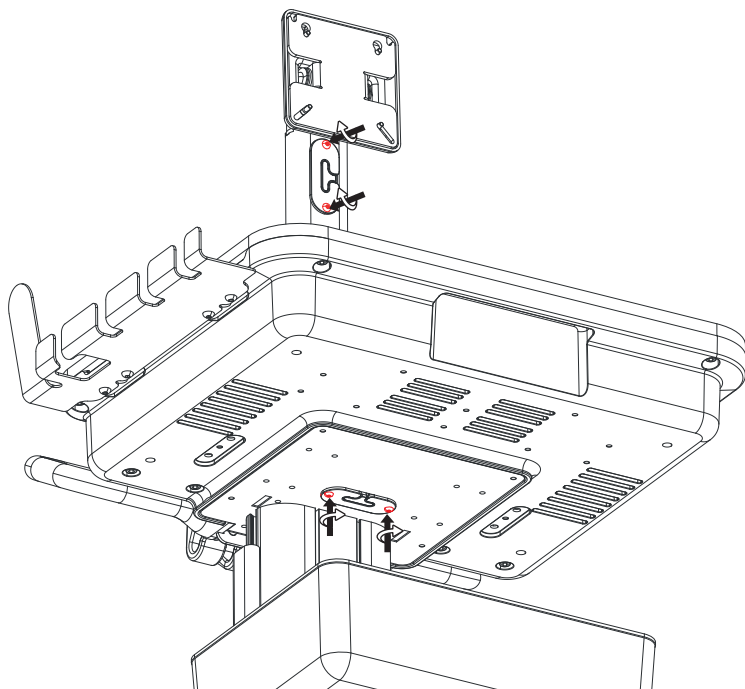


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip

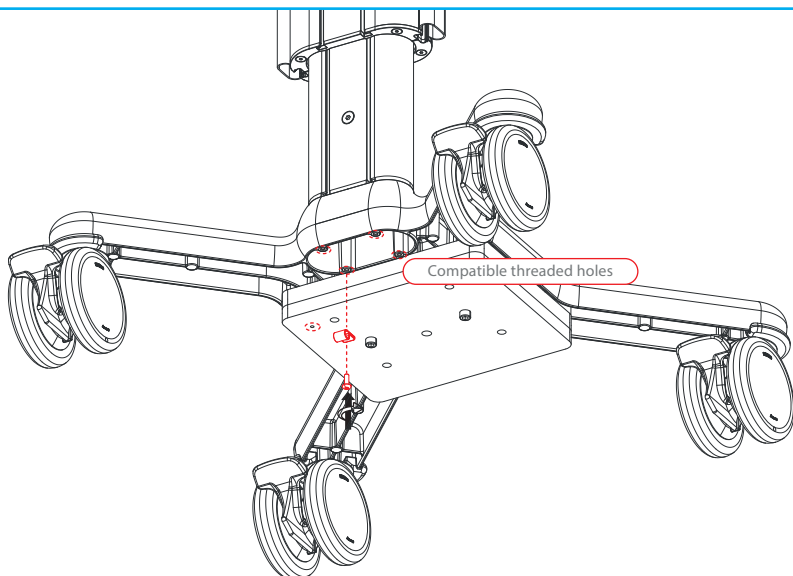

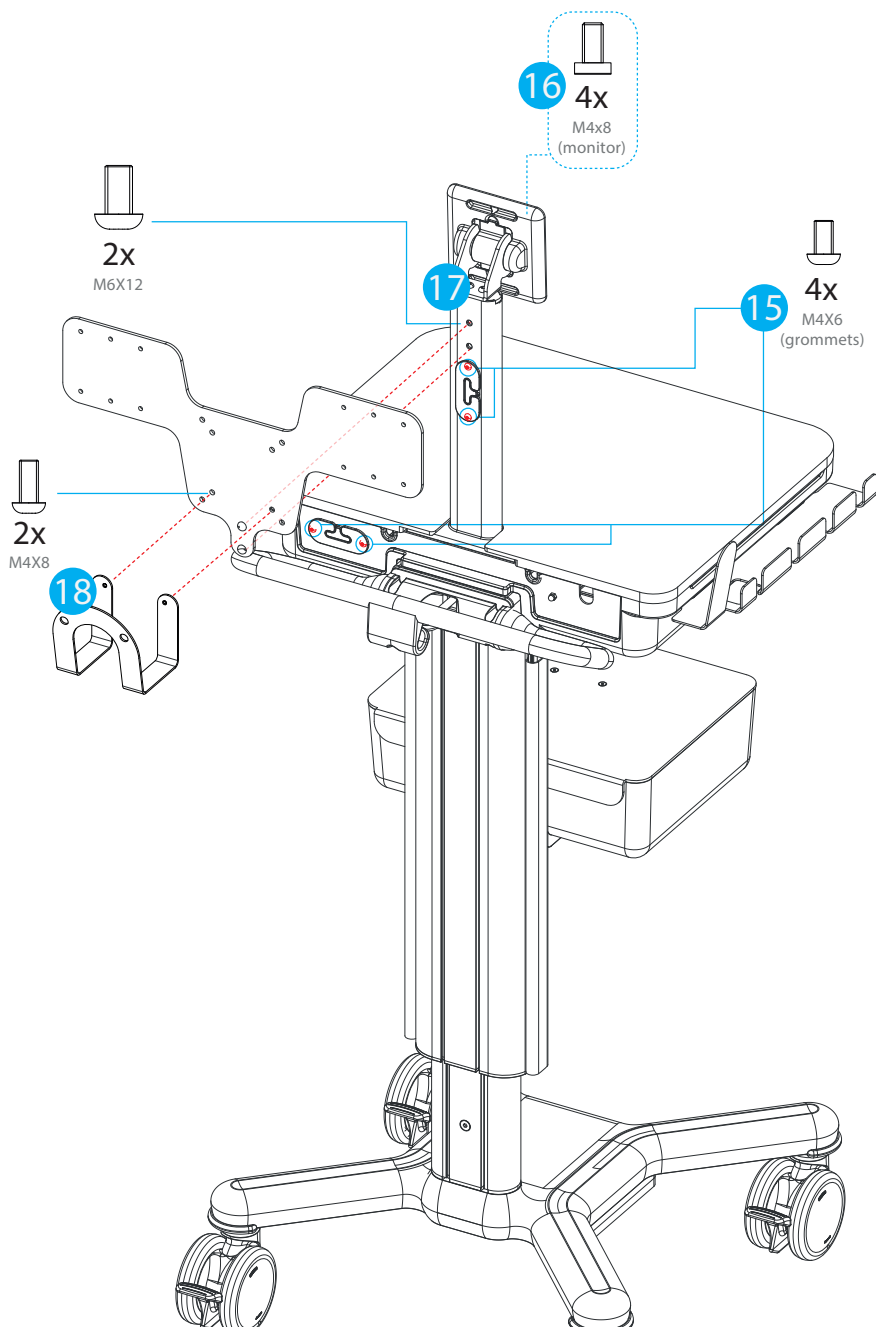

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Pomembna obvestila



Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno tehnično osebje v skladu z navodili za montažo in vzdrževanje (glej namensko poglavje “Montaža” in “Vzdrževanje”) tega priročnika.

NAMENSKA UPORABA

Voziček X1T - 000CNSX1T omogoča prevoz **pripomočka in njegove dodatne opreme** med terapevtskimi točkami v bolnišnicah in ustanovah z omejeno oskrbo.

SPLOŠNE VARNOSTNE OBVEZNOSTI

- Pred uporabo je treba prebrati navodila za uporabo vozička.
- Navodila shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek je bil ustvarjen izključno za metode, navedene v navodilih za uporabo. Vsako drugo uporabo je treba obravnavati kot neprimerno.
- Pri posegih ali poškodbah, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe vozička, se garancija takoj unovči.
- **Družba Multix Solutions ne odgovarja za škodo na osebah in/ali stvarih zaradi nepravilne uporabe.**
- Ko je **naprava** nameščena na voziček, mora **monter sistema** zagotoviti, da je sistem skladen s trenutno veljavnimi standardi EN 60601-1 v trenutni različici.



SPLOŠNO OPOZORILO IN PREVIDNOST

Varnost vozička je zagotovljena, če natančno upoštevate spodnja opozorila:

- Prepričajte se, da se voziček ujema s sliko v priročniku.
- Preverite, ali se med prevozom ni zlomil ali poškodoval.
- Preverite, ali so gibljivi in blokirni deli, kot so kolesa, zavore in plinska vzmet (če je prisotna), delujoči.
- Ko so sistem in dodatki sestavljeni, morajo biti vsa štiri kolesa vozička zaklenjena.
- Ko voziček ni v pogonu, poskrbite, da so kolesa vozička blokirana in da sistem ni parkiran na neravnih površinah.
- Pred potiskanjem vozička morajo biti vsa kolesa vozička odklenjena.
- Da se voziček ne bi prevrnil, je treba držati ročaj, če voziček zapeljete čez ovire (na primer električne kable).
- Pri potiskanju vozička ne uporabljajte prevelike sile.
- Spremembe te naprave niso dovoljene.




NAVODILA ZA NALAGANJE

- **PREPOVEDANO JE SEDETI NA VOZIČKU**
- **PREPOVEDANO POTISKANJE, ČE SO KOLESA BLOKIRANA**
- Upoštevajte največje dovoljene obremenitve, kot je navedeno v poglavju “položaj in smer prevoza”
- **Prepričajte se, da skupna teža vgrajene konfiguracije (skupaj z dodatki) ne presega skupne teže, navedene na nalepki na vozičku in na naslednji strani.**

TRANSPORTNI POLOŽAJ IN SMER

Med prevozom je treba voziček spustiti do konca plinske vzmeti , pri čemer mora ročaj poto-
vati naprej, kot je prikazano na spodnji sliki:

PREHODNI MIR →

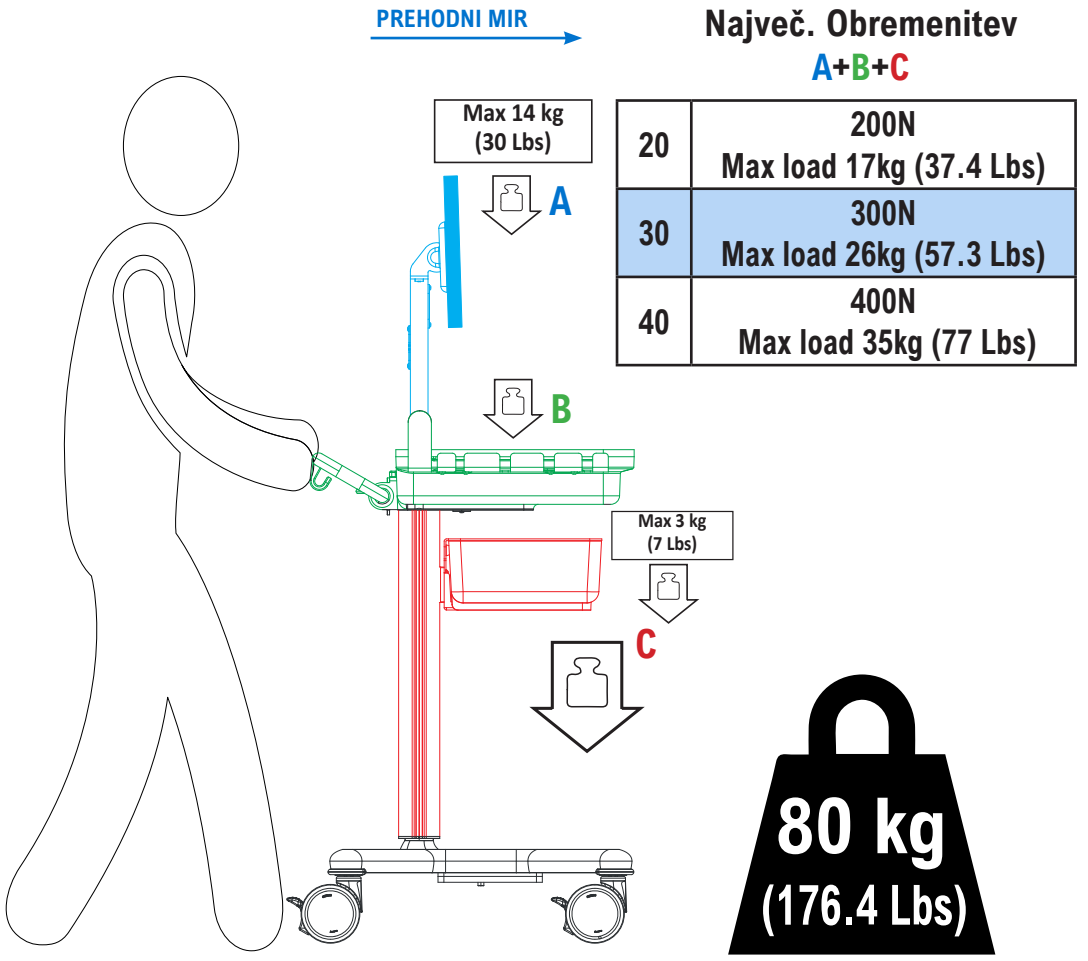

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)

80 kg
(176.4 Lbs)

Dodatek



Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno tehnično osebje v skladu z navodili za montažo in vzdrževanje (glej namensko poglavje “Montaža” in “Vzdrževanje”) tega priročnika.

VZDRŽEVANJE

Každých 6 mesiacov skontrolujte všetky upevňovacie body a mechanizmy.

Výrobok je vhodný len na použitie vo vnútornom prostredí.

ČIŠČENJE

Kovinske in/ali plastické povrchy redno čistite z nekorozívnymi detergenti z neutrálnym pH in krpo/čopičem/čopičem z mehkimi štetinami.

Ne nalievajte neposredno na povrchy tekočích čistilných sredstev na osnovi klora ali amoniaka, mastných in olejnatých snoví.

REZERVNI DELI

Za rezervné diely sa obrňte na distribútora naprave (glejte poglavje Kontakt).

ŽIVLJENSKA DOBA IN ODSTRANJEVANJE

Življenjska doba izdelka je 10 let.

Voziček in embalažo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

kartónová krabica a vnútorné výstuhy  KARTÓNOVÁ KRABICA	vnútorné balenie  POLYETYLÉN S NÍZKOU HUSTOTOU
--	---

GLOSAR SIMBOLOV

Na vozičku ali v navodilih so navedeni naslednji simboli:



Previdnost



Navodilo za delovanje



Medicínski pripomoček



Omejitev vlážnosti



Držite suhe



Prepovedano je sedeti na voziček



Skupná teža



Oznaka CE



Proizvájalec



Oznaka sériej



Usmerjenost



Izogibaj se sončni svetlobi



Potískanie prepovedano



Številka kataloga



Številka izdelka



Datum proizvodnje



Krhko, previdno ravnaj



Omejitev teperature



Distribúter

Distributer: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Proizvajalec: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com