




UPUTE ZA UPORABU X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Molimo vas da nakon instalacije krajnjem korisniku dostavite upute za uporabu.


Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovaj ovaj priručnik.

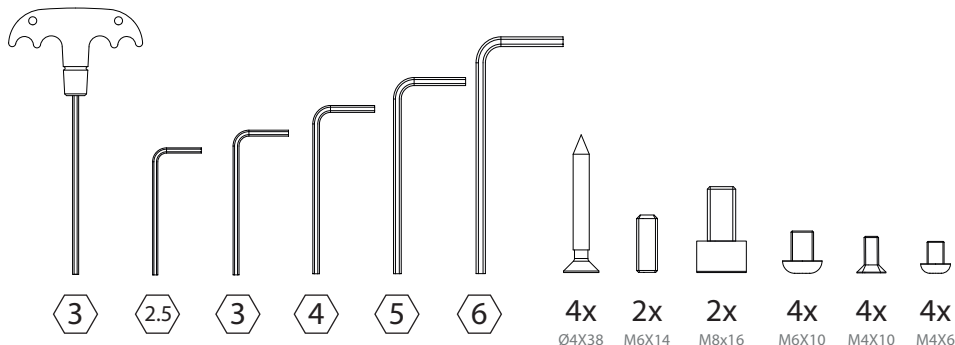

SKUPŠTINA UPUTA

- ! Ako su prisutni bilo kakvi dodaci, molimo pogledajte odgovarajuće upute prije
• sastavljanja kolica.


1

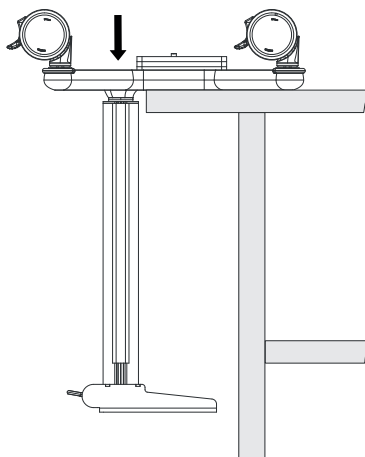

2




4x
Ø4X38

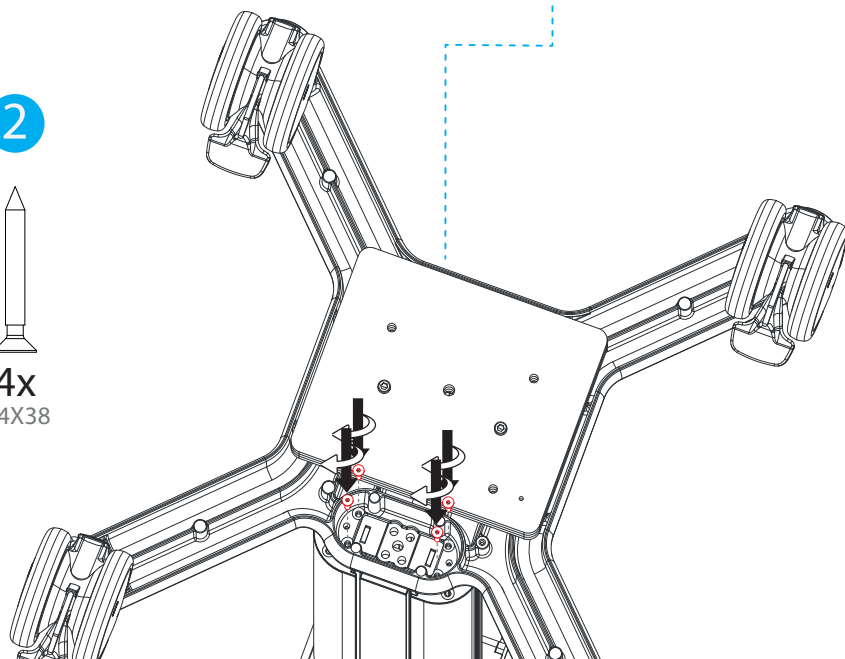


3

2x M6X14
2x M8x16

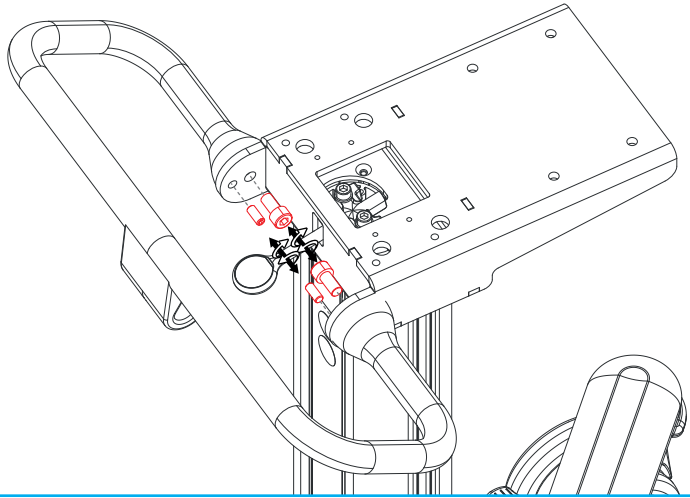

4

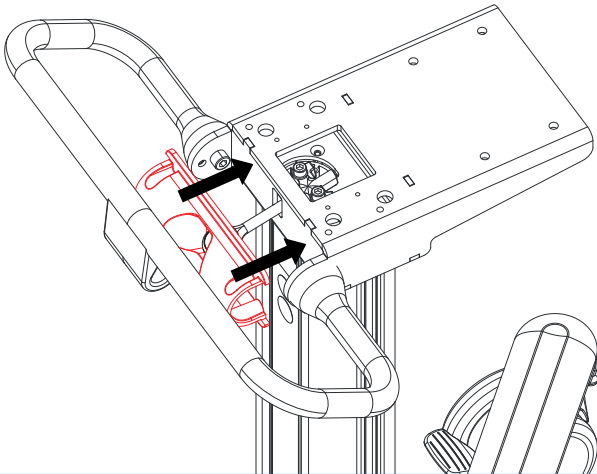


5




4x

M4X10

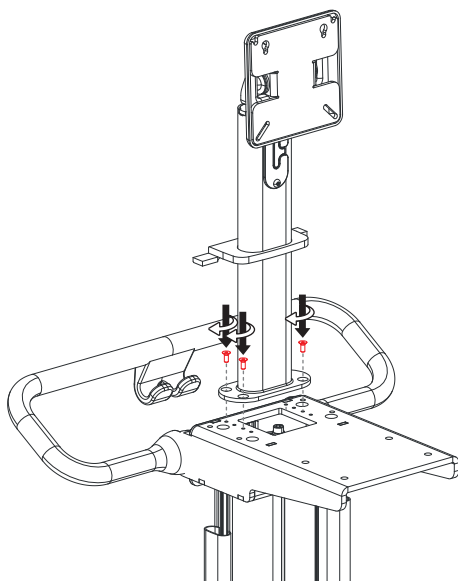


6

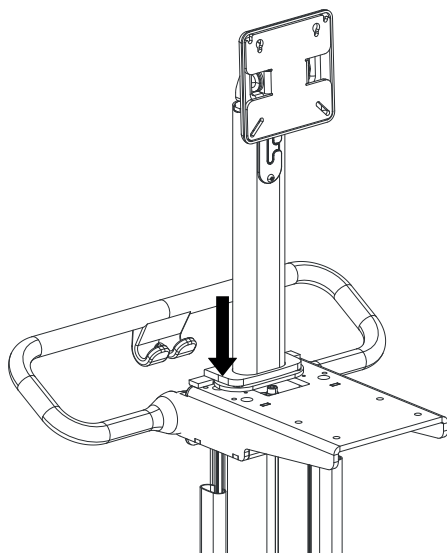

7




4x
M6X10




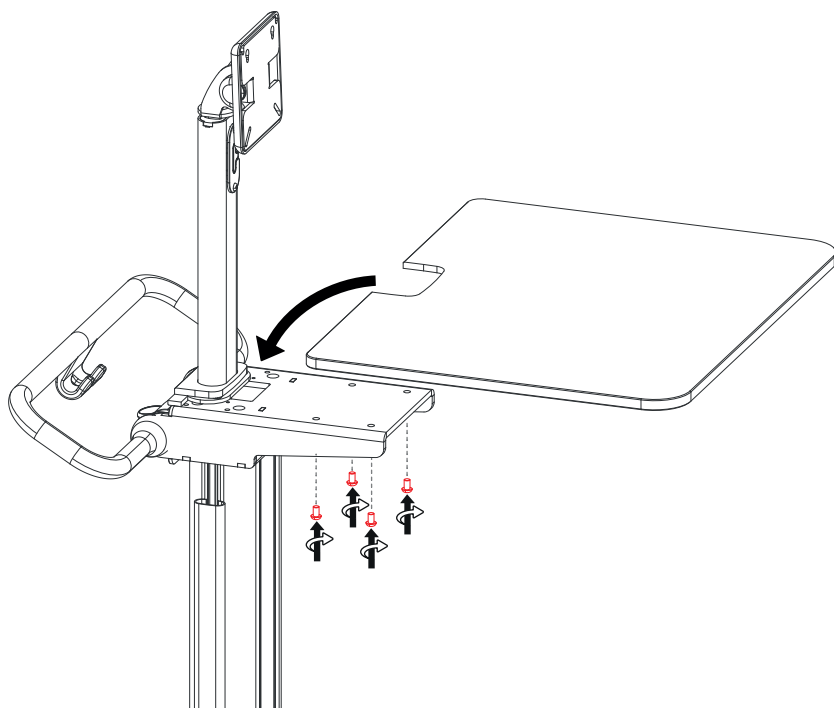


8




2x
M4X6

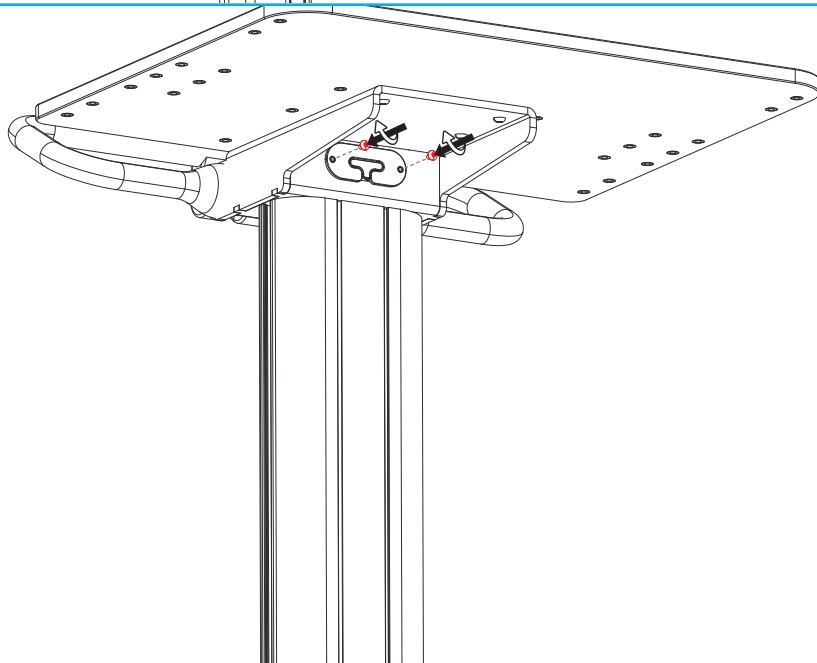


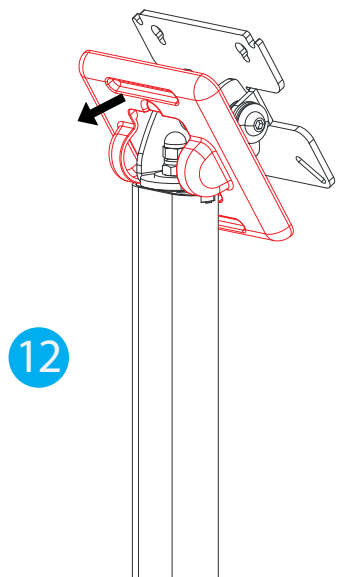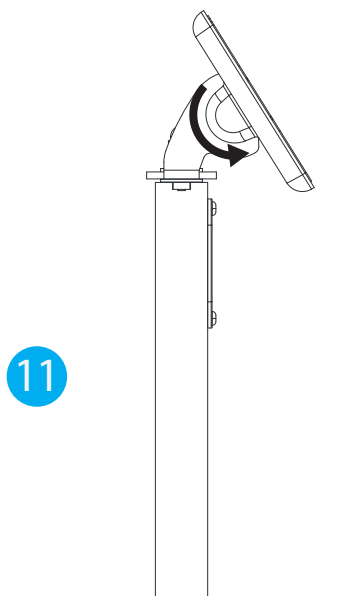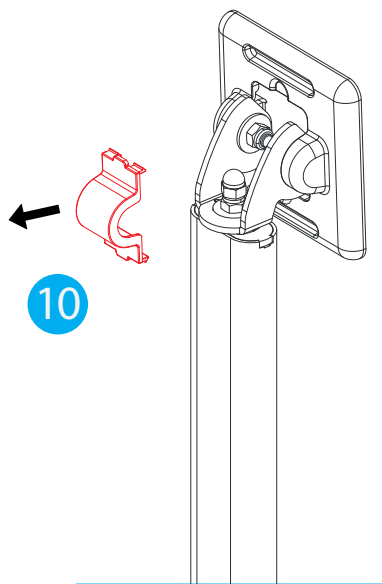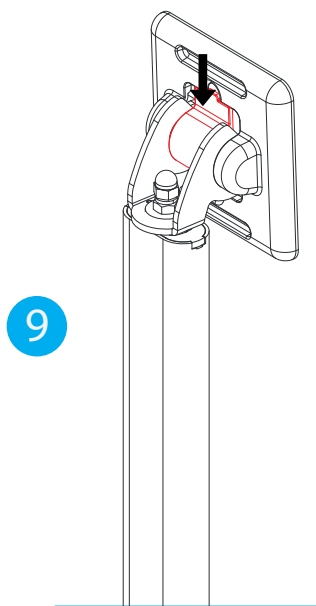

SKUPŠTINA UPUTA 032MLTACC - SHELF

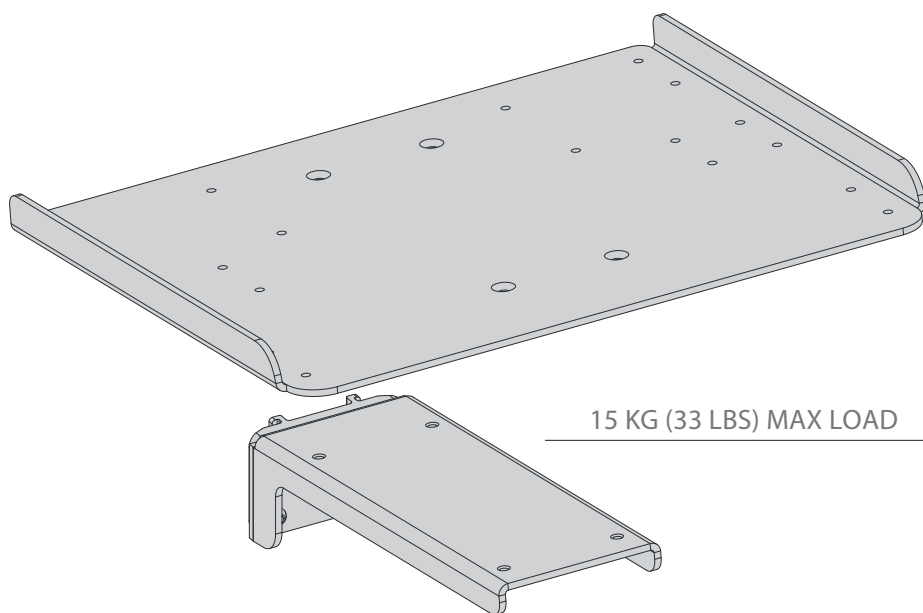


4x
M6X8

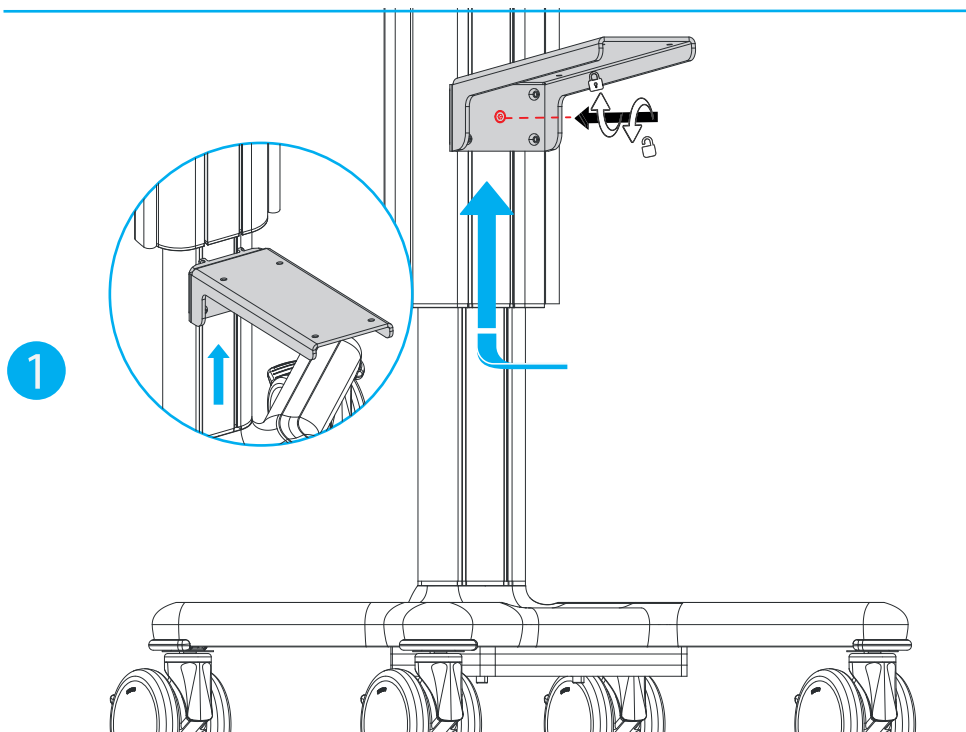


2



4x
M6X8

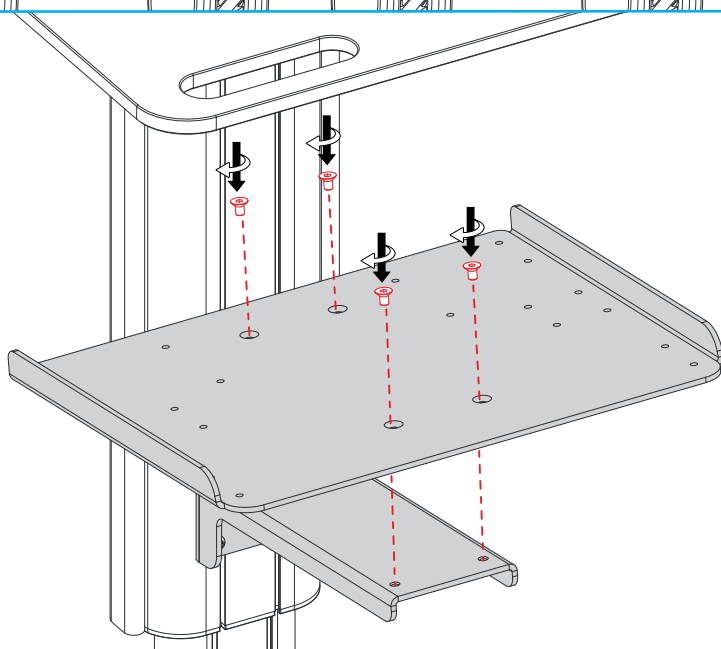

SKUPŠTINA UPUTA 025MLTACC - QWERTY SUPPORT

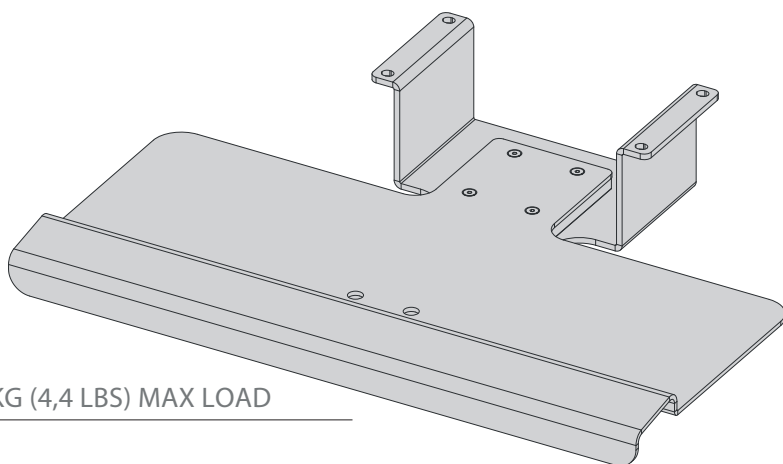

2 KG (4,4 LBS) MAX LOAD




4x
M6X8


1



4x
M6X8

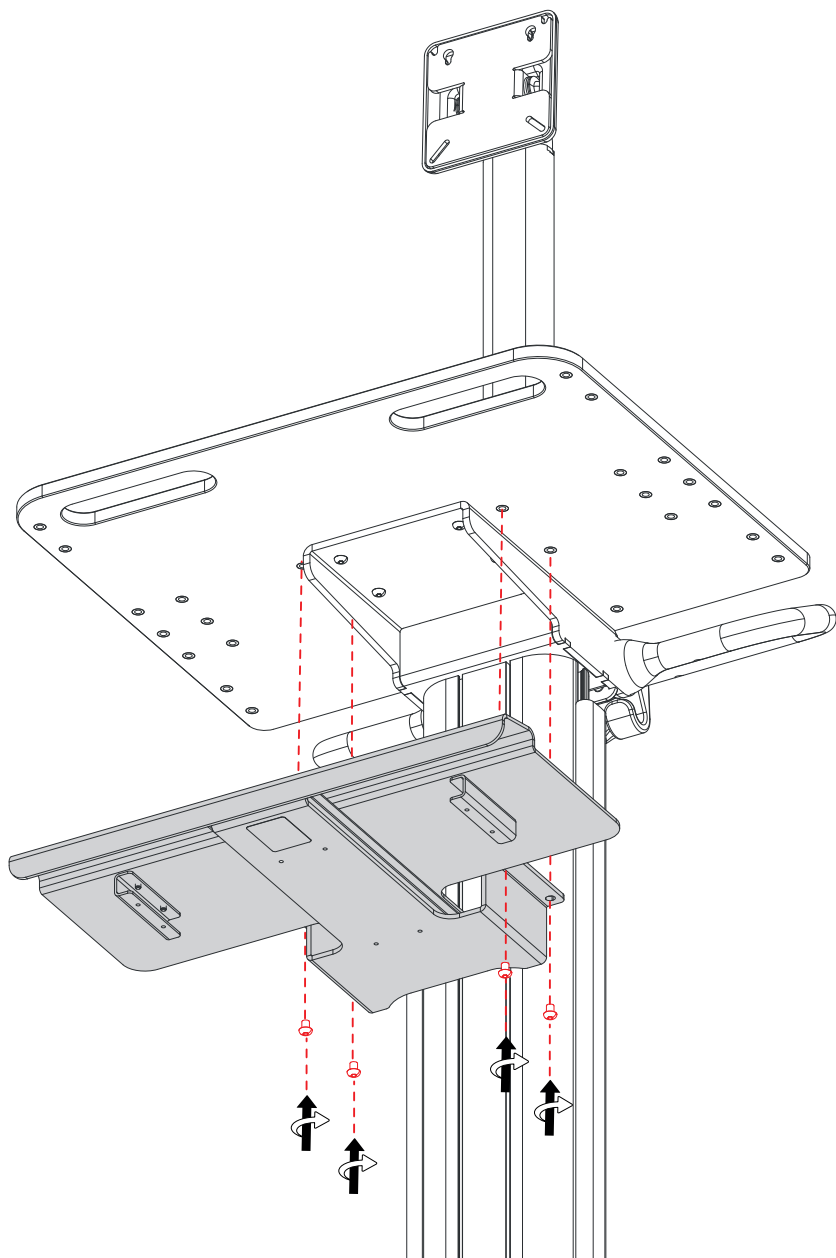

SKUPŠTINA UPUTA 017MLTACC - L-R MOUSEPAD

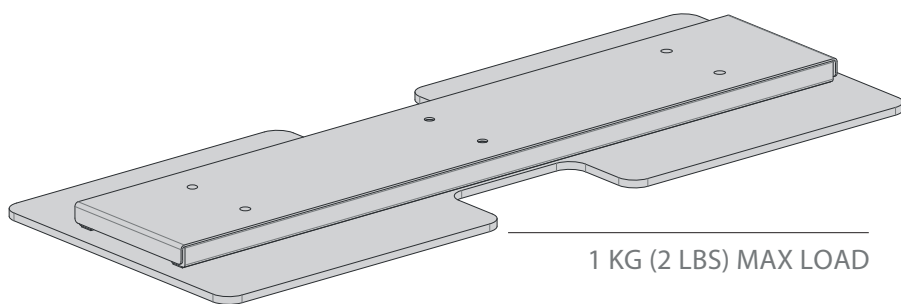


4x
M4X8

1




2x
M4X8

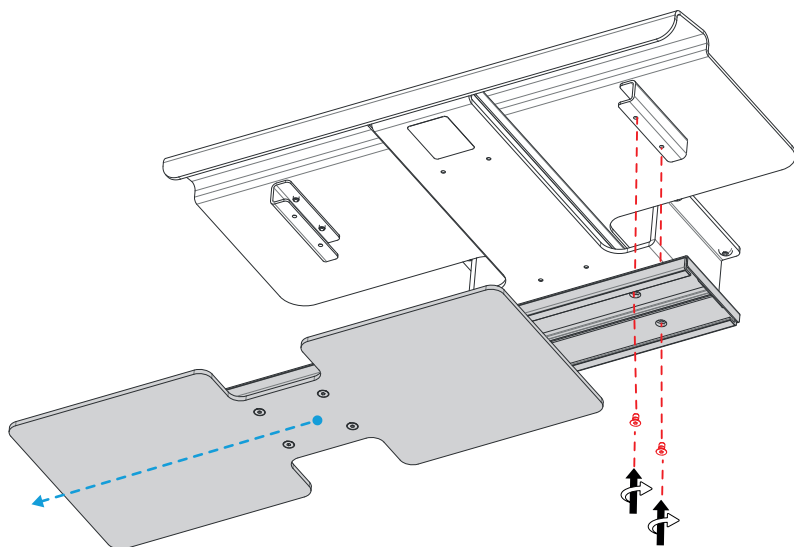

2



2x
M4X8

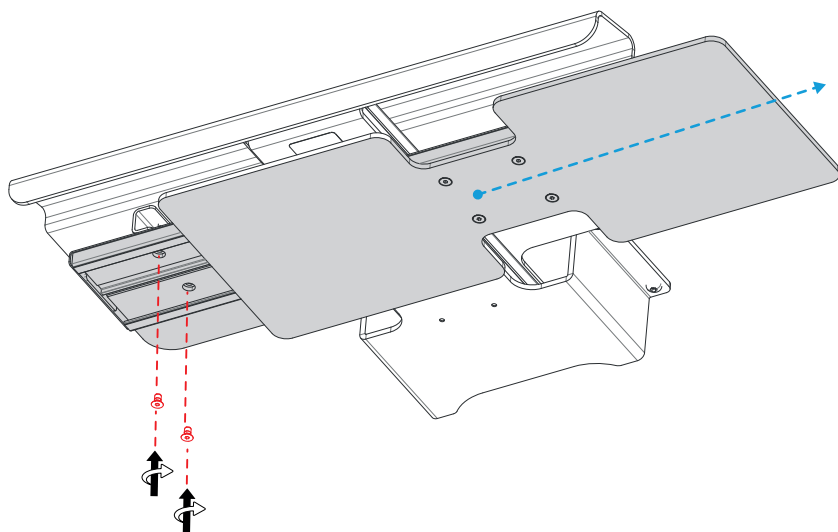

Važne obavijesti



Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovog priručnika.

NAMJENJENO KORISTITI

Kolica X1 TALL omogućuju transport **uređaja i njegovih dodataka** između točaka terapije u bolničkom okruženju i okruženju ustanove za ograničenu skrb.

OPĆENITO SIGURNOST OBVEZE

- the Kolica upute mora dobro čitati prije koristiti.
- zadržati the upute za budućnosti referenca.
- Proizvod je stvoren isključivo za metode navedene u uputama za uporabu. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom.
- Neovlašteno mijenjanje ili oštećenje uzrokovano nepravilnom uporabom kolica dovodi do trenutnog gubitka jamstva.
- **Multix Solutions je ne odgovoran za šteta do osobe i/ili stvari dva do nepravilno koristiti.**
- Kada je **uređaj montiran na kolica, instalater sustava** bit će odgovoran da osigura da je sustav u skladu s trenutno primjenjivim standardima, EN 60601-1 trenutna verzija.



OPĆENITO UPOZORENJE I OPREZ

The sigurnost od the kolica je Zagarantiran po pažljivo slijedeći the upozorenja ispod:

- Napraviti Naravno the kolica šibice the ilustracija u the priručnik.
- Ček da to je Bilješka slomljen ili oštećena tijekom prijevoz.
- Provjerite jesu li pokretni dijelovi i dijelovi za zaključavanje, kao što su kotači, kočnice i (ako postoji) plinska opruga, funkcionalni.
- Sva četiri kotača kolica moraju biti zaključana kada su sustav i njegovi dodaci sastavljeni.
- Kada se kolica ne voze, uvjerite se da su kotači kolica blokirani i da sustav nije parkiran na neravnim površinama.
- svi kotači od the kolica imati do dobro otključan prije the kolica je gurnuti.
- Kako biste spriječili prevrtanje kolica, ručku morate držati ako se kolica voze preko prepreka (na primjer kabela za napajanje).
- Izbjegavajte an pretjerano sila kada guranje the kolica.
- Ne promjene do ovaj uređaj su dopuštena.




UPUTE ZA TERET

- **ZABRANJENO JE SJEDENJE NA KOLICA**
- **ZABRANJENO GURANJE KADA SU KOTAČI BLOKIRANI**
- slijedite maksimalno opterećenje kako je navedeno u odjeljku “Transportni položaj i smjer”
- **Osigurajte da ukupna težina sklopljene konfiguracije (dodan pribor) odgovara ne prelazi ukupnu težinu naznačenu na naljepnici na kolicima i na sljedećoj stranici**

PRIJEVOZ POLOŽAJ I SMJER

Tijekom transporta, kolica moraju biti spuštena do kraja plinske opruge, držeći ručku okrenutu prema naprijed, kao što je prikazano na slici ispod:

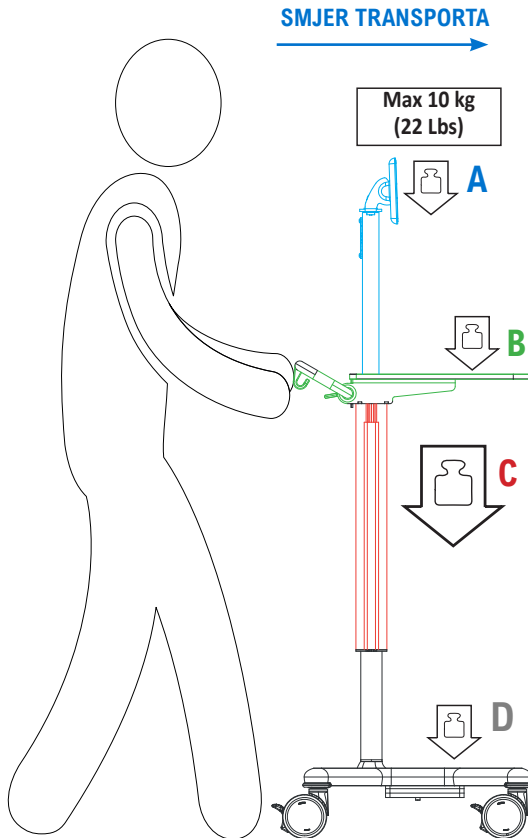

Sarcina maximă

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



MAKSIMALNA UKUPNA TEŽINA
POSTAVLJENE KONFIGURACIJE
(= kolica + dodaci + sigurno radno
opterećenje)

Ukupna težina = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + težina kolica

Težina kolica = 29kg (63.9 Lbs)

Maksimalno opterećenje (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maksimalno opterećenje D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - težina kolica (29kg) - (A+B+C)*

*Ako opterećenja primijenjena na pomični dio kolica (A + B + C) ne dosežu navedeno maksimalno opterećenje, moguće je primijeniti veća opterećenja od navedenih na fiksni dio kolica (D), bez prekoračenja maksimalne ukupne težine.



Instalaciju i održavanje mora izvoditi kvalificirani tehničar osoblje i slijedeći upute za sastavljanje i održavanje (vidi posvećen odjeljak “Skupština” i “Održavanje”) od ovaj ovaj priručnik.

ODRŽAVANJE

Ček svi učvršćenja bodova i mehanizmima svaki 6 mjeseca.
Proizvod je prikladan samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

ČIŠĆENJE

Prije uporabe, osigurajte da je proizvod očišćen i dezinficiran u skladu sa zahtjevima primjene. Redovito čistite metalne i/ili plastične površine nekorozivnim neutralnim pH deterdžentima i krpom/spužvom/četkom s mekim vlaknima.
Ne izlijevajte izravno na površine tekuće deterdžente na bazi klora ili amonijaka, masne i uljne tvari.

REZERVNI DIJELOVI

Za rezervni dijelovi uputiti do the uređaj distributer (ako je Kontakt odjeljak).

RADNI VIJEK I ODLAGANJE

Vijek trajanja proizvoda je 10 godina.
Kolica i ambalaža moraju se odložiti u skladu s lokalnim ili nacionalnim propisima.

karton i unutarnja ojačanja  KARTON	unutarnje pakiranje  POLIETILEN NISKE GUSTOĆE
--	--

GLOSAR OD SIMBOLI

The slijedeći simboli su prijavi poštovani the kolica ili u the upute:



Oprez



Upute za operaciju



Medički uređaj



Ograničenje vlažnosti



Držite suho



Zabranjeno je sjediti na kolicima.



Totalna težina



CE oznaka



Мпроизводитель



Batch kod



Orijentacija



Držite se podalje od sunčeve svjetlosti



Guranje za-branjeno



Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda



Broj kataloga



Broj proizvoda



Datum proizvodnje



Krhka, pažljivo se rukujte



Ograničenje temperature



Distribuirao po



Maksimalno opterećenje

Distribuirat: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Proizveden po: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

