




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Παρέχετε το εγχειρίδιο οδηγιών στον τελικό
χρήστη μετά την εγκατάσταση.


Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

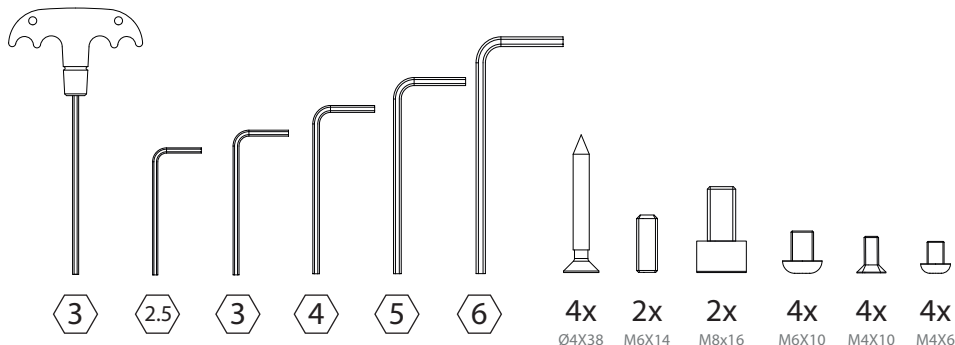


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- !** Εάν υπάρχουν αξεσουάρ, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες πριν συναρμολογήσετε το καροτσάκι.


1

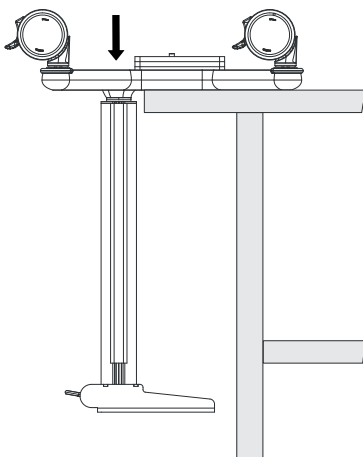

2

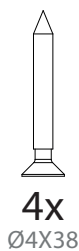


4x
Ø4X38

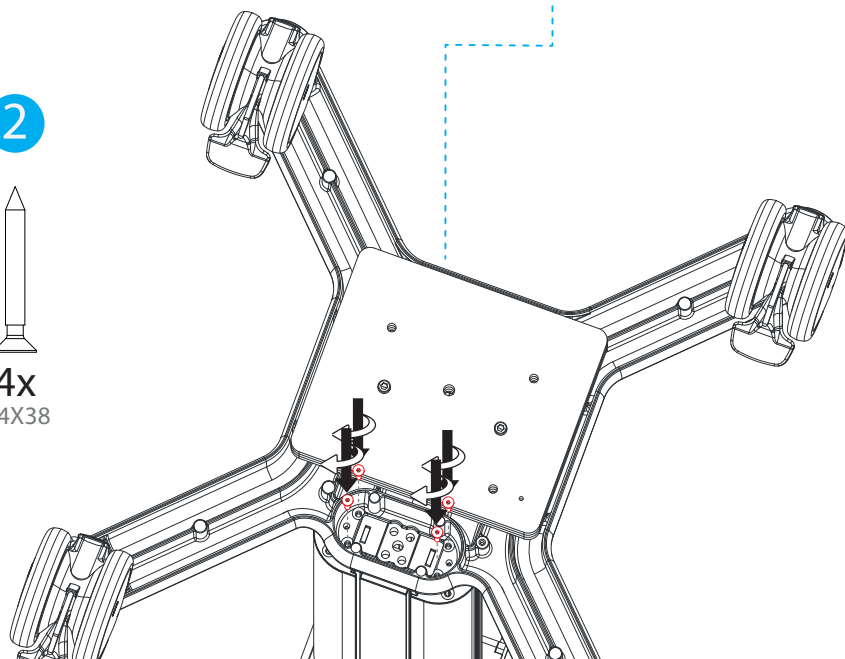


3

2x M6X14
2x M8x16

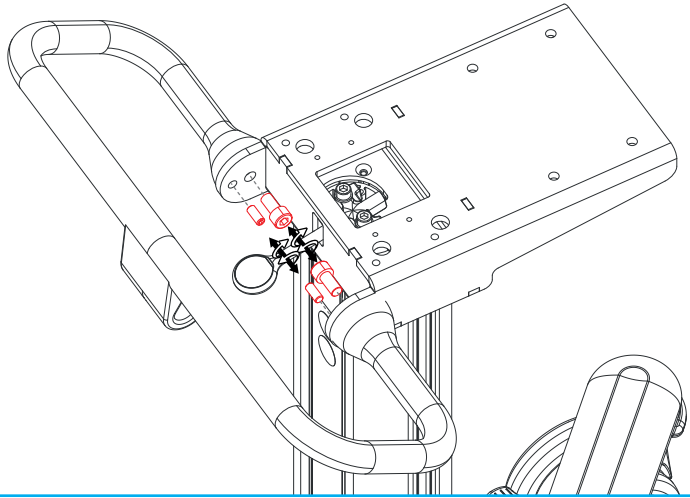


4

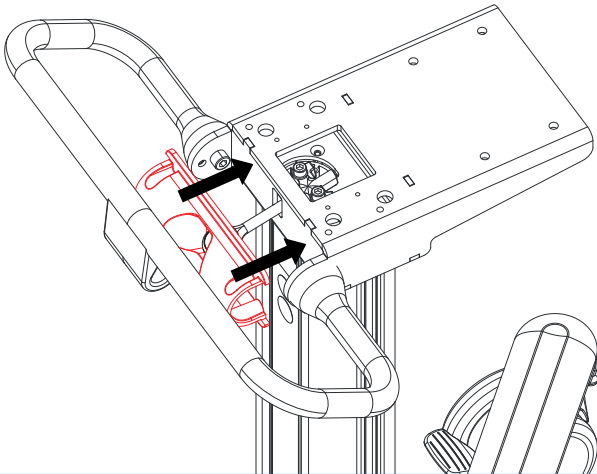


5



4x
M4X10

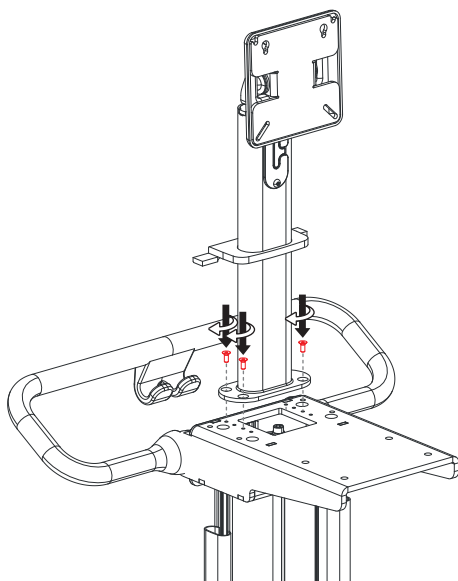


6

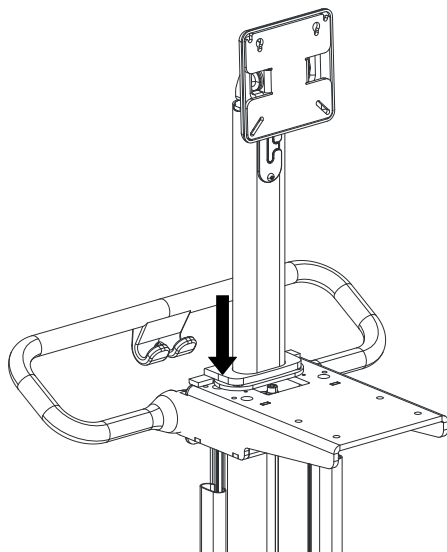

7




4x
M6X10




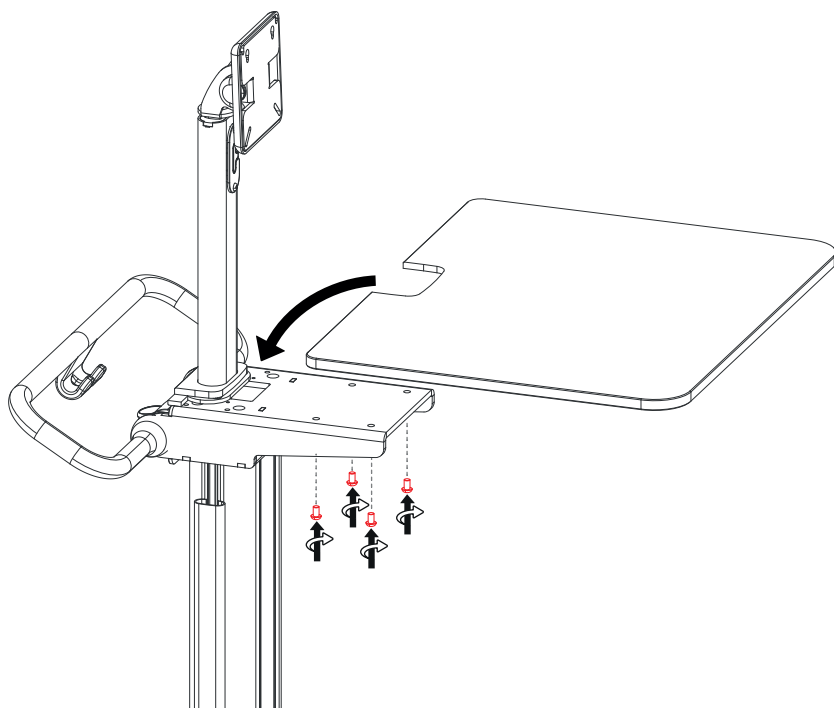


8




2x
M4X6

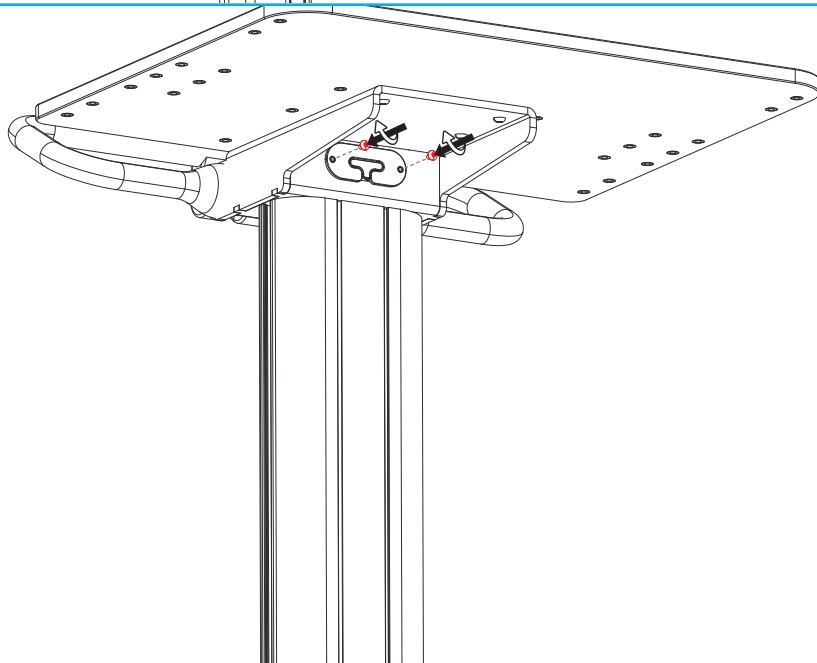


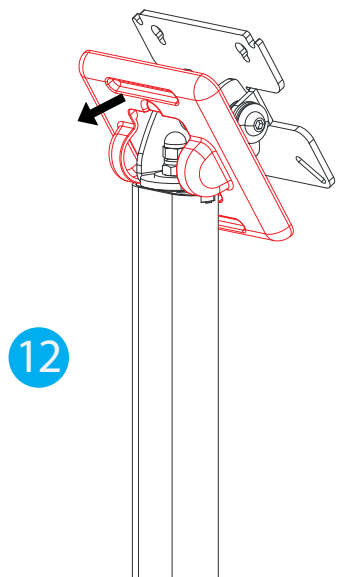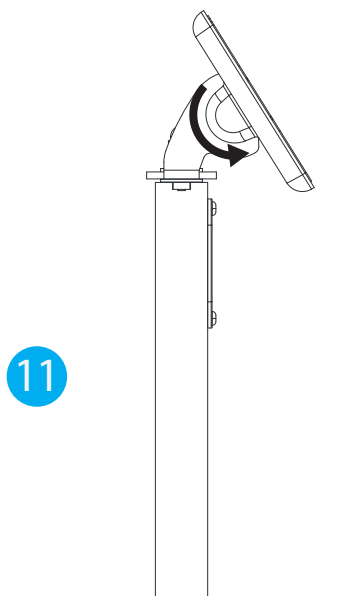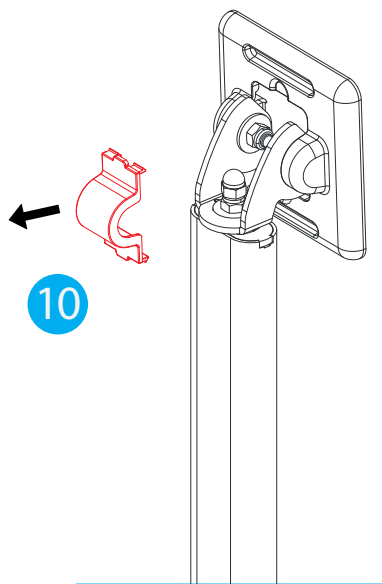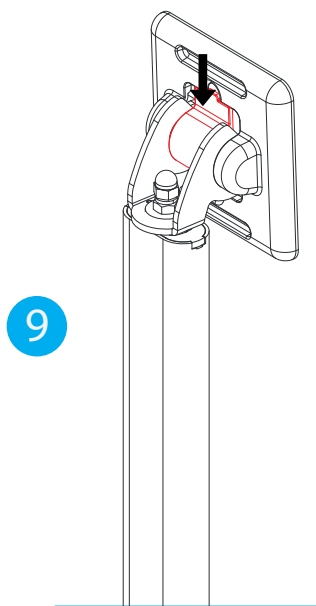

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 032MLTACC - SHELF

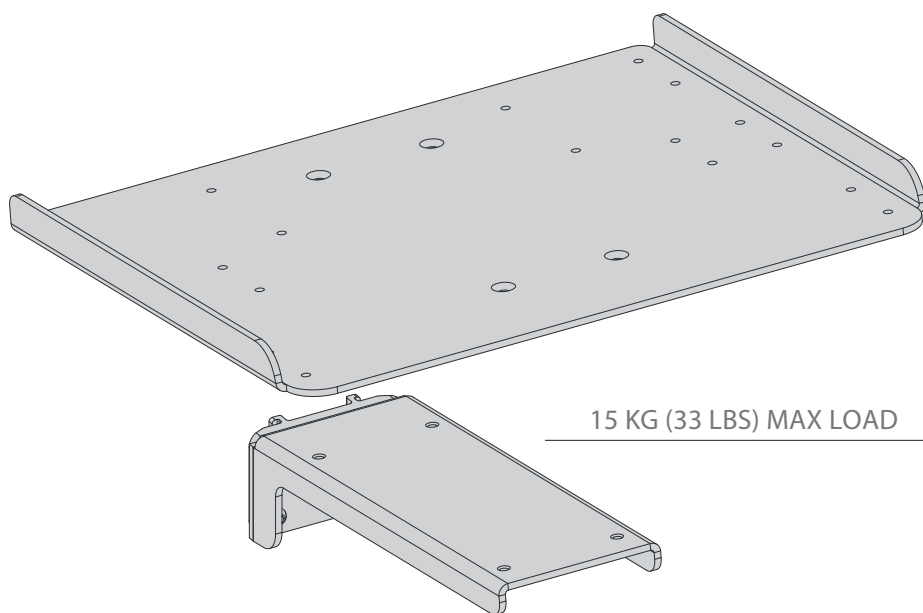


4x
M6X8

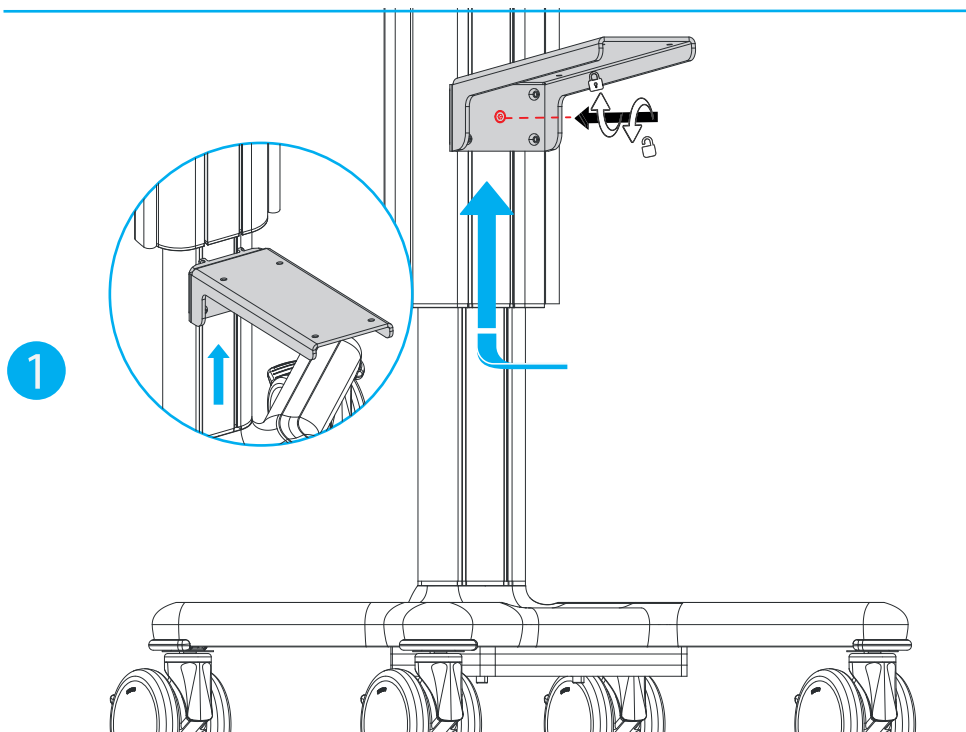


2



4x
M6X8

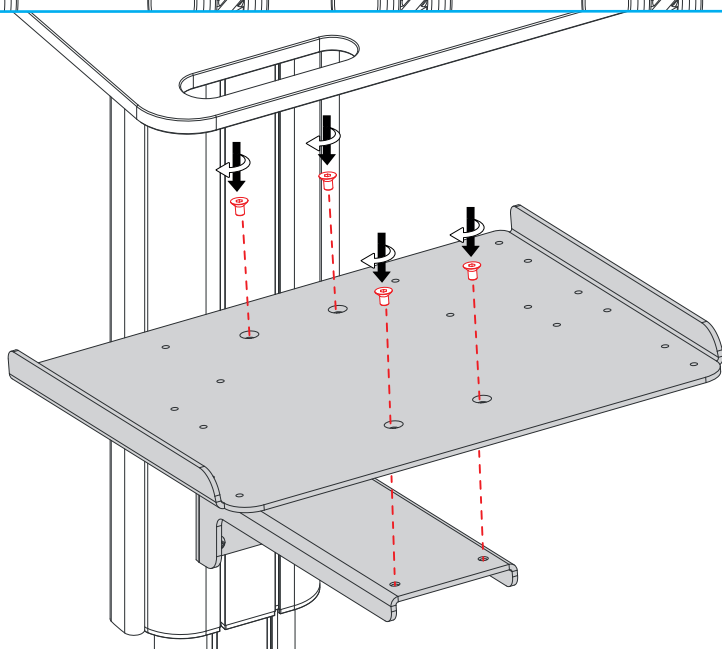

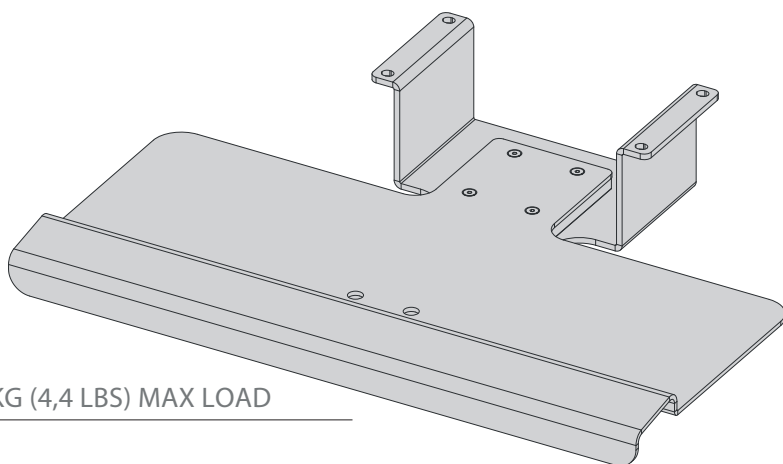

2 KG (4,4 LBS) MAX LOAD




4x


M6X8

1



4x
M6X8

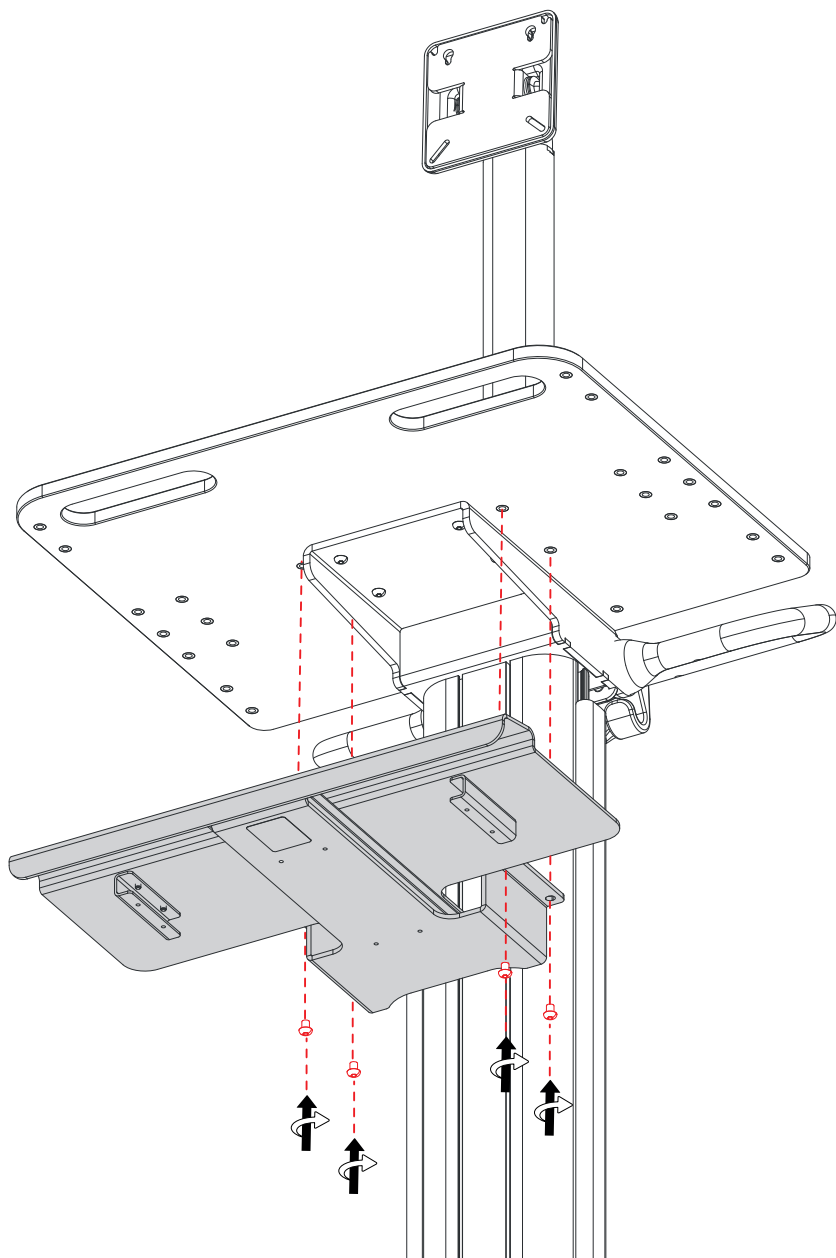

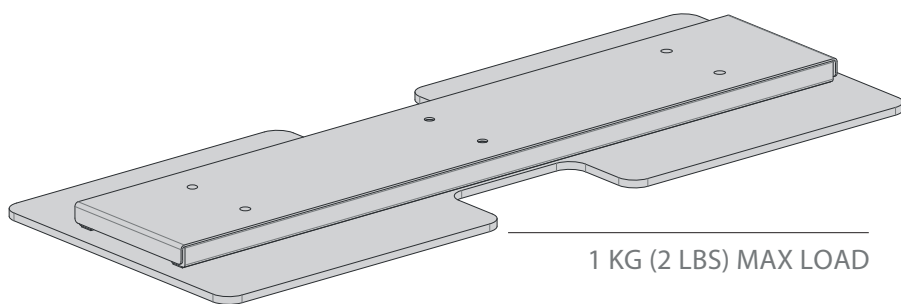


4x
M4X8

1




2x
M4X8

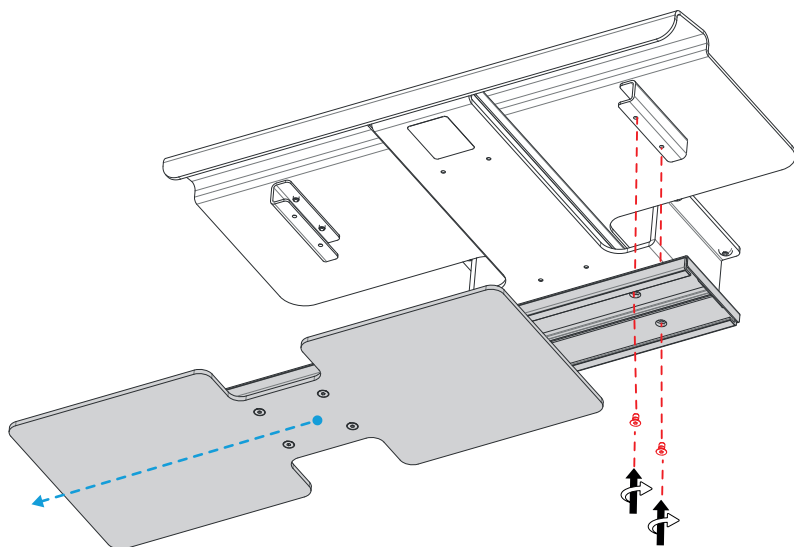

2



2x
M4X8

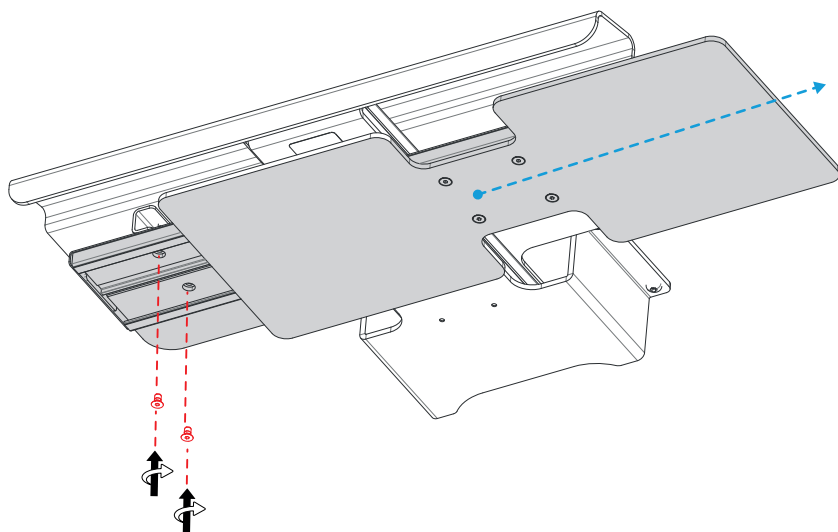

Σημαντικές σημειώσεις



Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Το **καροτσάκι X1 TALL** επιτρέπει τη μεταφορά **μιας συσκευής και των εξαρτημάτων της** μεταξύ των σημείων θεραπείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στο περιβάλλον εγκαταστάσεων περιορισμένης φροντίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι οδηγίες χρήσης του καροτσιού πρέπει να διαβαστούν πριν από τη χρήση.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Το προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις μεθόδους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.
- Η αλλοίωση ή η βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη χρήση του καροτσιού οδηγεί σε άμεση απώλεια της εγγύησης.
- **Η Multix Solutions δεν ευθύνεται για ζημιές σε πρόσωπα ή/και πράγματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.**
- Όταν **μια συσκευή** τοποθετείται στο καροτσάκι, ο **εγκαταστάτης του συστήματος** είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, EN 60601-1 τρέχουσα έκδοση

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ



ασφάλεια του καροτσιού διασφαλίζεται με την προσεκτική τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων:

- Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι ταιριάζει με την απεικόνιση στο εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε ότι δεν έχει σπάσει ή υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη και τα μέρη ασφάλισης, όπως οι τροχοί, τα φρένα και (εάν υπάρχουν) το ελατήριο αερίου, είναι λειτουργικά.
- Και οι τέσσερις τροχοί του καροτσιού πρέπει να είναι κλειδωμένοι, όταν το σύστημα και τα εξαρτήματά του συναρμολογούνται.
- Όταν το καρότσι δεν οδηγείται, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί του καροτσιού είναι ασφαλισμένοι και ότι το σύστημα δεν είναι σταθμευμένο σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Όλοι οι τροχοί του καροτσιού πρέπει να είναι ξεκλειδωμένοι πριν το καρότσι προωθηθεί.
- Για να αποφευχθεί η ανατροπή του καροτσιού, η λαβή πρέπει να κρατιέται εάν το καρότσι οδηγείται πάνω από εμπόδια (π.χ. καλώδια ρεύματος).




ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**
- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΩΘΗΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ**
- Ακολουθήστε τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα “Θέση και κατεύθυνση μεταφοράς”.
- **Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό βάρος της τοποθετημένης διάταξης (μαζί με τα αξεσουάρ) δεν υπερβαίνει το συνολικό βάρος που αναγράφεται στην ετικέτα που τοποθετείται στο καρότσι και στην επόμενη σελίδα.**

Σημαντικές σημειώσεις

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατά τη μεταφορά το καροτσάκι πρέπει να κατεβαίνει μέχρι το τέλος του ελατηρίου αερίου, κρατώντας την πορεία της λαβής στραμμένη προς τα εμπρός, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

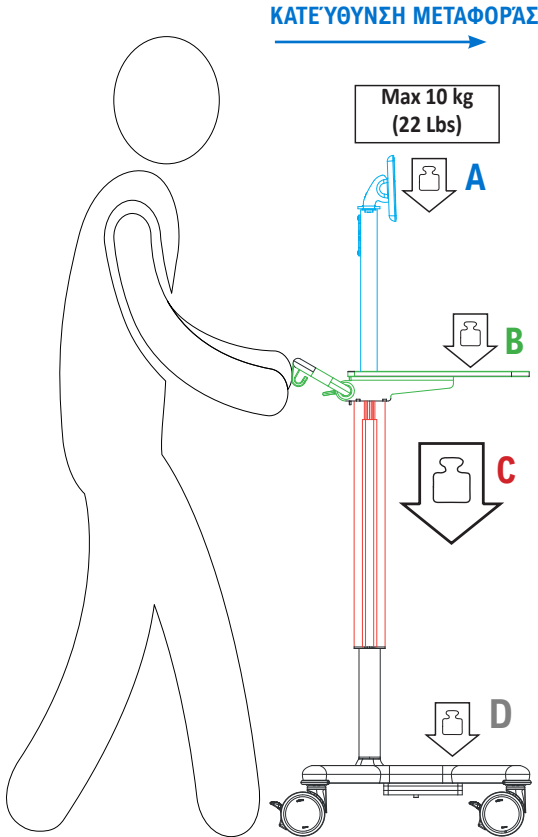

Μέγιστο φορτίο

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(= καροτσάκι + εξαρτήματα + ασφαλές
φορτίο εργασίας)

Συνολικό βάρος = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + βάρος καροτσιού

Βάρος καροτσιού = 29kg (63.9 Lbs)

Μέγιστο φορτίο (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Μέγιστο φορτίο D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - Βάρος καροτσιού (29kg) - (A+B+C)*

*Αν τα φορτία που εφαρμόζονται στο κινητό μέρος (A+B+C) του καροτσιού δεν φτάνουν το αναφερόμενο μέγιστο φορτίο, είναι δυνατή η εφαρμογή υψηλότερων φορτίων από αυτά που αναφέρονται στο σταθερό μέρος του καροτσιού (D), χωρίς να υπερβείτε το μέγιστο συνολικό βάρος.

Παράρτημα



Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης (βλ. ειδική ενότητα “Συναρμολόγηση” και “Συντήρηση”) του παρόντος εγχειριδίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε όλα τα σημεία στερέωσης και τους μηχανισμούς κάθε 6 μήνες.
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι, το προϊόν έχει καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής πριν από τη χρήση του.
Καθαρίζετε τακτικά τις μεταλλικές ή/και πλαστικές επιφάνειες με μη διαβρωτικά απορρυπαντικά ουδέτερου pH και ένα πανί/σφουγγάρι/βουρτσάκι με μαλακές τρίχες.
Μην ρίχνετε απευθείας στις επιφάνειες υγρά, απορρυπαντικά με βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για ανταλλακτικά απευθυνθείτε στον διανομέα της συσκευής (βλ. ενότητα Επικοινωνία).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 10 έτη.
Το καλάθι και η συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

χαρτοκιβώτιο και εσωτερικές ενισχύσεις  ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΟ	εσωτερική συσκευασία  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
---	---

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Τα ακόλουθα σύμβολα αναφέρονται στο καρότσι ή στις οδηγίες χρήσης:



Προσοχή



Οδηγίες λειτουργίας



Medical συσκευή



Περιορισμός υγρασίας



Διατηρήστε το στεγνό



Απαγορεύεται να κάθεσαι στο καρότσι



συνολικό βάρος



Σήμανση CE



Μανεφομεία



κωδικός παρτίδας



Προσανατολισμός



Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου



Απαγορεύεται η ώθηση



Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος



Αριθμός καταλόγου



Αριθμός προϊόντος



Ημερομηνία κατασκευής



Εύθραυστος, χειριστείτε με προσοχή



Όριο θερμοκρασίας



Διανέμεται από



Μέγιστο φορτίο

Διανέμεται από: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Κατασκευάζεται από: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

