

Brugsanvisning



Giv brugsanvisningen til slutbrugeren
efter installationen.




Installation og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret teknisk personale og i henhold til monterings- og vedligeholdelsesvejledningen (se afsnittet “Montering” og “Vedligeholdelse”) i denne vejledning.

Reproduktioner, kopier eller oversættelser, selv i form af uddrag, er forbudt uden forudgående tilladelse fra Multix Solutions S.r.l.

MONTERINGSVEJLEDNING




Trolley X1T er et medicinsk udstyr i klasse I i henhold til klassificeringsreglerne i bilag VIII og bærer »CE«-mærkningen i overensstemmelse med forordningen om medicinsk udstyr (MDR) (EU) 2017/745. Den overholder IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 og opfylder de generelle sikkerheds- og ydeevnekrav i bilag I til ovennævnte forordning om medicinsk udstyr.

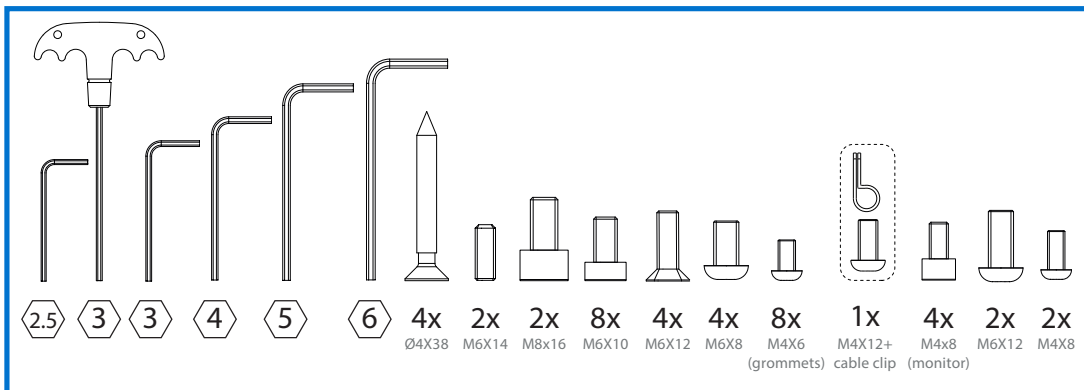

MONTERINGSVEJLEDNING 000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Hvis der findes tilbehør, skal du se den tilhørende instruktion, før du monterer vognen.

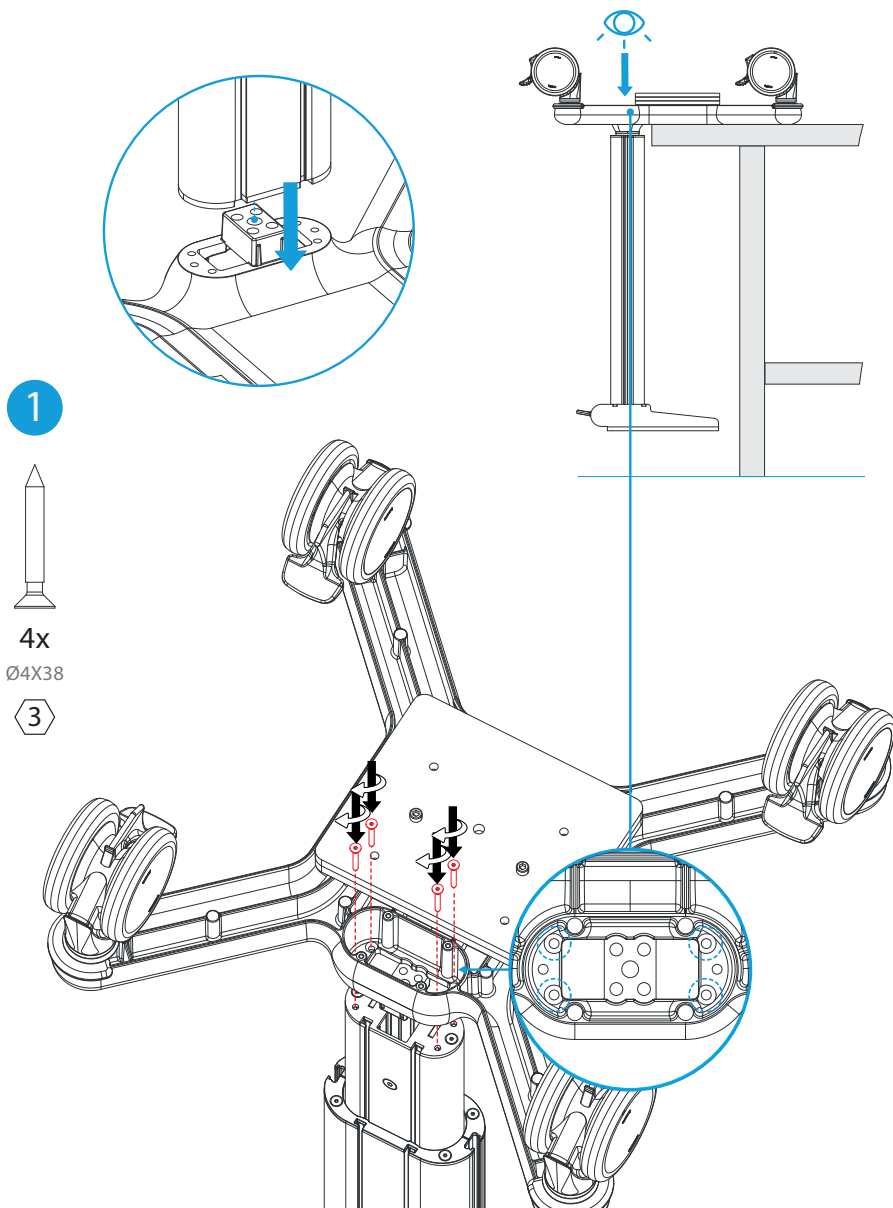

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

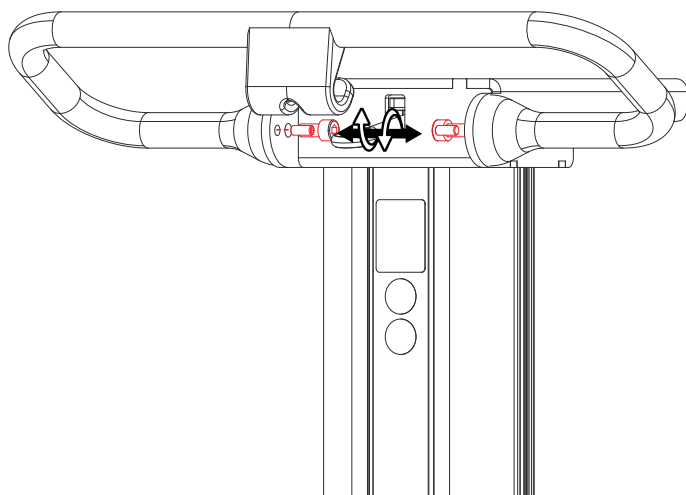


3

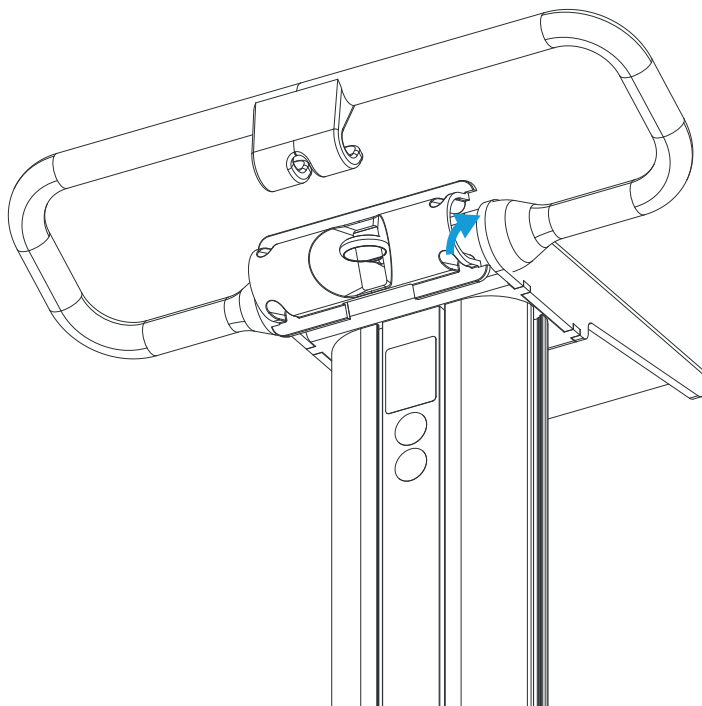

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

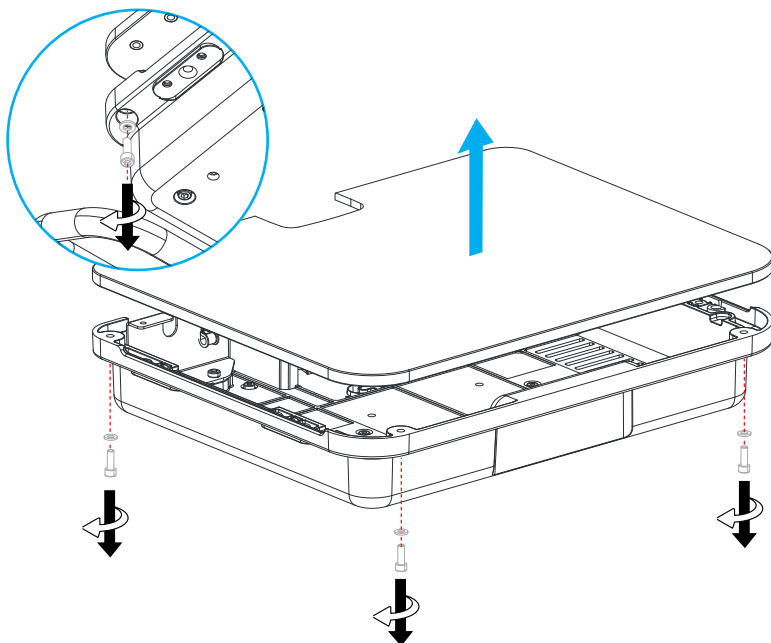

- 6
- 4x
M6x12
- 4

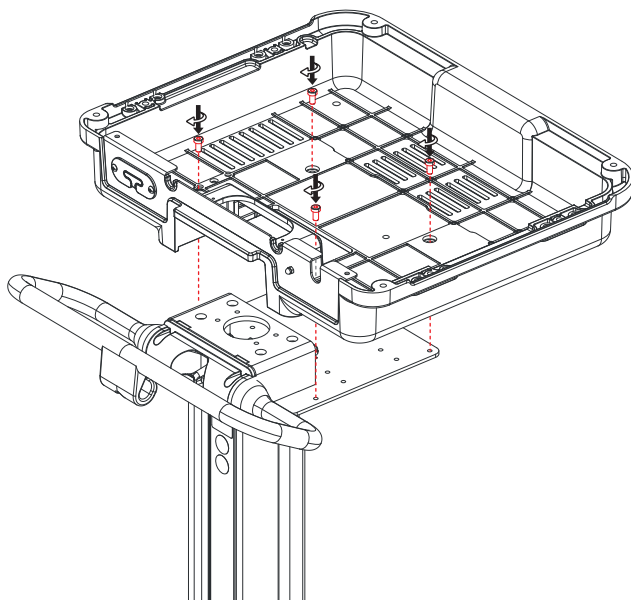


7



4x
M6x12

4

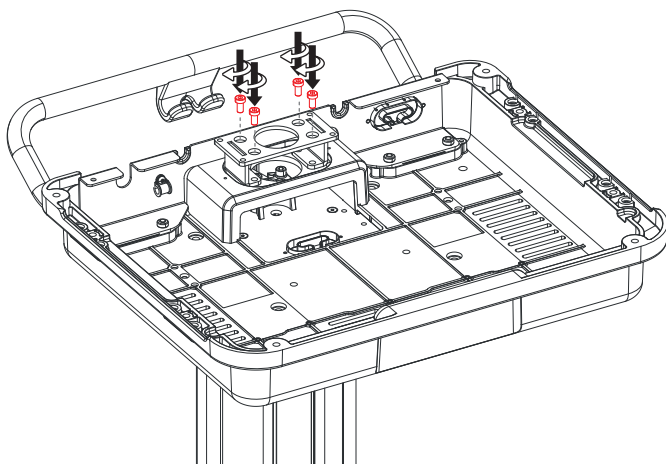


8




4x
M6x10

4

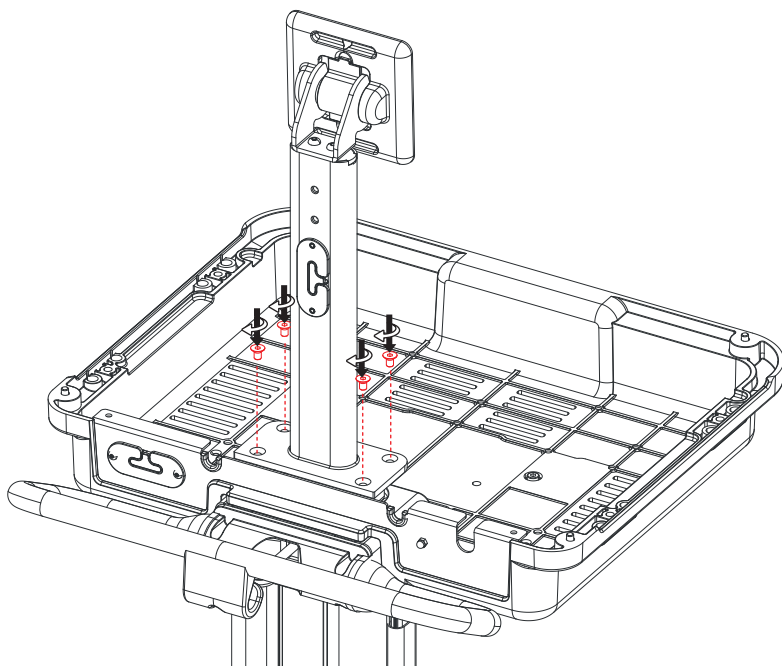


9

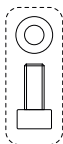

4x
M6x18
metal washer

5

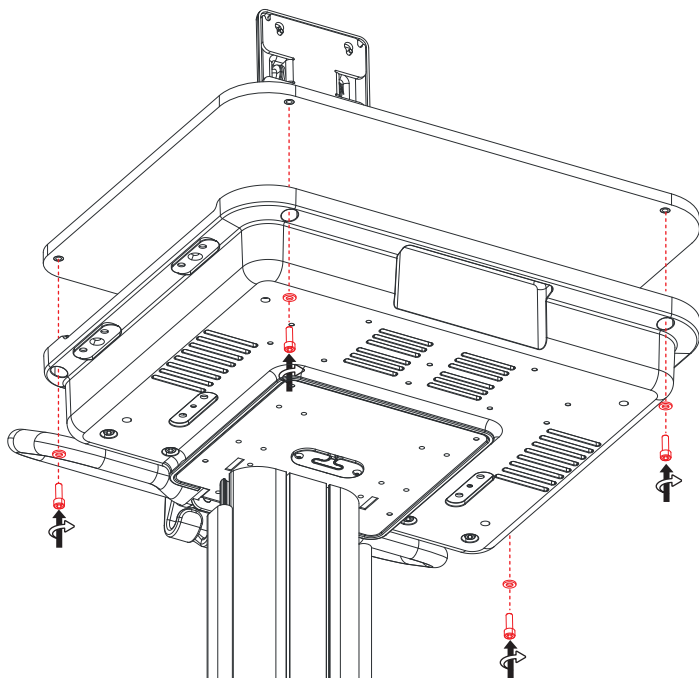



10



4x
M6X8

4

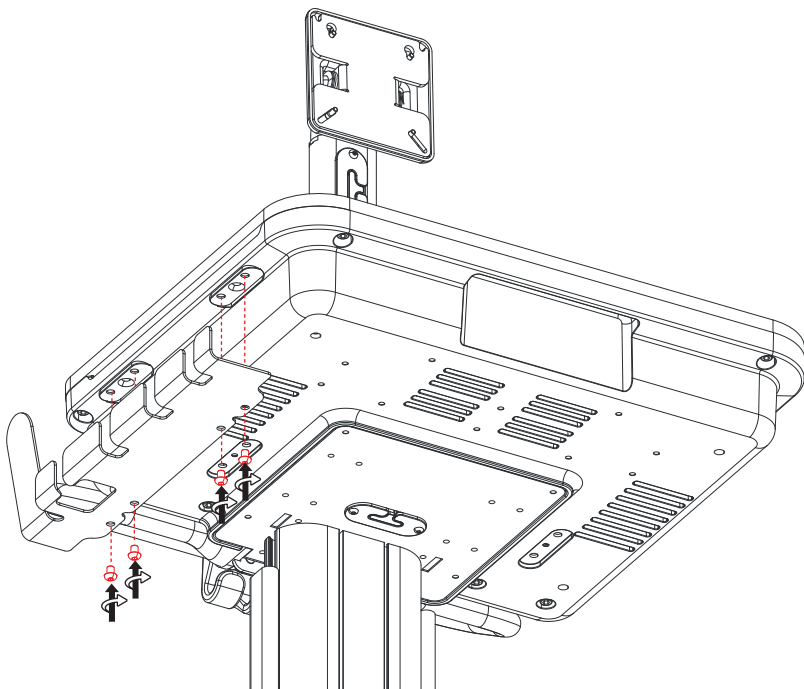

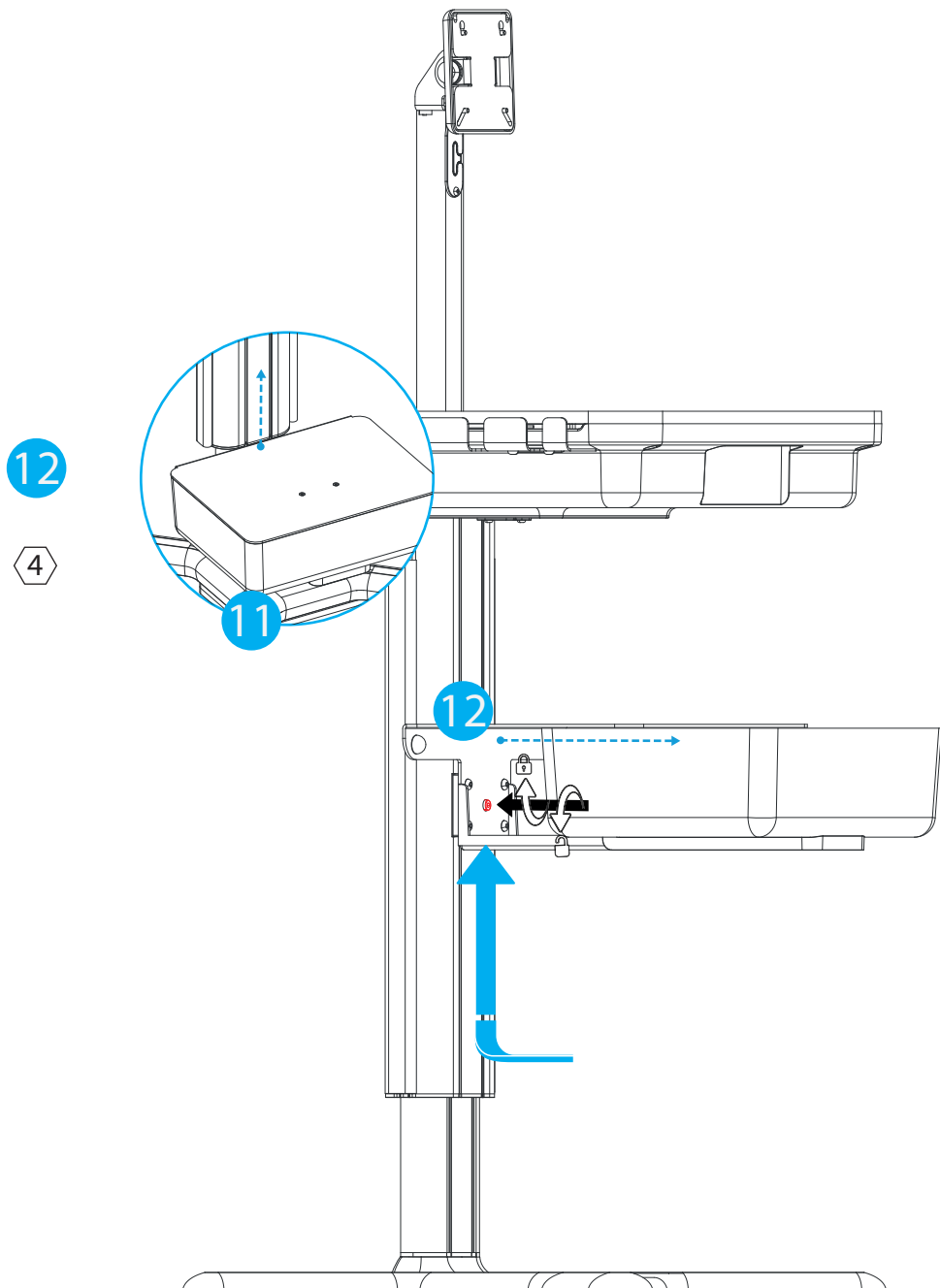


13




4x

M4X6

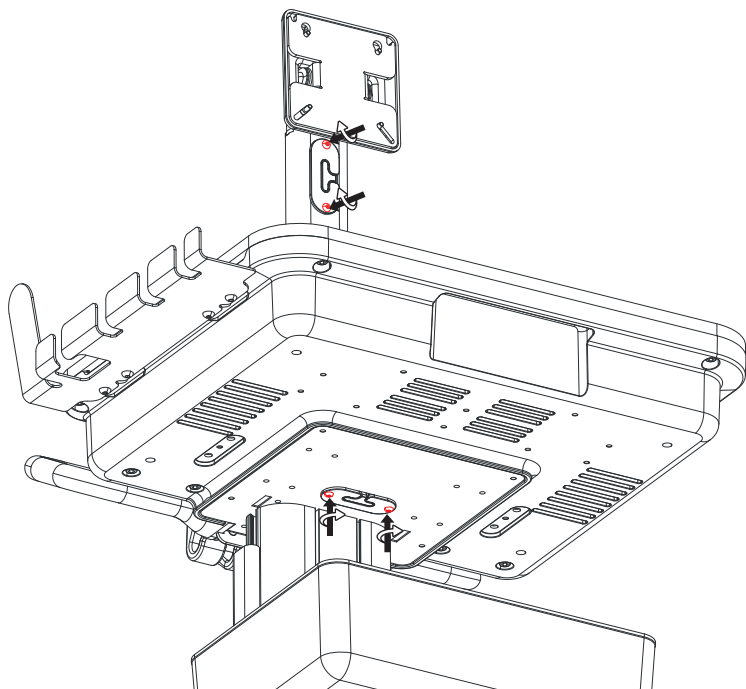


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

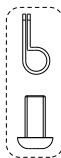

1x

M4X12+
cable clip

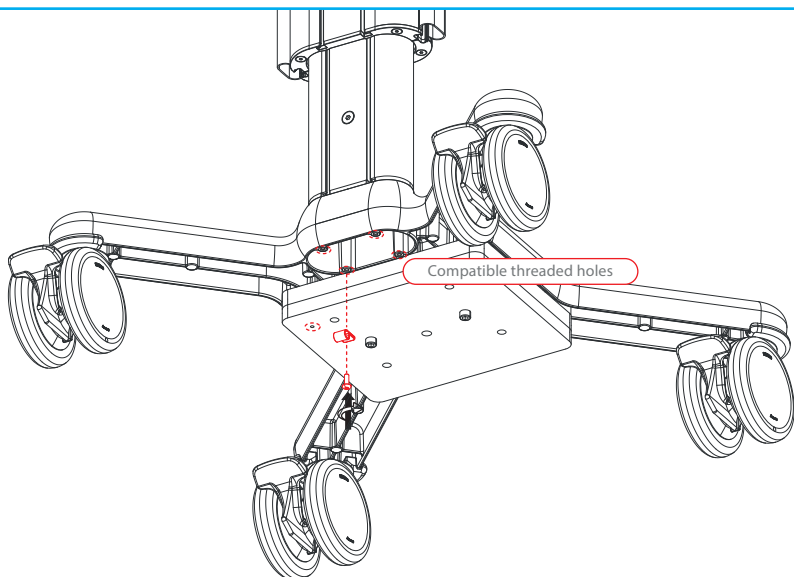

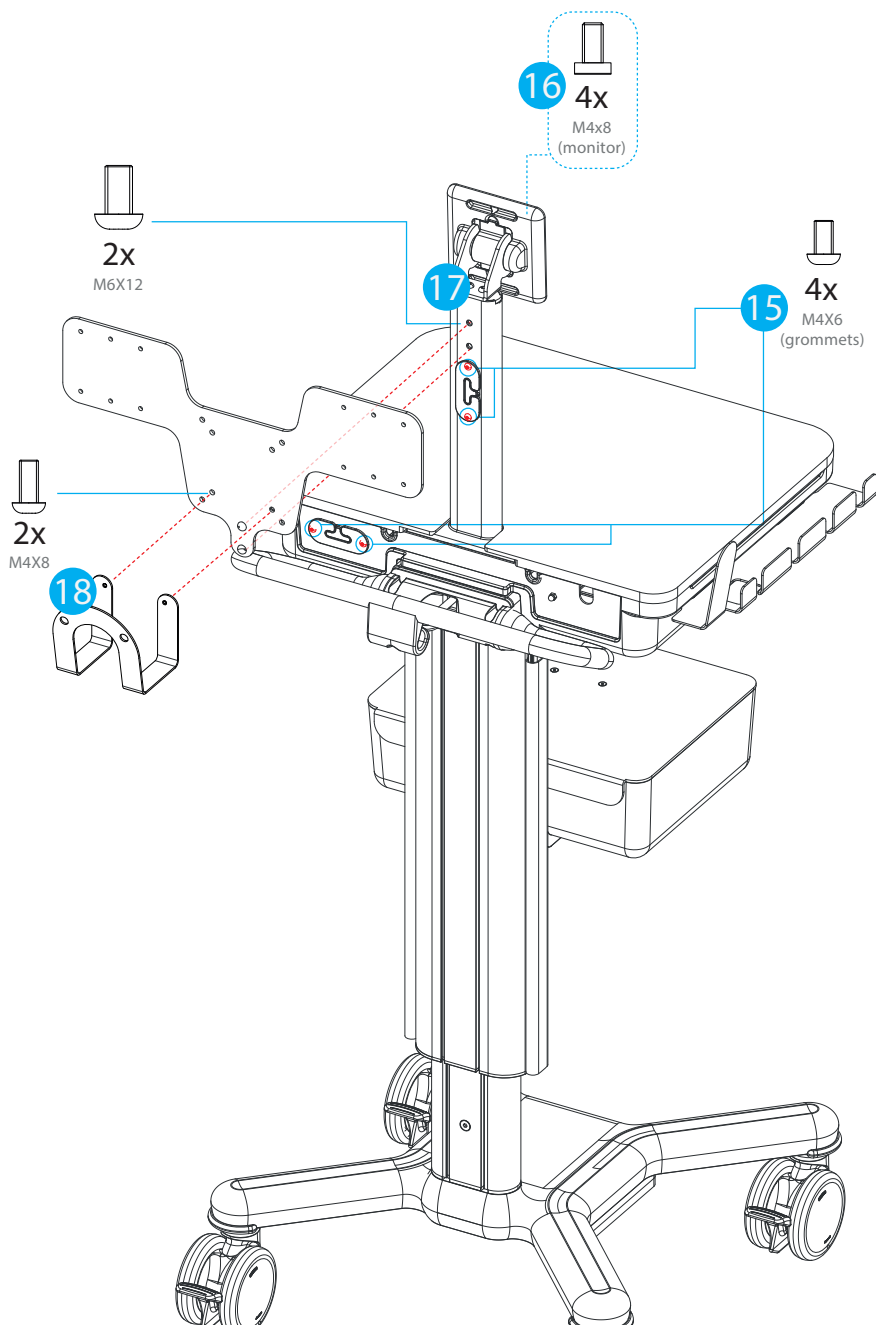

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Vigtige meddelelser



Installation og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret teknisk personale og i henhold til monterings- og vedligeholdelsesvejledningen (se afsnittet “Montering” og “Vedligeholdelse”) i denne vejledning.

TILSIGTET BRUG

Trolley X1T - 000CNSX1T gør det muligt at transportere **et apparat og dets tilbehør** mellem behandlingssteder i hospitalsmiljøet og i et begrænset plejemiljø.

GENERELLE SIKKERHEDSFORPLIGTELSE

- Trolleyens instruktioner skal læses før brug.
- Gem instruktionerne til senere brug.
- Produktet er udelukkende skabt til de metoder, der er nævnt i brugsanvisningen. Enhver anden brug skal betragtes som ukorrekt.
- Manipulation eller skader forårsaget af forkert brug af vognen fører til øjeblikkelig fortabelse af garantien.
- **Multix Solutions er ikke ansvarlig for skader på personer og/eller ting som følge af forkert brug.**
- Når **en enhed** er monteret på vognen, er det **systeminstallatørens** ansvar at sikre, at systemet overholder de gældende standarder, EN 60601-1 i den aktuelle version.



GENEREL ADVARSEL OG FORSIGTIGHED

Vognens sikkerhed garanteres ved omhyggeligt at følge advarslerne nedenfor:

- Sørg for, at vognen svarer til illustrationen i manualen.
- Kontrollér, at den ikke er knækket eller beskadiget under transporten.
- Kontrollér, at de bevægelige og låsbare dele som hjul, bremsen og (hvis de findes) gasfjederen fungerer.
- Alle fire hjul på vognen skal være låst, når systemet og dets tilbehør er samlet.
- Når vognen ikke kører, skal du sørge for, at vognens hjul er låst, og at systemet ikke parkeres på ujævne overflader.
- Alle vognens hjul skal være låst op, før vognen skubbes.
- For at undgå, at vognen vælter, skal man holde i håndtaget, hvis vognen køres over forhindringer (f.eks. el-ledninger).
- Undgå at bruge for stor kraft, når du skubber vognen.
- Det er ikke tilladt at ændre på denne enhed.




INDLÆSNINGSINSTRUKTIONER

- **DET ER FORBUDT AT SIDDE PÅ VOGNEN**
- **SKUBNING FORBUDT, NÅR HJULENE ER BLOKERET**
- Følg de maksimale belastninger som angivet i afsnittet “Transportposition og -retning”.
- **Sørg for, at den samlede vægt af den monterede konfiguration (med tilbehør) ikke overstiger den samlede vægt, der er angivet på etiketten på vognen og på næste side.**

Important notices

TRANSPORTPOSITION OG -RETNING

Under transport skal vognen sænkes ned til enden af gasfjederen, mens håndtaget vender fremad, som vist på billedet nedenfor:

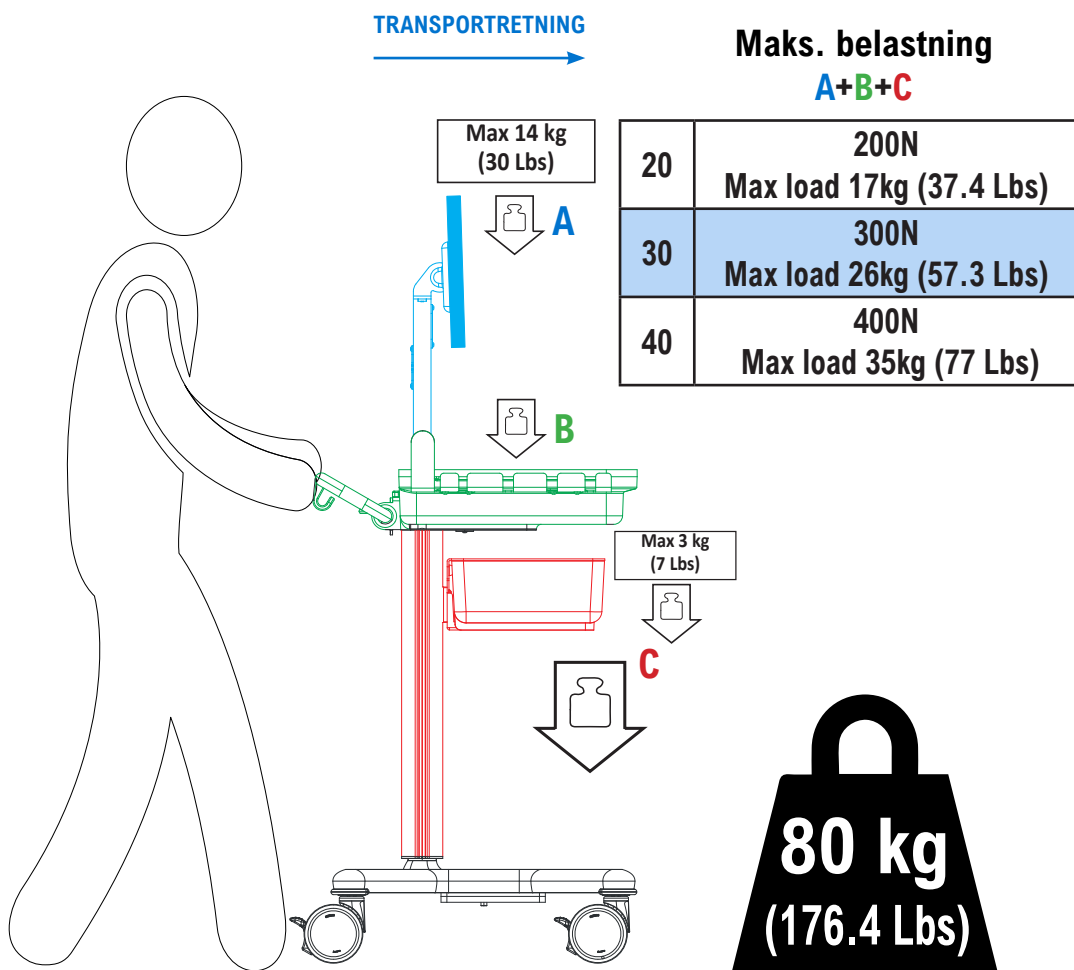

Appendiks



Installation og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret teknisk personale og i henhold til monterings- og vedligeholdelsesvejledningen (se afsnittet “Montering” og “Vedligeholdelse”) i denne vejledning.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrollér alle fastgørelsespunkter og mekanismer hver 6 måned.

Produktet er kun egnet til brug i indendørs miljøer.

RENGØRING

Rengør regelmæssigt metal- og/eller plastoverfladerne med ikke-ætsende rengøringsmidler med neutral pH-værdi og en klud/svamp/børste med bløde børster.

Hæld ikke flydende, klorbaserede eller ammoniakbaserede rengøringsmidler, fedtede og olierede stoffer direkte på overfladerne.

RESERVEDELE

For reservedele henvises til enhedens distributør (se afsnittet Kontakt).

LEVETID OG BORTSKAFFELSE

Levetiden for produktet er 10 år.

Vognen og emballagen skal bortskaffes i henhold til lokale eller nationale bestemmelser.

Kartonæske og indvendige forstærkninger	indvendig emballage
	
KARTON	POLYETHYLEN MED LAV DENSITET

ORDLISTE OVER SYMBOLER

Følgende symboler er angivet på vognen eller i vejledningen:



Forsigtighed



Betjeningsvejledning



Medical enhed



Fugtighedsbe-
grænsning



Hold dig tør



Det er forbudt at sidde på
vognen



Total vægt



CE-mærkning



Producent



Batch kode



Orientering



Hold dig væk fra
sollys



Skubber forbudt



Katalognummer



Produktnummer



Fremstillingsdato



Skrøbelig, håndter med
omhu



Temperaturgrænse



Distribueret af

Distribueret af: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Produceret af: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com